

VITA SIMULATE Preparation Material

Рабочая инструкция



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 07.18

VITA – perfect match.

VITA

VITA SIMULATE Preparation Material - фотополимерный композит для изготовления искусственных культей для имитации цвета отпрепарированного зуба. Материал используется в качестве вспомогательного средства особенно при изготовлении транслюцентных цельнокерамических реставраций, у которых окончательный цветовой эффект сильно зависит от цвета культи. Материал позволяет зубному технику, легко и надежно воспроизвести цвет зуба, так как цвет реставрации можно проконтролировать заранее и откорректировать в случае необходимости.



Порядок работы

При помощи цветового шаблона VITA SIMULATE Preparation Material Guide стоматолог определяет цвет отпрепарированной культи. Цветовая планка включает в себя 6 образцов в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER. "S" обозначает VITA SIMULATE Preparation Material.

0M1 S,* 1M1 S, 2M3 S, 3M2 S, 4M3 S, 5M3 S

* для отбеленных культей.

После того как стоматолог определился с выбором цвета будущей реставрации, зубной техник изготавливает из VITA SIMULATE Preparation Material соответствующего цвета искусственную контрольную культю следующим образом:



На внутреннюю поверхность керамической коронки или винира равномерным тонким слоем (избегать образования "озер") при помощи кисточки наносится жидкость VITA SIMULATE Insulation Liquid (изолирующее средство для искусственной культи).



Внутреннюю область керамической реставрации наполнить культевым материалом VITA SIMULATE, при этом необходимо придавливать материал моделировочным инструментом, чтобы избежать образования пустот.



Культевой держатель вдавить в неотвеженный материал. При этом конец держателя должен располагаться в центре реставрации, не касаясь ее стенок.



Заполнить оставшиеся пустоты и при помощи материала зафиксировать культевой держатель.
Закрывать колпачок сразу после изъятия дозы материала!



В завершение убрать излишки культевого материала с области краев моделировочным инструментом.



Культевой материал отверждается при помощи прибора или лампы для полимеризации (см. таблицу).

Фотополимеризационный прибор должен быть оснащен источником света, длина волны которого находится в диапазоне от 350-500 нм, а максимальная интенсивность должна быть 470 нм. Эти значения относятся исключительно к безупречно работающим приборам. Необходимо соблюдать все рекомендации производителей приборов, в особенности указания по обслуживанию!

Полимеризация

Производитель	Прибор	Продолжительность
Heraeus Kulzer	Heraflash	90 сек.
Heraeus Kulzer	UniXS	90 сек.
3M ESPE	Visio Alfa	2 интервала
Hager & Werken	Speed Labolight	3 мин.
Shofu	Solidilite V	3 мин.



Готовую полимеризованную культевую вкладку VITA SIMULATE вынуть из реставрации и почистить в ультразвуковой ванне. Затем проверить с помощью культы VITA SIMULATE, соответствует ли цвет готовой цельнокерамической реставрации желательному цвету. В случае необходимости цветовые корректировки можно выполнить при помощи красителей VITA AKZENT Plus или при помощи послойной облицовки массами VITA VM 9 (в зависимости от КТР).





VITA SIMULATE Preparation Material KIT

Количество	Содержание	Наименование	Цвет
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	0M1 S
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	1M1 S
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	2M3 S
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	3M2 S
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	4M3 S
1	4 г	Культевой материал VITA SIMULATE	5M3 S
1	16 мл	Жидкость VITA SIMULATE Insulation Liquid	
150		VITA SIMULATE культевой держатель	
1		VITA SIMULATE Preparation Material Guide (цветовой шаблон)	



Культевой материал VITA SIMULATE

Фотополимерный композит в 6 цветах для изготовления искусственных культей для имитации цвета отпрепарированного зуба.

Шприц, 4 г.



VITA SIMULATE Insulation Liquid

Изоляционная жидкость на базе глицерина для изоляции культевого материала от внутренней поверхности коронки.

Флакон 16 мл.



VITA SIMULATE культевой держатель

Прозрачные пластмассовые палочки с ретенционными бороздками для нанесения VITA SIMULATE Preparation Materials.

В упаковке 150 шт.



VITA SIMULATE Preparation Material Guide


Цветовой шаблон с 6 специальными, вогнутыми цветовыми пластинками для определения цвета отпрепарированной культы.

Следующие изделия должны иметь соответствующую маркировку:		
VITA SIMULATE Preparation Material	<p>Содержит триэтиленгликольдиметакрилат (CAS: 109-16-0) 2 диметиламиноэтилметакрилат (CAS: 2867-47-2).</p> <p>Вызывает тяжелые раздражения кожи и глаз. Может вызывать аллергические реакции на коже. Во время работы иметь на себе защитные очки/маску, защитные перчатки и защитную одежду. После использования тщательно промыть водой. При попадании на кожу сразу же тщательно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: В течение нескольких минут осторожно промыть водой. По возможности снять контактные линзы. Продолжить промывание. Если раздражение глаз не проходит: обратиться за медицинской помощью.</p>	
Защитная одежда	<p>Во время работы иметь на себе защитные очки/маску, защитные перчатки и защитную одежду.</p>	

Соответствующие спецификации безопасности можно скачать с сайта www.vita-zahnfabrik.com/sds.



С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.

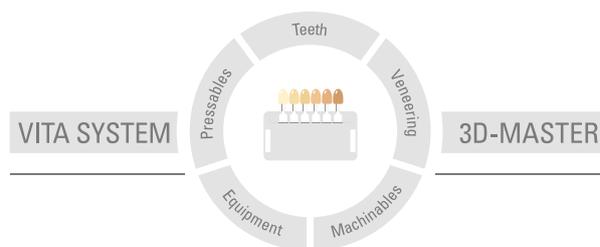

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании. Кроме того, наша ответственность за достоверность этих данных не зависит от правооснования, насколько это допускает законодательство, и в любом случае ограничивается указанной в счете-фактуре стоимостью поставленного товара без НДС. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом пределах за полученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные действия и т. п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность. Модульбок VITA не является неотъемлемой частью данной продукции.
Дата выхода данной брошюры: 07.18

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik