

VITA-PROTEESIRATKAISUT – Proteesihampaat ja digitaaliset proteesit

Tiivistelmä laboratorioille



Päiväys 05.18

VITA – perfect match.

VITA

VITA-proteesiratkaisut – Parhaita hammasproteeseja varten: luonnollinen, luotettava, monipuolinen

Elävä väri- ja valoleikki takaa luonnollisen lopputuloksen.



VITAPAN EXCELL® (Etuhampaat)
VITAPAN PLUS® (Etuhampaat)
VITAPAN® LINGOFORM (Takahampaat)
VITA PHYSIODENS® (Etuhampaat)
VITA PHYSIODENS® (Takahampaat)

Paras väri- ja muotovalikoima kaikkiin tapauksiin



VITAPAN® (Etuhampaat)
VITAPAN® CUSPIFORM (Takahampaat)
VITAPAN SYNOFORM® (Takahampaat)



Hyvät, parhaan kustannustehokkuuden tarjoavat vakioproteesit



VITA MFT® (Etuhampaat)
VITA MFT® (Takahampaat)

Tehokas CAD/CAM-proteesinvalmistus parantaa tuottavuutta



VITA CAD/CAM TEETH
VITA CAD/CAM MATERIALS
VITA CAD/CAM COMPONENTS

Etseekö parasta ratkaisua koko-, osa- ja implanttiproteeseja varten?

VITA-proteesiratkaisuja käyttäessäsi voit luottaa luonnollisuuteen, erittäin hyvään kestävyys- ja suureen muotovalikoimaan. VITA on jo vuodesta 1924 yhdistänyt saksalaisen insinööriosaston käytännön kokemukseen ja teknologiaan ja kehittänyt luotettavia ja toimivia proteesiratkaisuja. VITAN asiantuntijat valmistavat sinulle ensiluokkaisia proteesihampaita korkeimpien laatustandardien mukaan sekä innovatiivisilla prosesseilla että yksilöllisenä käsityönä. VITA tarjoaa sekä perinteiseen että digitaaliseen proteesitekniikkaan räätälöityjä ratkaisuja ja komponentteja. Meiltä löydät jokaiseen tapaukseen sopivan - esteettisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti – proteesihampaan.

Suosittelut etu-/takahammasyhdistelmät





Parhaat hammasproteesit

VITA PREMIUM -proteesivalikoima tarjoaa laadukkaat, luonnollisen muotoiset ja sävyiset MRP-komposiittihampaat parhaiden ja kauneimpien koko-, osa- ja implanttiproteesien valmistukseen.



Haluatko ratkaista erilaiset tapaukset ennakoitavasti ja luotettavasti?

VITA UNIVERSAL -proteesivalikoima tarjoaa käyttöösi vuosikymmenien ajan arvostetut MRP-komposiittihampaat, joilla saat luotettavasti hyviä tuloksia mitä erilaisimmissa tapauksissa.




Hyviä vakioproteeseja kohtuuhintaan?

VITA BASIC -proteesivalikoiman HC-polymeerihampailla toteutat edullisesti hyviä vakiorestaatioita kohtuuhintaan.




Paranna tuotavuuttasi digitaalitekniikalla?

VITA DIGITAL -proteesivalikoima tarjoaa räätälöidyt materiaalit ja CAD/CAM-ratkaisut kokoproteesien innovatiiviseen tehokkaaseen ja tarkkaan valmistukseen.

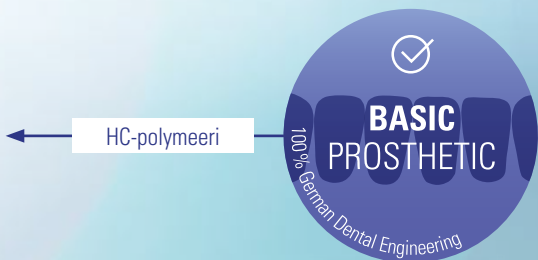

VITA-PROTEESIRATKAISUT – Käyttöaiheet

	VITAPAN EXCELL Etuhampaat	VITAPAN PLUS Etuhampaat	VITA PHYSIODENS Etuhampaat
	VITAPAN LINGOFORM Takahampaat		VITA PHYSIODENS Takahampaat
Kokoproteesi	●	●	
Osaproteesi	●	●	●
Yhdistelmäproteesi			●
Implanttiproteesi	●	●	
Gerontoproteesi			
	VITAPAN Etuhampaat		
	VITAPAN CUSPIFORM Takahampaat	VITAPAN SYNOFORM Takahampaat	
Kokoproteesi	●		
Osaproteesi	●		
Yhdistelmäproteesi			
Implanttiproteesi			
Gerontoproteesi		●	
	VITA MFT Etuhampaat		
	VITA MFT Takahampaat		
Kokoproteesi	●		
Osaproteesi	●		
Yhdistelmäproteesi			
Implanttiproteesi			
Gerontoproteesi			
	VITA DIGITAL PROSTHETIC		
	●		
Kokoproteesi	●		
Osaproteesi			
Yhdistelmäproteesi			
Implanttiproteesi			
Gerontoproteesi			

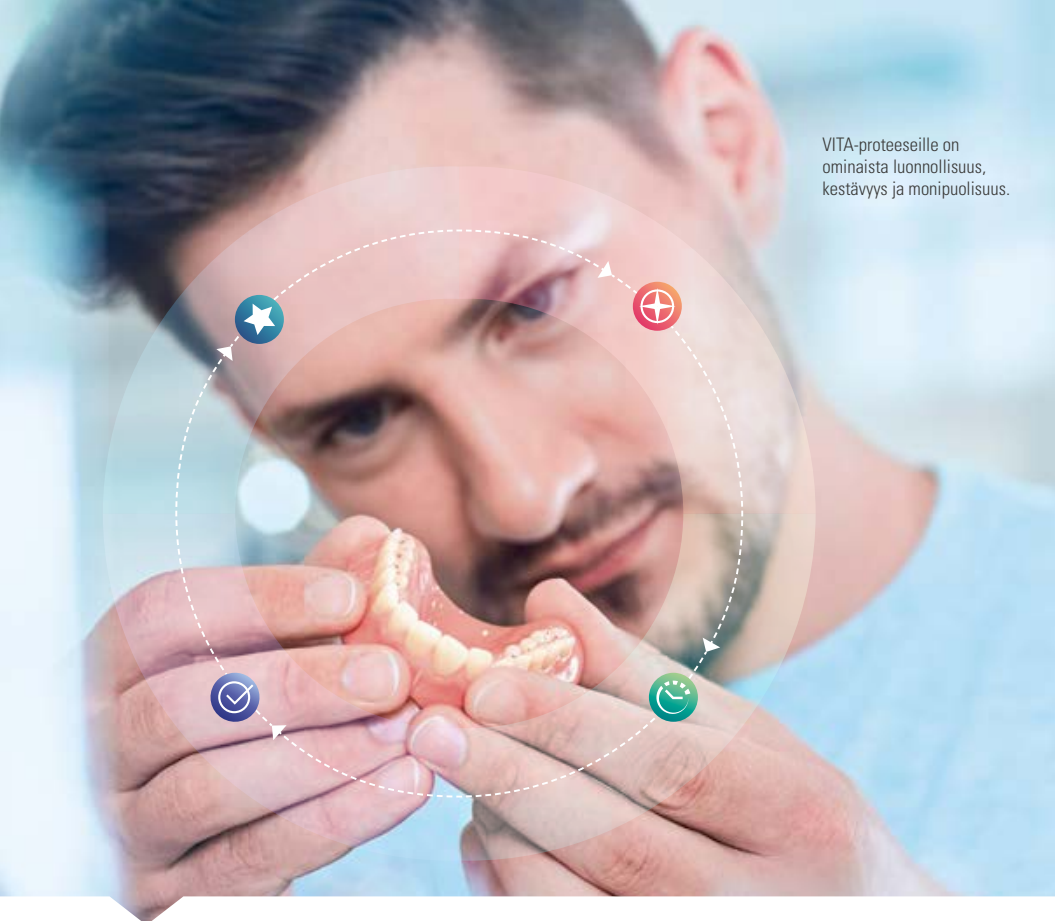

VITA-proteeseille on ominaista luonnollisuus, kestävyys ja monipuolisuus.

100 % German Dental Engineering by VITA – täydellinen muoto, väri ja toimivuus!



Saksalaista insinööriosaaamista VITALta

VITA:n insinöörit ja hammasteknikot kehittävät yhdessä innovatiivisia ja käytännöllisiä proteesiratkaisuja, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset.



Täyttää korkeimmat laatuvaatimukset

VITA-proteesihampaat valmistetaan nykyaikaisilla prosesseilla ja yksilöllisenä käsityönä.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT



LUONNOLLINEN MUOTO JA VÄRITYS TAKAA PARHAAN LOPPUTULOKSEN.

Parhaiden hammasproteesien raaka-aineet

VITA PREMIUM PROTHETIK MRP-komposiittihampaiden luonnolliset muodot ja väritys mahdollistavat esteettisten koko-, osa- ja implanttiproteesien valmistuksen.

> HAMMASLINJOJEN YLEISKATSAUS

Suosittelut etu-/takahammasyhdistelmät



Luonnonmukainen muoto, värytys ja kuultavuus.



Nuorekkaan luonnonmukainen ja kuultava proteesi.



Tarkkoja ja monitasoisia proteeseja varten.



Kaikkiin proteesikonsepteihin monitoimisen purupintamuotoilun ansiosta.



Täydellinen toimivuus luonnollisen morfologian ansiosta.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT



Eloisan luonnolliset
muodot

Loistava väri/
valoleikki

Eloisa muoto, väri- ja valoleikki.



> TIETOJA JA OMINAISUUKSIA

- Mikä?**
- MRP-komposiittimateriaalista valmistetut luonnolliset ja kuultavat premium-etuhampaat
- Edut?**
- **kauniiden proteesien valmistus on helppoa luonnollisten,** "kultaiset mittasuhteet" omaavien hampaiden avulla
 - **erinomainen väri- ja valoleikki**
erinomaisen valodynamiikan ja harmonisen väriskaalan ansiosta
 - **helppo sovittaa muuhun hampaistoon**
tarkasti väriasteikon mukaisen värityksen ansiosta
 - **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
 - **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta
- Miksi?**
- paras ratkaisu kauniita koko-, osa- ja implanttiproteeseja varten

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muotoilu

- luonnollinen hammasgeometria takaa loistavan lopputuloksen
- erottuvat purentaominaisuudet antavat elinvoimaisen vaikutelman
- leveä palatinaalinen kisko ihanteellisia hammasvälejä/ikeniä varten

Erityisominaisuudet

- korostettu emaliosuus / kuultavat reunat varmistavat hyvän valodynamiikan
- monisävyinen pinta varmistaa luonnollisen valoleikin
- integroitu mamelonrakenne ja valkoinen purualue luonnollisempaa väritystä varten
- 3D-kerrosrakenne tarjoaa luonnollisen värileikin

Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- koko- ja osaproteesit
- implanttikantoiset proteesit

Proteesi/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okkluusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri Gerber, APF/TiF, ABC

Värit?

• 11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2

• 15 x VITA classical A1–D4® -värit

A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 17 x Yläetuhammasmuotoa (jaettuna neljään muotoryhmään)
- 5 x Alaetuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Yläetuhampaat						
 lapiomainen	O41  9,1 7,4	O43  9,1 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O49  10,9 9,0	O51  12,3 9,3
	T42  9,5 7,7	T44  9,9 8,1	T46  10,4 8,2	T47  10,9 8,5	T48  11,3 8,8	T50  11,6 9,2
	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,7 8,9			
	S46  10,3 8,5					
Alaetuhampaat						
	L33  8,6 5,0	L35  9,0 5,2	L37  9,4 5,2	L39  9,8 5,9	L41  10,2 6,2	

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Koko-/osa- ja implanttiproteeseihin

• VITAPAN EXCELL etuhampaat ja VITAPAN LINGOFORM takahampaat

VITAPAN EXCELL Etuhampaat		VITAPAN LINGOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

VITAPAN EXCELL Etuhampaat		VITAPAN LINGOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8

S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN EXCELL muotokartta

Kaikki muodot sisältävä metallikotelo hampaiden valintaan:

- VITAPAN EXCELL etuhampaat



VITAPAN EXCELL hammasvarasto


- X-Small*: 67 sarjaa/402 etuhammasta
- Small*: 134 sarjaa/804 etuhammasta
- Medium*: 268 sarjaa/1 608 etuhammasta
- Large*: 400 sarjaa/2 400 etuhammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® väreissä.**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMONENTIT

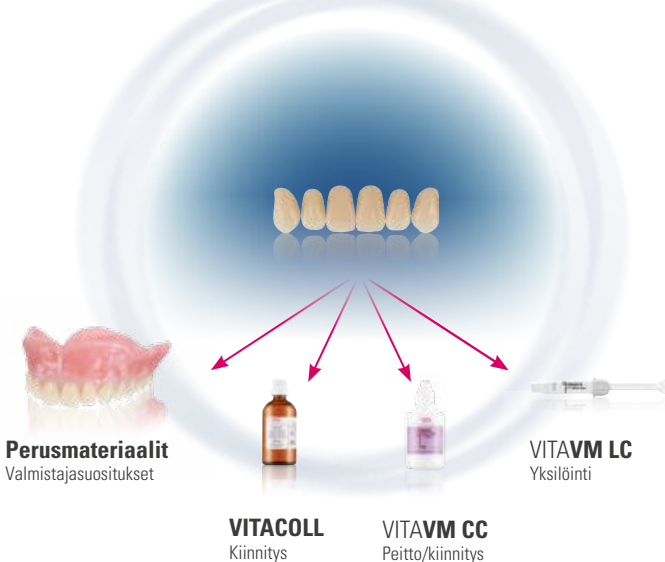



Nuorekkaan eloiset
muodot

Poikkeuksellinen
kuultavuus

Nuorekkaan elinvoimaiset ja kuultavat proteesit.



> TIETOJA JA OMINAISUUDET

Mikä?

- elinvoimaiset Premium-etuhampaat kuultavasta MRP-komposiitista

Edut?

- **elävä valoleikki**
ainutlaatuinen läpikuultavuus suuren emaliosuuden ansiosta
- **luo helposti nuorekas ulkonäkö**
elinvoimaisilla proteesihampailla
- **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
- **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta

Miksi?

- paras ratkaisu kauniita koko-, osa- ja implanttiproteeseja varten

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- nuorekas hammasgeometria "nuoria proteeseja" varten
- nuorekas purenta takaa suuren elinvoimaisuuden
- leveä palatinaalinen kisko ihanteellisia hammasvälejä/ikenä varten

Erityistä

- suuri emaliosuus / kuultavat reunat varmistavat hyvän valodynamiikan
- monisävyinen pinta varmistaa eloisan valoleikin
- integroitu mamelonrakenne ja valkoinen purualue luonnollisempaa väretystä varten
- 3D-kerrosrakenne takaa luonnollisen väretyksen

Käyttökohteet?

Paras ratkaisu:

- nuorekkaisiin koko- ja osaproteeseihin
- implanttikantaisiin proteeseihin

Proteesikonseptit?

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okkluusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri. Gerber, APF/TiF, ABC

Värit?

- **28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit**
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- **15 x VITA classical A1–D4® -värit**
A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat?

- 18 x yläetuhammasmuotoa (jaettuna neljään muotoryhmään)
- 6 x alaeetuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Yläetuhampaat							
 lapiomainen	O41  9,1 7,4	O43  9,1 7,9	O45  9,7 8,4	O47  10,3 8,6	O47L*  10,3 8,6	O49  10,9 9,0	O51  12,3 9,3
	T42  9,5 7,7	T44  9,9 8,1	T46  10,4 8,2	T47  10,9 8,5	T48  11,3 8,8	T50  11,6 9,2	T54  12,7 9,8
	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,7 8,9				
	S46  10,3 8,5						
 kolmio							
 suorakaide							
 nelikulmainen							
Alaetuhampaat							
	L33  8,6 5,0	L35  9,0 5,2	L37  9,4 5,2	L37L*  9,4 5,2	L39  9,8 5,9	L41  10,2 6,2	

*) O47L tai L37L = Pitempi hammaskaula

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Koko-/osa ja implanttiproteesit:

- VITAPAN PLUS etuhampaat ja VITAPAN LINGOFORM takahampaat

VITAPAN PLUS Etuhampaat		VITAPAN LINGOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
047L* 47,3	L37L* 37,3	22L 31,6	22L 32,1
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

VITAPAN PLUS Etuhampaat		VITAPAN LINGOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4

R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8

S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN PLUS -muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITAPAN PLUS -etuhampaat
- VITAPAN PLUS -etuhampaat ja VITAPAN LINGOFORM -takahampaat



VITAPAN PLUS hammasvarasto


- X-Small*: 67 sarjaa/402 etuhammasta
- Small*: 134 sarjaa/804 etuhammasta
- Medium*: 268 sarjaa/1 608 etuhammasta
- Large*: 400 sarjaa/2 400 etuhammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä.**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMponentit

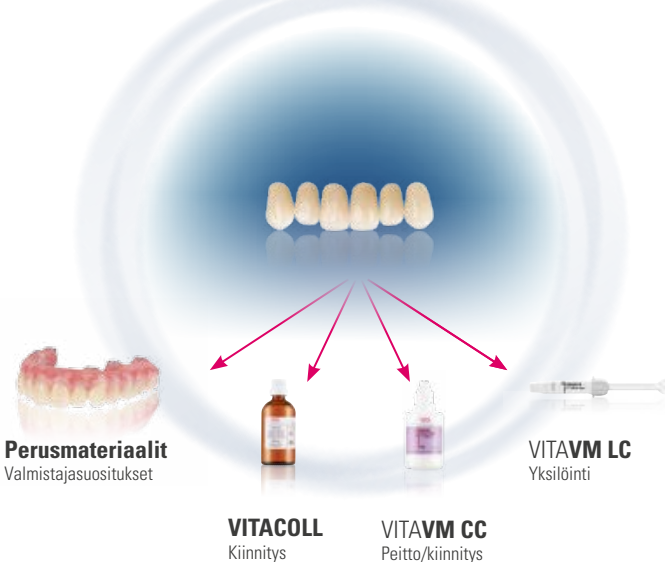



Monipuolinen
purupintarakenne

Tarkka
keskitys

Kaikkiin proteesikonsepteihin monitoimisen purupintarakenteen ansiosta.



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

Mikä?

- monitoimiset Premium-sivuhampaat MRP-komposiitista

Edut?

- **helppo ja intuitiivinen asettelu**
"automaattinen keskitys" nerokkaan purupintarakenteen ansiosta
- **voidaan käyttää kaikissa proteesikonsepteissa**
monipuolisen purupinnan ansiosta
- **aikaa säästävä asettelu**
ilman suurta hiontaa tarkan keskityksen ansiosta
- **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden, kulutuskestävyyden ja keskittymisen ansiosta
- **hyvät työstöominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta

Miksi?

- paras ratkaisu kauniita koko-, osa- ja implanttiproteeseja varten

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- yleiskäyttöinen hammasgeometria luonnollisella lingobukkaalisella leveydellä
- monitoiminen purupinta määritetyillä keskityskontakteilla

Erityistä

- hienosävyinen pinta tarjoaa luonnollisen valoleikin
- yläleuan kallistus: n. 15° - 20°

Suosittelut käyttökohteet?

Paras ratkaisu:

- koko- ja osaproteesit
- implanttikantoihin proteeseihin

Proteesi/asettelukonsepti?

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okkluusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri. Gerber, APF/TiF, ABC

★ Erityisesti:

lingualisoidut okkluusiokonseptit

Värit?

• 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M3, 1M1–5M3

• 15 x VITA classical A1–D4® -värit

A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat?

- 4 x yläsivuhammasmuotoa
- 4 x alasivuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Takahampaat				
21L	22L	23L	24L	
9,6	10,0	10,9	11,0	
				
				
10,0	10,2	10,8	11,2	

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMONENTIT

› SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Koko-/osa ja implanttiproteesit:

- VITAPAN LINGOFORM takahammas ja VITAPAN EXCELL etuhammas
- katso yhdistelmätaulukko VITAPAN EXCELL Etuhammas

tai

- VITAPAN LINGOFORM takahammas ja VITAPAN PLUS etuhammas
- katso yhdistelmätaulukko VITAPAN PLUS etuhammas



> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN LINGOFORM muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITAPAN LINGOFORM takahammas



VITAPAN LINGOFORM hammasvarasto


- X-Small*: 50 sarjaa/400 takahammasta
- Small*: 100 sarjaa/800 takahammasta
- Medium*: 200 sarjaa/1 600 takahammasta
- Large*: 300 sarjaa/2 400 takahammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä.**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

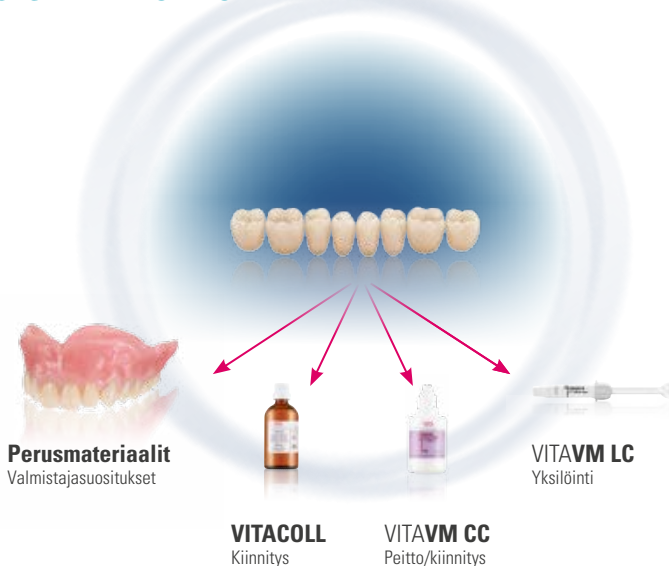



Luonnolliset
muodot

Luonnolliset
värit

Yksityiskohtaisiin ja monipuolisiin proteeseihin.



> TIETOA JA OMINAISUUDET

Mikä?

- luonnolliset Premium-etuhampaat MRP-komposiitista

Edut?

- **toista helposti luonnollinen kauneus**
monikerroksisesti luonnolliset muodot, jotka integroituvat helposti muuhun hampaistoon
- **hyvä värientoisto**
kattava väriskala ja laaja värivalikoima
- **peittää luotettavasti tertiäärirakenteet**
leveän hammaskaulan ansiosta
- **luonnollinen väritys integroidun 3D-väriytyksen,**
pintarakenteen ja kuultavuuden ansiosta
- **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta

Miksi?

- paras ratkaisu osa- ja yhdistelmäproteeseihin

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- luonnollinen hammasgeometria, joka integroituu hyvin hampaistoon
- elinvoimaiset puruspinnat ja luonnollinen kaarevuus
- leveä hammaskaula ihanteellisia hammasvälejä/ikeniä varten
- suuri pohjan volyymi tertiäärirakenteiden peittämiseen

Erityistä

- sovitettu värikyvyys tertiäärirakenteiden peittämiseen
- moniviihteinen pintarakenne luonnollista valoleikkiä varten
- 3D-kerrosrakenne luonnollista väritystä varten

Suosittelut käyttökohteet

Paras ratkaisu:

- osaproteesit
- valu-, siirto- ja siltarakenteet
- teleskooppi- ja kartiotyöt

Proteesi-/asettelukonsepti

★ Sopii erityisesti:

BLP (BIO-logiset proteesit), tri. E. End

Värit?

• 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M1, 0M3, 1M1–5M3

• 15 x VITA classical A1–D4® -värit

A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 21 x Yläetuhammasmuotoa (jaettuna neljään muotoryhmään)
- 8 x Alaetuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Yläetuhampaat							
lapiomainen	O1S*  10,8 7,6	O2L  11,5 8,4	O3M  10,8 8,6	O4L  12,7 9,0	O5L  11,4 9,1	O6L  13,1 9,7	
kolmio	T6S**  10,4 7,4	T2S*  10,1 8,3	T1S  10,2 8,7	T3M  11,7 8,4	T4M*  11,3 8,8	T5M  11,1 8,8	T6L  12,4 8,9
suorakaide	T7M  11,6 8,8	T8L*  11,6 9,2	T9L  13,1 9,4				
nelikulmainen	X1M*  11,0 8,8	X2L  11,6 8,7	X3L  11,8 9,0				
	Z1S  9,8 8,1	Z2S  10,1 8,7					
Alaetuhampaat							
	L1S*  8,8 4,9	L2M*  10,4 5,2	L3M*  10,5 5,2	L4M*  9,4 5,4	L5M*  10,4 5,5	L6L  11,4 5,8	L7L  10,4 5,5
	L8L  13,0 6,3						

*) Bleached-värit OM1 ja OM3 saatavana vain valikoituihin muotoihin.

**) Muodot saatavana vain VITA SYSTEM 3D-MASTER -väreissä.

VITA PHYSIODENS®

> SUOSITELTAVAT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Osa- ja yhdistelmäproteesit

• VITA PHYSIODENS etuhampaat ja VITA PHYSIODENS takahampaat

VITA PHYSIODENS Etuhampaat		VITA PHYSIODENS Takahampaat	
YL/nro  mm	AL/nro  mm	YL/nro  mm	AL/nro  mm
01S 42,3	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
02L 45,7	L2M 34,5	22E 32,9	22E 33,7
03M 47,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
04L 49,2	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1
05L 50,1	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1
06L 51,3	L8L 43,5	25E 36,7	25E 37,3

T6S 41,0	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
T2S 44,9	L2M 34,5	21E 30,5	21E 32,7
T1S 45,3	L1S 33,0	20E 29,4	20E 31,0
T3M 45,6	L3M 36,3	22E 32,9	22E 33,7
T4M 45,6	L4M 35,5	22E 32,9	22E 33,7

VITA PHYSIODENS Etuhampaat		VITA PHYSIODENS Takahampaat	
YL/nro  mm	AL/nro  mm	YL/nro  mm	AL/nro  mm
T5M 46,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
T6L 47,3	L5M 37,0	23E 33,5	23E 34,6
T7M 47,5	L7L 38,2	23E 33,5	23E 34,6
T8L 49,0	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
T9L 49,6	L6L 38,2	25E 36,7	25E 37,3

X1M 46,3	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
X2L 46,2	L4M 35,5	23E 33,5	23E 34,6
X3L 47,8	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1

Z1S 44,1	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
Z2S 47,5	L5M 37,0	22E 32,9	22E 33,7

Yhdistelmätaulukon tiedot ovat ohjeellisia arvoja, jotka voivat muuttua potilaan yksilöllisestä tilanteesta riippuen.

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITA PHYSIODENS muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITA PHYSIODENS etuhampaat ja takahampaat



VITA PHYSIODENS -hammasvarasto

Etuhampaat:


- X-Small*: 67 sarjaa/402 etuhammasta
- Small*: 134 sarjaa/804 etuhammasta
- Medium*: 268 sarjaa/1 608 etuhammasta
- Large*: 400 sarjaa/2 400 etuhammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® väreissä.**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMONENTIT

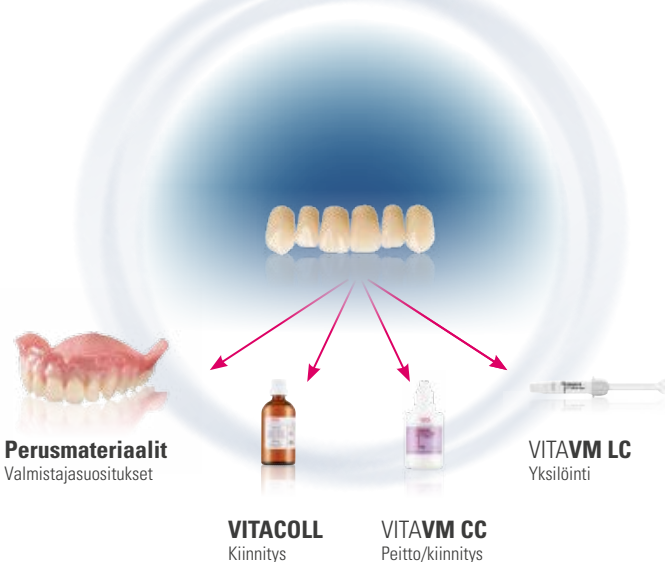



Luonnolliset
muodot

Erinomainen
kestävyys

Paras toimivuus luonnollisen morfologian ansiosta.



> TIETOA JA OMINAISUUDET

Mikä?

- luonnolliset MRP-komposiitista valmistetut sivuhampaat

Edut?

- **luonnollinen purenta on helppo toteuttaa**
luonnollisten muotojen ja morfologian ansiosta
- **hyvä värientoisto ja integrointi muuhun**
hampaistoon kattavan väriskaalan ja laajan värivalikoiman ansiosta
- **luotettava tertiäärirakenteiden peitto**
suurilla hammasvolyyymeillä
- **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
- **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeneisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta

Miksi?

- paras ratkaisu osa- ja yhdistelmäproteeseihin

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- luonnollinen hammasgeometria luonnollisten hammasmittojen ansiosta
- purupinnat luonnollisen esikuvansa mukaan

Erityistä

- suuri (pohja) volyymi
- OK-Ylähampaiden kallistus n. $> 30^\circ$

Suosittelut käyttökohteet

Paras ratkaisu:

- osaproteesit
- valu-, siirto- ja siltarakenteet
- teleskooppi- ja kartiotyöt

Proteesi-/asettelukonsepti

★ Sopii erityisesti:

BLP (BIO-logiset proteesit), tri. E. End

Värit?

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit
0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® -värit
A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 6 x Yläsivuhammasmuotoa
- 6 x Alasivuhammasmuotoa



TAKAHAMPAAT

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

[lisää tuotetietoja >](#)

> MUOTOKATSAUS

Takahampaat						
20E	21E*	22E*	23E*	24E*	25E	
8,9	9,5	9,5	11,1	11,9	11,2	
						
						
8,3	8,7	9,0	9,8	9,8	9,5	

*) Bleached-väri OM3 on saatavana vain valikoituihin muotoihin.

> SUOSITELTAVAT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Osa- ja yhdistelmäproteesit

- VITA PHYSIODENS takahampaat ja VITA PHYSIODENS etuhampaat
- katso yhdistelmätaulukko VITA PHYSIODENS etuhampaat

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITA PHYSIODENS muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITA PHYSIODENS etuhampaat ja takahampaat



VITA PHYSIODENS -hammasvarasto

Takahampaat


- X-Small*: 50 sarjaa/400 takahammasta
- Small*: 100 sarjaa/800 takahammasta
- Medium*: 200 sarjaa/1 600 takahammasta
- Large*: 300 sarjaa/2 400 takahammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä.**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

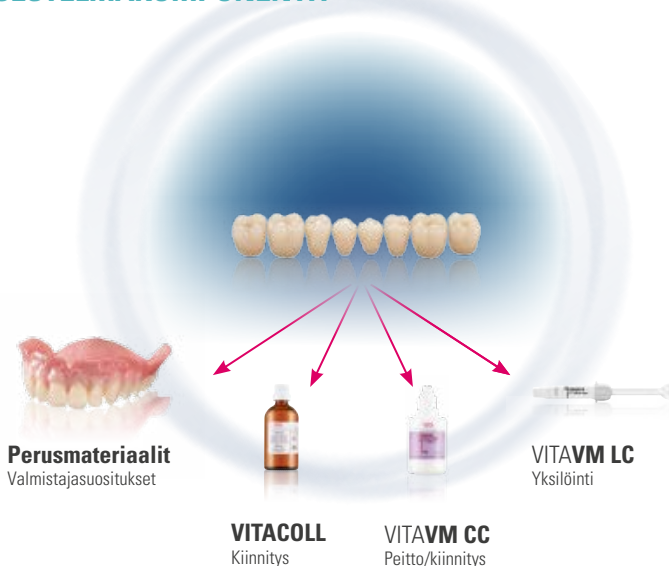




PARAS VÄRI- JA MUOTOVALIKOIMA KAIKKIIN TAPAUKSIIN.

Haluatko ratkaista erilaiset tapaukset ennakoitavasti ja luotettavasti?

VITA UNIVERSAL -proteesivalikoima tarjoaa käyttöösi vuosikymmenien ajan arvostetut MRP-komposiittihampaat, joilla saat luotettavasti hyviä tuloksia mitä erilaisimmissa tapauksissa.

> HAMMASLINJOJEN YLEISKUVAUS

Suosittelut etu-/takahammasyhdistelmät

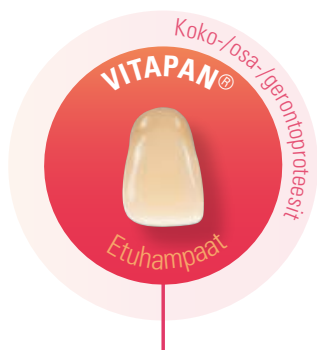

Kaikkiin tapauksiin laajan
väri- ja muotovalikoiman
ansiosta.



Luotettava toiminta tasaisen
purennan ansiosta.



Purentatoiminnon
toistamiseen koko-/
osaproteeseissa.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

[lisää tuotetietoja >](#)



UNIVERSAL
PROSTHETIC



Ikätasoisesti oikeat
muodot

Suuri väri- ja
muotovalikoima

Kaikkiin tapauksiin suuren väri- ja muotovalikoiman ansiosta



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

Mikä?

- MRP-komposiitista valmistetut etuhampaat


Edut?

- **helppo ikätasoisesti oikeiden koko-/osaproteesien valmistus**
monipuolisen muotovalikoiman ansiosta
- **helppo sovittaa muuhun hampaistoon**
tarkasti väriasteikon mukaisen värityksen ja laajan värivalikoiman ansiosta
- **luonnollinen väritys**
integroidun 3D-kerrosrakenteen ansiosta
- **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
- **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta

Miksi?

- yleisratkaisu koko-, osa- ja gerontoproteeseihin

> PERUSTIEDOT

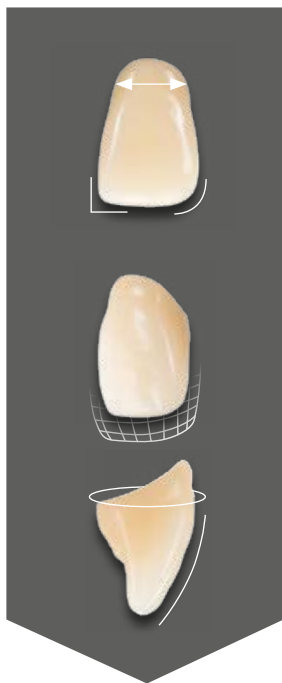

Ominaisuudet?

Muoto

- ikätasoisesti oikea hammasgeometria koko- ja osaproteeseihin
- tasainen luonnollisesti kulunut purenta
- kapeampi hammaskaula

Erityistä

- erinomainen värityksen ja kuultavuuden tasapaino
- tasainen pintarakenne vanhenemismerkkeineen
- 3D-kerrosrakenne luonnollisempaa väritystä varten

Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- koko- ja osaproteesit
- gerontoproteesit
- proteesit ahtaisiin tiloihin

Proteesi-/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okklusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri Gerber, APF/TiF, ABC

Värit?

• 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M1, 0M3, 1M1–5M3

• 15 x VITA classical A1–D4® -värit


A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 31 x yläetuhammasmuotoa (jaettuna neljään muotoryhmään)
- 13 x Alaetuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

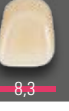Yläetuhampaat						
 lapiomainen	013  7,9 — 9,5	025  8,1 — 9,9	034  8,0 — 9,7	035  8,0 — 9,8	043  8,2 — 9,4	086  8,9 — 9,9
	098*  9,0 — 11,8	099  9,8 — 12,5				097  9,0 — 11,5
 kolmio	T36*  8,1 — 10,1	T53  8,1 — 9,2	T56  8,3 — 10,0	T66  8,3 — 10,2	T67  8,4 — 10,0	T76*  8,2 — 10,4
	T88*  8,7 — 10,6	T98  9,3 — 10,8	T99  9,0 — 11,1			T77*  8,5 — 10,6
 suorakaide	X13  7,7 — 9,3	X66  8,9 — 10,1	X77  8,5 — 10,1	X87  8,9 — 10,1	X96  9,3 — 10,0	X99  9,4 — 12,7
	Z51  8,3 — 8,8	Z61  8,2 — 8,7	Z74  8,8 — 9,6	Z84  8,7 — 9,4	Z85  8,6 — 9,7	Z97  9,5 — 10,2
 nelikulmainen						

*) Bleached-värit 0M1 ja 0M3 saatavana vain valikoituihin muotoihin.

> MUOTOKATSAUS

Alaetuhampaat							
Täysin muotoutuneet leikkureunat	L3  8,0 -5,0	L5*  9,2 -5,2	L5L  9,9 -5,1	L7*  8,7 -5,4	L9  9,0 -5,6	L11*  9,1 -5,7	L13  8,7 -5,6
	L15  12,2 -5,7						
Kuluneet leikkureunat	L4*  8,3 -4,7	L8  9,8 -5,8	L10  9,2 -5,9	L12  9,8 -6,2	L14  10,9 -6,1		

*) Bleached-värit 0M1 ja 0M3 saatavana vain valikoituihin muotoihin.

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Osa- ja yhdistelmäproteesit

- VITAPAN etuhampaat ja VITAPAN CUSPIFORM takahampaat

Gerontoproteesit

- VITAPAN etuhampaat ja VITAPAN SYNOFORM takahampaat

VITAPAN Etuhampaat		VITAPAN CUSPIFORM Takahampaat		VITAPAN SYNOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
013 41,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
025 42,8	L3 33,4	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5

VITAPAN Etuhampaat		VITAPAN CUSPIFORM Takahampaat		VITAPAN SYNOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
034 43,3	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
035 43,2	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
043 43,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
086 47,1	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
097 49,2	L8 38,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
098 48,1	L13 37,0	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
099 52,5	L14 41,7	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T36 43,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
T53 44,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T56 44,4	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T66 44,6	L5 35,3	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T67 45,1	L4 32,7	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T76 45,9	L7 36,2	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T77 46,2	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T88 47,1	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

VITAPAN Etuhampaat		VITAPAN CUSPIFORM Takahampaat		VITAPAN SYNOFORM Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
T98 50,5	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T99 48,0	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X13 41,5	L4 32,7	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
X66 45,9	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X77 47,0	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X87 46,9	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X96 50,0	L10 39,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X99 50,6	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
Z51 44,6	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	13S 31,3	13S 33,9
Z61 45,5	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	12S 31,1	12S 32,7
Z74 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z84 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z85 47,5	L13 37,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
Z97 52,2	L12 41,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Yhdistelmätaulukon tiedot ovat ohjeellisia arvoja, jotka voivat muuttua potilaan yksilöllisestä tilanteesta riippuen.

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITAPAN etuhampaat



VITAPAN hammasvarasto


- X-Small*: 67 sarjaa/402 etuhammasta
- Small*: 134 sarjaa/804 etuhammasta
- Medium*: 268 sarjaa/1 608 etuhammasta
- Large*: 400 sarjaa/2 400 etuhammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

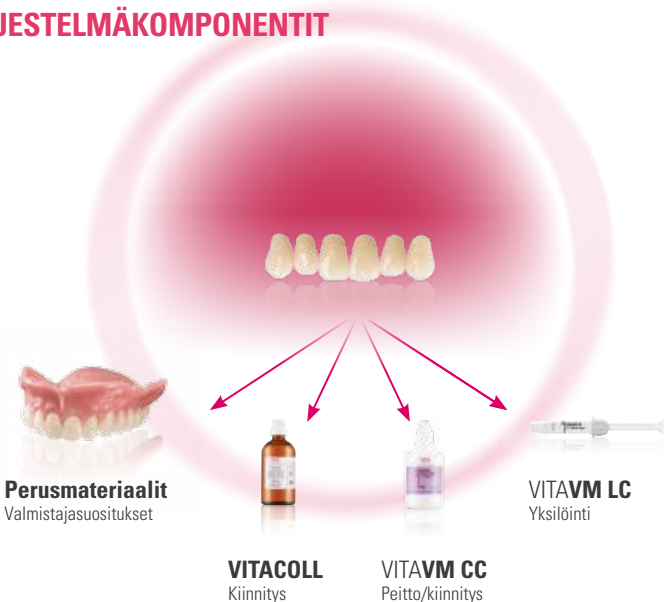



UNIVERSAL
PROSTHETIC



Selkeä
purupinta

Erinomainen
kestävyys

Purennan helppoon toistamiseen koko- ja osaproteeseissa.



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

- Mikä?**
- MRP-komposiitista valmistetut sivuhampaat selkeällä purupinnalla
- Edut?**
- **helppo purutoiminnon toisto koko/osaproteeseissa**
korostettu purupinta hyvää keskitystä varten
 - **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
 - **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta
- Miksi?**
- yleisratkaisu koko- ja osaproteeseihin

VITAPAN® CUSPIFORM

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet

Muoto

- kapea hammasgeometria antaa enemmän tilaa kielelle ja takaa tehokkaan puruvaikutuksen
- korostettu purupinta hyvää keskittymistä varten

Erityistä

- yläleuan kallistus: n. 15° - 20°
- 3D-kerrosrakenne tarjoaa luonnollisen värityksen

Suosittelut käyttökohteet

Paras ratkaisu:

- koko- ja osaproteesit
- proteesit ahtaisiin tiloihin

Proteesi-/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okkluusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri Gerber, APF/TiF, ABC



Sopii erityisesti:

bukkaaliset okkluusiokonseptit

Värit?

• 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M3, 1M1–5M3

• 15 x VITA classical A1–D4® -värit

A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 6 x Yläsivuhammasmuotoa
- 6 x Aläsivuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Takahampaat						
40C	41C*	42C*	43C	44C*	45C	
7,8	8,4	8,3	8,5	9,1	9,4	
						
7,6	8,0	8,0	8,1	8,7	8,6	
						

*) Bleached-väri OM3 on saatavana vain valikoituihin muotoihin.

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Koko- ja osaproteeseihin

- VITAPAN CUSPIFORM takahampaat ja VITAPAN etuhampaat
- katso yhdistelmätaulukko VITAPAN etuhampaat

VITAPAN® CUSPIFORM



> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN CUSPIFORM muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITAPAN CUSPIFORM takahampaat



VITAPAN CUSPIFORM hammasvarasto


- X-Small*: 50 sarjaa/400 takahammasta
- Small*: 100 sarjaa/800 takahammasta
- Medium*: 200 sarjaa/1 600 takahammasta
- Large*: 300 sarjaa/2 400 takahammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

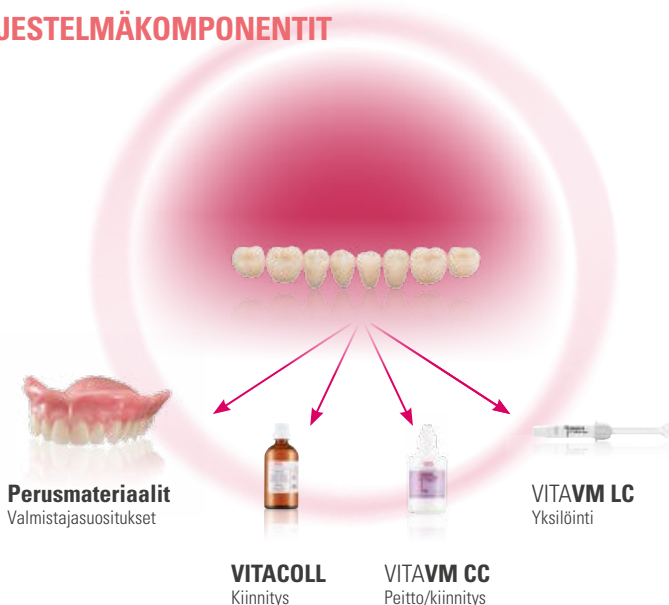



UNIVERSAL
PROSTHETIC



Tasainen
purupinta

Erinomainen
kestävyys

Luotettava toiminta tasaisen purupinnan ansiosta.



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

- Mikä?**
- MRP-komposiitista valmistetut sivuhampaat tasaisella purupinnalla
- Edut?**
- **helppo purutoiminnon toisto gerontoproteeseissa**
tasaisen purupinnan ansiosta paljon liikkumavaraa
 - **erinomainen kestävyys**
suuren kuormitettavuuden ja kulutuskestävyyden ansiosta
 - **hyvät hionta- ja kiillotusominaisuudet**
materiaalin homogeenisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta
- Miksi?**
- paras ratkaisu gerontoproteeseihin

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- kapea hammasgeometria antaa enemmän tilaa kielelle
- tasainen redusoitu purupinta lisää liikkumatilaa

Erityistä

- yläkallistuskulma: n. 6°
- 3D-kerrosrakenne tarjoaa luonnollisen värityksen

Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- gerontoproteesit

Proteesi-/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okklusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri. Gerber, APF/TiF, ABC

Värit?

- 15 x VITA classical A1–D4® -värit
A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 5 x Yläsivuhammasmuotoa
- 5 x Alasivuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Takahampaat					
10S	11S	12S	13S	14S	
7,5 	7,8 	8,7 	8,3 	9,3 	
					
6,8	7,3	7,9	7,4	8,3	

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

› SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Gerontoproteesit

- VITAPAN SYNOFORM takahampaat ja VITAPAN etuhampaat
- katso yhdistelmätaulukko VITAPAN etuhampaat



> VALIKOIMA JA VARASTO



VITAPAN SYNOFORM muotokartta

Kaikki muodot sisältävät metallikotelo hampaiden valintaa varten:

- VITAPAN SYNOFORM takahampaat



VITAPAN SYNOFORM hammasvarasto


- X-Small*: 50 sarjaa/400 takahammasta
- Small*: 100 sarjaa/800 takahammasta
- Medium*: 200 sarjaa/1 600 takahammasta
- Large*: 300 sarjaa/2 400 takahammasta

Saatavana VITA classical A1–D4® -väreissä**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveidesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMONENTIT

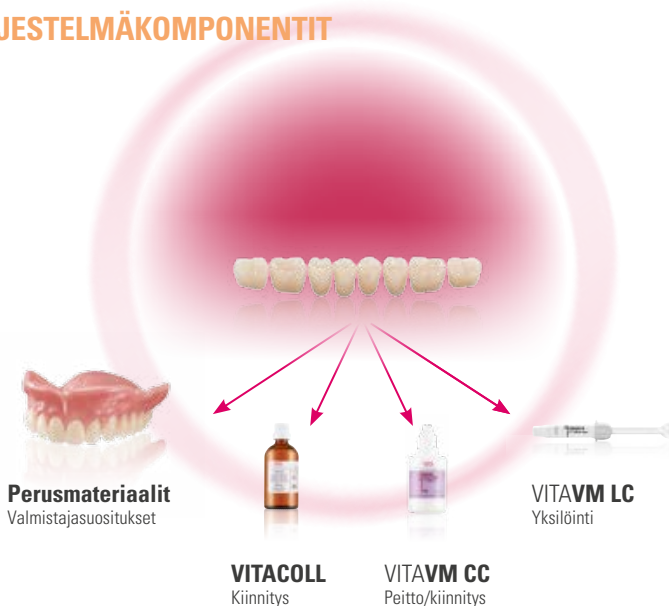



HYVÄT, PARHAAN KUSTANNUSTEHOKKUUDEN TARJOAVAT VAKIOPROTEESIT.

Hyviä vakioproteeseja kohtuuhintaan?

VITA BASIC -proteesivalikoiman HC-polymeerihampailla toteutat edullisesti hyviä vakiorestaatioita kohtuuhintaan.

› HAMMASLINJOJEN YLEISKATSAUS

Suosittelut etu-/takahammasyhdistelmät



Hyvät, parhaan
kustannustehokkuuden
tarjoavat vakioproteesit.



Kaikkiin proteesikonsepteihin
monitoimisen
purupintarakenteen ansiosta.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

[lisää tuotetietoja ›](#)




BASIC
PROSTHETIC



Monipuolinen
hammasgeometria

Luonnolliset
värit

Hyvät, parhaan kustannustehokkuuden tarjoavat vakioproteesit.

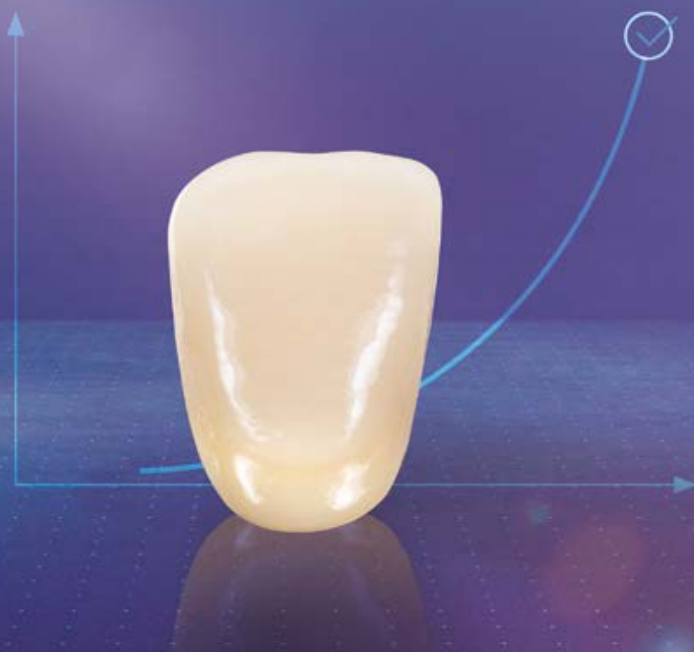

> TIEDOT JA OMINAISUUDET

- Mikä?**
- basic-etuhampaat vakioproteeseihin HC-polymeeristä
- Edut?**
- **harmoninen hymy helposti**
yleiskäyttöisen hammasgeometrian avulla
 - **luonnollinen värileikki**
3D-kerrosrakenteen, kuultavuuden ja pintarakenteen ansiosta
 - **hyvä työstettävyys**
materiaalin homogeneisuuden ja reunojen pysyvyyden ansiosta
- Miksi?**
- vakiorestaauraatiot koko- ja osaproteesien alalla

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- hammasgeometria ja hammaskaulan muoto tarjoavat luonnollisen hymyn
- tasainen luonnollisesti kulunut purenta

Erityistä

- suurempi emaliosuus parantaa kuultavuutta
- monipuolinen pinta tarjoaa elävän värileikin
- 3D-kerrosrakenne tarjoaa luonnollisen värityksen

Suosittelut käyttökohteet

- vahva vakioratkaisu koko- ja osaproteeseihin

Proteesi-/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okklusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri. Gerber, APF/TiF, ABC

Värit?

• 13 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M1, 0M3, 1M1–5M3

• 4 x VITA classical A1–D4® -värit

A1–D4 (ei B1)

Muodot/sarjat

- 12 x Yläetuhammasmuotoa (jaettuna neljään muotoryhmään)
- 5 x Alaetuhammasmuotoa



> MUOTOKATSAUS

Yläetuhampaat						
 lapiomainen	O40  10,0 7,5	O44  10,2 8,1	O49  11,8 9,0			
 kolmio	T41  9,4 7,5	T43  10,3 8,2	T46  10,2 8,5	T49  11,8 9,0		
 suorakaide	R42  9,3 7,9	R45  10,3 8,2	R47  11,0 8,5			
 nelikulmainen	S47  10,8 8,9	S50  12,0 9,2				
Alaetuhampaat						
	L33  9,0 4,8	L34  8,6 5,1	L37  9,8 5,5	L37LN*  9,8 5,5	L40  10,5 6,1	

*) L37 hammasgeometria pidemmällä kaulalla

› SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Hyvä vakioratkaisu koko- ja osaproteeseihin

• VITA MFT etuhampaat ja VITA MFT takahampaat

VITA MFT Etuhampaat		VITA MFT Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
O40 40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44 43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49 49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

T41 40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43 43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46 46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49 48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

R42 42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45 44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47 46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6

VITA MFT Etuhampaat		VITA MFT Takahampaat	
YL/Nro  mm	AL/Nro  mm	YL/Nro  mm	AL/Nro  mm
S47 46,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
S50 49,7	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITA MFT muotokartta

Kätevä kotelo, joka sisältää kaikki muodot hampaiden valintaa varten:

- VITA MFT etuhampaat



VITA MFT hammasvarasto

2S-varasto:


- 72 sarjaa/432 etuhammasta*
- 48 sarjaa/384 takahammasta*

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveittesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMONENTIT

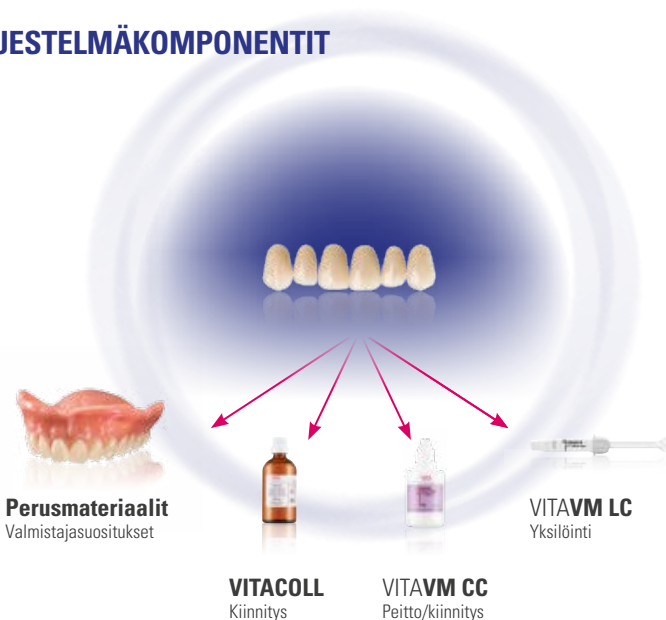



BASIC
PROSTHETIC



Monitoiminen
purupintarakenne

Tarkka
keskitys

Kaikkiin proteesikonsepteihin monitoimisen purupintarakenteen ansiosta.



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

- Mikä?**
- perussivuhampaat monitoimisella purupinnalla HC-polymeeristä
- Edut?**
- **helppo asettelu**
hammaspyöräperiaatteen mukaisen asettelun ansiosta
 - **yleisesti käytettävissä kaikkiin proteesikonsepteihin**
monitoimisen purupintarakenteen ansiosta
 - **aikaa säästävä asettelu**
ilman suurempaa hiontaa täsmällisen keskityksen ansiosta
- Miksi?**
- vakiorestaauraatiot koko- ja osaproteesien alalla

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet?

Muoto

- yleishammasgeometria luonnollisella lingo-bukkaalisella leveydellä
- monitoiminen purupintarakenne määritetyillä keskityskontakteilla

Erityistä

- yläleuan kallistus n. 15° - 20°

Suosittelut käyttökohteet

- vahva vakioratkaisu koko- ja osaproteeseihin

Proteesi-/asettelukonsepti

Sopii kaikkiin linguaalisen ja tasapainoisen okklusion konsepteihin:

esim. Gysi, Prof. tri. Gerber, APF/TiF, ABC



Sopii erityisesti:

lingualisoidut okklusiokonseptit

Värit?

• 13 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® -värit

0M1, 0M3, 1M1–5M1

• 4 x VITA classical A1–D4® -värit

A1, A3, C3, D3

Muodot/sarjat

- 3 x Yläsivuhammasmuotoa
- 3 x Alasivuhammasmuotoa



TAKAHAMPAAT

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

[lisää tuotetietoja >](#)

> MUOTOKATSAUS

Takahampaat			
PU29 – PL29	PU31 – PL31	PU33 – PL33	
9,0	9,6	10,3	
			
9,5	10,0	10,6	
			

> SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Toimiviin vakioratkaisuihin

- VITA MFT etuhampaat ja VITA MFT takahampaat
- katso yhdistelmätaulukko VITA MFT etuhampaat

> VALIKOIMA JA VARASTO



VITA MFT muotokartta

Kätevä kotelo, joka sisältää kaikki muodot hampaiden valintaa varten:

- VITA MFT takahampaat



VITA MFT hammasvarasto

2S-varasto:

- 72 sarjaa/432 etuhammasta*
- 48 sarjaa/384 takahammasta*

Saatavana VITA classical A1–D4® ja
VITA SYSTEM 3D-MASTER® -väreissä**

*) Ohje: Valmis hammasvarasto sisältää useimmin käytetyt muodot ja värit.
Voimme myös koota yksilöllisen hammasvaraston omien toiveidesi mukaisesti.

**) katso käytettävissä olevat värit

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



Perusmateriaalit
Valmistajasuositukset



VITACOLL
Kiinnitys

VITAVM CC
Peitto/kiinnitys



VITAVM LC
Yksilöinti




TEHOKAS CAD/CAM-PROTEESINVALMISTUS PARANTAA TUOTTAVUUTTA.

Paranna tuottavuuttasi digitaalteknikalla.

VITA DIGITAL -proteesivalikoima tarjoaa räätälöidyt materiaalit ja CAD/CAM-ratkaisut kokoproteesien innovatiiviseen tehokkaaseen ja tarkkaan valmistukseen.

> DIGITAALISET PROTEESIRATKAISUT

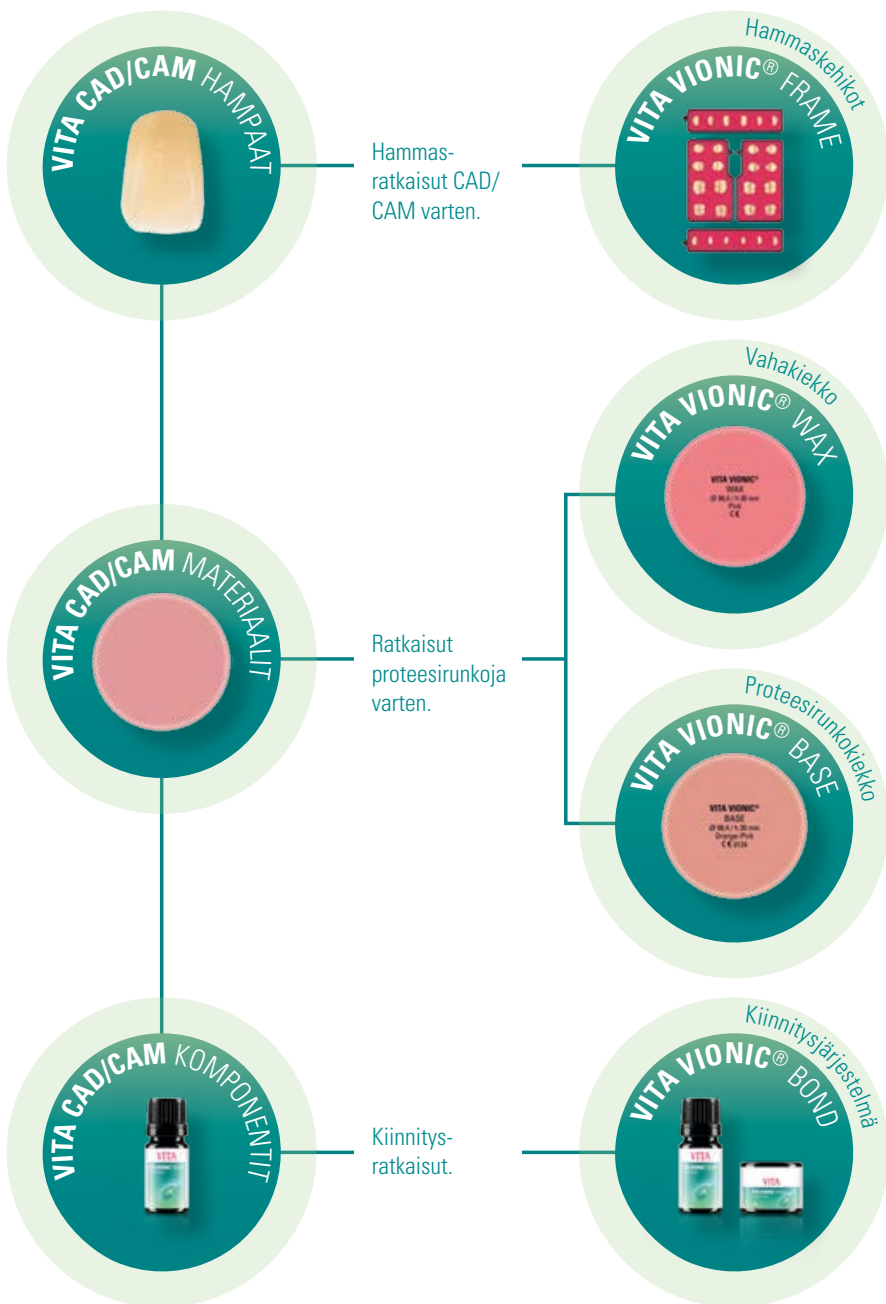

lisää tuotetietoja >

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN
VAX

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALI

CAD/CAM-
KOMPONENTIT




**DIGITAL
PROSTHETIC**



VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Tehokkaaseen CAD/CAM-proteesivalmistukseen CERAMILL® Motion 2 -järjestelmällä

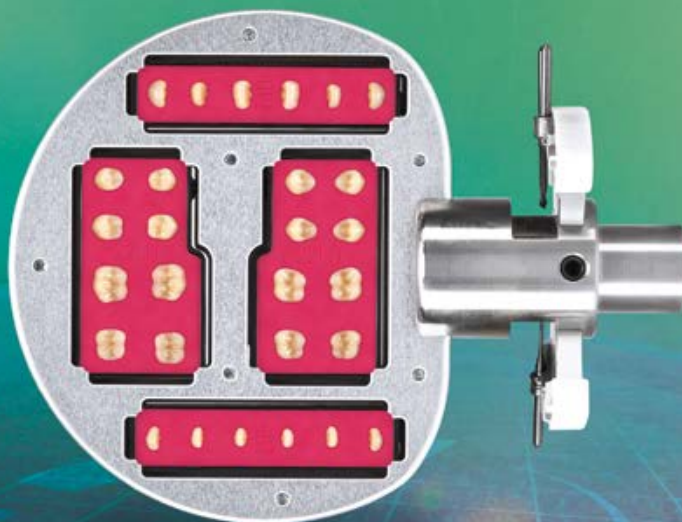

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIDFORM

VITAPAN
SYNOFORM

> TIEDOT JA OMINAISUUDET

Mikä?

- **VITAPAN EXCELL DD FRAME**
- **VITAPAN LINGOFORM DD FRAME**

Edut?

- **toiminnon helppo digitaalinen rekonstruktio**
yksilöllisesti eri konseptien mukaan kulmaluokkia noudattaen
- **tehokas kokoproteesivalmistus**
hampaiden pohja- ja pyöröjyrsintä yhdellä painikkeen painalluksella
- **luotettava täysin digitaalinen CAD/CAM-valmistus**
yhteensopivalla materiaalijärjestelmällä

Miksi?

- proteesien täysdigitaaliseen valmistukseen VITA VIONIC -järjestelmäratkaisulla

VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALI

CAD/CAM-
KOMponentti

VITA VIONIC® FRAME

> PERUSTIEDOT



Ominaisuudet

DD FRAME ceramill d-Set -pidinjärjestelmään

- proteesihampaiden CAD/CAM-työstöön hammaskehikossa
- mahdollistaa hampaan pohja- ja pyöröjyrsinnän CAD/CAM:lla proteesimallin mukaan

Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- digitaaliset proteesit

Proteesi/asettelukonseptit

CAD-mallianalyysi:

TiF-analyysi ceramill d-flow -ohjelmistomoduulilla

CAD-proteesiasettelu:

VITA-sovitetut designratkaisut mahdollistavat

- bukkaalisten ja linguaalisten proteesikonseptien
- puruasentojen huomioinnin (vakio/ristipurenta)
- puruluokkien (I+II) huomioinnin

Värit?

• 6 x VITA classical A1–D4® -värit

A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Muodot/sarjat

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 x Yläetuhammasmuotoa
- 4 x Alaetuhammasmuotoa

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 x Yläsivuhammasmuotoa
- 4 x Alasivuhammasmuotoa

*) Yksi erikoiskehikko YL/AL-sarjaa kohti upotettuine proteesihampaineen.



> MUOTOKATSAUS

Yläetuhampaat VITAPAN EXCELL® DD FRAME

 lapiomainen	O43  9,1 7,9	O45  9,7 8,4	O49  10,9 9,0			
	T44  9,9 8,1	T46  10,4 8,2	T48  11,3 8,8	T50  11,6 9,2		
	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6				

Alaetuhampaat VITAPAN EXCELL® DD FRAME

L33  8,6 5,0	L35  9,0 5,2	L37  9,4 5,2	L39  9,8 5,9			
---	---	---	---	--	--	--

Takahampaat VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

21L  9,6  10,0	22L  10,0  10,2	23L  10,9  10,8	24L  11,0  11,2	
---	--	--	--	--


VITA VIONIC® FRAME

› SUOSITELLUT YHDISTELMÄT

Käyttöaiheen mukaiset yhdistelmät:

Digitaalisiin VITA VIONIC proteeseihin

- VITAPAN EXCELL DD FRAME ja VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
- katso yhdistelmätaulukko VITAPAN EXCELL

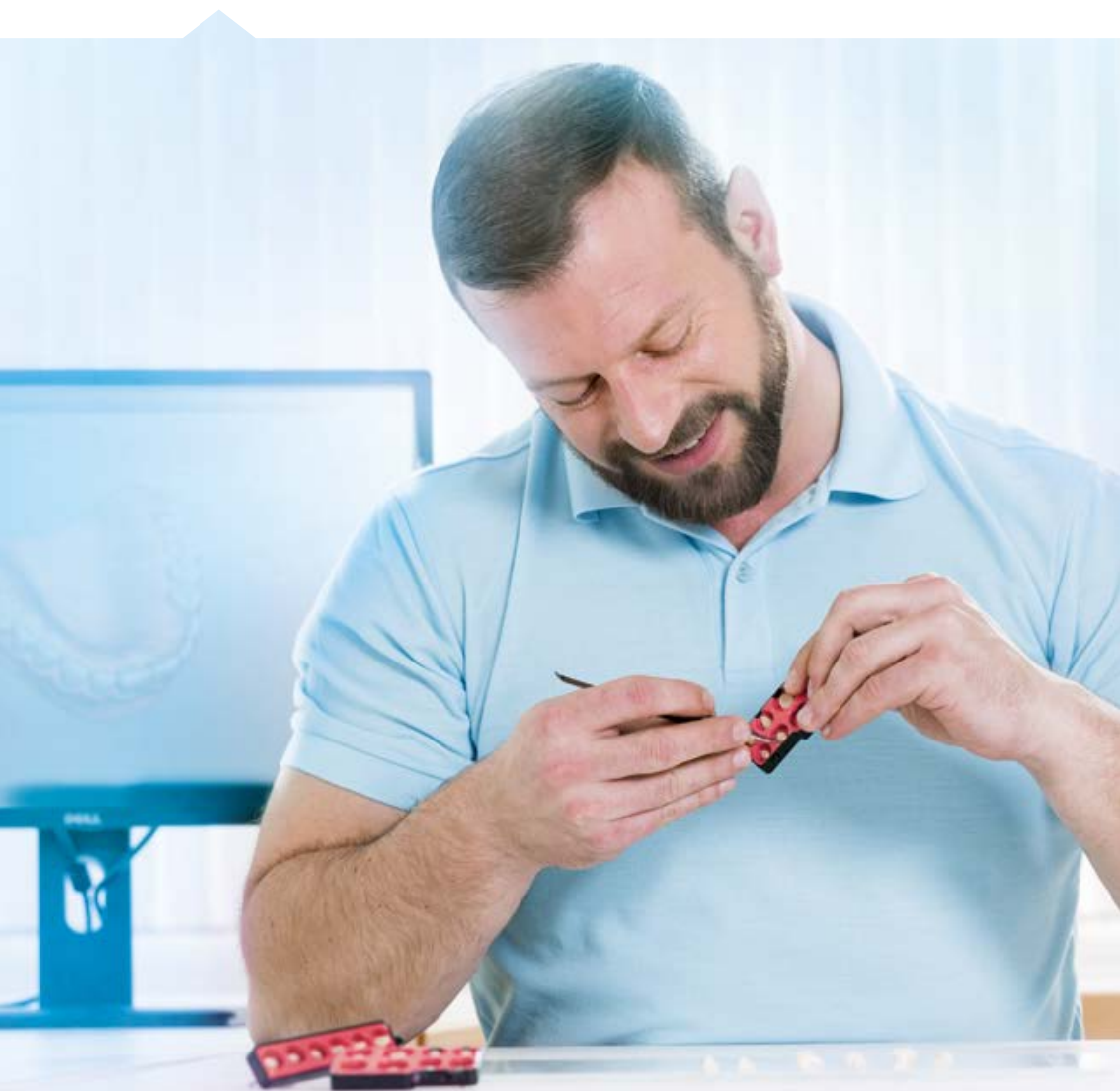


> JÄRJESTELMÄYHTEENSOPIVUUS



- **CAD-ohjelmisto:** Ceramill D-flow -ohjelmistomoduuli
- **CAM-laitteisto:** Ceramill Motion 2 (5X) sis. Coolstream
- **Skanneri:** Ceramill Map 300/400, 300+/400+

> JÄRJESTELMÄKOMONENTIT

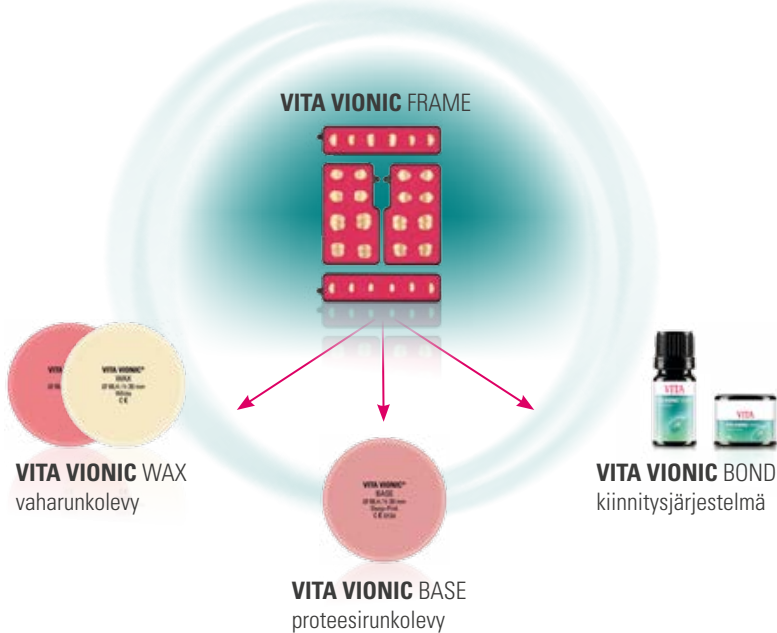



DIGITAL
PROSTHETIC



Tehokkaaseen CAD/CAM-vaha-asetteluun



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

Mikä?

- vahalevyt vaha-asettelua varten

Edut?

- **miellyttävä vahasovitus**
valkoisesta vahasta valmistetun täysikokoisen CAD/CAM-proteesin ansiosta
- **tarkka vaha-asettelu**
tarkasti digitaalisen rakenteen perusteella jyrsittyjen kuoppien ansiosta
- **helppo korjaus**
koska vaha-asettelua voi korjata sovituksen aikana

Miksi?

- vaha-asettelua ja sovitusta varten

VITA VIONIC® WAX

> PERUSTIEDOT

Ominaisuudet

VITA VIONIC WAX

- ovat muodonpitäviä lämmönkestäviä vaha-aihoita

Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- digitaalisen proteesit

Värit

- Pink
- White



Geometriat

- Ø 98,4 mm / K 30 mm



> YHTEENSOPIVUUS



VITA Digital Prothetikin CAD-teknologiakumppani


- Amann Girrbach AG
- 3Shape AS

VITA VIONIC WAX on saatavana seuraaviin järjestelmiin*:

- CERAMILL Motion 2 (Amann Girrbach AG)
- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DG SHAPE DWX-Serie (DG SHAPE)

*) Validoitu VITA-järjestelmäkumppani valikoitujen VITA VIONIC komponenttien työstöön.

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

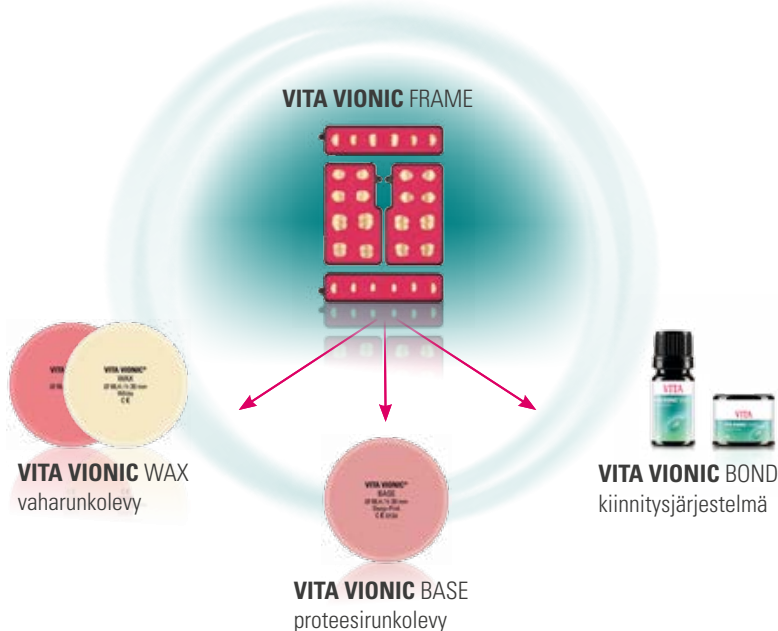



DIGITAL
PROSTHETIC



Runkojen tehokkaaseen CAD/CAM-valmistukseen



> TIEDOT JA OMINAISUUDET

Mikä?

- PMMA-levy proteesirunkojen valmistukseen

Edut?

- **tehokas rungonvalmistus**
CAD/CAM-työstöllä ilman manuaalista upotusta ja puristusta
- **helppo toistettavuus**
koska järjestelmä mahdollistaa toiston yhdellä painalluksella
- **erinomainen sopivuus hammasvallin päälle**
CAD/CAM-työstöllä ilman polymerisaatiovaihetta

Miksi?

- proteesirunkojen CAD/CAM-valmistukseen

VITA VIONIC® BASE

> PERUSTIEDOT

Ominaisuudet

VITA VIONIC BASE

- ovat ristisilloitettuja teollisesti polymerisoituja PMMA-aihoita
- ovat homogeenisia muodon- ja värinpitäviä aihioita


Suosittelut käyttökohteet

Paras proteesiratkaisu:

- digitaaliset proteesit

Värit

- Orange-Pink
- Deep-Pink
- Light-Pink

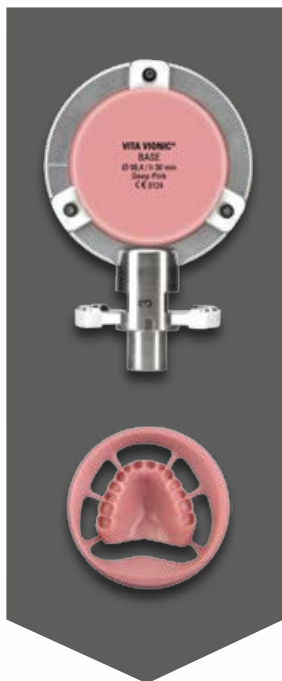

Geometriat

- Ø 98,4 mm / K 26 mm
- Ø 98,4 mm / K 30 mm



> YHTEENSOPIVUUS



VITA Digital Prohetikin CAD-teknologiakumppani


- Amann Girrbach AG
- 3Shape AS

VITA VIONIC BASE on saatavana järjestelmiin*:

- CERAMILL Motion 2 (Amann Girrbach AG)

*) Validoitu VITA-järjestelmäkumppani valikoitujen VITA VIONIC komponenttien työstöön.

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

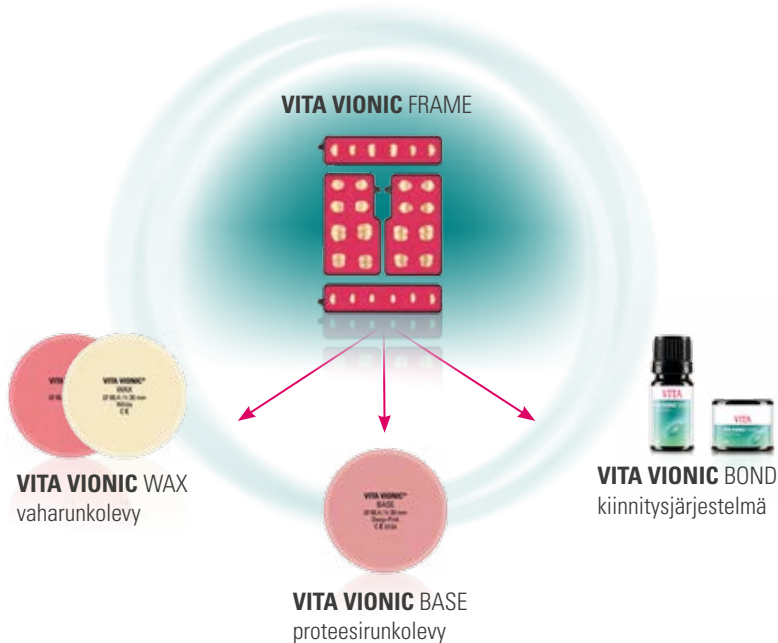



DIGITAL
PROSTHETIC



VITA-proteesihampaiden kiinnitykseen VITA VIONIC -runkoon



> TIETOA JA OMINAISUUKSIA

- Mikä?** • kiinnitysratkaisu proteesihampaiden kiinnitykseen VITA VIONIC runkoon
- Edut?** • **proteesihampaiden tehokas kiinnitys** ilman kuuma/kylmäpolymerisaatiovaihetta
• **hampaiden tarkka ja aukoton kiinnitys kuoppaan** nestemäisellä itsekovettuvalla kiinnitysjärjestelmällä
• **proteesihampaiden luotettava kiinnitys runkoon** materiaaleille sovitun kiinnitysratkaisun ansiosta
- Miksi?** • VITA-hampaiden kiinnitykseen jyrstyyn proteesirunkoon

VITA VIONIC® BOND

> PERUSTIEDOT

Ominaisuudet

VITA VIONIC BOND

- on MMA-pohjainen itsekovettuva kaksikomponenttiliima
- on ohut ja nestemäinen tarkkaa levitystä varten
- muodostaa liimattaviin pintoihin reaktiivisen rajakerroksen

Suosittelavat käyttökohteet

Paras ratkaisu:


- digitaalisiin VITA VIONIC proteeseihin

VITA VIONIC BOND -sarjan sisältö

- VITA VIONIC BOND I, annos, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, pullo, 1 ml
- Pienoissivellin, 3 kpl



> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

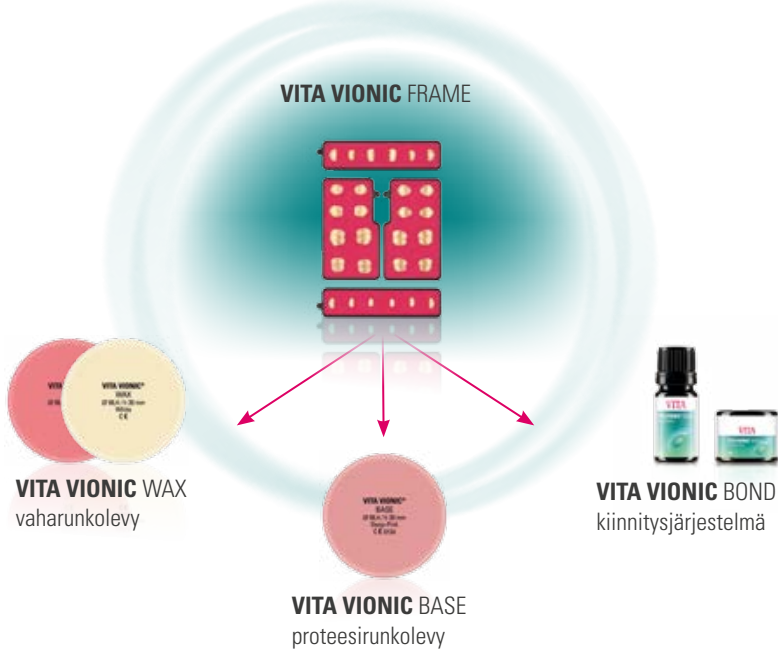

Järjestelmäkomponentit/tarvikkeet

> PARAS RATKAISU PERINTEISEEN PROTEESINVALMISTUKSEEN

Jäljennös/
mallin valmistus



- Tilanne-/toimintojäljennöksiä varten **tarjoamme sopivia lusikoita esim. VITA) ja jäljennösmateriaaleja.**

Värimääritys*



- Hampaiston värimääritykseen sopivat **VITA Easyshade V** tai VITA-väriasteikko.

Mallianalyysi
Muodon valinta



- Mallianalyysin jälkeen käytä hammasmuodon valintaan VITA-muotokarttaa.

Vaha-asettelu



- Käytä vaha-asetteluun ja purentasimulaatioon sopivia **vahoja ja työstötyökaluja.**

Kiinnitys



- VITA-proteesihampaat kiinnitetään runkoon **VITACOLL**-liimalla.

Rungon
valmistus



- Käytä VITAn suosittelemia kylmä-/kuumapolymeraatteja rungon valmistukseen esim. injektio- tai sullomismenettelyllä.

Viimeistely



- Viimeistelyyn sopivat **kiillotustyökalut** ja yksilöintiin **VITA VM LC** -komposiittia.

*) Visuaalinen tai mittaustekninen värimääritys tehdään luonnollisesta hampaistosta.

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT VITA PROTEESIRATKAISUT



Runkomateriaalit

Proteesirungon valmistukseen suositellut kuuma/kylmäpolymeeraatit: ProBase (Ivoclar Vivadent), PalaXpress (Heraeus Kulzer) ja FuturaGen (Schütz Dental).



VITACOLL®

VITA polymeeri/komposiittihampaiden luotettavaan kiinnitykseen runkomateriaaleihin. Suositellaan kuumapolymeeraateille ja pakollinen kylmäpolymeeraateille.



VITAFOL®H

Silikonieristysmateriaali VITA-proteesihampaiden suojaukseen. Sen ansiosta hammasvälit säilyvät puhtaina ja ienmalli säilyy.



VITAVM®LC

Pinnoite VITA proteesien yksilöintiin loistavaa lopputulosta varten. Saatavana kaksi versiota: tiksotrooppinen ja nestemäinen.



VITAVM®CC

Täyteaineeton kylmäpolymeeraatti proteesien korjaukseen, kiskojen peittoon yhdistelmäproteeseissa ja VITA-proteesihampaiden kiinnitykseen valutöissä.

Järjestelmäkomponentit/tarvikkeet

> PARHAAT RATKAISUT DIGITAALISEEN PROTEESIENVALMISTUKSEEN

Skannaus CAD-suunnittelu



- Hyödy proteesien CAD-suunnittelussa VITA-yhteensovitetusta proteesikonseptista.

CAM vaharunko



- Käytä vaha-asettelujen valmistukseen **VITA VIONIC** WAX keinovaha-aihoita.

CAM proteesihampaat



- Käytä VITAPAN-proteesihampaiden CAD-jyrsintään DD FRAME -ratkaisua.

Vaha-asettelu/ Sovitus



- Aseta VITA-proteesihampaat vaharunkoon tai valmista täysikokoinen vaha-asettelu.

CAM Proteesirunko



- Lopullinen proteesirunko valmistetaan **VITA VIONIC** BASE PMMA-aihoista.

Kiinnitys/ Viimeistely



- VITA-hampaat kiinnitetään runkoon **VITA VIONIC** BOND -kiinnitysjärjestelmällä.

> JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT VITA DIGITAL PROTHETIK



VITA VIONIC® WAX

Muodonpitävä lämmönkestävä keinovahalevy vaha-asettelujen CAD/CAM-valmistukseen.



VITA VIONIC® BASE

Silloitettu teollisesti polymerisoitu monomeeriton PMMA-levy lopullisten proteesirunkojen CAD/CAM-valmistukseen.



VITA VIONIC® BOND

Itsekovettuva MM-pohjainen kaksikomponenttiliima VITA-proteesihampaiden kiinnitykseen jysittyyn VITA VIONIC-proteesirunkoon.

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



Autamme sinua mielellämme

› Lisätietoa tuotteista ja prosesseista löydät osoitteessa

www.vita-zahnfabrik.com



Myyntin tuki

Jos sinulla on tilauksiin, toimitukseen, tuotteisiin tai markkinointimateriaaleihin liittyviä kysymyksiä, Udo Wolfner tiimeineen auttaa sinua mielellään.

► Puh +49 (0) 7761 / 56 28 84

Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99

8.00-17.00 CET

S-posti info@vita-zahnfabrik.com



Tekninen tuki

Jos sinulla on VITA-proteesiratkaisuihin liittyviä teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä Ralf Mehliin tai Daniel Schneideriin.

► Puh+49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8.00-17.00 CET

S-posti info@vita-zahnfabrik.com



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPFORM

VITAPAN
SYNOFORM


VITA
MFT

CAD/CAM-
HAMPAAT

CAD/CAM-
MATERIAALIT

CAD/CAM-
KOMPONENTIT

Lisätietoa **VITA-proteesi**ratkaisuista löydät osoitteesta
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

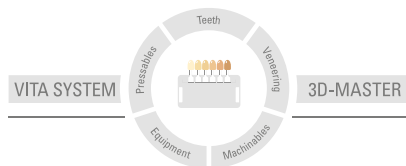

Huom: Tuotteitamme on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä tai työstöstä. Käyttäjän on ennen käyttöä varmistettava, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Emme vastaa vahingoista, jos tuotetta käytetään muiden valmistajien yhteensopimattomien tai kiellettyjen tuotteiden tai laitteiden kanssa. Muuten vastuumme tietojen oikeellisuudesta on riippumaton oikeusperusteista ja, mikäli se on laissa sallittua, rajoittuu joka tapauksessa toimitettujen tavaroiden laskutettuun verottomaan arvoon. Erityisesti emme vastaa menetetyistä voitoista, epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista tai kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimuksista. Vahinkoihin perustuvat vahingonkorvausvaatimukset (vahinko sopimuksen päättyessä, sopimusrikkomus, lainvastaiset toimet jne.) hyväksymme vain, jos on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. VITA Modulbox ei ole välttämätön osa tuotetta. Käyttötietojen julkaisija: 05.18

Nämä käyttötiedot korvaavat kaikki edelliset versiot. Voimassa oleva versio löytyy osoitteesta www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik on sertifioitu lääketuotedirektiivin mukaan ja seuraavissa tuotteissa on merkintä **CE** 0124:

VITAPAN®-tuoteperhe, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA MFT®**, **VITA VIONIC®**-tuoteperhe, **VITACOLL®**, **VITAFOL® H**, **VITAVM® LC** ja **VITAVM® CC**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik