

VITA VIONIC® SOLUTIONS

Para la prótesis digital con sistemas CAD/CAM abiertos



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 12.17

VITA – perfect match.

VITA

Descripción del producto

VITA VIONIC SOLUTIONS permite la confección eficiente de encerados CAD/CAM. En el primer paso se lleva a cabo el rápido montaje digital de la prótesis mediante el software CAD. En el segundo paso, de forma análoga al diseño de prótesis de VITA VIONIC WAX, se confecciona mediante tecnología CAM una base de cera precisa o un encerado de

tamaño completo. Una vez realizada con éxito la prueba en boca, en el último paso se confecciona la prótesis siguiendo el método convencional. Con VITA VIONIC, los laboratorios se benefician de un ahorro de tiempo y de una gran precisión durante la confección.

ENCERADO CAD/CAM




¿Qué?

- Disco de cera para la confección de encerados CAD/CAM

¿Con qué?

- VITA VIONIC WAX Pink para crear una base de cera precisa
- VITA VIONIC WAX White para confeccionar un encerado de tamaño completo

VENTAJAS

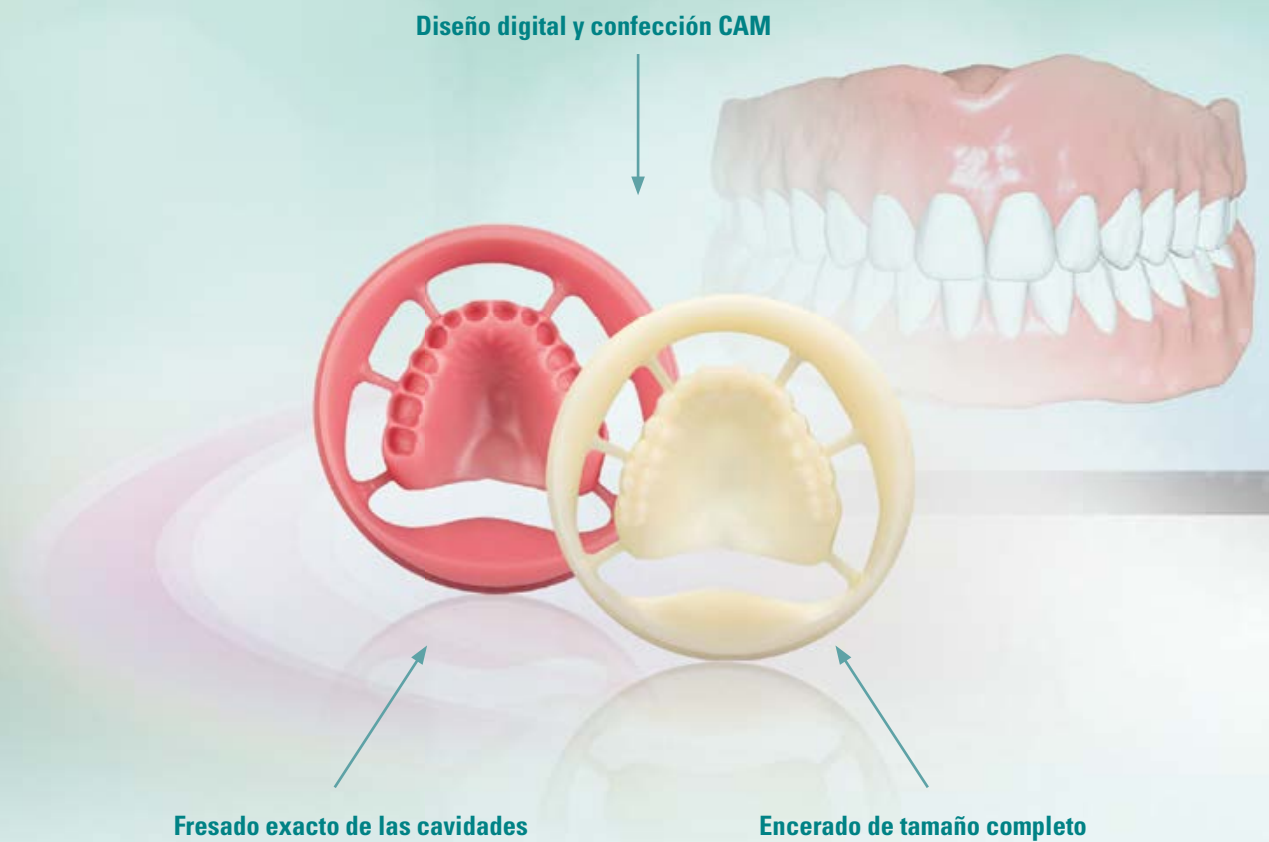

Ahorro de tiempo durante el encerado

- gracias al diseño digital y a la confección CAM

Encerado preciso

- gracias al fresado exacto de las cavidades sobre la base del diseño digital

Comodidad para la prueba en boca con cera

- gracias a la confección de la prótesis CAD/CAM de tamaño completo a partir de cera blanca

DISEÑO CAD



¿Qué?

- Software CAD con opciones de diseño adaptadas específicamente para VITA

¿Para qué?

Reconstrucción sencilla y personalizada de la función...

- gracias a los conceptos vestibulares y linguales integrados
- gracias a las clases de mordida integradas (I + II)
- gracias a las posiciones de mordida integradas (mordida normal/cruzada)

¿Para qué?

- para el montaje digital y personalizado de la prótesis con solo pulsar un botón

FLUJO DE TRABAJO



- Beneficiarse, durante el diseño CAD de la prótesis, de los **conceptos protésicos adaptados** específicamente para VITA.



- Para la confección del encerado, utilice las **piezas en bruto de cera sintética VITA VIONIC WAX**.



- Para garantizar la unión segura de los dientes protésicos VITA a los materiales de la base, utilice el **agente adhesivo VITACOLL**.




- Utilice **resinas autopolimerizables /termopolimerizables recomendadas** por VITA para confeccionar la base, p. ej., mediante el método de inyección o de taponado.



- Utilice para el acabado **instrumentos de pulido adecuados** y para la personalización, el **composite de recubrimiento VITA VM LC**.

INFORMACIÓN BÁSICA

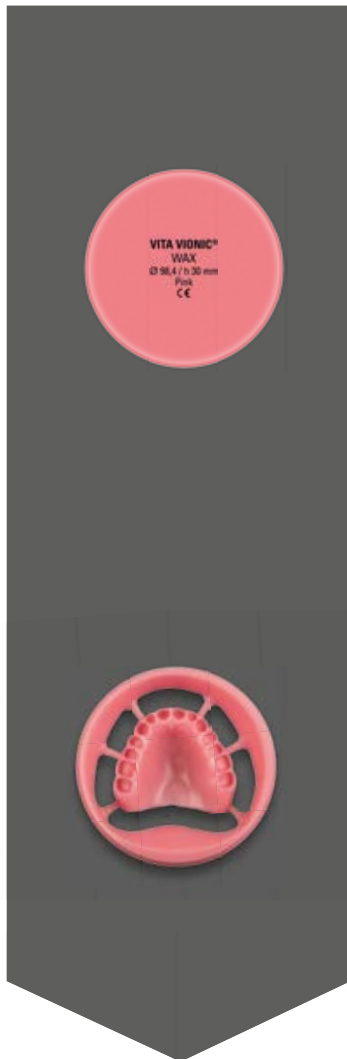

¿Características?

VITA VIONIC WAX

- son piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de forma y termorresistentes


¿Colores disponibles?

- Pink
- White



¿Geometrías disponibles?

- Ø 98,4 mm / Al 30 mm

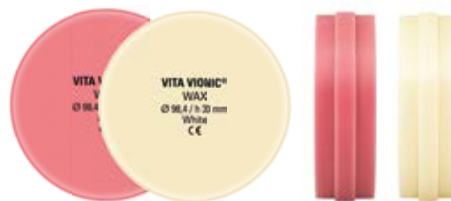

COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS



Socios de tecnología CAD para la prótesis digital de VITA


- 3Shape AS

VITA VIONIC WAX está disponible para los siguientes sistemas*:


- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- DG SHAPE DWX-Serie (DG SHAPE)

*) Socios de sistemas VITA validados para el procesamiento de componentes VITA VIONIC seleccionados.

COMPONENTES DEL SISTEMA

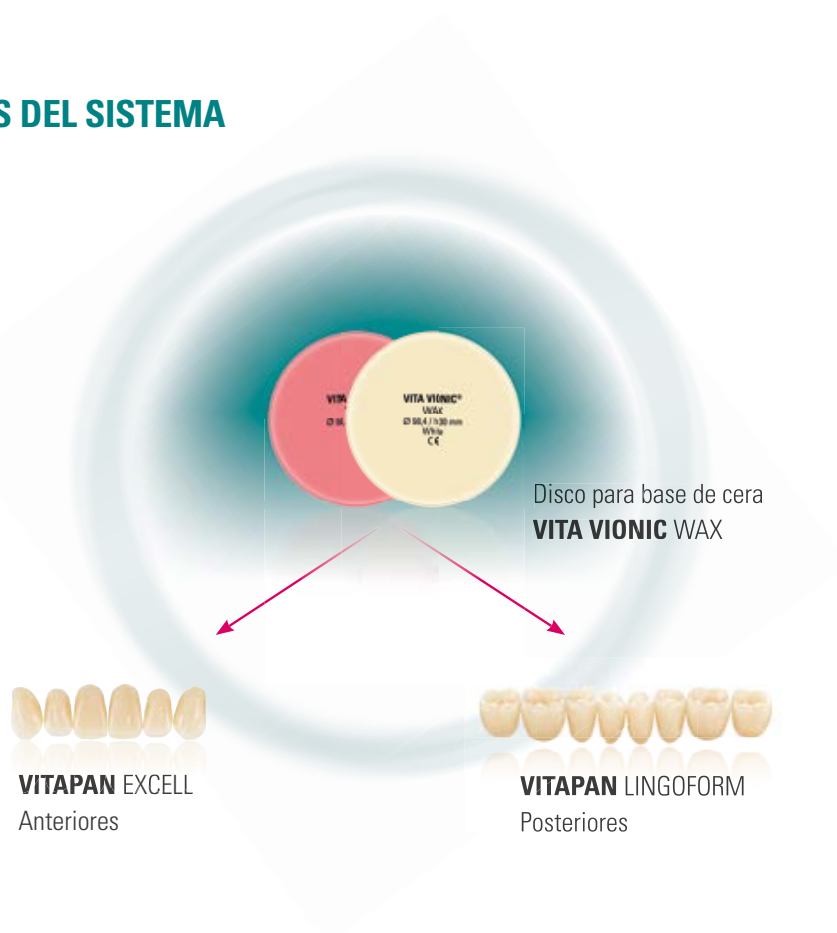

Encontrará información adicional sobre las VITA VIONIC SOLUTIONS en: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

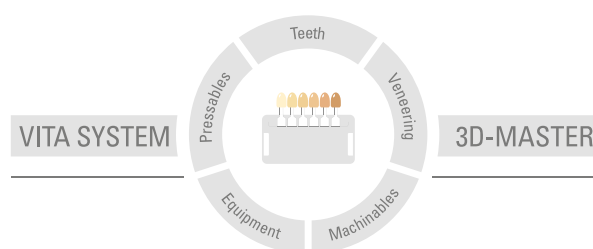

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 12.17

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las versiones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado **CE** 0124 :

VITA VIONIC®WAX

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik