

VITA SMART.FIRE

Instrucciones para actualizar el software



Estimado usuario de VITA SMART.FIRE:

por la presente le informamos de la nueva actualización de software para su VITA SMART.FIRE y le rogamos que instale este software en su aparato siguiendo las instrucciones detalladas a continuación.

Para cualquier pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes números:

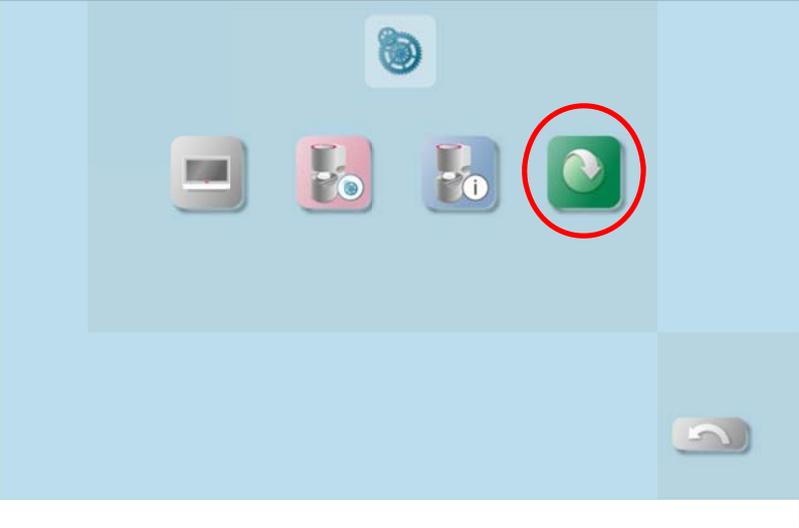
Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 o -106

Fax: 0049 77 61 / 562 – 102

E-mail: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Atentamente,
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Dpto. Servicio técnico de aparatos

<p>1 Exporte el archivo de actualización a un lápiz USB vacío.</p>	
<p>2 Inserte el lápiz USB en uno de los puertos USB.</p>	
<p>3 Pulse Ajustes.</p>	

<p>4</p> <p>Pulse el botón de actualización.</p>	
<p>5</p> <p>Se le mostrará un mensaje cuando se haya completado la actualización.</p>	
<p>6</p> <p>A continuación se le preguntará si desea sustituir el escritorio "STANDARD" actual por el escritorio "STANDARD" actualizado.</p> <p><i>Nota: Si se sustituye el escritorio "STANDARD" actual, se perderán todos los cambios que haya realizado en este escritorio.</i></p>	

Por último, se le preguntará si desea sustituir el escritorio "STANDARD 2" actual por el escritorio "STANDARD 2" actualizado.

7

Nota: Si se sustituye el escritorio "STANDARD 2" actual, se perderán todos los cambios que haya realizado en este escritorio.

