

VITA SMART.FIRE

Instruções de execução de atualização do software



Caro(a) usuário(a) do VITA SMART.FIRE,

Com esta carta, gostaríamos de informá-lo(a) sobre a nova atualização de software para o seu VITA SMART.FIRE e pedir que você instale este software em seu dispositivo de acordo com as instruções abaixo:

Para mais perguntas ou sugestões, entre em contato conosco através do seguinte número de telefone:

Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106

Fax: 0049 77 61 / 562 - 102

Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

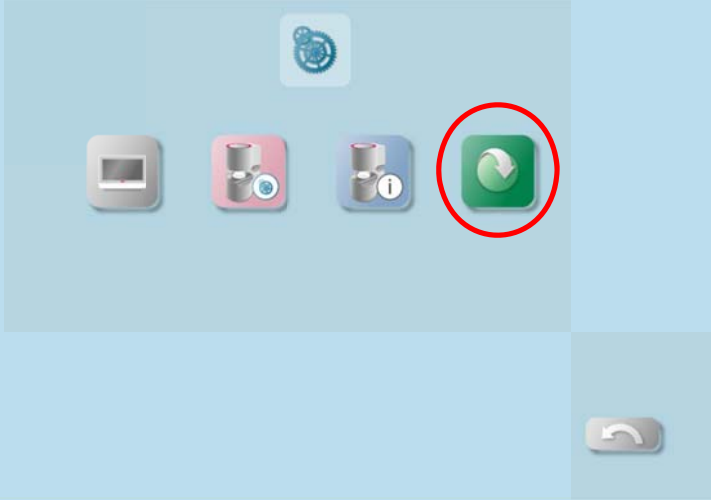
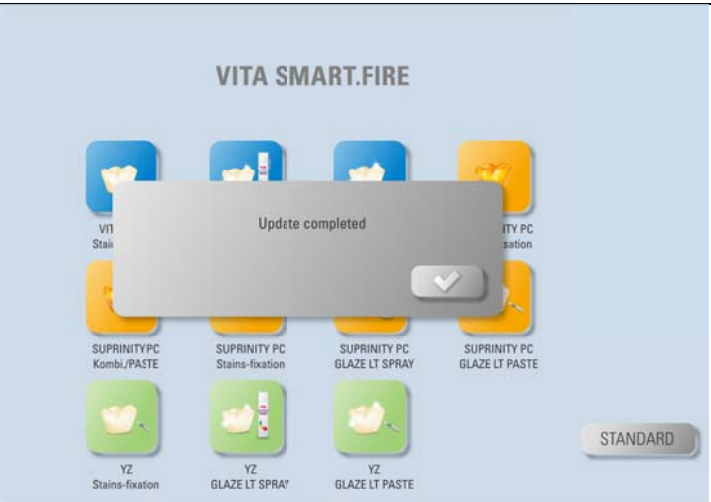
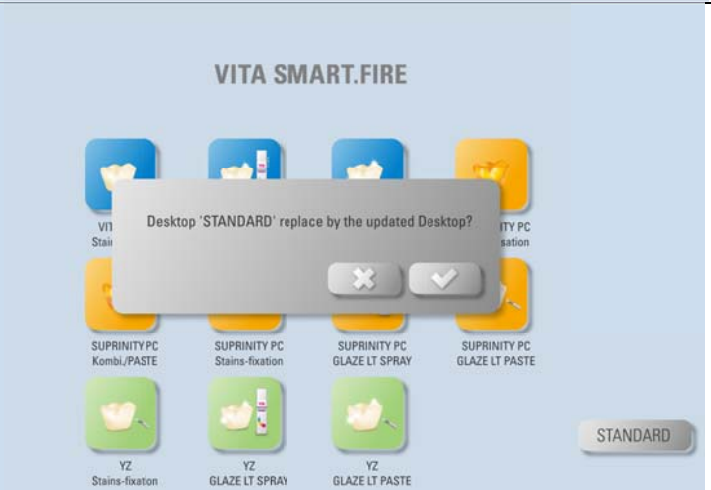
Com sinceros cumprimentos

VITA Zahnfabrik

H. Rauter GmbH & Co.KG

Depto. de assistência aos equipamentos

1	Exporte o arquivo de atualização para um pendrive USB vazio	
2	Insira o pendrive USB em uma porta USB.	
3	Toque em Configurações	

4	Toque no botão Update	
5	Você receberá uma mensagem quando a atualização for concluída.	
6	Agora, você será perguntado se deseja substituir o atual “desktop STANDARD” pelo “desktop STANDARD” atualizado <i>Nota: Se o “desktop STANDARD” atual for substituído, todas as alterações que você fez nesta área de trabalho serão perdidas.</i>	

7	Por fim, você será perguntado se deseja substituir o atual “desktop STANDARD 2” pelo “desktop STANDARD 2” atualizado <i>Nota: Se o “Desktop STANDARD 2” atual for substituído, todas as alterações que você fez nesta área de trabalho serão perdidas.</i>	 The screenshot shows the VITA SMART.FIRE software interface. A central dialog box asks: "Desktop 'STANDARD 2' replace by the updated Desktop?". Below the text are two buttons: one with an 'X' (cancel) and one with a checkmark (confirm). The background interface features a grid of icons for various dental materials and procedures, including "VIT Stain", "SUPRINITY PC Kombi/PASTE", "SUPRINITY PC Stains-fixation", "SUPRINITY PC GLAZE LT SPRAY", "SUPRINITY PC GLAZE LT PASTE", "YZ Stains-fixation", "YZ GLAZE LT SPRAY", and "YZ GLAZE LT PASTE". A "STANDARD" button is visible in the bottom right corner.
---	--	---