

VITA AKZENT® Plus

Istruzioni di impiego Quick-Start – CHROMA STAINS 3D-MASTER



Supercolori indipendenti dal CET
per il controllo del croma

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus – FATTI & CARATTERISTICHE


I CHROMA STAINS sono:

- Supercolori indipendenti dal CET per tutte le correnti ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche o feldspatiche

I CHROMA STAINS offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti livelli di luminosità
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA

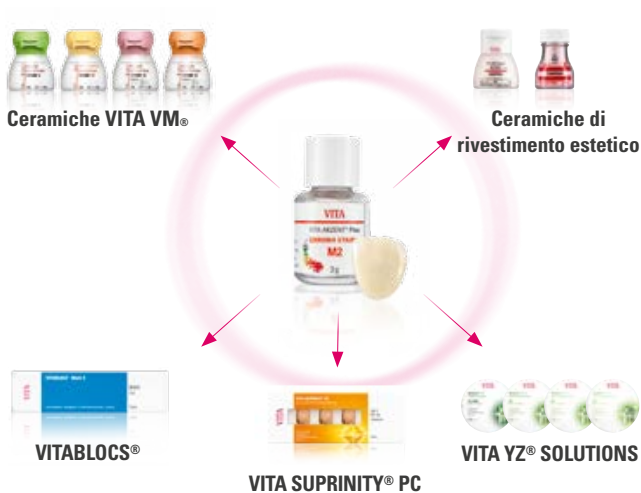

VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER

↳ Uso di CHROMA STAINS 3D-MASTER su uno sfondo definito



CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

! Attenzione:

* Nel 4. livello di luminosità miscelare CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) nel corrispondente CHROMA STAINS (rapporto di miscelazione 1:5).

Controllo della tinta

- E' possibile adattare le tinte verso il rosso o il giallo, miscelando tra loro i colori (rapporto 1:1).

Esempio: per rendere la tinta 2M2 più gialla, miscelare CSM3 e CSL in rapporto 1:1: in tal modo si ottiene 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER

Applicazione sull'esempio del restauro di un singolo dente anteriore



1 Presa del colore



Il restauro non si armonizza cromaticamente con la dentatura residua



2 Applicazione CHROMA STAINS
Cottura di fissaggio supercolori o cottura combinata con VITA AKZENT Plus GLAZE
(v. tabelle di cottura)



Adattamento cromatico perfetto del restauro alla dentatura residua

VITA AKZENT® Plus – Tabelle di cottura


Cottura raccomandata

COTTURA FINALE POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Prees. °C	min.	↗ min.	↗ °C/ min.	Temp. ca. °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCKS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
Cottura di fissaggio supercolori	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-

* Per la cottura dei materiali in pasta il tempo di preriscaldamento va aumentato da 4 min. a 6 min.



 **Attenzione:** tutti i tipi di restauro possono essere glasati con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. In questo caso la temperatura può essere abbassata fino a 750°C.





HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA? Contattate gli
esperti odontotecnici e consulenti tecnici
Ralf Mehlin e Daniel Schneider.

- ▶ **Telefono +49 (0)7761/562 222**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 - 17.00**



SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?
Risposte competenti online in forma di **FAQ,**
video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni
di impiego complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com