

# VITAPM®9

## Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 06.18

VITA – perfect match.

**VITA**

VITAPM®9 system tłoczenia ceramiki

VITAVM®9 ADD-ON system do indywidualizacji uzupełnień pełnoceramicznych

## VITAPM<sup>®</sup>9 – gwarantuje racjonalną obróbkę



### VITAPM<sup>®</sup>9: „All-in-One“ - ceramika do tłoczenia gwarancją wysokiej wydajności

VITA PM 9 (Pressable Material) jest „All-in-One“, czyli ceramiką przeznaczoną do tłoczenia, która została stworzona na bazie drobnocząsteczkowej ceramiki licującej VITA VM 9 i potwierdziła swoją skuteczność miliony razy. VITA PM 9 umożliwia tworzenie wydajnych uzupełnień w bardzo szerokim zakresie. Materiał przeznaczony jest do tłoczenia uzupełnień pełnoceramicznych bez podbudowy (wkłady, nakłady, licówki i korony w odcinku przednim) oraz tłoczenia na podbudowy wykonane z tlenku cyrkonu. Materiał dostępny jest w trzech stopniach przezierności (O, T, HT) i zawiera po 10 wariantów kolorystycznych.

#### Korzyści

- Racjonalne wykonawstwo: szeroki zakres zastosowania (technika tłoczenia na podbudowy i bez podbudowy) ceramiki VITA PM 9 umożliwia wydajne i pewne wykonywanie różnorodnych uzupełnień identycznym programem tłoczenia przy jednoczesnej ergonomii magazynowania materiału.
- Bezpieczeństwo kliniczne: ceramika VITA PM 9 została stworzona na bazie drobnocząsteczkowej ceramiki licującej VITA VM 9 i gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo kliniczne.
- Naturalna gra kolorów: wysoki stopień przezierności krążków VITA PM 9 HT przekonuje dzięki efektowi kameleona oraz gwarantuje naturalną prezentację kolorów.
- Typowe właściwości naturalnego uzębienia: ceramika VITA PM 9 wykazuje bardzo homogeniczną powierzchnię i wysoką odporność na tworzenie się płytki nazębnej - materiał ceramiczny jest bardzo podobny do naturalnego szkliwa.

#### Paleta kolorów

W asortymencie znajduje się po 10 wariantów kolorystycznych w trzech różnych stopniach przezierności (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent). Dzięki takiej palecie kolorystycznej możliwe jest wykonywanie wysoce estetycznych uzupełnień ceramicznych.

Ceramika VITA PM 9 jest zgodna z systemem kolorystycznym VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Asortyment kolorów krążków O-/T:



	Warianty kolorystyczne
Krążki O	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P 2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P
Krążki T	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P i 3M3P

Asortyment kolorów krążków HT:

	Warianty kolorystyczne
Kolory dentyny	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Kolory szkliwa	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

#### Kompatybilność systemu

VITA PM 9 można stosować ze wszystkimi rodzajami mas osłaniających przeznaczonych do tej techniki oraz piecami ceramicznymi posiadającymi możliwość tłoczenia ceramiki.

## VITAVM®9 ADD-ON – gwarantuje naturalną estetykę

### VITAVM®9 ADD-ON : masy przeznaczone do tworzenia indywidualnej estetyki

W celu indywidualizacji (technika nakładania warstw) uzupełnień z materiału VITA PM 9 wykonanych bez podbudowy, dostępny jest teraz komplet mas niskotopliwych VITA VM 9 ADD-ON. Masy powstały na bazie sprawdzonej ceramiki licującej VITA VM 9. Masy są dostępne w ośmiu różnorodnych odcieniach kolorystycznych. Dzięki tym czynnikom, technik może szybko i pewnie reprodukcować indywidualne cechy kolorystyczne oraz tworzyć estetyczne uzupełnienia najwyższej jakości.



### Korzyści

- Naturalna ekspozycja kolorów: masy VITA VM 9 ADD-ON wykazują znakomitą przezierność i gwarantują załamanie światła, które spotykamy w naturalnym szkliwie oraz zapewniają harmonijne połączenie z ceramiczną strukturą materiału VITA PM 9.
- Pewne spojenie: masy VITA VM 9 ADD-ON zostały optymalnie dostosowane do ceramiki VITA PM 9 i przekonują swoim znakomitą połączeniem ze strukturą VITA PM 9 wolnym od naprężeń. W ten sposób użytkownik posiada gwarancję długotrwałej wytrzymałości.
- Wydajność: znakomita stabilność wymiarów w czasie nakładania warstw ceramiki, minimalny skurcz i pierwszorzędna stabilność w czasie napalania gwarantują racjonalny proces obróbki.
- Prosta obróbka: masy VITA VM 9 ADD-ON przekonują swoją homogeniczną strukturą i dzięki temu czynnikowi gwarantują możliwość łatwej obróbki drogą szlifowania i polerowania.



### Paleta kolorów

masy szkliwa/ masy przezroczyste	ADD1 (przezroczyste), ADD2 (jasne szkliwo), ADD3 (ciemne szkliwo), ADD4 (kolor białawy przezroczysty)
masy przezierne	ADD5 (żółtawy przezierny), ADD6 (pomarańczowy przezierny), ADD7 (czerwony przezierny), ADD8 (niebieski przezierny)

### Kompatybilność systemu:


Masy VITA VM 9 ADD-ON zostały specjalnie stworzone w celu indywidualizacji uzupełnień wykonanych z VITA PM 9 bez zastosowania podbudowy. Niskotopliwe masy można napalać we wszystkich piecach dentystycznych znajdujących się na rynku w temp. 800°C wg. instrukcji obróbki materiału.

### Farbki VITA AKZENT Plus: optymalnie, łatwo, wszystko.

28 kolorów VITA AKZENT Plus umożliwia gabinetom i pracowniom różnorodne formy modyfikacji kolorystycznej. Farbki VITA AKZENT Plus charakteryzujemy nie tylko uzupełnienia wykonane z materiału VITA PM 9, lecz również wszystkie inne dentystyczne materiały ceramiczne, niezależnie od prezentowanego WRC. Przy pomocy nowych farbek fluorescencyjnych można w prosty sposób charakteryzować uzupełnienia w czasie nakładania warstw, malować powierzchnię oraz lazurować całość. W zależności od sposobu stosowania, farbki VITA AKZENT Plus są dostępne w postaci proszku lub pasty. Masy lazury Body Stains i Glaze są również dostępne w postaci sprayu.



Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.

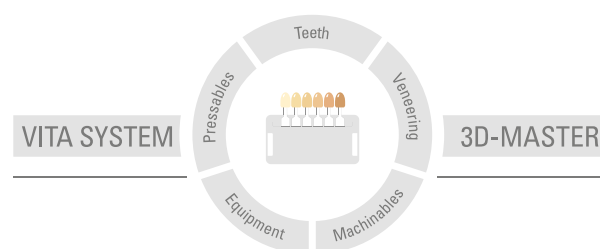

**Uwaga:** Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkownika. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkownika. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu w celu kontroli przewidzianego zastosowania. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten będzie stosowany z niezgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych producentów. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozmyślnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.

Wydanie broszury informacyjnej: 06.18

Powyższe wydanie instrukcji obróbki materiału dezaktualizuje dotychczasowe wydania Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia:  0124

VITA VM<sup>®</sup>9 · VITA PM<sup>®</sup>9 · VITA AKZENT<sup>®</sup> Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)