

VITA AKZENT® Plus

Πληροφορίες προϊόντος



Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA

Τελευταία ενημέρωση 06.18

VITA – perfect match.

VITA

Τελειοποιημένα. Απλά στη χρήση. Για όλα τα κεραμικά.
Χρωματισμός, επικάλυψη και εμφύαλωση – ανεξάρτητα από
το συντελεστή θερμικής διαστολής (WAK)

VITA AKZENT® Plus Τελειοποιημένα.Απλά στη χρήση.Για όλα τα κεραμικά.



Μεγαλύτερη ευελιξία στο οδοντιατρείο και στο εργαστήριο

Ψάχνετε κάτι απλό, αλλά αποτελεσματικό μακιγιάζ κατά το γυάλισμα, εξατομίκευση και χρωματική προσαρμογή ; Τότε η σειρά VITA AKZENT Plus είναι η ενδεδειγμένη για εσάς.

Αυτό το σύστημα γυαλίσματος και χρωματικής επικάλυψης, σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο ιατρείο και στο εργαστήριο.

Ενδείκνυται για όλα τα οδοντοτεχνικά κεραμικά υλικά και για κάθε συντελεστή θερμικής διαστολής.

Νέα χρώματα, νέες μορφές εφαρμογής, νέες ενδείξεις – Το VITA AKZENT Plus σας παρέχει πάντοτε κάθε δυνατότητα.

Διατίθεται υπό μορφή σκόνης, πάστας και σπρέι. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VITA AKZENT Plus με τον πιο οικονομικό τρόπο.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Ομοιομορφία με το πάτημα ενός κουμπιού



AKZENT Plus SPRAY KIT

Στοιχεία της σειράς προϊόντων

Προϊόν	Χρώμα	Περιεχόμενο
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75ml
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Παρελκόμενα		



Ενδείκνυται ιδίως για χρήστες στο εργαστήριο και στο ιατρείο, οι οποίοι θέλουν, π.χ., να προσαρμόζουν χρωματικά μονολιθικές αποκαταστάσεις.

Το υλικό γυαλισματος και οι χρωματικοί παράγοντες φινιρίσματος σε σπρέι είναι έτοιμα προς χρήση και εύκολα στην εφαρμογή τους.

Πλεονεκτήματα:

- ομοιομορφη επίστρωση για απλή και ομοιομορφη επεξεργασία της επιφάνειας
- στοχευμένος ψεκασμός χωρίς απώλειες διασποράς χάρη στη νέα, ειδική κεφαλή ψεκασμού



VITA AKZENT® Plus POWDER **συνδυάζει την ευελιξία και την εξατομίκευση με την οικονομική απόδοση**



AKZENT Plus POWDER KIT Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
Προϊόν	Χρώμα	Περιεχόμενο
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Παρελκόμενα		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4 Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Οι μάζες VITA AKZENT Plus POWDER ενδείκνυνται ιδίως για οδοντοτεχνίτες, οι οποίοι θέλουν να χαρακτηρίζουν με αυτές κλασικά κεραμικά υλικά καθώς και κεραμικά αστρίου λεπτής δομής VITA PM 9.

Πλεονεκτήματα:

- απεριόριστη ευελιξία και οικονομία
- Απεριόριστη δυνατότητα ανάμειξης για την επίτευξη εξατομικευμένων χρωματικών εφέ



VITA AKZENT® Plus PASTE Γρήγορη εξατομίκευση



AKZENT Plus PASTE KIT Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
Προϊόν	Χρώμα	Περιεχόμενο
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Παρελκόμενα		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CS10	5 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4 Στοιχεία της σειράς προϊόντων		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Τα χρώματα VITA AKZENT Plus PASTE ενδείκνυνται απόλυτα για το γρήγορο και απλό χαρακτηρισμό αποκαταστάσεων, π.χ., από VITABLOCS.

Πλεονεκτήματα:

- έτοιμη προς χρήση πάστα με σταθερή υφή και ομοιογενή χρώση για γρήγορη εφαρμογή
- δυνατότητα ανάμειξης για την επίτευξη εξατομικευμένων χρωματικών εφέ
- δυνατότητα αραιώσης ή εκ νέου ανάμειξης



Το προϊόν VITA AKZENT Plus PASTE FLUID εξασφαλίζει την ιδανική υφή σε περίπτωση επιφανειακής ή ολοκληρωτικής ξήρανσης της πάστας.




Γκάμα χρωμάτων AKZENT Plus Σειρά προϊόντων						
Προϊόν	Χρωματικό δείγμα	Χρώμα	Συντομο- γραφία	Μορφή εφαρμογής		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – ημιδιαφανή χρώματα επικάλυψης. – για τη διαφοροποίηση του χρώματος του βασικού υλικού		Κίτρινο	BS01	✓	✓	✓
		Κίτρινο-καφετί	BS02			
		Πορτοκαλί	BS03			
		Γκριζωπό λαδί	BS04			
		Γκριζωπό καφέ	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – χρώματα γυαλισματος για τροποίηση του βασικού χρώματος μέσα στα πλαίσια μιας χρωματικής ομάδας		κοκκινωπή-καφετί	CSA		✓	✓
		κοκκινωπή-κιτρινωπή	CSB			
		γκριζωπή	CSC			
		γκριζωπή-κοκκινωπή	CSD			
CHROMA STAINS 3D-Master – χρώματα γυαλισματος για τροποίηση του βασικού χρώματος μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας φωτεινότητας		κιτρινωπή	CSL		✓	✓
		κιτρινωπή-κοκκινωπή	CSM2			
		κίτρινη-κόκκινη	CSM3			
		κοκκινωπή	CSR			
		πορτοκαλί	CSIO			
EFFECT STAINS – Χρώματα ανώτερης επικαλυπτηκότητας – Για φυσικά εφέ στην επιφάνεια – Για χρώση κατά την διάρκεια της διαστρωμάτωσης		Λευκό	ES01			
		Κρεμ	ES02			
		Λεμονί	ES03			
		Κροκί	ES04			
		Πορτοκαλί	ES05			
		Κόκκινο της σκουριάς	ES06			
		Χακί	ES07			
		Ροζ	ES08			
		Σκούρο κόκκινο	ES09			
		Μωβ	ES10			
		Μπλε	ES11			
		Γκρι-μπλε	ES12			
		Γκρι	ES13			
		Μαύρο	ES14			
GLAZE – για ομοιόμορφα γυαλισμένες επιφάνειες				✓	✓	✓
GLAZE LT – μάζα εφύαλωσης χαμηλού σημείου τήξης για κεραμικά υλικά με θερμοκρασία όπτησης κάτω των 800°C				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – για σατινέ επιφάνειες					✓	✓



+ Ολοκεραμικές επικαλύψεις

+ Απόλυτα ανατομική, μονολιθική αποκατάσταση

+ Μεταλλικές-κεραμικές επικαλύψεις

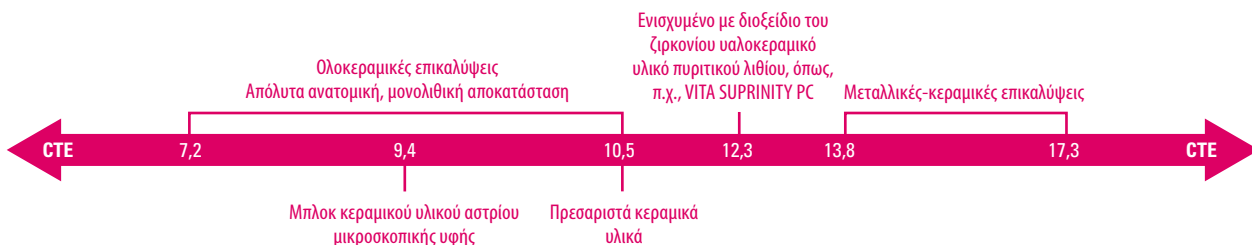

+ Μπλοκ κεραμικού υλικού αστρίου μικροσκοπικής υφής



+ Πρεσαριστά κεραμικά υλικά

+ Το πλεονέκτημα όσον αφορά στις πολλαπλές χρήσεις

Χρώση κατά το γιάλισμα

Νέα προϊόντα στο σύστημα: χρώματα γυαλισματος (Body Stains). Αυτά τα ημιδιαφανή χρώματα λειτουργούν ως λεπτό χρωματικό φίλτρο. Έτσι ενδείκνυται απόλυτα για:

- Χρωματισμό επιφανειών
- Διαφοροποίηση του χρωματικού αποτελέσματος του βασικού υλικού

Μακιγιάζ υπέρτερης καλυπτικότητας

Εξαιρετικά λεπτόκοκκα επικαλυπτικά χρώματα (Effect Stains). Αυτά τα διακρίνονται κυρίως για:

- το έντονο χρωματικό αποτέλεσμα και
- την υψηλή καλυπτικότητα

Για το λόγο αυτό ενδείκνυται ιδίως για τη δημιουργία φυσικών επιφανειακών εφέ και για εσωτερική χρωματική ανάμιξη.

Εμφυάλωση(γυάλισμα)


Για λαμπερό φινιρίσμα:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – η μάζα εφυάλωσης για στιλπνή, ομοιογενή και υαλώδη επιφάνεια
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – η μάζα εφυάλωσης χαμηλού σημείου τήξης για κεραμικά υλικά με θερμοκρασία όπτησης κάτω των 800°C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – η επιχρίσιμη μάζα για σατινέ επιφάνειες επικάλυψης

+ Το πλεονέκτημα όσον αφορά στην άνετη επεξεργασία

Όλα τα χρώματα είναι φθορίζοντα, εξαιρετικά λεπτόκοκκα και χρωματικά σταθερά. Η θιξοτροπική υφή των σκονών και των παστών διευκολύνει επιπλέον την απόλυτα ακριβή επίστρωση της εκάστοτε μάζας.

Με το μοναδικό σύστημα VITA SYSTEM 3D-MASTER προσδιορίζονται συστηματικά και αποδίδονται πλήρως όλα τα φυσικά χρώματα δοντιών.

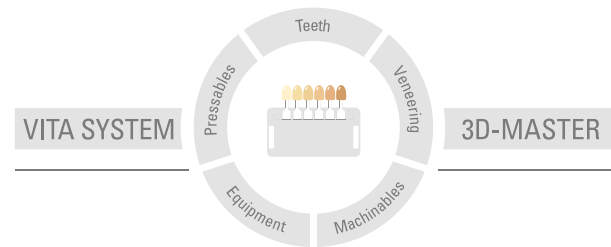

Λάβετε υπόψη: Τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Κατά τα άλλα, η ευθύνη της εταιρείας μας για την ορθότητα αυτών των στοιχείων περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην αξία του παρεχόμενου προϊόντος βάσει τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ, ανεξαρτήτως νομικού λόγου και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν αναλαμβάνουμε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ευθύνη για απωλεσθέντα κέρδη, για έμμεσες ζημιές, για παρεπόμενες ζημιές ή για αξιώσεις τρίτων κατά του αγοραστή. Εξαρτώμενες από την υπαιτιότητα αξιώσεις αποζημίωσης (υπαιτιότητα κατά τη σύναψη σύμβασης, θετική παραβίαση σύμβασης, ανεπίτρεπτοι χειρισμοί κλπ.) είναι δεδομένες μόνο σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος.

Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 06.18

Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι προηγούμενες εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vita-zahnfabrik.com

Η εταιρεία VITA Zahnfabrik είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα και τα ακόλουθα προϊόντα φέρουν το σήμα **CE** 0124:
VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)