

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Istruzioni di impiego Quick-Start



Glasuren in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FATTI & CARATTERISTICHE

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY è:

- una glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET, per tutte le correnti ceramiche di rivestimento, ceramiche monolitiche a base di zirconio, silicato, feldspato e vetroceramiche
- per conseguire una fluorescenza naturale specialmente su restauri monolitici in ceramica integrale privi di fluorescenza propria
- per la sigillatura della superficie ceramica

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY offre:

- semplice incremento della fluorescenza
- glasatura rapida e sicura
- risultati altamente estetici grazie alla fluorescenza naturale

COMPONENTI DI SISTEMA



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Impiego di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



Applicazione di VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- pulire il restauro
- agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
- tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm dalla superficie da trattare
- nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
- posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura (dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati



> Spessore ottimale



> Strato troppo sottile



> Strato troppo spesso



Attenzione:

- Se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo

1 - **Conseguimento di una fluorescenza naturale**

2 - Sull'esempio di una corona naturale e di corone frontali monolitiche in biossido di zirconio



corona naturale

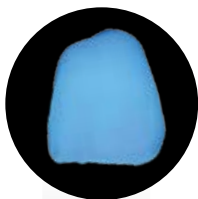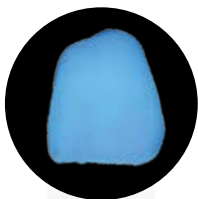

corona in biossido
di zirconio monolitico




con massa fluorescente di alta

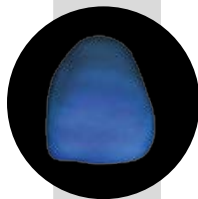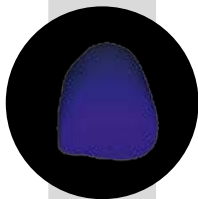

> assenza di fluorescenza propria

> fluorescenza insufficiente

> a strisce per l'uso di pasta

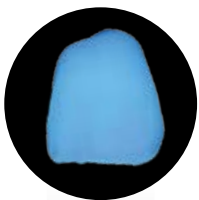

o produttore



> fluorescenza eccessiva



con VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Massa glasura ad alta fluorescenza perfettamente coordinata e applicata in modo omogeneo

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- per modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

VITA AKZENT Plus GLAZE

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C








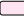




















VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET per conseguire una fluorescenza naturale

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili

VITA AKZENT Plus	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS	ES01  bianco ES02  crema ES03  giallo limone ES04  giallo sole ES05  arancio ES06  rosso ruggine ES07  cachi ES08  rosa ES09  rosso scuro ES10  lilla ES11  blu ES12  grigio-blu ES13  grigio ES14  nero
	VITA AKZENT Plus BODY STAINS	BS01  giallo BS02  giallo-marrone BS03  arancio BS04  oliva-grigio BS05  grigio-marrone
	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4	CSA  rossiccio-marrone CSB  rossiccio-giallo CSC  grigio CSD  grigio-rosso
	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER	CSL  tendente al giallo CSM2  giallastro-rossiccio CSM3  giallo-rosso CSR  tendente al rosso CSIO  arancio
	VITA AKZENT Plus GLAZE	GLAZE GLAZE LT FLUOGLAZE LT FINISHING AGENT



HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA? Gli **esperti odontotecnici e consulenti tecnici Ralf Mehlin e Daniel Schneider** rispondono al:

- ▶ **Tel +49(0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 - 17.00**

Per altri contatti internazionali consultare

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ONLINE-SUPPORT

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto? Risposte competenti online in forma di **FAQ, video e unità didattiche elettroniche.**

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com