

# VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Рабочая инструкция Quick-Start



Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазурочный спрей

VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – ФАКТЫ & ПРЕИМУЩЕСТВА

---

### Спрей VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT:

- Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазурочный спрей для всей обычной облицовочной керамики, монокристаллической циркониевой, силикатной, полевошпатной или стеклокерамики
- Подходит для достижения естественной флуоресценции, особенно в монокристаллических реставрациях без собственной флуоресценции
- Подходит для герметизации керамической поверхности

### С VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY Вы получите:

- Простое увеличение флуоресценции
- Быстрое и надежное глазурование
- Высокоэстетичные результаты благодаря естественной флуоресценции

### СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



## VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

### Использование VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



### Нанесение VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Очистить реставрацию
- Спрей энергично встряхнуть непосредственно перед использованием.
- Распылительную головку держать на расстоянии около 10 см от распыляемой поверхности.
- Распылять следует равномерным слоем со всех сторон реставрации.
- Поместить реставрацию на обжиговый треггер (для обжига красителя и глазуровочного обжига) и провести обжиг в соответствии с рекомендуемыми параметрами.



> Оптимальная толщина  
слоя



> Слишком тонкий слой



> Слишком толстый слой



### Пожалуйста, соблюдайте следующее:

- Если глянец недостаточный, процесс можно повторить

**1** — Достижение естественной флуоресценции

**2** — На примере естественной коронки и монолитной фронтальной коронки из диоксида циркония

естественная коронка

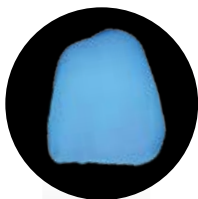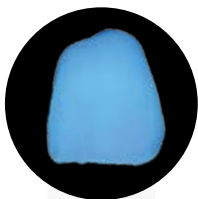


монолитная коронка  
из диоксида циркония




**Отсутствие собственной  
флуоресценции**


с помощью флуоресцентного средства

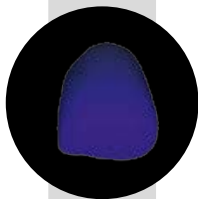

**слишком слабая  
флуоресценция**

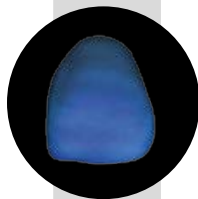

**полоски из-за  
использования пасты**

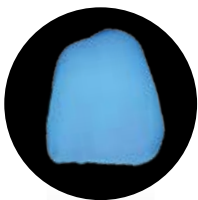

конкурента



слишком высокая  
флуоресценция



с помощью VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Идеально подобранный и равномерно нанесенный  
флуоресцентный VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

## VITA AKZENT® Plus – Портфолио продукта

---

### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- Особенно хроматичные и хорошо распределяющиеся красители
- Для воспроизведения индивидуальных цветовых нюансов и характерных особенностей
- Равномерным густым слоем распределяются по всей поверхности базисного материала

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- Полупрозрачные красители, которые выполняют функцию тонкого цветового фильтра на базисном материале
- Для получения красноватого, желтоватого, оранжевого, коричневатого или серо-зеленоватого оттенка

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- Красители для изменения цветового эффекта базисного материала внутри одной цветовой группы

### VITA AKZENT Plus GLAZE

- Глазуровочные массы способствуют образованию глянцевых, стекловидных равномерных поверхностей после обжига

### VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: легкоплавкие массы специально для глазуровки реставраций, облицованных керамикой, у которой температура спекания ниже 800 °C

### VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- Независимый от КТР, высоко флуоресцентный глазуровочный спрей для достижения естественной флуоресценции

### VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- Для создания естественной поверхностной текстуры с помощью матового глянца

## VITA AKZENT® Plus – Доступные цвета

VITA AKZENT Plus


### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  белый
- ES02  кремовый
- ES03  лимонно-желтый
- ES04  солнечно-желтый
- ES05  оранжевый
- ES06  ржавый
- ES07  хаки
- ES08  розовый
- ES09  темно-красный
- ES10  лиловый
- ES11  голубой
- ES12  серо-голубой
- ES13  серый
- ES14  черный

### VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  желтый
- BS02  желто-коричневый
- BS03  оранжевый
- BS04  оливково-серый
- BS05  серо-коричневый

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  Красновато-коричневые
- CSB  Красновато-желтые
- CSC  сероватый
- CSD  серовато-красный

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  желтоватый
- CSM2  Желтовато-красный
- CSM3  желто-красный
- CSR  красноватый
- CSIO  оранжевый

### VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



## **ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**

Вопросы по продукции VITA?

**Опытные зубные техники Ralf Mehlin и**

**Daniel Schneider ответят на Ваши вопросы**

- ▶ **Телефон: + 49 (0) 7761 / 56 22 22**
- e-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**
- с 8.00 до 17.00 ч**

### **Технические консультанты:**



#### **Алина Керецман**

тел.: +7 (915) 079-62-76

e-mail: [alinakeretsman@gmail.com](mailto:alinakeretsman@gmail.com)

#### **Олег Стребков**

тел.: +7 (916) 352-14-91

e-mail: [o.strebkov@vita-zahnfabrik.com](mailto:o.strebkov@vita-zahnfabrik.com)

#### **Владимир Мадюдя**

тел.: +38 (067) 740-52-94

e-mail: [V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com](mailto:V.Madyudya@vita-zahnfabrik.com)

**Дополнительные международные контакты см. в разделе**  
**[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)