

VITA Equipment

Technische Information



VITA vPad excellence 10,1" **VITA vPad comfort 10,1"**

Die vPads für die VITA Öfen der New Generation wurden vor kurzem durch die überarbeiteten, leistungsfähigeren Modelle **VITA vPad comfort** (ab Baujahr 08/2018; Art.-Nr. DVPADCV1) und **VITA vPad excellence** (ab Baujahr 05/2017; Art.-Nr. DVPADEXV1) ersetzt.

Die neuen Modelle der vPads verfügen u.a. über größere und höher auflösende Displays (10,1") mit optimierter Touch-Funktion und sind extrem robust gegen mechanische Beanspruchungen. Insbesondere werden Glasbrüche vermieden.

Die neuen vPads können mit VITA Öfen ab Baujahr 05/2017 ohne Einschränkung benutzt werden.

Die Verwendung der neuen vPads ist auch mit älteren Öfen (bis Baujahr 04/2017) möglich, allerdings wird dann eine zusätzliche Stromversorgung für das vPad benötigt.


Diese Stromversorgung wird durch das VITA Power-Injektorkabel (Art.-Nr. D63100) bereitgestellt. Das VITA Power-Injektorkabel wird also nur dann benötigt, wenn ein Ofen mit Baujahr vor 05/2017 mit einem vPad der neuen Bauart (10,1"-Display) betrieben werden soll.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie weitere detaillierte Informationen hinsichtlich der Frage „Wann wird ein VITA Power-Injektorkabel benötigt?“ und „Wie erfolgt die Inbetriebnahme des Ofens mit vPad und Power-Injektorkabel?“

VITA vPads mit 10,1"- Display + Brenngerät

(bis Baujahr 04/2017)

Zum Betrieb des

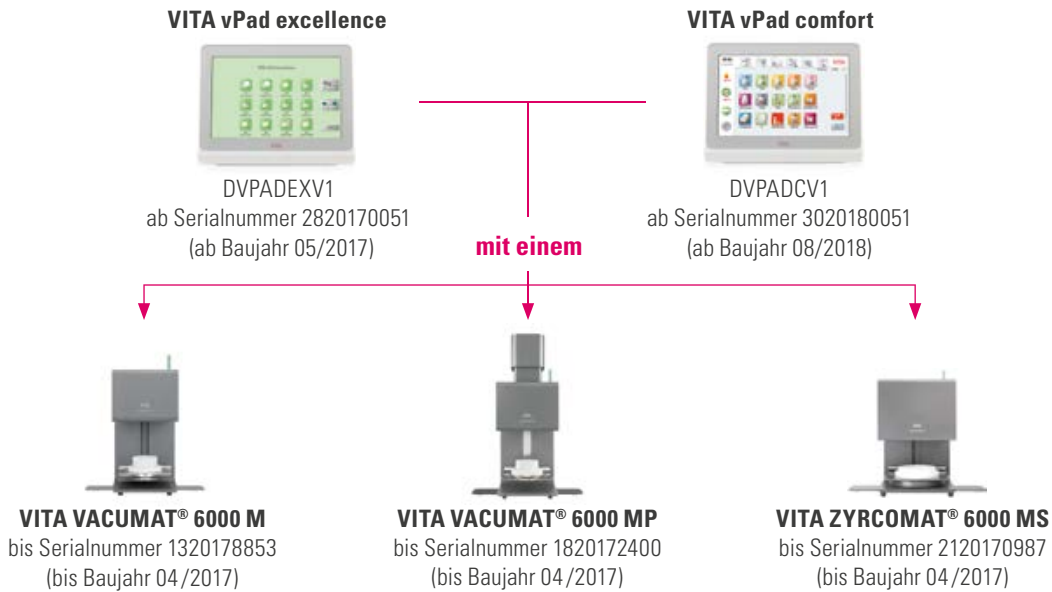

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird zwingend ein Power-Injektorkabel benötigt.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence - Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor - Ofen)
4. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel
 (gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel
 (blauer Punkt + Ring)



1/5 = Einschalter / Ausschalter nur
 für das vPad, Ofen wird über
 Hauptschalter ein-/ausgeschaltet




Oberer Anschluss verwenden
 (Brenngerät bis 04/2017)

VITA vPad excellence mit 10,1"- Display + VITA SWITCHBOX + Brenngeräte

(alle Baujahre)

Zum Betrieb des

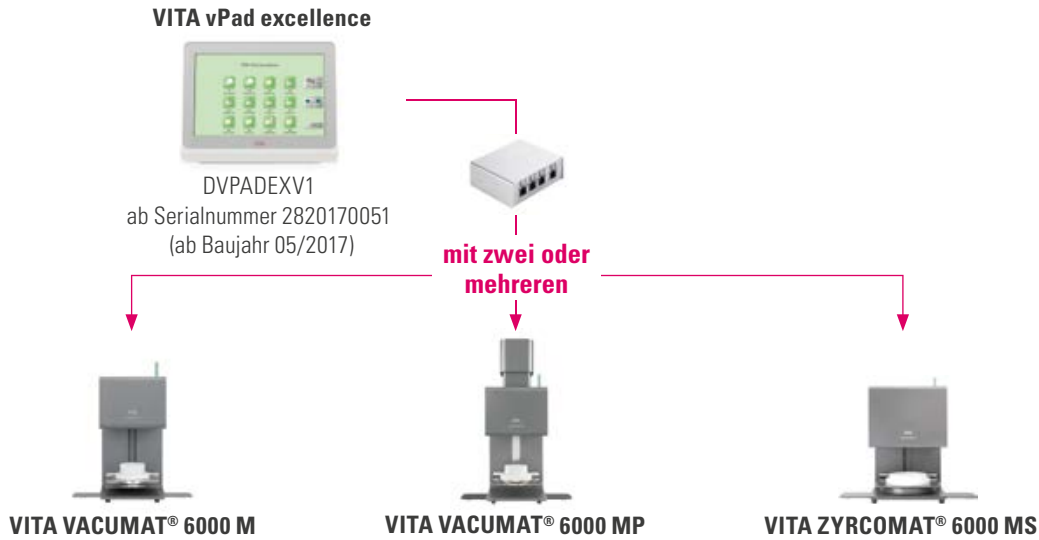

Mehrofen - Steuerung

In der Mehrofen-Steuerung (= **MIT VITA SWITCHBOX**, Art.-Nr. D47009) ist ein Injektorkabel (Art.-Nr. D63100) erforderlich.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence – Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor – SWITCHBOX)
4. Verbindungskabel (SWITCHBOX – Ofen)
5. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



1/6 = Einschalter / Ausschalter nur
für das vPad, Ofen wird über
Hauptschalter ein-/ausgeschaltet



Oberer Anschluss verwenden
(Brenngerät bis 04/2017)




Oberer Anschluss verwenden
(Brenngerät ab 05/2017)

VITA vPads mit 10,1"-Display + Brenngerät

(ab Baujahr 05/2017)

Zum Betrieb des

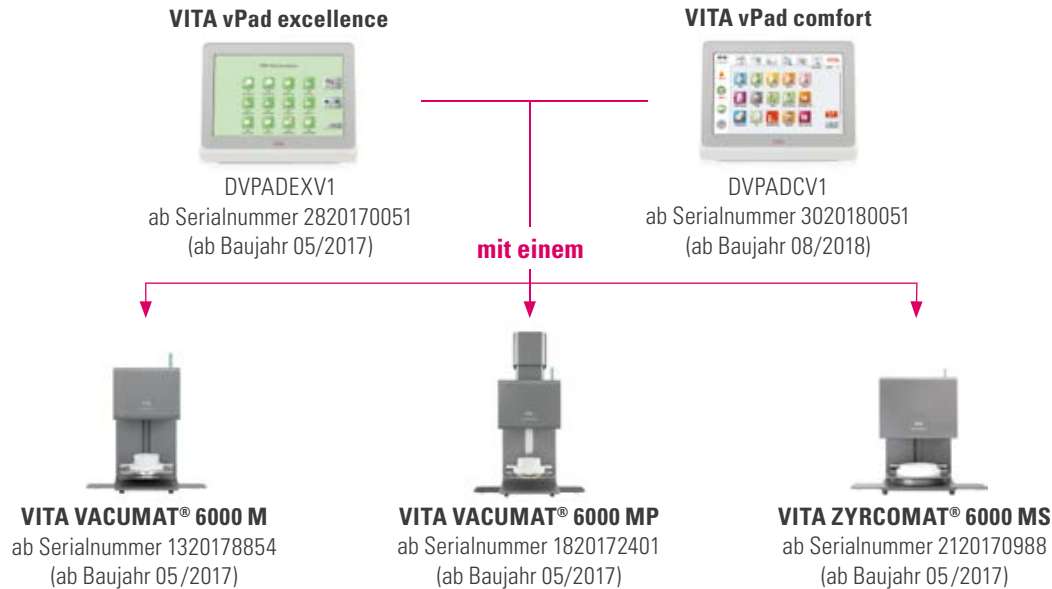

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird kein Power-Injektorkabel benötigt.
Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



Brenngerät / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)



Unteren Anschluss verwenden
(Brenngerät ab 05/2017)

VITA