


VITA vPads mit 10,1"-Display + Brenngerät

(ab Baujahr 05/2017)

Zum Betrieb des

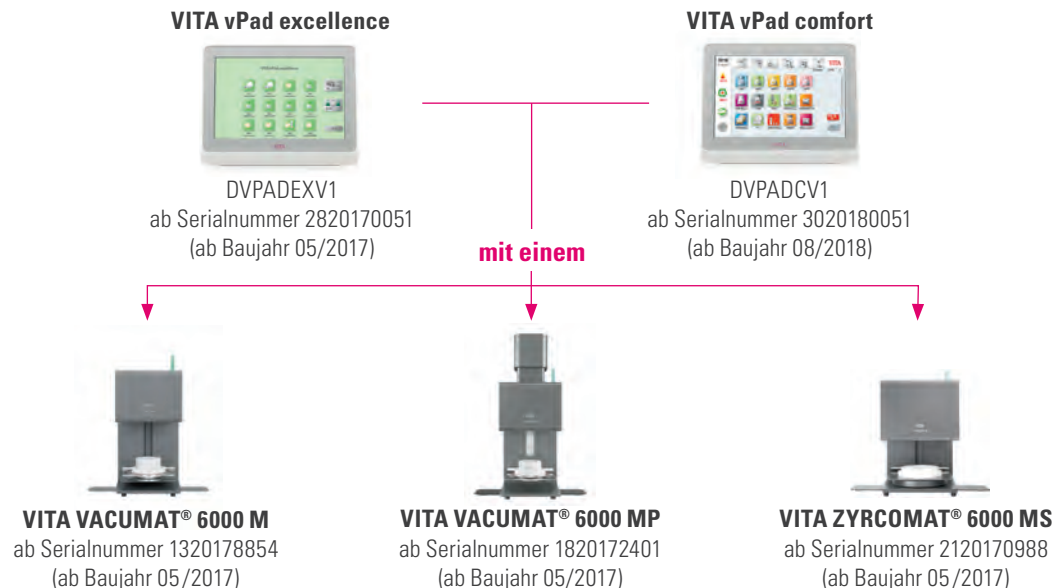

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird kein Power-Injektorkabel benötigt.
Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



Brenngerät / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)




Unteren Anschluss verwenden
(Brenngerät ab 05/2017)

VITA vPads mit 10,1"- Display + Brenngerät

(bis Baujahr 04/2017)

Zum Betrieb des

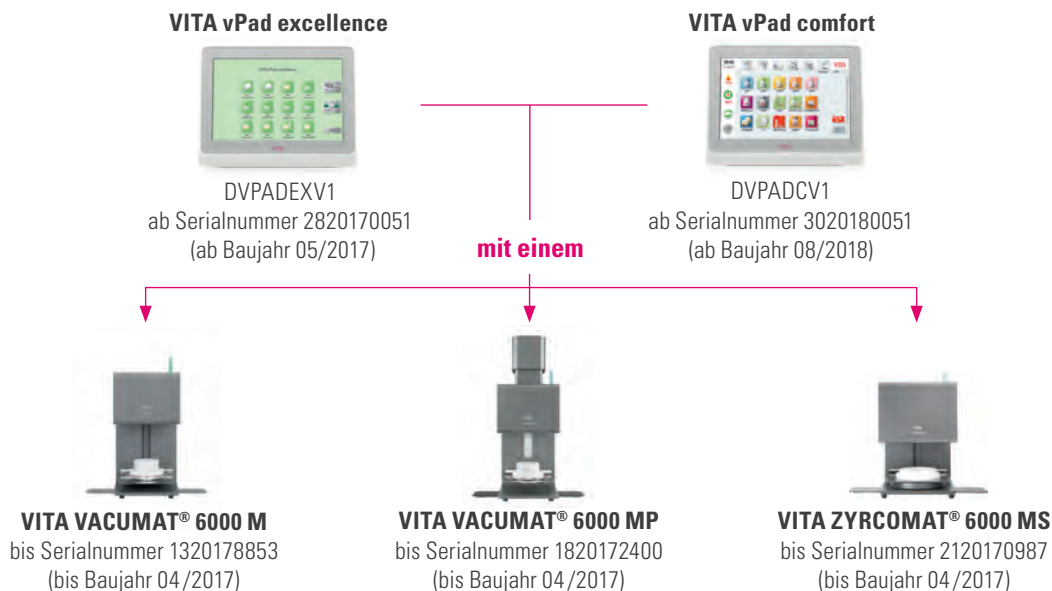

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird zwingend ein Power-Injektorkabel benötigt.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence - Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor - Ofen)
4. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



1/5 = Einschalter / Ausschalter nur
für das vPad, Ofen wird über
Hauptschalter ein-/ausgeschaltet



Oberen Anschluss verwenden
(Brenngerät bis 04/2017)

VITA