


VITA vPads mit 10,1"-Display + Brenngerät

(ab Baujahr 05/2017)

Zum Betrieb des

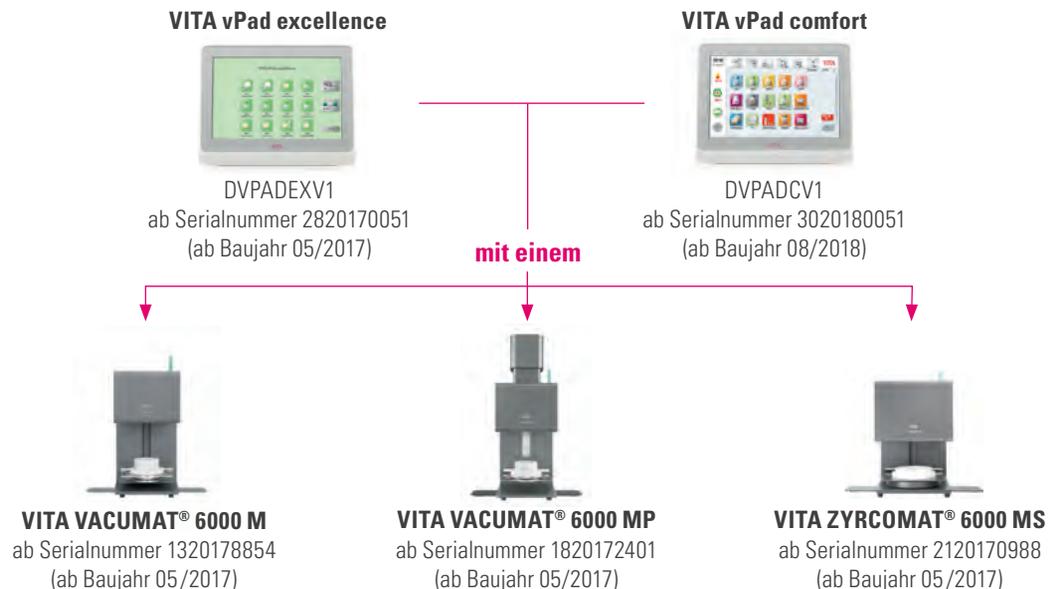

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird kein Power-Injektorkabel benötigt.
Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



Das vPad wird direkt am Brenngerät angeschlossen



Neues vPad/ Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



Brenngerät/ Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)




Unteren Anschluss verwenden
(Brenngerät ab 05/2017)

VITA vPad excellence mit 10,1"- Display + VITA SWITCHBOX + Brenngeräte

(alle Baujahre)

Zum Betrieb des

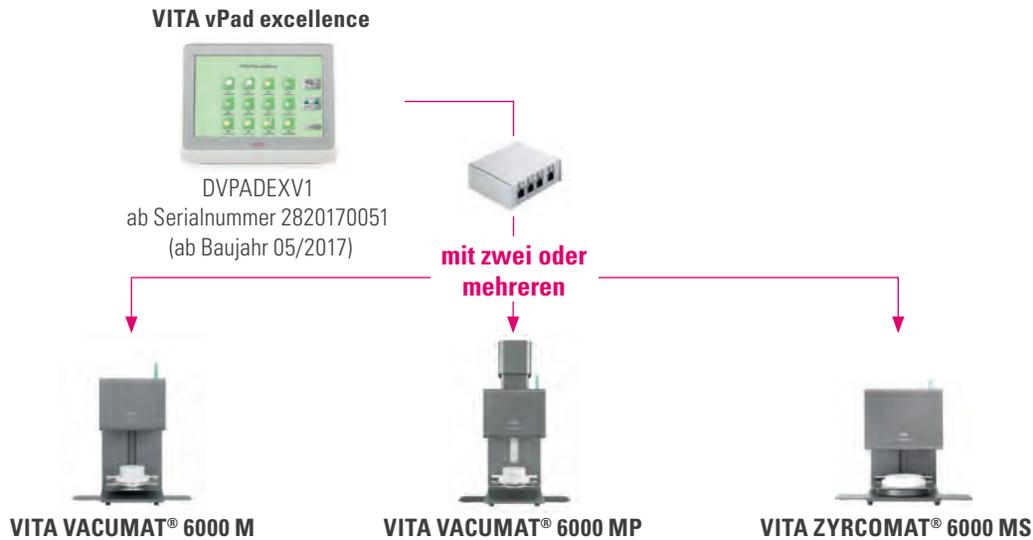

Mehrofen - Steuerung

In der Mehrofen-Steuerung (= **MIT VITA SWITCHBOX**, Art.-Nr. D47009) ist ein Injektorkabel (Art.-Nr. D63100) erforderlich.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence – Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor – SWITCHBOX)
4. Verbindungskabel (SWITCHBOX – Ofen)
5. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



1/6 = Einschalter / Ausschalter nur
für das vPad, Ofen wird über
Hauptschalter ein-/ausgeschaltet



Oberer Anschluss verwenden
(Brenngerät bis 04/2017)



Oberer Anschluss verwenden
(Brenngerät ab 05/2017)

VITA vPads mit 10,1"- Display + Brenngerät

(bis Baujahr 04/2017)

Zum Betrieb des

VITA vPad excellence



DVPADEXV1
ab Seriennummer 2820170051
(ab Baujahr 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADEV1
ab Seriennummer 3020180051
(ab Baujahr 08/2018)

mit einem



VITA VACUMAT® 6000 M
bis Seriennummer 1320178853
(bis Baujahr 04/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP
bis Seriennummer 1820172400
(bis Baujahr 04/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS
bis Seriennummer 2120170987
(bis Baujahr 04/2017)

Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb (= **OHNE VITA SWITCHBOX**) wird zwingend ein Power-Injektorkabel benötigt.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence - Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor - Ofen)
4. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel
(gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel
(blauer Punkt + Ring)



1/5 = Einschalter / Ausschalter nur
für das vPad, Ofen wird über
Hauptschalter ein-/ausgeschaltet



Oberer Anschluss verwenden
(Brenngerät bis 04/2017)

VITA