


VITA vPad con pantalla de 10,1" + aparato de cocción

(a partir del año de fabricación 05/2017)

Para la utilización del

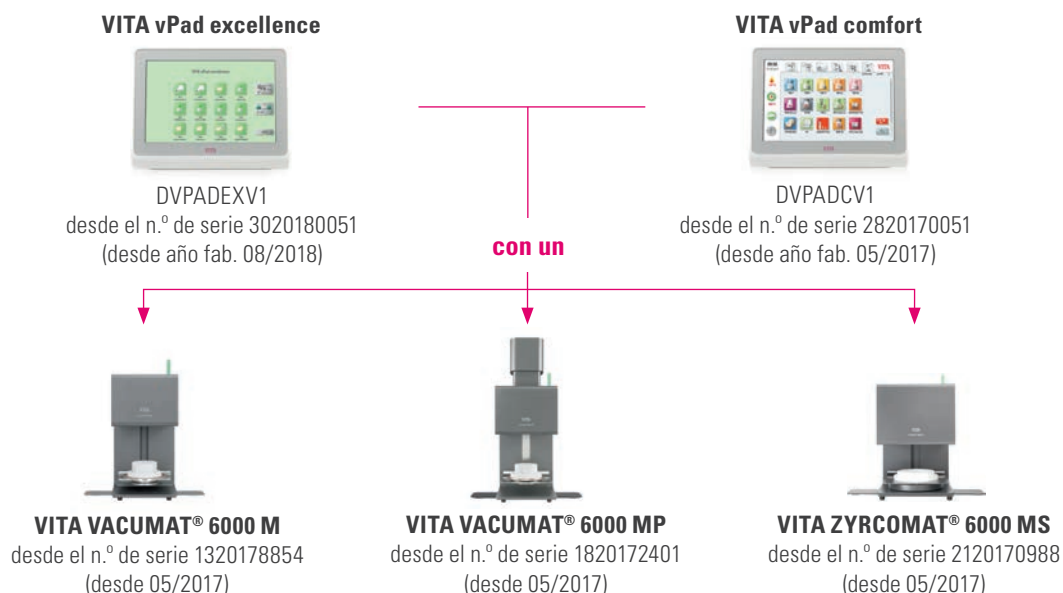

Funcionamiento independiente


Para el funcionamiento independiente (= **SIN VITA SWITCHBOX**) no se necesita un cable inyector de alimentación.

El vPad se conecta directamente al aparato de cocción.

Para la puesta en servicio se debe proceder de la siguiente manera:



El vPad se conecta directamente al aparato de cocción

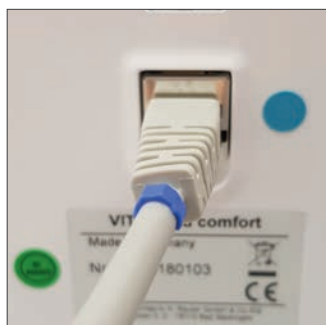

Nuevo vPad/cable de conexión
(punto + anillo azules)



Aparato de cocción/cable de conexión
(punto + anillo amarillos)




Utilizar la conexión inferior
(aparato de cocción a partir del año de fabricación 05/2017)

VITA vPad excellence con pantalla de 10,1" + VITA SWITCHBOX + aparatos de cocción

(todos los años de fabricación)

Para la utilización del

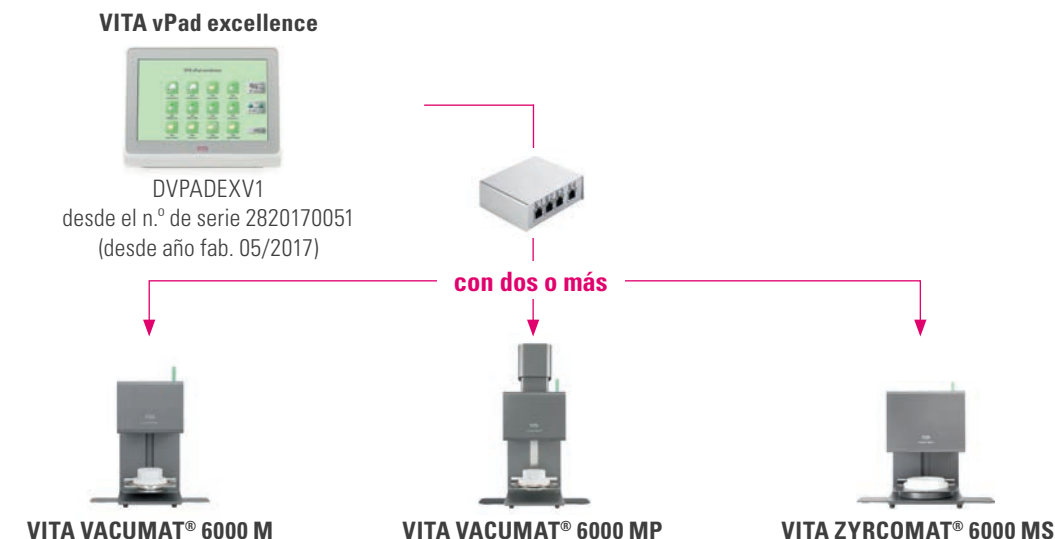

Control multihorno

Con dos o más aparatos de cocción de los modelos VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP y VITA ZYRCOMAT 6000 MS mediante una **VITA SWITCHBOX** (ref. D47009/control multihorno) se requiere un cable inyector (ref. D63100).

Para la puesta en servicio se debe proceder de la siguiente manera:



1. Inyector
2. Cabo de conexión (vPad excellence - inyector)
3. Cabo de conexión (inyector - SWITCHBOX)
4. Cable de conexión (SWITCHBOX - horno)
5. Adaptador de red



Inyector/cable de conexión
(punto + anillo amarillos)



Nuevo vPad/cable de conexión
(punto + anillo azules)



1/6 = Interruptor de encendido/apagado solo para el vPad; el horno se enciende/apaga mediante el interruptor principal



Utilizar la conexión superior
(fabricado hasta 04/2017)




Utilizar la conexión superior
(aparato de cocción a partir del año de fabricación 05/2017)

VITA vPad con pantalla de 10,1" + aparato de cocción

(hasta el año de fabricación 04/2017)

Para la utilización del

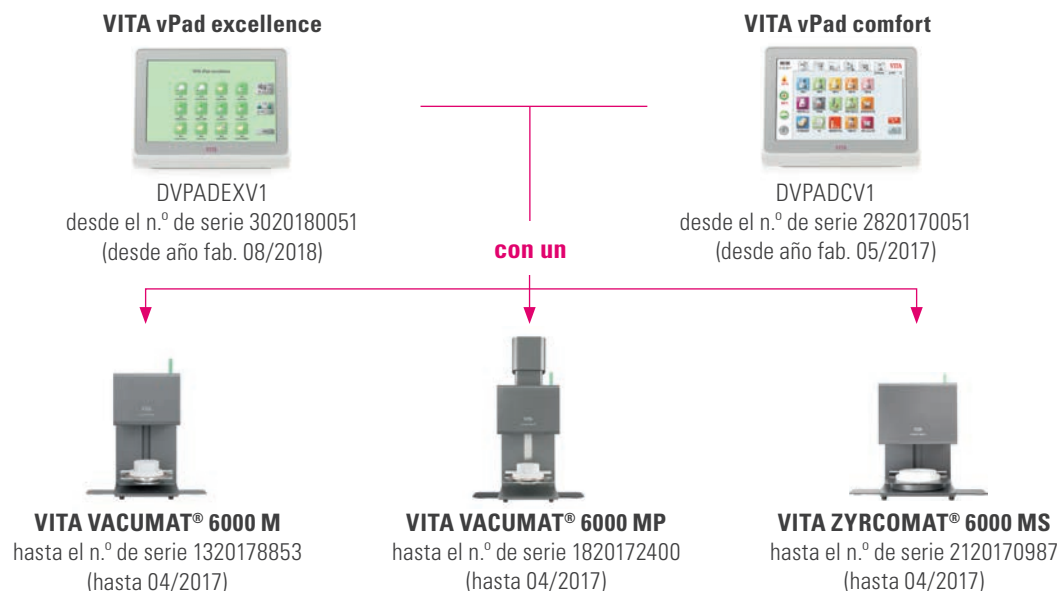

Funcionamiento independiente

Para el funcionamiento independiente (= **SIN VITA SWITCHBOX**) es imprescindible un cable inyector de alimentación.

Para la puesta en servicio se debe proceder de la siguiente manera:



1. Inyector
2. Cable de conexión (vPad excellence - inyector)
3. Cable de conexión (inyector - horno)
4. Adaptador de red



Inyector/cable de conexión
(punto + anillo amarillos)



Nuevo vPad/cable de conexión
(punto + anillo azules)



1/5 = Interruptor de encendido/apagado
solo para el vPad; el horno se
enciende/apaga mediante el
interruptor principal



Utilizar la conexión superior
(fabricado hasta 04/2017)

VITA