

vPad con display da 10,1" + forno

(dall'anno di costruzione 05/2017)

Per l'esercizio della

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

dal numero di matricola 2820170051
(dall'anno di costruzione 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

dal numero di matricola 3020180051
(dall'anno di costruzione 08/2018)

con un



VITA VACUMAT® 6000 M

dal numero di matricola 1320178854
(dal 05/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

dal numero di matricola 1820172401
(dal 05/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

dal numero di matricola 2120170988
(dal 05/2017)

Funzionamento singolo

Con funzionamento singolo (= **SENZA VITA SWITCHBOX**) non occorre cavo iniettore Power.

La vPad va collegata direttamente al forno.

Per la messa in funzione procedere come segue:



La vPad va collegata direttamente al forno



Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto blu + anello)



Forno/cavo di collegamento
(punto giallo + anello)



Usare l'attacco inferiore
(forno dal 05/2017)

VITA vPad excellence con display da 10,1" + VITA SWITCHBOX + forni

(tutti gli anni di costruzione)

Per l'esercizio della

VITA vPad excellence



DVPADEXV1
dal numero di matricola 2820170051
(dall'anno di costruzione 05/2017)



con due o più



VITA VACUMAT® 6000 M



VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS


Gestione forni multipli

Con due o più forni tramite (= **CON VITA SWITCHBOX**, cod. D47009) è necessario un cavo iniettore (cod. D63100).

Per la messa in funzione procedere come segue:



1. Iniettore
2. Cavo di collegamento (vPad excellence - Iniettore)
3. Cavo di collegamento (Iniettore - SWITCHBOX)
4. Cavo di collegamento (SWITCHBOX - forno)
5. Adattatore di rete

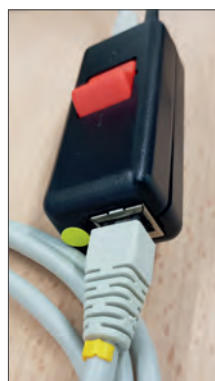

Iniettore/cavo di collegamento
(punto giallo + anello)



Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto blu + anello)



1/6 = Accensione/Spengimento solo per vPad, il forno viene acceso/spento tramite l'interruttore principale



Usare l'attacco superiore
(forno f no a 04/2017)



Usare l'attacco superiore
(forno dal 05/2017)

VITA vPad con display da 10,1" + forno

(f no all'anno di costruzione 04/2017)

Per l'esercizio della

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

dal numero di matricola 2820170051
(dall'anno di costruzione 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

dal numero di matricola 3020180051
(dall'anno di costruzione 08/2018)

con un



VITA VACUMAT® 6000 M

f no al numero di matricola 1320178853
(f no al 04/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

f no al numero di matricola 1820172400
(f no al 04/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

f no al numero di matricola 2120170987
(f no al 04/2017)

Funzionamento singolo

Con funzionamento singolo (= **SENZA VITA SWITCHBOX**) è tassativo l'uso di un cavo iniettore Power.

Per la messa in funzione procedere come segue:



1. Iniettore
2. Cavo di collegamento (vPad excellence - Iniettore)
3. Cavo di collegamento (Iniettore - forno)
4. Adattatore di rete



Iniettore/cavo di collegamento
(punto giallo + anello)



Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto blu + anello)



1/5 = Accensione/Spegnimento solo
per vPad, il forno viene acceso/
spento tramite l'interruttore
principale



Usare l'attacco superiore
(forno f no a 04/2017)

VITA