


# VITA vPad excellence avec écran 10,1" + boîtier de commutation + appareils de cuisson

(toutes les années de construction)

## Pour l'utilisation du

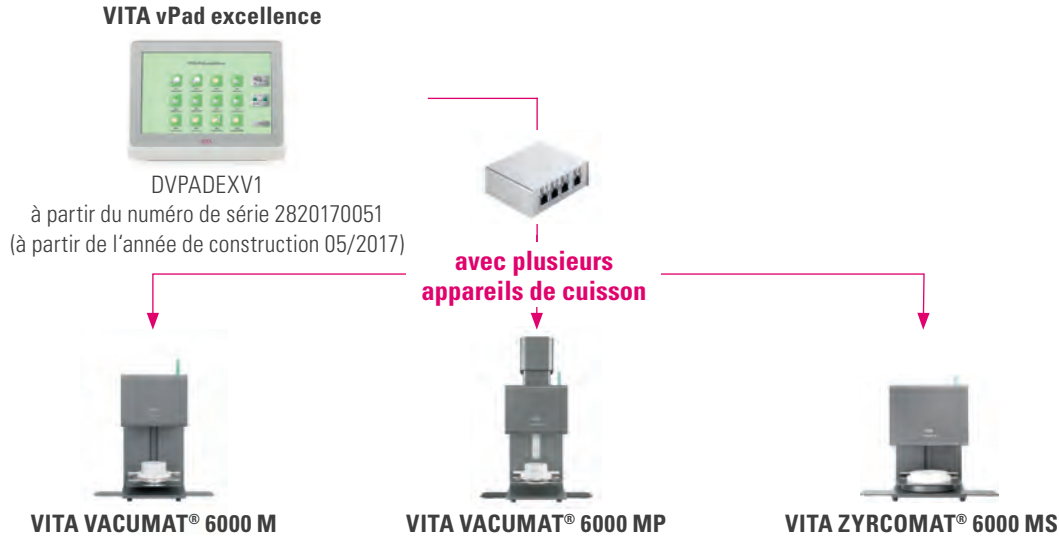

## Commande de plusieurs fours

Avec plusieurs appareils de cuisson (= **AVEC boîtier de commutation**) un câble injecteur (n° d'art. D63100) est nécessaire.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - Injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - boîtier de commutation)
4. Câble de connexion (boîtier de commutation - four)
5. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de raccordement  
(point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement  
(point bleu + anneau)



1/6 = Interrupteur marche/arrêt  
uniquement pour le vPad, le  
four est allumé/éteint via  
l'interrupteur principal



Utiliser le raccord du haut  
(appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)



Utiliser le raccord du haut  
(appareil de cuisson à partir du 05/2017)

**VITA**