

VITA AKZENT® Plus

Quick-Start Verarbeitungsanleitung – GLAZE/GLAZE LT



WAK-unabhängige Glasur und Keramikmalfarben
zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren.

VITA – perfect match.

VITA

> Facts & Features

VITA AKZENT Plus Malfarben und Glasuren sind:

- WAK-unabhängige Keramikmalfarben für alle gängigen Verblendkeramiken, monolithische Zirkon-, Silikat- oder Feldspatkeramiken
- zum Lasieren, Kolorieren und Glasieren
- zum Versiegeln der Keramikoberfläche

Mit VITA AKZENT Plus profitieren Sie von:

- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen
- Top-Verarbeitungseigenschaften, wie einfacher Applikation
- höchstethischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

SYSTEMKOMPONENTEN



>1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

➤ Einsatz von GLAZE/GLAZE LT



💡 Verarbeitungshinweis:

GLAZE-Auftrag

- das Pulver wird mit POWDER FLUID zu einer cremigen Konsistenz angerührt
- Glasurmasse gleichmäßig deckend mit einem Pinsel über die gesamte Oberfläche der Restauration ziehen
- die zu glasierende Krone auf den Brenngutträger geben
- Restauration mit Brenngutträger mittig im Ofen platzieren und mit entsprechendem Brennprogramm (abhängig vom Untergrundmaterial) brennen

📄 Empfohlene Brandführung

	Vt. °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp ca °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-

Für die Brandführung anderer Materialien gilt grundsätzlich die Regel:

Bei Brenntemperaturen ≤ 850 °C empfehlen wir die Verwendung von GLAZE LT, > 850 °C können alle Glasurmassen verwendet werden.

>2. Produktportfolio

EFFECT STAINS

- besonders chromatische und deckende Farben
- zur Reproduktion individueller Farbtöne und farblichen Angleichungen jeder natürlichen Farbcharakteristik
- dick aufgetragen decken sie die darunterliegende Basisfarbe vollständig ab

BODY STAINS

- lasierende, durchscheinende Massen, die wie ein dünner Farbfilter auf dem Basismaterial wirken
- Farbveränderungen und Farbverschiebungen in Richtung rötlich, gelblich, orange, bräunlich oder grau-grünlich

CHROMA STAINS

- lasierende Farben zur Veränderung der Chromazität des Basismaterials innerhalb einer Farbgruppe

GLAZE

- Glasurmasse für eine glänzende, glasartige, homogene und geschlossene Oberfläche nach dem Brand

GLAZE LT

- LT = Low Temperature: niederschmelzende Glasurmasse für keramische Werkstoffe mit Brenntemperaturen unter 800 °C

FINISHING AGENT

- für eine natürliche Oberflächentextur mit einem matten Glanz

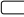











FLUOGLAZE LT SPRAY

- für eine natürliche Fluoreszenz und Glasur in einem Schritt






> 3. Verfügbare Farben

VITA AKZENT Plus

EFFECT STAINS

ES01		weiß	ES06		rostrot	ES11		blau
ES02		creme	ES07		khaki	ES12		grau-blau
ES03		zitronengelb	ES08		rosa	ES13		grau
ES04		sonnengelb	ES09		dunkelrot	ES14		schwarz
ES05		orange	ES10		lila			

BODY STAINS


BS01		gelb
BS02		gelb-braun
BS03		orange
BS04		olive-grau
BS05		grau-braun

CHROMA STAINS

VITA classical A1–D4

CSA		rötlich-bräunlich
CSB		rötlich-gelblich
CSC		gräulich
CSD		gräulich-rötlich

VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		gelblich
CSM2		gelblich-rötlich
CSM3		gelb-rot
CSR		rötlich
CSIO		orange

GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

> Hotline und Support

 **Wir helfen Ihnen gerne weiter**

► Technische Hotline

Bei technischen Fragen rund um die VITA Produktlösungen können Sie gerne unsere technischen Berater Herrn Ralf Mehlin oder Daniel Schneider kontaktieren.

Phone +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8.00 bis 17.00 Uhr CET

Mail info@vita-zahnfabrik.com

Weitere internationale Kontakte finden Sie unter
www.vita-zahnfabrik.com/contacts

► Online-Support

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen? Kompetente Antworten finden Sie online in Form von FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u.a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com