

VITA AKZENT® Plus

Mode d'emploi rapide – GLAZE/GLAZE LT



Glaçage et colorants céramiques non liés à un CDT pour le lasurage, le maquillage et le glaçage.

VITA – perfect match.

VITA

>Faits & caractéristiques


Les colorants et glaçures VITA AKZENT sont :

- des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en zirconium, silicate ou feldspathiques,
- pour le lasurage, le maquillage et le glaçage,
- pour le scellement des surfaces céramiques.

Avec VITA AKZENT Plus vos avantages sont les suivants :

- adaptation chromatique simple dans les groupes de couleurs correspondants,
- super propriétés de mise en œuvre, comme une application simple,
- résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

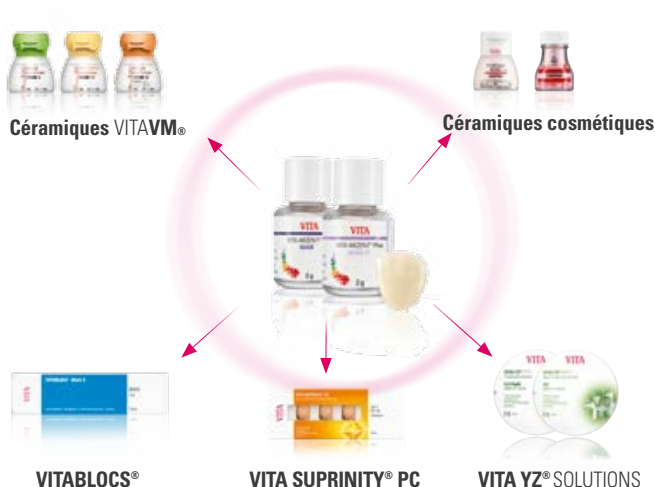

> 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

Utilisation de GLAZE/GLAZE LT



1



2

Conseil de mise en œuvre

Application de GLAZE

- Malaxer la poudre avec POWDER FLUID jusqu'à obtention d'une consistance crémeuse.
- Appliquer uniformément la glaçure avec un pinceau sur l'ensemble de la surface de la restauration.
- Placer la couronne à glacer sur le support de cuisson.
- Placer la restauration au milieu du support de cuisson et lancer le programme de cuisson approprié (selon le matériau de base).

Programme de cuisson conseillé

	Prés. °C	min	↗ min	↗ °C/min	Temp. env. °C	min	Vide min	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-

Pour la cuisson d'autres matériaux, la règle fondamentale suivante s'applique :
pour des températures de cuisson ≤ 850 °C, nous recommandons d'utiliser GLAZE LT,
> 850 °C, toutes les masses de glaçage peuvent être utilisées.

>2. Gamme de produits

EFFECT STAINS

- Couleurs particulièrement saturées et couvrantes pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une couleur naturelle particulière.
- En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base sous-jacente.

BODY STAINS

- Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le matériau de base.
- Variations chromatiques et écarts de teinte dans les tons rougeâtre, jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre.

CHROMA STAINS

- Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein d'un groupe de couleur.

GLAZE

- Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène et dense, après la cuisson.

GLAZE LT

- LT = Low Temperature : masse de glaçage basse fusion pour les matériaux céramiques dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C.

FINISHING AGENT

- Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat.


FLUOGLAZE LT SPRAY

- Pour une fluorescence naturelle et un glaçage en une étape.






> 3. Couleurs disponibles

VITA AKZENT Plus

EFFECT STAINS

ES01		blanc	ES06		rouille	ES11		bleu
ES02		crème	ES07		kaki	ES12		gris-bleu
ES03		jaune citron	ES08		rose	ES13		gris
ES04		jaune vif	ES09		rouge foncé	ES14		noir
ES05		orange	ES10		lilas			

BODY STAINS

BS01		jaune
BS02		brun-jaune
BS03		orange
BS04		gris-olive
BS05		brun-gris

CHROMA STAINS

VITA classical A1–D4

CSA		rougeâtre-brunâtre
CSB		jaunâtre-rougeâtre
CSC		grisâtre
CSD		grisâtre-rougeâtre

VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		jaunâtre
CSM2		jaunâtre-rougeâtre
CSM3		jaune-rouge
CSR		rougeâtre
CSIO		orange

GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

> Assistance téléphonique et support

 **Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire**

▶ Assistance technique en ligne

Pour toute question technique au sujet des produits VITA, vous pouvez contacter nos conseillers techniques, messieurs Ralf Mehlin ou Daniel Schneider.

Tél. +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

de 8 h à 17 h HEC

Courriel : info@vita-zahnfabrik.com

Vous trouverez les coordonnées d'autres contacts internationaux sur www.vita-zahnfabrik.com/contacts

▶ Assistance en ligne

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ? Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de FAQ, de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations entre autres, dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com