

VITA AKZENT® Plus

Istruzioni di impiego Quick-Start - GLAZE/GLAZE LT



Colori di caratterizzazione e glasura per ceramica,
indipendenti dal CET per lasura, accentuazione e glasatura.

VITA – perfect match.

VITA

> Fatti & Caratteristiche


Le masse di caratterizzazione e glasura VITA AKZENT Plus sono:

- supercolori indipendenti dal CET per tutte le ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche e feldspatiche
- per lasura, accentuazione e glasatura
- per sigillatura della superficie ceramica

I VITA AKZENT Plus offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di colore
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA

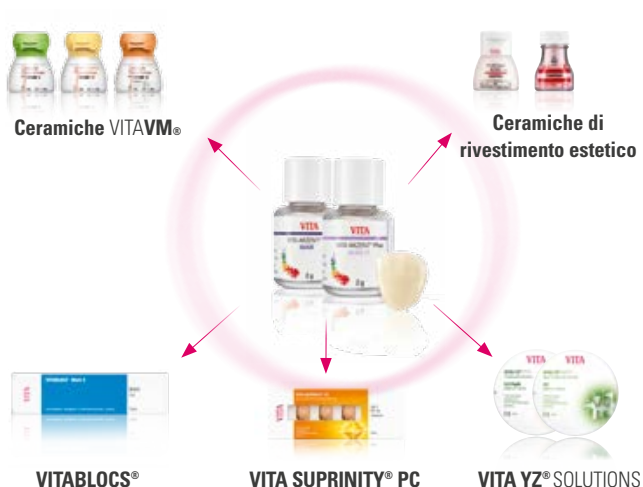

> 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

► Impiego di GLAZE/GLAZE LT



1



2

💡 Informazioni per la lavorazione:

Applicazione di GLAZE

- impastare la polvere con POWDER FLUID in consistenza cremosa.
- con un pennello stendere la massa glasura in strato uniforme su tutta la superficie del restauro.
- sistemare la corona da glasare sul supporto di cottura
- posizionare il restauro con il supporto di cottura al centro del forno ed eseguire il corrispondente programma di cottura (indipendentemente dal materiale strutturale)

📅 Cottura raccomandata

	Prees. °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. ca °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-

Per la cottura di altri materiali vale la seguente regola generale:

Con temperature di cottura ≤ 850 °C si raccomanda l'uso di GLAZE LT,
con temperature > 850°C si possono usare tutte le masse glasura.

>2. Portfolio prodotti

EFFECT STAINS

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

BODY STAINS

- masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

CHROMA STAINS

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

GLAZE

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

GLAZE LT

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C

FINISHING AGENT

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca


FLUOGLAZE LT SPRAY

- per una fluorescenza e glasura naturali in un unico step

> 3. Colori disponibili

VITA AKZENT Plus

EFFECT STAINS

ES01		bianco	ES06		rosso ruggine	ES11		blu
ES02		crema	ES07		cachi	ES12		grigio-blu
ES03		giallo limone	ES08		rosa	ES13		grigio
ES04		giallo sole	ES09		rosso scuro	ES14		nero
ES05		arancio	ES10		lilla			

BODY STAINS

BS01		giallo
BS02		giallo-marrone
BS03		arancio
BS04		oliva-grigio
BS05		grigio-marrone

CHROMA STAINS

VITA classical A1-D4

CSA		rossiccio-marrone
CSB		rossiccio-giallo
CSC		grigio
CSD		grigio-rosso

VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		tendente al giallo
CSM2		giallastro-rossiccio
CSM3		giallo-rosso
CSR		tendente al rosso
CSIO		arancio

GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

> Hotline e supporto



Siamo a vostra disposizione

▶ Hotline tecnica

Per domande tecniche sulle soluzioni di prodotto VITA potete contattare i nostri consulenti tecnici Ralf Mehlin o Daniel Schneider.

Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8.00 - 17.00

E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Per altri contatti internazionali consultarem

www.vita-zahnfabrik.com/contacts

▶ Supporto online

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto? Risposte competenti online in forma di FAQ, video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni e la lavorazione corretta consultare le istruzioni di impiego VITA AKZENT Plus.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com