

VITA

Determinación exacta del color.
Seguridad máxima.



VITA Easyshade® V

Determinación fiable del color en
dientes naturales, restauraciones
cerámicas y tratamientos de
blanqueamiento.





Determinación digital del color dental

VITA Easyshade® V

Determinación del color altamente precisa.
Reproducción del color segura

Una característica clave de la calidad de las restauraciones estéticas es la coincidencia entre el color de los dientes naturales y el de la restauración. El requisito para ello es la determinación y la reproducción exacta del color dental.

El **VITA Easyshade V** ayuda a odontólogos y protésicos tanto en la determinación como en la reproducción del color dental, y sus versátiles funciones brindan numerosas ventajas que contribuyen a la seguridad del proceso:

- Independencia respecto de las condiciones de iluminación, gracias a la medición del color espectrométrica.
- Determinación del color eficiente mediante una sola medición, en lugar de aproximación iterativa al color correcto.
- Gracias a los métodos de medición objetivos, puede ser utilizado incluso por personal odontológico inexperto o en caso de percepción deficiente del color.
- Representación de los resultados de medición mediante cuatro sistemas de colores distintos: VITA classical A1–D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA Bleachedguide 3D-MASTER® para colores de blanqueamiento, en tratamientos de blanqueamiento, coordenadas de color (valores LCh y Lab).
- Diferentes métodos de medición, como la determinación del color medio y la medición en tres puntos (cervical, central e incisal) para la asignación local del color dental.
- En combinación con VITA Assist und VITA mobileAssist +, comunicación y documentación simplificadas del color dental.

Exacto

Determinación del color sencilla y exacta en segundos. Proceso seguro y comunicación sencilla entre la clínica y el laboratorio.

Versátil

Puede utilizarse en dientes naturales y en restauraciones cerámicas. Eficiente para el asesoramiento y la monitorización de tratamientos de blanqueamiento.

Rentable

La determinación del color dental con VITA PERFECT MATCH ahorra tiempo y dinero y reduce las reclamaciones y los retoques.



“El VITA Easyshade V nos proporciona, a nosotros y a nuestros pacientes, seguridad en la determinación del color dental, también como control durante el seguimiento. Obtenemos resultados inequívocos, por ejemplo, también antes y después de tratamientos de blanqueamiento. Esto nos aporta un verdadero valor añadido en el día a día de la clínica.”

Dr. en Odontología Iris Kraljevic
Prophylaxe Zentrum Zürich, Suiza

Versátil.

¿Qué Easyshade se ajusta mejor a sus necesidades?

Mientras que el Easyshade V ofrece diversas posibilidades de medición que facilitan también la comunicación con el laboratorio, el Easyshade LITE se centra en el uso sin complicaciones exclusivamente en el diente natural.



Me gustaría...	VITA Easyshade® V	VITA Easyshade® LITE
... determinar con precisión el color de dientes naturales en la guía de colores VITA classical A1–D4 o VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... obtener información sobre desviaciones del color del diente medido respecto al valor cromático más cercano.	✓	✓
... disponer de un instrumento fiable para la monitorización y el asesoramiento en el curso de tratamientos de blanqueamiento, que permita transmitir fácilmente imágenes y datos de los pacientes.	✓	–
... recibir recomendaciones concretas para, dado el caso, conseguir una adaptación aún más exacta al color dental medido, p. ej., mediante la mezcla de colores (en el VITA SYSTEM 3D-MASTER).	✓	–
... determinar con precisión restauraciones en las guías de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	–
... utilizar el software VITA Assist y la aplicación VITA mobileAssist+ para la comunicación y documentación del color dental.	✓	–
... obtener una indicación de los valores Lab y LCh.	✓	–
Manejo	Botón de medición, pantalla táctil	Botón de medición
Servicio	Funcionamiento con batería (enchufe de red)	2 pilas AA



VITA Assist y VITA mobileAssist +

Comunicación y documentación profesionales del color dental para la clínica y el laboratorio


Con el software VITA Assist para PC basado en Windows, se pueden documentar y gestionar profesionalmente los diagnósticos odontológicos y la información sobre el color dental. VITA Assist permite integrar los resultados de medición del VITA Easyshade V en fotografías digitales del paciente y ofrece herramientas adicionales de edición de imágenes, así como diversas funciones de comentario. Mediante la base de datos se pueden gestionar los casos clínicos y se puede intercambiar información entre la clínica y el laboratorio de manera eficiente.



La práctica aplicación VITA mobileAssist + permite transmitir inalámbricamente los datos del VITA Easyshade V a la aplicación, combinarlos allí con una fotografía del paciente y enviarlos por correo electrónico. De este modo resulta posible enviar de manera móvil y cómoda, mediante el smartphone o la tableta, toda la información relevante sobre el color dental, así como fotografías del paciente.



Soluciones óptimas en el proceso.

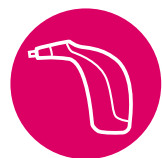

Determinación del color dental

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, guía de colores VITA classical A1–D4 con VITA Bleached Shades, VITA Bleachedguide 3D-MASTER, VITA Toothguide 3D-MASTER con Bleached Shades



CAD/CAM

VITABLOCS, VITA YZ, VITA ENAMIC, VITA SUPRINITY PC



Caracterización

Maquillajes/materiales de glaseado VITA AKZENT Plus, VITA AKZENT LC



Proceso de cocción

VITA VACUMAT 6100 M, VITA SMART.FIRE ADVANCED



Pulido

VITA CERAMICS Polishing Set / VITA Polish Cera Paste



Fijación

VITA ADIVA Solutions



Estaremos encantados de ayudarle.



Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839
Asistencia técnica EE. UU.: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778
Asistencia técnica Canadá: +1 800-324-6224

Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo al folleto de producto. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 2025-04. Con la publicación de este folleto de producto pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado: VITA Easyshade® V lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE. VITA Easyshade® LITE lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.


Referencias

Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Investigación y Desarrollo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)
Dra. Berit Gödiker, directora de proyectos de I+D de VITA, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen (Alemania)

Datos de ensayo detallados:

Véase la documentación científico-técnica de VITA Easyshade® V y VITA Easyshade® LITE
Descarga desde www.vita-zahnfabrik.com

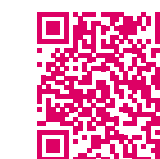

Para más información sobre VITA Easyshade® V, simplemente escanee el código QR.
www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHADE_V



VITA Easyshade® V

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

