

Einfache Ofensteuerung

Bild	Öfen	Seriennummer	 VITA vPad excellence (DVPADEXV1) Seriennummer > 2820170051	 VITA vPad comfort (DVPADCV1) Seriennummer > 3020180051
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ vPad Power-Injektorkabel (D63100) an das VITA vPad excellence und an die obere Netzwerkbuchse des Ofens anschließen.	✓ vPad Power-Injektorkabel (D63100) an das VITA vPad comfort und an die obere Netzwerkbuchse des Ofens anschließen.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ VITA vPad excellence an die untere Netzwerkbuchse des Ofens anschließen.	✓ VITA vPad comfort an die untere Netzwerkbuchse des Ofens anschließen.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✓	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		

Mehrfache Ofensteuerung






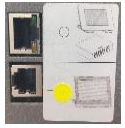
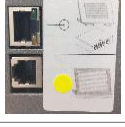


(Geräte mit Baujahr vor 2017 und nach 2017 nicht gemischt)



VITA vPad excellence
(DVPADEXV1)
Seriennummer > 2820170051



VITA vPad comfort
(DVPADCV1)
Seriennummer > 3020180051

Bild	Öfen	Seriennummer	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ VITA vPad excellence an VITA SWITCHBOX I anschließen.	✓ VITA vPad excellence an VITA SWITCHBOX II anschließen.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ VITA vPad excellence an VITA SWITCHBOX I anschließen. VITA SWITCHBOX I an die obere Netzwerkbuchse des Ofens anschließen. Power Injektorkabel (D63100) an VITA SWITCHBOX I anschließen.	✓ VITA vPad excellence an VITA SWITCHBOX II anschließen.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* Gerät am Port 1 muss immer eingeschaltet sein.

Gemischte Mehrofensteuerung

(Geräte mit Baujahr vor und nach 2017 gemischt)



VITA vPad excellence
(DVPADXV1)
Seriennummer < 2820170051



VITA vPad comfort
(DVPADCV1)
Seriennummer < 3020180051



VITA vPad excellence
(DVPADXV1)
Seriennummer > 2820170051



VITA vPad comfort
(DVPADCV1)
Seriennummer > 3020180051

Bild	Öfen	Seriennummer	VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400									
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401									
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400									
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049									
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	VITA VACUMAT 6100 MP (DV6100MPxxx)	> 3120190049									
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049									
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049									

* Gerät am Port 1 muss immer eingeschaltet sein.