


VITA vPad con display da 10,1" + forno

(fino all'anno di costruzione 04/2017)

Per l'esercizio della

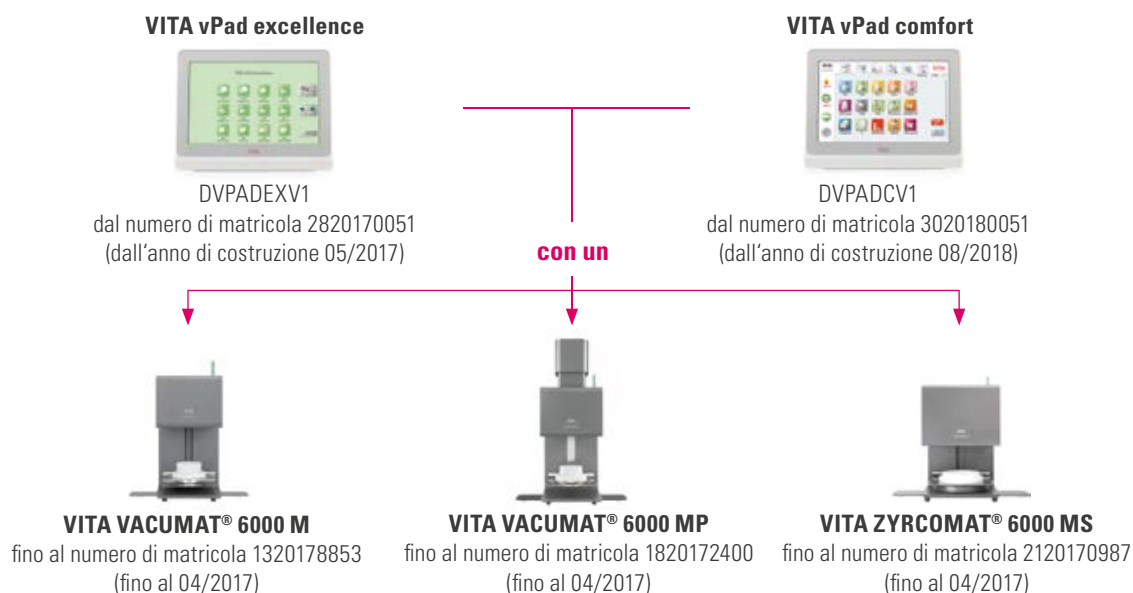

Funzionamento singolo

Con funzionamento singolo (= **SENZA VITA SWITCHBOX**) è tassativo l'uso di un cavo iniettore Power.

Per la messa in funzione procedere come segue:




1. Iniettore
2. Cavo di collegamento (vPad excellence - Iniettore)
3. Cavo di collegamento (Iniettore - forno)
4. Adattatore di rete



Iniettore/cavo di collegamento
(punto + anello giallo)



Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto + anello blu)

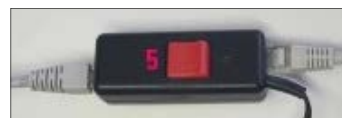

1/5 = Accensione/Spegnimento solo per vPad, il forno viene acceso/spento tramite l'interruttore principale




Usare l'attacco superiore
(forno fino al 04/2017)

VITA vPad excellence con display da 10,1" + VITA SWITCHBOX + forni

(tutti gli anni di costruzione)

Per l'esercizio della

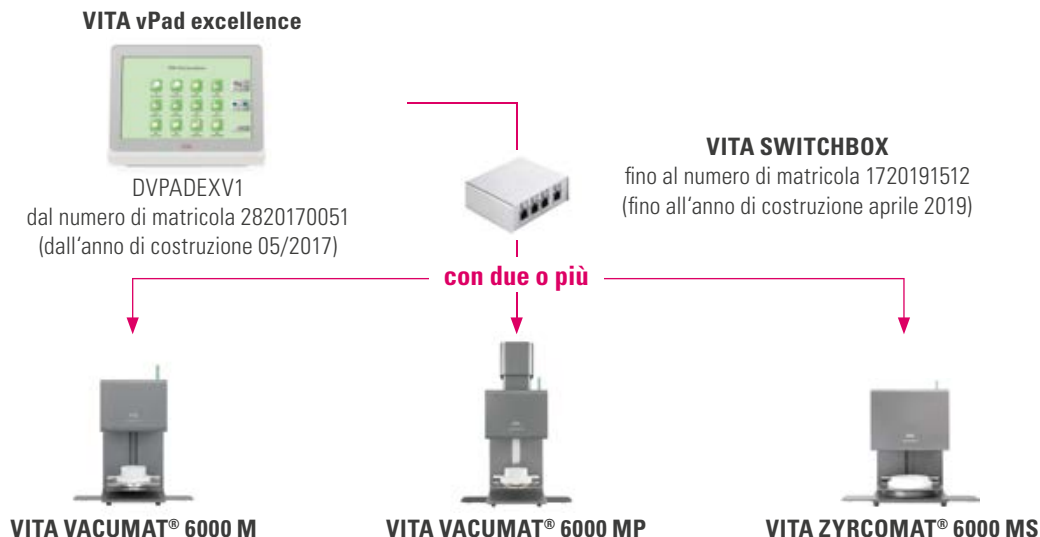

Gestione forni multipli

Con due o più forni (= **CON VITA SWITCHBOX**, cod. D47009) è necessario un cavo iniettore (cod. D63100). Tuttavia la VITA SWITCHBOX (cod. D47009, fino al numero di matricola 1720191512) non è compatibile con un VITA ZYRCOMAT 6100 MS! In questo caso serve la VITA SWITCHBOX II (cod. D65000, numero di matricola dal 3220190050).

Per la messa in funzione procedere come segue:



1. Iniettore
2. Cavo di collegamento (vPad excellence - Iniettore)
3. Cavo di collegamento (Iniettore - SWITCHBOX)
4. Cavo di collegamento (SWITCHBOX - forno)
5. Adattatore di rete



Iniettore/cavo di collegamento (punto + anello giallo)



Nuova vPad/cavo di collegamento (punto + anello blu)



1/6 = Accensione/Spegnimento solo per vPad, il forno viene acceso/spento tramite l'interruttore principale



Usare l'attacco superiore (forno fino al 04/2017)



Usare l'attacco superiore (forno dal 05/2017)

VITA vPad con display da 10,1" + forno

(dall'anno di costruzione 05/2017)

Per l'esercizio della

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

dal numero di matricola 2820170051
(dall'anno di costruzione 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

dal numero di matricola 3020180051
(dall'anno di costruzione 08/2018)

con un



VITA VACUMAT® 6000 M

dal numero di matricola 1320178854
(dal 05/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

dal numero di matricola 1820172401
(dal 05/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

dal numero di matricola 2120170988
(dall'anno di costruzione 05/2017)

&

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS

Indipendente dal numero di matricola

Funzionamento singolo


Con funzionamento singolo (= **SENZA VITA SWITCHBOX**) non occorre cavo iniettore Power.

La vPad va collegata direttamente al forno.

Per la messa in funzione procedere come segue:



La vPad va collegata direttamente al forno

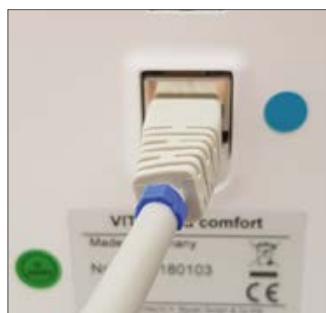

Nuova vPad/cavo di collegamento
(punto + anello blu)



Forno/cavo di collegamento
(punto + anello giallo)




Usare l'attacco inferiore
(forno dal 05/2017)

VITA vPad excellence con display da 10,1" + VITA SWITCHBOX II + forni

(dall'anno di costruzione 05/2017)

Per l'esercizio della

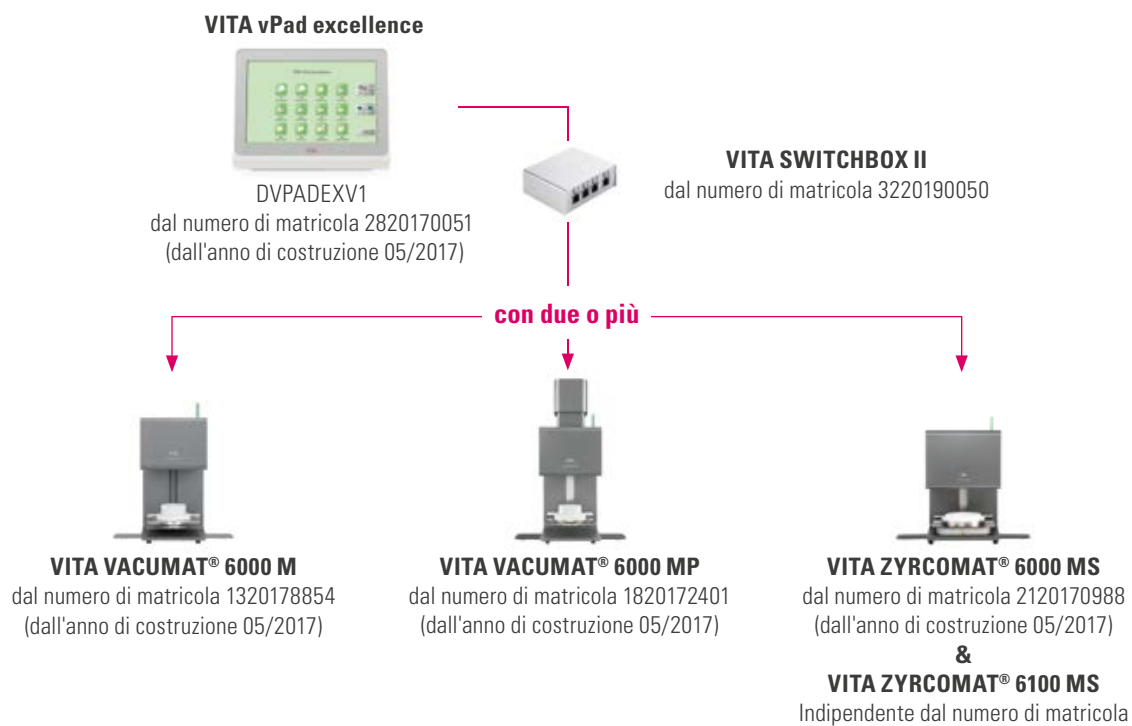

Gestione forni multipli

Per la gestione forni multipli (= **CON VITA SWITCHBOX II**, cod. D65000, dal nr. di matricola 3220190050) **non occorre cavo-iniettore.**

Per la messa in funzione in combinazione con una VITA SWITCHBOX II, procedere come segue:



1. Cavo di collegamento (vPad excellence – SWITCHBOX II)
2. Cavo di collegamento (SWITCHBOX II – forno)
3. Cavo di collegamento (SWITCHBOX II – forno)

Esempio:


L'utilizzatore possiede i seguenti apparecchi VITA:

- **VITA VACUMAT® 6000 M** (fino al numero di matricola 1320178853, fino all'anno di costruzione 04/2017)
- **VITA vPad excellence** (dal numero di serie 2820170051, dall'anno di costruzione 05/2017)
- Cavo-iniettore VITA (cod. D63100)

Amplia il sistema di forni VITA con i seguenti apparecchi:

- **VITA VACUMAT® 6000 M** (dal numero di matricola 1320178854, dall'anno di costruzione 05/2017)
- **VITA SWITCHBOX II** (cod. D65000, dal numero di matricola 3220190050)

Rappresentazione grafica:

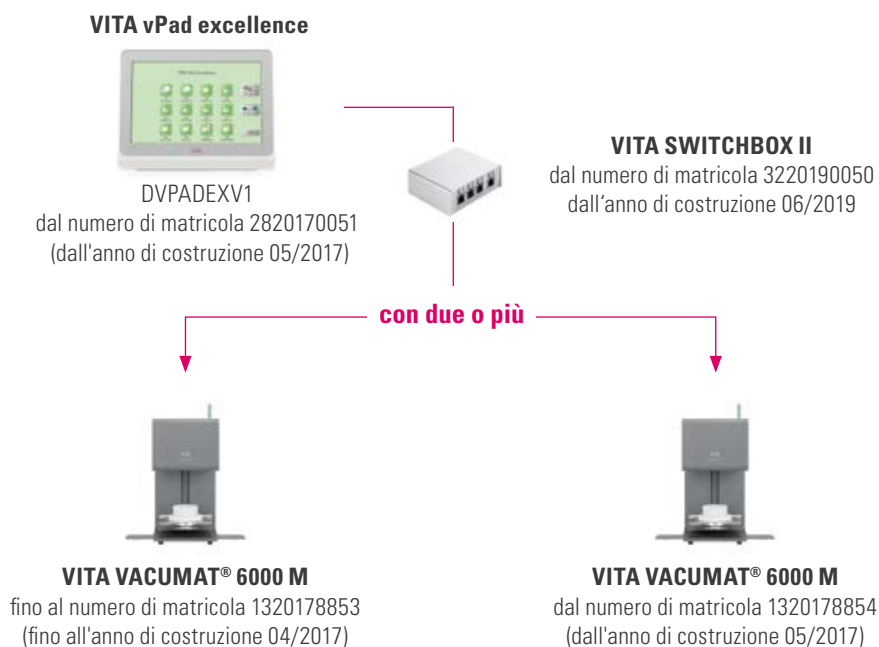

Gestione forni multipli

Per la gestione forni multipli (= con **VITA SWITCHBOX II**, cod D65000, dal nr. di matricola 3220190050) **non occorre cavo-iniettore**, quando il „forno nuovo“ VITA VACUMAT 6000 M (dal numero di matricola 1320178854, dall'anno di costruzione 05/2017) viene collegato in posizione 1. Ciò significa che la necessità di un cavo-iniettore dipende dal forno in combinazione con la VITA SWITCHBOX II, che si trova in posizione 1.



Per la messa in funzione in combinazione con una VITA SWITCHBOX II, procedere come segue:



1. VITA vPad excellence (dal numero di matricola 2820170051)
2. VITA VACUMAT 6000 M (dal numero di matricola 1320178854)
3. VITA VACUMAT 6000 M (fino al numero di matricola 1320178853)

Per ulteriori informazioni su VITA Zahnfabrik consultare:
www.vita-zahnfabrik.com



Attenzione: i nostri prodotti vanno utilizzati secondo le informazioni per l'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 08.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA vPad excellence e **VITA vPad comfort** sono marcate CE in conformità alla Direttiva CE sui Dispositivi Medici 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germania
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik