

VITA AKZENT® Plus

Termékismertető



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2019.11.

VITA – perfect match.

VITA

Optimális. Egyszerű. Komplettn.
Lazúrozás, markírozás és fényezés – függetlenül
a hőtágulási együtthatótól (WAK)

VITA AKZENT® Plus **Optimális. Egyszerű. Komplet.**



Több játéktér praxisban és laborban

Egyszerűen és hatékonyan szeretne lazúrozni, színezni és fényezni? Akkor VITA AKZENT Plus az Ön szortimentje.

A lazúrozó, markírozó és fényező festékekből álló rendszer a lehető legnagyobb játékteret biztosítja a praxisokban és laborokban.

Alkalmas valamennyi fogászati kerámia anyaghoz és minden WAK értékhez.

Új színek, új alkalmazási formák, új indikációk – VITA AKZENT Plus mindig szabad kezet biztosít Önnek.

Lehet por, paszta vagy spray, Ön döntheti el, hogyan használná a legszívesebben és leggazdaságosabban VITA AKZENT Plus anyagot.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Gombnyomásra egyenletes



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75ml
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Tartozék		



Különösen jól használhatók olyan laborokban és praxisokban, ahol pl. monolit fogpótlásokat akarnak színben összehangolni. A szórható glazúr és lazúr festékek felhasználásra készek és könnyen felhordhatók.

A FLUOGLAZE LT egy erősen fluoreszcens glazúr-spray, amellyel természetes fluoreszcencia érhető el.

Előnyök:

- egyszerű és egyenletes felületkezelést biztosító egyenletes felhordás
- szórási veszteség nélküli célzott felhordás új, speciális szórófej segítségével



VITA AKZENT® Plus POWDER egyesíti a rugalmasságot és az egyediséget a gazdaságossággal



AKZENT Plus POWDER KIT Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Tartozék		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4 Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



A VITA AKZENT Plus POWDER masszákat jól alkalmazhatják azok a fogtechnikusok, akik ezzel szeretnék a klasszikus leplező kerámiákat és a finomszerkezetű VITA PM 9 földpát kerámiát karakterizálni.

Előnyök:

- rugalmassága és gazdaságossága korlátlan
- egymással tetszés szerint keverhetők további egyedi színhatások elérése céljából
- színhatás, színtelítettség és színintenzitás gyors és egyszerű beállítása



VITA AKZENT® Plus PASTE Gyorsan egyedít



AKZENT Plus PASTE KIT Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Tartozék		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CS10	5 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4 Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



A VITA AKZENT Plus PASTE színező festékek optimálisan alkalmazhatók pl. VITABLOCS-ból készült fogpótlások gyors és egyszerű karakterizálására.

Előnyök:



- Felhasználásra kész paszta, melynek konzisztenciája állandó, és homogén a pigmentációja a gyors felhasználás érdekében
- egymással keverhetők az egyedi színhatások elérése céljából
- hígítható ill. újra összekeverhető
- színhatás, színtelítettség és színintenzitás gyors és egyszerű beállítása



A VITA AKZENT Plus PASTE FLUID gondoskodik az optimális konzisztenciáról, ha a paszták be- ill. kiszáradnak.



AKZENT Plus színválaszték Szortiment						
Termék	Szín- minta	Szín	Kód- szám	Készítményforma		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – transzlucens, lazúrozó színezők – bázisanyag színhatásának módosításához		Sárga	BS01	✓	✓	✓
		Sárgásbarna	BS02			
		Narancs	BS03			
		Olívszürke	BS04			
		Szürkésbarna	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – lazúrozó színezők a bázisanyag kromacitásának módosításához egy színcsoporton belül		vöröses-barnás	CSA		✓	✓
		vöröses-sárgás	CSB			
		szürkés	CSC			
		szürkés-vöröses	CSD			
CHROMA STAINS 3D-MASTER – lazúrozó színezők a bázisanyag kromacitásának módosításához egy világossági csoporton belül		sárgás	CSL		✓	✓
		sárgás-vöröses	CSM2			
		sárga-vörös	CSM3			
		vöröses	CSR			
		narancs	CSIO			
EFFECT STAINS – nagyon jó fedő, markírozó festékanyagok – természetes felületi effektekhez – rétegezés közbeni színezéshez		Fehér	ES01			
		Krémszín	ES02			
		Citromsárga	ES03			
		Napsárga	ES04			
		Narancs	ES05			
		Rozsdavörös	ES06			
		Khaki	ES07			
		Rózsaszín	ES08			
		Sötétvörös	ES09			
		Lila	ES10			
		Kék	ES11			
		Szürkéskék	ES12			
		Szürke	ES13			
		Fekete	ES14			
GLAZE – homogén, csillogó felületekhez				✓	✓	✓
GLAZE LT – alacsony olvadáspontú glazúrmassza kerámiákhoz, 800°C alatti kiégetéssel				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – selymes matt felületekhez					✓	✓

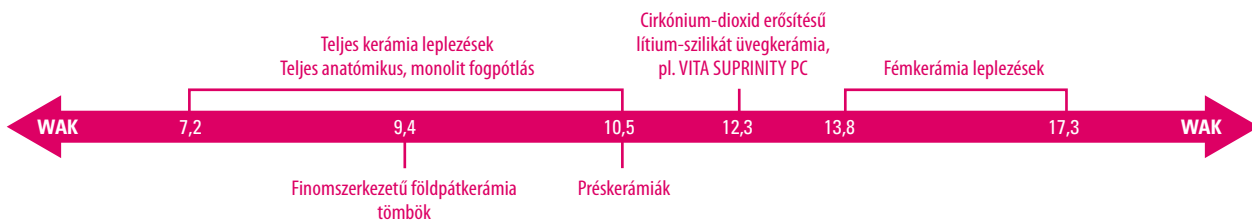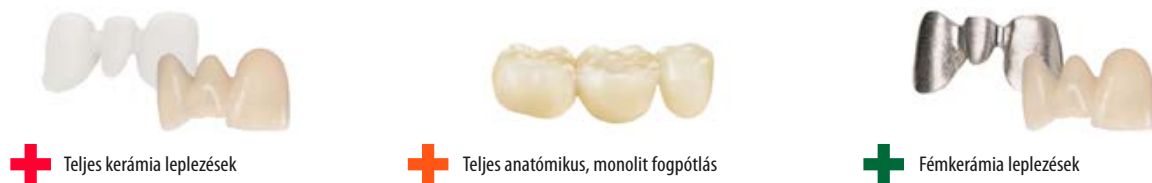

+ Sokoldalú felhasználás

Lazúrozás

Új a rendszerben: lazúrozó színezők (Body Stains).
 A transzlucens színező festékek vékony színszűrőként hatnak.
 Ezáltal kiválóan alkalmasak:

- Felület bevonására
- Bázisanyag színhatásának módosításához

Markírozás

Rendkívül finoman szemcsézett: markírozó színezők (Effect Stains).
 Ezeknek a színezőknek főbb jellemzői elsősorban:

- az intenzív színhatás és
- a magas fedőerő

Ezért különösen jól alkalmazhatók természetes felületi effektek kialakítására és belső színezésre.

Fényezés


A fényes végeredményhez:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – glazúrmassza a fényesen csillogó, homogén és üvegszerű felület eléréséhez
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – alacsony olvadáspontú glazúrmassza kerámiákhoz, 800°C alatti kiégetéssel
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – lazúrmassza selymes matt leplező felületekhez
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – erősen fluoreszcens glazúr-spray a természetes fluoreszcencia kialakításához

+ Feldolgozás még kényelmesebben

Valamennyi színező festék fluoreszcens, rendkívül finoman szemcsézett és színtabil.
 A porok és paszták tixotróp konzisztenciája kedvezően befolyásolja az adott massa felhordását.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében reprodukálható.

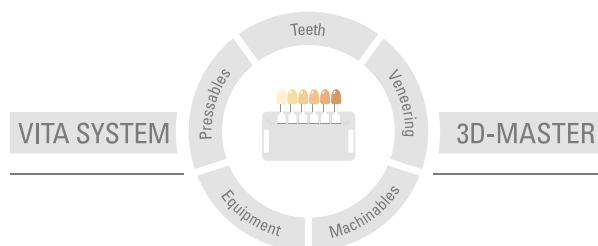

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2019.11

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a **CE 0124** jelzést:
VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik