

# VITA AKZENT® Plus

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 11.19

VITA – perfect match.

**VITA**

Ottimizzato. Semplice. Completo.

Lasura, accentuazione e glasatura – indipendentemente dal coefficiente di espansione termica (CET)

VITA AKZENT® Plus Ottimizzato. Semplice. Completo.



### **Maggiore libertà in studio e laboratorio**

Volete eseguire velature, accentuazioni e glasature in modo semplice ed efficace? Allora VITA AKZENT Plus è il vostro assortimento.

Il sistema di colori per tutte le indicazioni di lasura, accentuazione e glasatura in studio e laboratorio.

E' indicato per tutti i materiali ceramici dentali e per tutti i CET.

Nuovi colori, nuove modalità applicative, nuove indicazioni – VITA AKZENT Plus vi lascia sempre mano libera.

Che si tratti di polvere, pasta o spray, decidete voi come utilizzare VITA AKZENT Plus nel modo più efficiente.

## VITA AKZENT® Plus SPRAY Uniformità con la sola pressione di un pulsante



### AKZENT Plus SPRAY KIT

Assortimento

Prodotto	Colore	Contenuto
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75 ml
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
Accessori		



Particolarmente indicato per gli utilizzatori in studio e laboratorio che ad es. desiderano adattare cromaticamente restauri monolitici.

La glasura ed i supercolori per lasura in spray sono pronti per l'uso e di facile applicazione.

FLUOGLAZE LT é uno spray glasura altamente fluorescente per una fluorescenza naturale.

#### Vantaggi:

- applicazione uniforme per un trattamento superficiale semplice e omogeneo
- nebulizzazione mirata senza dispersioni grazie alla nuova, speciale testina nebulizzatrice



## VITA AKZENT® Plus POWDER **combina flessibilità, individualità ed economia**



<b>AKZENT Plus POWDER KIT</b>		
Assortimento		
Prodotto	Colore	Contenuto
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Accessori		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master</b>		
Assortimento		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4</b>		
Assortimento		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Le masse VITA AKZENT Plus POWDER sono indicate per odontotecnici, che desiderano caratterizzare le classiche ceramiche per rivestimento estetico e la ceramica feldspatica a struttura microfine VITA PM 9.

### **Vantaggi:**

- flessibilità ed economia illimitate
- miscelabili tra loro per realizzare ulteriori effetti cromatici individuali
- adattamento semplice e veloce di effetto cromatico, cromaticità e intensità cromatica



## VITA AKZENT® Plus PASTE Individualizzazione rapida



<b>AKZENT Plus PASTE KIT</b>		
Assortimento		
Prodotto	Colore	Contenuto
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Accessori		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master</b>		
Assortimento		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4</b>		
Assortimento		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



I supercolori VITA AKZENT Plus PASTE sono perfetti per la caratterizzazione rapida e semplice di restauri, ad es. in VITABLOCKS.

### Vantaggi:

- paste pronte per l'uso di consistenza costante e pigmentazione omogenea per applicazione rapida
- miscelabili tra loro per realizzare effetti cromatici individuali
- diluibili e nuovamente miscelabili
- adattamento semplice e veloce di effetto cromatico, cromaticità e intensità cromatica



VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assicura una consistenza ottimale, nel caso le paste si fossero essiccate.




AKZENT Plus Colori al mondo						
Prodotto	Campioni colore	Colore	Sigla	Presentazione		
				Spray	Powder	Paste
<b>BODY STAINS</b> – colori traslucenti, per velatura – per modificare l'effetto cromatico del materiale base		giallo	BS01	✓	✓	✓
		giallo-marrone	BS02			
		arancio	BS03			
		oliva-grigio	BS04			
		giallo-marrone	BS05			
<b>CHROMA STAINS classical A1–D4</b> – colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori		rossiccio-marrone	CSA		✓	✓
		rossiccio-giallo	CSB			
		grigio	CSC			
		grigio-rosso	CSD			
<b>CHROMA STAINS 3D-MASTER</b> – colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un livello di luminosità		tendente al giallo	CSL		✓	✓
		giallastro-rossiccio	CSM2			
		giallo-rosso	CSM3			
		tendente al rosso	CSR			
		arancio	CSIO			
<b>EFFECT STAINS</b> – colori di accentuazione, ad elevato effetto coprente – per effetti naturali di superficie – per coloritura in fase di stratificazione		bianco	ES01			
		crema	ES02			
		giallo limone	ES03			
		giallo sole	ES04			
		arancio	ES05			
		rosso ruggine	ES06			
		cachi	ES07			
		rosa	ES08			
		rosso scuro	ES09			
		lilla	ES10			
		blu	ES11			
		grigio-blu	ES12			
		grigio	ES13			
		nero	ES14			
<b>GLAZE</b> – per superfici lucenti, omogenee				✓	✓	✓
<b>GLAZE LT</b> – massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800°C				✓	✓	✓
<b>FINISHING AGENT</b> – per superfici setose-opache					✓	✓



**+** Ceramica integrale

**+** Restauri monolitici, completamente anatomici

**+** Metallo-ceramica

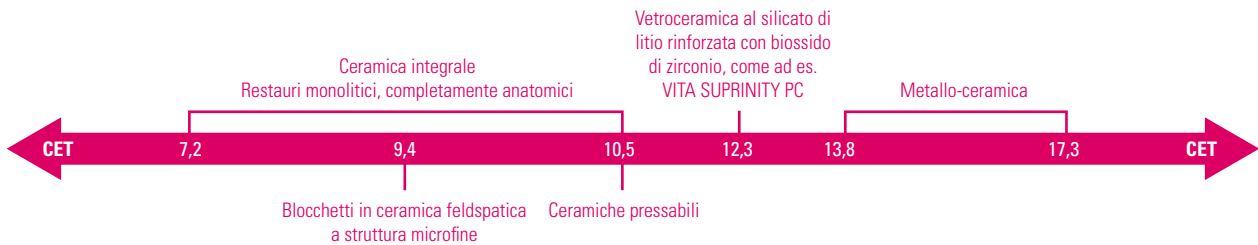

**+** Blocchetti in ceramica feldspatica a struttura microfine



**+** Ceramiche pressabili

## **+** Plus di versatilità

### Lasura

Novità nel sistema: supercolori di lasura (Body Stains).  
 I colori traslucenti agiscono come un sottile filtro cromatico.  
 Quindi eccellenti per:

- pittura superficiale
- modificare l'effetto cromatico del materiale base

### Accentuazione

A granulometria particolarmente fine: supercolori di accentuazione (Effect Stains).  
 Questi colori si distinguono in particolare per:

- intensa azione cromatica e
- elevata capacità coprente

Si utilizzano pertanto per apportare effetti superficiali naturali e coloriture interne.

### Glasatura


Per un finish brillante:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – massa glasura per superfici lucenti, omogenee e simili al vetro
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800°C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – massa lasura per superfici setose-opache
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – glasura spray altamente fluorescente per una fluorescenza naturale

## **+** Plus per semplicità di lavorazione

Tutti i colori di caratterizzazione sono fluorescenti, a granulometria straordinariamente fine e cromaticamente stabili. La consistenza tissotropica di polvere e paste favorisce inoltre l'applicazione precisa delle singole masse.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

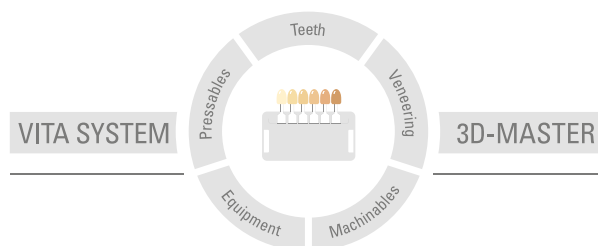

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 11.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE 0124**.  
VITA AKZENT® Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)