

VITA

Εύκολο.
Όπως πρέπει.



VITA MFT®

Εντυπωσιακή αποδοτικότητα και
πειστική ποιότητα:
Το βιομηχανικής παραγωγής
δόντι της VITA με Easy Centric.





Τα πλεονεκτήματα

Εξοικονόμηση χρόνου

Απλή και αποδοτική κατασκευή χάρη στη βασική αρχή VITA Easy Centric. Κατάλληλο για όλα τα συνήθη συστήματα σύνταξης.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Πολυλειτουργικό, οικονομικά αποδοτικό δόντι βιομηχανικής παραγωγής σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων. Διατίθεται σε 16 χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER και 16 χρώματα VITA classical A1-D4.

Χωρίς προβλήματα

Αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα πειστικής ποιότητας όχι μόνο για εσάς το χρήστη, αλλά και για τους ασθενείς σας.

Προσθετικό δόντι

VITA MFT®

Εξοικονομεί χρόνο. Εξοικονομεί χρήματα. Χωρίς προβλήματα.

Απλή τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σημείο χάρη στα προκαθορισμένα σημεία επαφής.

Το VITA MFT (Multi Functional Tooth) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές περιπτώσεις – για τη μερική και την ολική προσθετική, καθώς και για υβριδικές και εμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Επειδή η μασητική επιφάνεια είναι διαμορφωμένη πολυλειτουργικά, η γραμμή των δοντιών ενδείκνυται για όλα τα συνήθη συστήματα σύνταξης. Χάρη στο VITA Easy Centric, το VITA MFT προσαρμόζεται σχεδόν αυτόματα εξοικονομώντας έτσι χρόνο και κόπο.



Απλή σύνταξη. Εκαιρετική αισθητική.

Floidi Endrio, οδοντοτεχνίτης, Ιταλία:
«Ως δόντι αυτής της κατηγορίας τιμών δεν εντυπωσιάζει απλώς με την ποιότητα και την αισθητική του, αλλά ιδίως με τον απλό χειρισμό.»

Οικονομική αποδοτικότητα και αισθητική

Susana García, οδοντοτεχνίτης, Ισπανία:
«Η απλή σύνταξη καθιστά αυτό το δόντι μοναδικό στον τομέα του. Οικονομική αποδοτικότητα και αισθητική – το VITA MFT παρέχει και τα δύο.»




Απλά στη χρήση. Ακριβώς στη σωστή θέση.

Η βασική αρχή VITA Easy Centric για τη γρήγορη ροή εργασιών

Το προσθετικό δόντι VITA MFT με τη βασική αρχή Easy Centric παρέχει αποδοτική σύνταξη με όλα τα συνήθη συστήματα.

- **απλή σύνταξη με υψηλή ασφάλεια σύνταξης**
χάρη στα προκαθορισμένα σημεία επαφής και της αυτόματη εύρεση της κεντραρισμένης θέσης
- **περιορισμός των εργασιών τροχίσματος**
χάρη στη βελτιστοποιημένη διαμόρφωση της βάσης
- **αξιόπιστη χρήση για όλα τα προσθετικά συστήματα**
χάρη στην πολυλειτουργική διαμόρφωση των μασητικών επιφανειών.
Δυνατότητα χρήσης, π.χ., κατά τον καθηγ. δρ. A. Gerber, APF/TiF, Gysi και ABC.

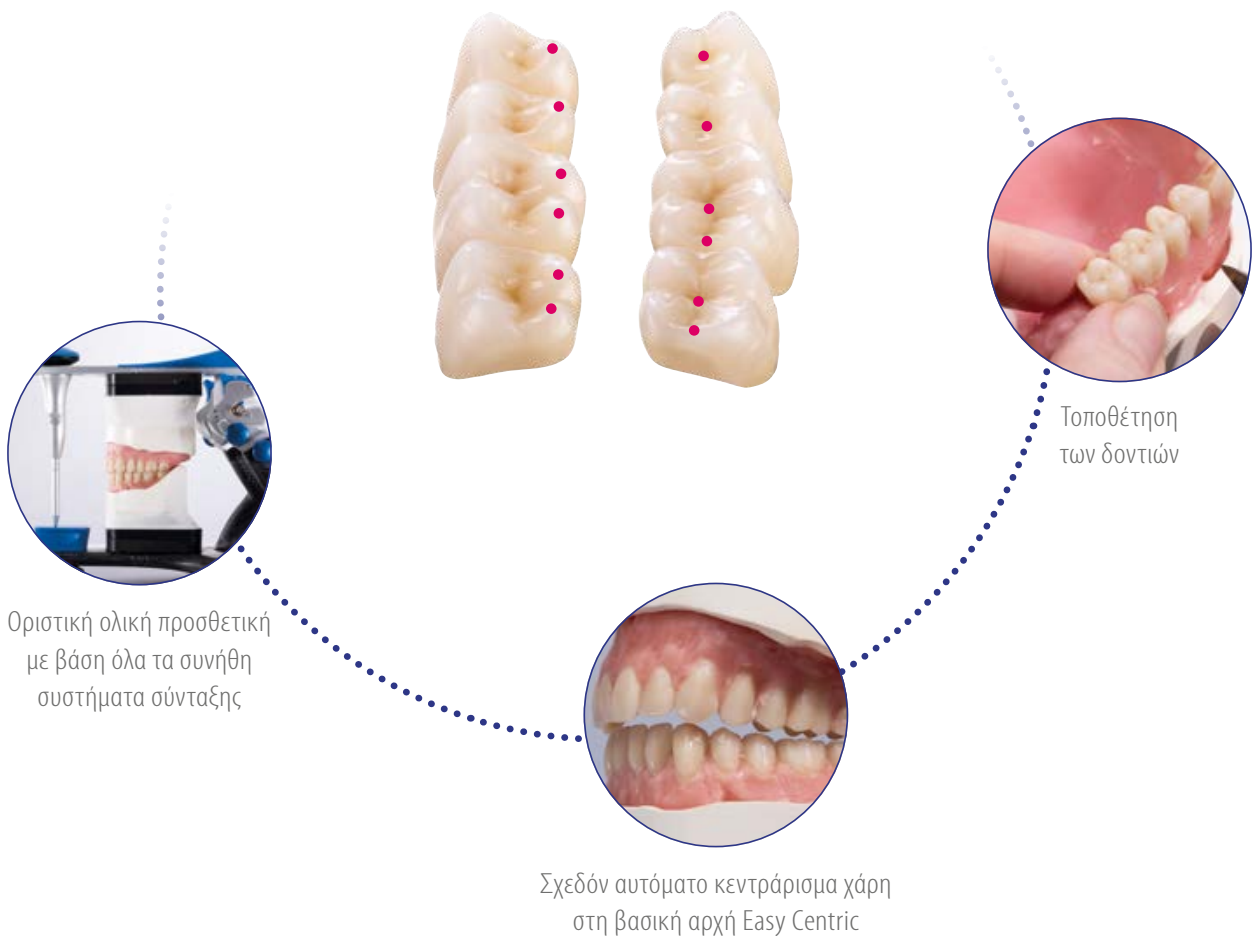





Απλώς όμορφο. Απλώς πολυδιάστατο.

Αξιόπιστη αναπαραγωγή χρωμάτων

Ασφάλεια κατά την επιλογή του χρώματος του δοντιού χάρη στην ΤΕΛΕΙΑ ΤΑΥΤΙΣΗ με τις αυθεντικές χρωματικές κλίμακες VITA.

- 16 χρώματα VITA classical A1-D4 και
- 16 χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER συμπεριλαμβανομένων 3 χρωμάτων Bleach



φυσική διάδραση με το φως



Πολλές μορφές

- 12 μορφές εμπρόσθιου δοντιού άνω γνάθου
- 5 μορφές εμπρόσθιου δοντιού κάτω γνάθου
- 3 μορφές οπίσθιου δοντιού άνω γνάθου
- 3 μορφές οπίσθιου δοντιού κάτω γνάθου

φυσική απόδοση σχήματος



εξαιρετικός σχεδιασμός κοπτικής επιφάνειας



«Το VITA MFT αποδεικνύεται ως υψηλής ποιότητας και οικονομικό δόντι, με το οποίο όχι μόνο η δική μου ομάδα οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, αλλά κυρίως και οι ασθενείς μας είναι απόλυτα ικανοποιημένοι.»

Boris Jovanović
Οδοντοτεχνίτης, Βελιγράδι, Σερβία




Πειστική ποιότητα

Αξιόπιστη ποιότητα υλικού για ελεγχόμενη αντοχή.
Σχεδιασμένο από Γερμανούς μηχανικούς.

Δοκιμασμένο υλικό


Το δοκιμασμένο πολυμερές υλικό VITA HC (Highly Cross-Linked Polymer) διαθέτει μια άκρως δικτυωμένη μήτρα από MMA και δικτυωμένα μονομερή. Το αποτέλεσμα: μια ικανοποιητική μηχανική σταθερότητα και επιφανειακή αντοχή.

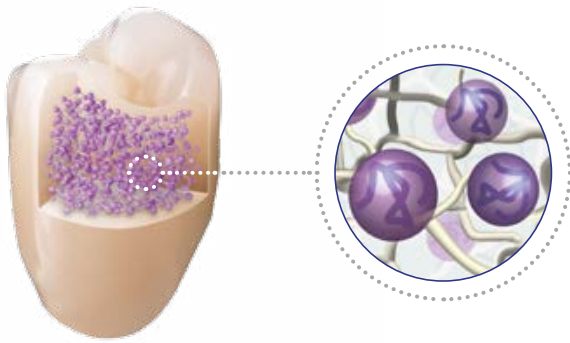

Με βάση τα γερμανικά πρότυπα ποιότητας

Σχεδιασμένο από Γερμανούς μηχανικούς σε συνεργασία με οδοντοτεχνίτες σε ολόκληρο τον κόσμο.


Ελεγχόμενη μέθοδος παραγωγής (με βάση τα γερμανικά πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή και στη σχεδίαση) για σταθερά υψηλή ποιότητα (με έλεγχο και πιστοποίηση κατά EN ISO 13485).

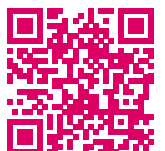



Ποικιλία σχημάτων.

Εμπρόσθια δόντια κάτω γνάθου

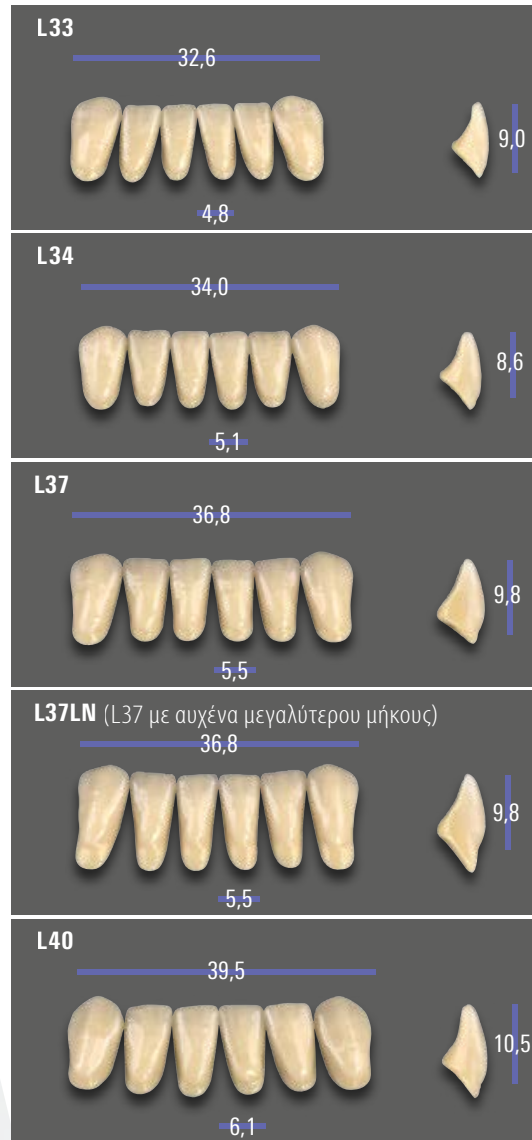

16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER®



(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

16 x VITA classical A1-D4®



Εμπρόσθια δόντια άνω γνάθου



ωοειδές

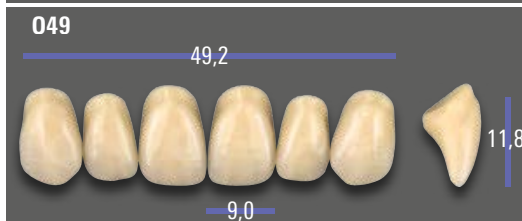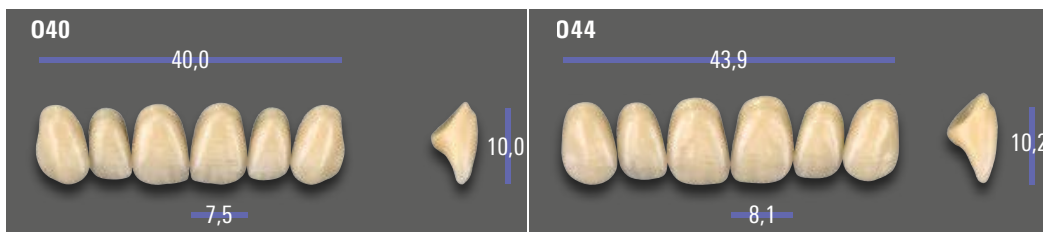

τρίγωνο

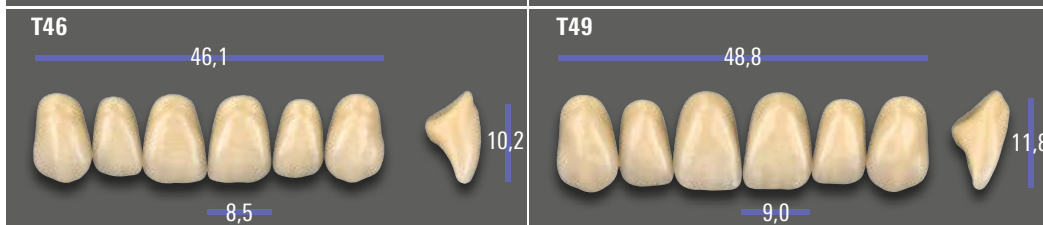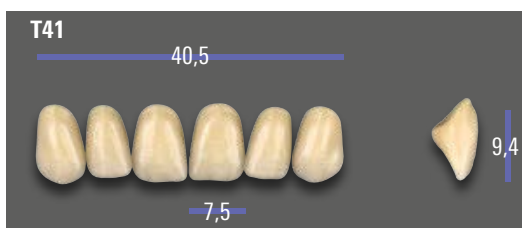

ορθογώνιο




τετράγωνο



Ποικιλία σχημάτων.

Οπίσθια δόντια

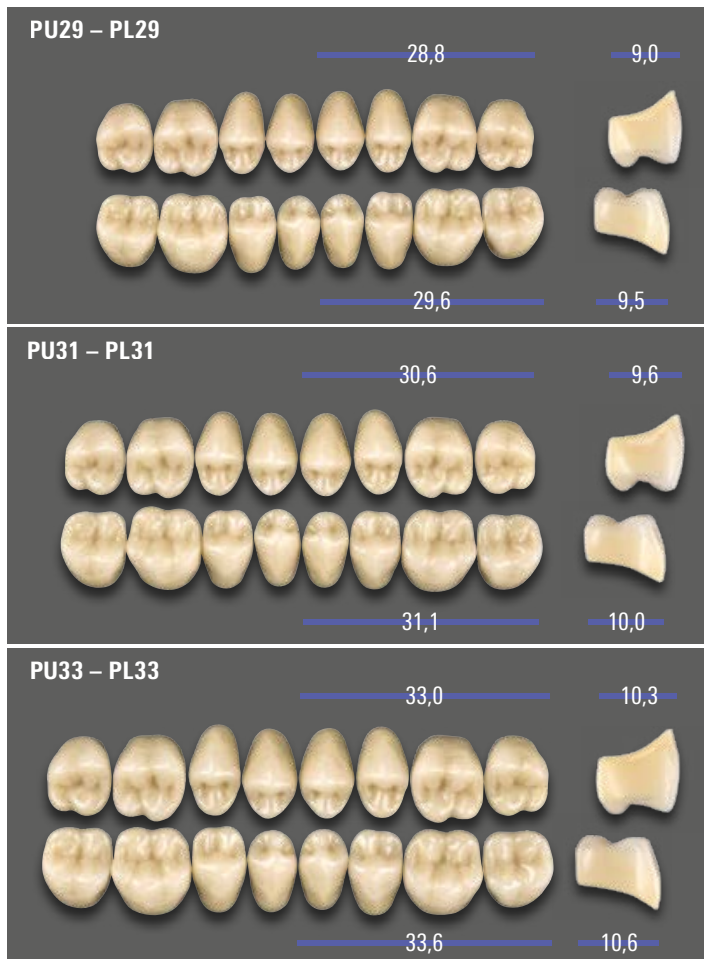

Συνιστώμενοι συνδυασμοί

VITA MFT Εμπρόσθια δόντια	OK / Αριθ. mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	UK / Αριθ. mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Οπίσθια δόντια	OK / Αριθ. mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	UK / Αριθ. mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Λαμβάνετε υπόψη αυτόν τον πίνακα μόνο ως σύσταση. Ο κατάλληλος συνδυασμός εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του εκάστοτε ασθενή.



Κατάλληλες λύσεις στη διαδικασία.



Προσδιορισμός χρώματος

Προσδιορισμός χρώματος με τις χρωματικές κλίμακες VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE ή den VITA.



Προσδιορισμός σχήματος

Επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα δοντιού από την αποθήκη δοντιών σας. Ο προσδιορισμός σχήματος μπορεί επίσης να γίνει με τη ζωντανή κάρτα σχημάτων.



Το δικό σας προσθετικό δόντι VITA MFT

Απλά στη χρήση. Ακριβώς στη σωστή θέση. Διαθέσιμο τώρα σε 16 χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER και 16 χρώματα VITA classical A1-D4.



Συγκόλληση

Χρησιμοποιήστε το VITACOLL ως ασφαλές μέσο πρόσφυσης μεταξύ των προσθετικών δοντιών VITA MFT και της βάσης της τεχνητής οδοντοστοιχίας. ΤΟ VITAFOL είναι για το κατάλληλο για το σκοπό αυτό μονωτικό υλικό σιλικόνης.



Χαρακτηρισμός

Χαρακτηρίστε την τεχνητή οδοντοστοιχία σας με σύνθετο υλικό μικροσωματιδίων VITA VM LC που πήζει με ακτινοβολία. Εναλλακτικά διατίθενται τα χρώματα ζωγραφικής VITA AKZENT LC που πήζουν με ακτινοβολία.



Σας παρέχουμε ευχαρίστως περαιτέρω βοήθεια.

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline, υποστήριξη πωλήσεων

Τηλέφωνο +49 7761 562-884
Φαξ +49 7761 562-299
8.00 έως 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Hotline για τεχνικά ζητήματα

Τηλέφωνο +49 7761 562-222
Φαξ +49 7761 562-446
8.00 έως 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com



Λάβετε υπόψη

Τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών και έτσι προκύπτει κάποια ζημία. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό μέρος του προϊόντος. Έκδοση του παρόντος φυλλαδίου προϊόντος: 03.24

Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι προηγούμενες εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vita-zahnfabrik.com

Η εταιρεία VITA Zahnfabrik είναι πιστοποιημένη και τα παρακάτω προϊόντα φέρουν το σήμα **CE 0124 VITA MFT®**

Τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο προϊόντα/συστήματα άλλων κατασκευαστών είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα των εκάστοτε κατασκευαστών.



Στοιχεία αναφοράς

Εσωτερικές μελέτες, VITA E&A:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Γερμανία
Δρ. Berit Gödiker, Υπεύθυνη προγράμματος VITA E&A,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Αναλυτικά δεδομένα δοκιμών

Βλ. Τεχνική-επιστημονική τεκμηρίωση

VITA MFT®

Λήψη μέσω www.vita-zahnfabrik.com



Περαιτέρω πληροφορίες για το
VITA MFT
www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT



VITA MFT®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

