

VITAVM.11

Информация о продукции



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

VITA – perfect match.

VITA

Мелкодисперсная керамика специально разработана для индивидуализации реставраций из силиката лития, усиленного диоксидом циркония (ZLS) VITA SUPRINITY PC.



Рис. 1: VITA VM 11 эффект-массы

Мелкодисперсная керамика для индивидуализации реставраций из VITA SUPRINITY PC

VITA VM 11 – мелкодисперсная керамика на основе полевого шпата была специально разработана для индивидуализации реставраций из силиката лития, усиленного диоксидом циркония.*

Точное согласование параметров КТР каркаса и облицовочного материала обеспечивает образование надежной связки и, в результате, облицовка не деформируется и имеет низкие внутренние напряжения.

Преимущества продукта



Рис. 2

Высоко эстетичные реставрации:

Высокая прозрачность и теплые тона VITA VM 11 в сочетании с опалесцентным эффектом нового материала VITA SUPRINITY PC гарантируют высоко эстетичные результаты с естественной игрой цвета.

Надежное соединение:

Оптимальное согласование величин КТР гарантирует отсутствие внутренних напряжений и, как следствие этого, высокую прочность соединения.



Рис. 3

Хорошие шлифовальные и полировальные свойства:

Отлично себя зарекомендовавшая мелкодисперсная структура VITA VM 11 обеспечивает формирование плотной, гладкой поверхности, которая легко шлифуется и быстро полируется.

Простота применения:

VITA VM 11 отличается высокой стабильностью формы, минимальной усадкой и высокой стабильностью кромок. Благодаря хорошим покровным свойствам новой стеклокерамики VITA SUPRINITY PC, легкоплавкая мелкодисперсная керамика на основе полевого шпата VITA VM 11 может наноситься сразу без предварительного обжига Liner- или Washbrand.



Рис. 4

Надёжная стабильность при обжиге:

VITA VM 11 обладает высокой стабильностью при обжиге и сохраняет стабильность формы даже при большом количестве обжигов.

Снимки 2-4 были любезно предоставлены зубным техником мастером Heike Assmann.

* также применимо для CELTRA® Duo и CELTRA® CAD FC.

CELTRA – это зарегистрированный товарный знак фирмы DeguDent GmbH.



Наборы

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Количество	Содержание	Материал
6	12 г	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	50 мл	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Инструкция

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC


Количество	Содержание	Материал
8	12 г	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 г	ENAMEL ENL, END
1	50 мл	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Инструкция

**Массы VITAVM®11
поштучно**

Цвет	Материал	Содержание	Кат. №
0M1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 г	B4946412
WIN	WINDOW	12 г	B4918112
NT	NEUTRAL	12 г	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 г	B4919112
END	ENAMEL dark	12 г	B4919212
MM1	MAMELON	12 г	B4916112
MM3	MAMELON	12 г	B4916312

Цвет	Материал	Содержание	Кат. №
EP1	EFFECT PEARL	12 г	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 г	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 г	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 г	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 г	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 г	B4912112
EC3	EFFECT CHROMA	12 г	B4912312
EC5	EFFECT CHROMA	12 г	B4912512
EE1	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 г	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 г	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 г	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 г	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 г	B4936312

Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета естественных зубов.

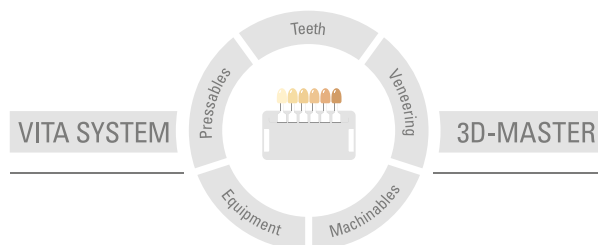

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2024-05

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

CE0124

VITA VM[®]11 · VITA SUPRINITY[®] PC

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik