

# VITA SMART.FIRE®

Le four efficace pour des restaurations au cabinet dentaire



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 2022-06



VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA SMART.FIRE® SYSTEM – TOUTES LES SOLUTIONS EN UN COUP D'ŒIL



Ensemble  
d'accessoires  
intégré

Four de cuisson pour  
cabinets dentaires

Unité de commande

### Quoi ?

- VITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage, de glaçage et de cristallisation et aux cuissons de correction de tous les matériaux classiques, spécialement développé pour les cabinets dentaires.

### Pour quoi ?

- Le four VITA SMART.FIRE prend en charge un flux de travail optimal. Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont pré-installés pour une exécution simple, parce qu'intuitive, de la cuisson. Des profils d'utilisateur personnalisables sont configurables pour une flexibilité maximale.

### Avec quoi ?

- Le VITA SMART.FIRE SYSTEM comprend le four avec un ensemble d'accessoires intégré et l'unité de commande tactile séparée qui pilote jusqu'à quatre fours.

## AVANTAGES

### TOUCH & FIRE !

*Sélectionner le programme préinstallé,  
lancer directement la cuisson – Et voilà !*



**1. Manipulation intuitive**

**2. Utilisation confortable**

**3. Fonctionnement fiable**

# TOUCH & FIRE

#### **Intuitif**

- Navigation claire dans les menus avec des symboles de programmation explicites
- Une utilisation intuitive grâce à la sélection du matériau et au démarrage du programme en une seule étape

#### **Confortable**

- Programmes pré-installés pour tous les matériaux classiques utilisés dans les cabinets dentaires
- Écran tactile 10 pouces haute résolution avec excellente résistance aux rayures et à la rupture

#### **Fiabilité**

- Fonctionnement fiable via une technique de cuisson durable
- Corps résistant avec surfaces scellées

## LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®

Le four



**Pour toutes les cuissons  
et tous les matériaux classiques**

Four de cuisson **VITA SMART.FIRE®**

### Quoi ?

- Four de cabinet dentaire peu encombrant pour une utilisation confortable
- Technique de cuisson durable et éprouvée pour un fonctionnement fiable
- Corps résistant avec surfaces scellées pour un nettoyage aisé
- Tiroir de service intégré pour des accessoires toujours accessibles, comme les supports de cuisson
- Calibrage de la température entièrement automatisé pour des résultats fiables

### Pour quoi ?

- Pour des cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et de correction

## LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®

L'unité de commande



### VITA vPad excellence

#### Quoi ?


- Unité de commande avec programmes préinstallés pour tous les matériaux classiques destinés aux cabinets dentaires
- Écran tactile 10 pouces haute résolution pour une utilisation parfaite et une qualité d'image optimale
- Concept de commande intuitif pour la sélection des matériaux et le démarrage du programme en une seule étape
- Menu clair avec des symboles explicites pour une sélection de programme rapide et 11 profils personnalisables
- Fonction d'assistance logicielle pour une exécution de la cuisson étape par étape en toute sécurité
- Pilotage jusqu'à quatre fours de cuisson avec une seule unité de commande
- Fonction multimédia

#### Pour quoi ?

- Pour une cuisson simple et intuitive

## LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE®

Les accessoires

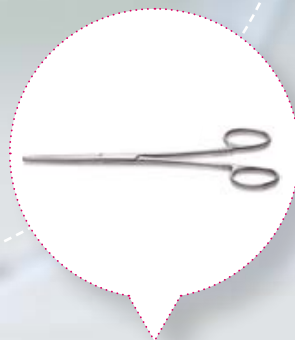

### Accessoires VITA SMART.FIRE®

#### Quoi ?

- Ensemble d'accessoires intégré au four pour une cuisson confortable
- Composants : plateau de cuisson, ouate réfractaire, tiges de platine, pince à four et tablette de refroidissement

#### Pour quoi ?

- L'équipe du cabinet a ainsi tous les accessoires importants à portée de main et à tout moment


## APERÇU DU SYSTÈME ET DES PRODUITS



### VITA SMART.FIRE®

Désignation	Dimensions	Données techniques	Ensemble livré	Code art.
Four de cuisson pour cabinets dentaires	<b>Carrosserie</b> ø 230 mm P : 300 mm H : 340 mm <b>Enceinte de cuisson</b> ø 80 mm H : 43 mm	Branchement électrique 230 V AC, 50 Hz ou 100/110 V AC, 50/60 Hz <b>Puissance absorbée</b> 950 W <b>Température de l'enceinte de cuisson</b> 1 050 °C	1 four 1 ensemble d'accessoires 1 mode d'emploi	<b>DSF220</b> (version 230 V)  <b>DSF100</b> (version 100 V)  <b>DSF110</b> (version 110 V)
Unité de commande	I : 260 mm P : 150 mm H : 200 mm	Écran tactile TFT 10 po, 1 280 x 800 Interfaces USB/SD	1 câble de branchement	
Accessoires	–	–	2 tiges platine 1 ouate réfractaire 1 support de cuisson 1 pince à four 1 tablette de refroidissement	
Pompe à vide (en option)	–	–	1 pompe à vide 1 tuyau à vide	<b>DVPU220</b>
Pilotage multi-fours (en option)	–	–	1 pompe MultiPump 1 Switchbox	<b>D61000</b> <b>D65000</b>

Pour de plus amples informations sur VITA SMART.FIRE,  
consultez le site : [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

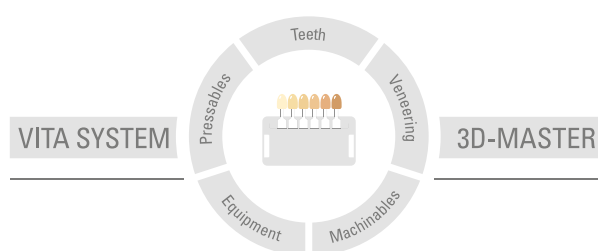

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2022-06

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE®** porte le marquage CE conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2011/65/CE.

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)