

# VITA SMART.FIRE®

L'efficiente unità di cottura per riabilitazioni chairside



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 2022-06



VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA SMART.FIRE® SYSTEM – TUTTE LE SOLUZIONI IN UN COLPO D'OCCHIO



Set accessori integrato

Unità di cottura da studio

Unità di comando

### Cosa?

- VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside.

### Per cosa?

- VITA SMART.FIRE agevola lo svolgimento ottimale del lavoro. Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati. Per la massima flessibilità è possibile creare profili utente individualizzabili.

### Con cosa?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM comprende l'unità di cottura con set accessori integrato ed un'unità di comando touch separata in grado di gestire fino a quattro unità di cottura.

## VANTAGGI

### **TOUCH & FIRE!**

*Selezionare il programma preinstallato, avviare direttamente la cottura – fatto!*



**1. uso intuitivo**

**2. confort**

**3. affidabilità**

# TOUCH & FIRE

#### **Intuitivo**

- Chiara guida a menu con simboli programmi autoesplicativi
- Uso intuitivo grazie alla scelta del materiale e all'avvio del programma in un'unica operazione

#### **Confortevole**

- Programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Schermo touch da 10" ad alta risoluzione con eccellente resistenza ai graffi e alle rotture.

#### **Affidabilità**

- Funzionamento affidabile grazie alla tecnica di cottura di lunga durata
- Custodia resistente con superfici sigillate

## VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI

Unità di cottura



Per tutte le cotture ed i materiali correnti

VITA SMART.FIRE® – Unità di cottura

**Cosa?**


- Unità di cottura da studio di ingombro ridotto e uso confortevole
- Tecnica di cottura robusta, di lunga durata per un funzionamento affidabile
- Custodia resistente con superfici sigillate per una facile detersione
- Cassetto Service integrato per avere a portata di mano gli accessori, ad es. il supporto di cottura
- Taratura completamente automatica della temperatura per risultati affidabili

**Per cosa?**

- Per cotture di cristallizzazione, di glasura dei supercolori e di correzione

## VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI

Unità di comando

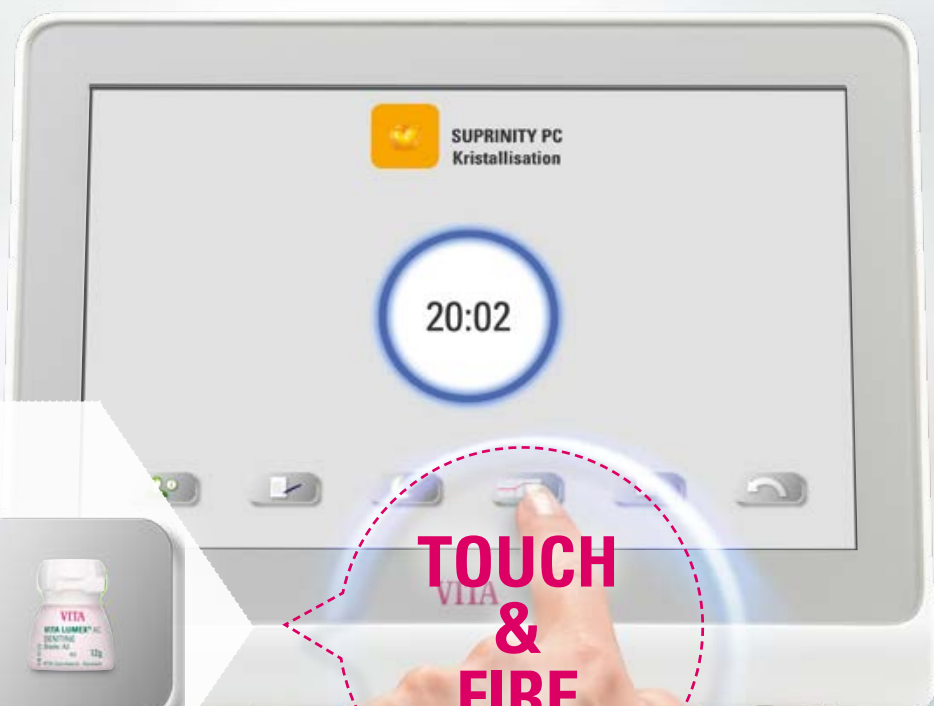

Lucentezza



Supercolori



Correzione

### VITA vPad excellence

#### Cosa?

- Unità di comando con programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Touch-display da 10", ad alta risoluzione per una perfetta gestione e immagini di ottima qualità
- Concetto di utilizzo intuitivo per la scelta del materiale e l'avvio del programma in un'unica operazione
- Übersichtliches Menü mit selbsterklärenden Symbolen für schnelle Programmwahl und 11 individualisierbaren Profilen
- Funzione di assistenza basata su software per un supporto passo-passo al ciclo di cottura
- Gestione di fino a quattro unità di cottura con un'unica unità di comando
- Funzione multimedia


#### Per cosa?

- Per cotture semplici e intuitive



## VITA SMART.FIRE® – COMPONENTI

Accessori

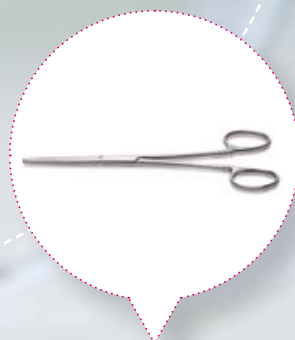

### VITA SMART.FIRE® – Accessori

#### Cosa?

- Set accessori integrato nell'unità di cottura per il massimo confort operativo
- Comprende: supporto di cottura, cotone refrattario, perni di platino, pinza e piano di raffreddamento

#### Per cosa?

- In tal modo il team dello studio ha sempre tutto pronto in prossimità del forno


## RIEPILOGO PRODOTTI E SISTEMA



### VITA SMART.FIRE®

| Denominazione                       | Dimensioni   | Dati tecnici   | Dotazione  | Cod.  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Unità di cottura da studio          | <b>Custodia</b><br>ø 230 mm<br>P: 300 mm<br>A: 340 mm<br><b>Camera di cottura</b><br>ø 80 mm<br>A: 43 mm | <b>Allacciamento elettrico:</b><br>230 Volt AC, 50 Hz oppure<br>100/110 Volt AC, 50/60 Hz<br><b>Potenza assorbita:</b><br>950 W<br><b>Temperatura camera di cottura:</b> 1050 °C | 1x unità di cottura<br>1x set accessori<br>1x Istruzioni d'uso   | <b>DSF220</b><br>(Versione 230 V)<br><br><b>DSF100</b><br>(versione 100 V)<br><br><b>DSF110</b><br>(Versione 110 V) |
| Unità di comando                    | L: 260 mm<br>P: 150 mm<br>A: 200 mm  | TFT-touch-display<br>10", 1280 x 800<br>interfacce USB/SD  | 1x cavo di collegamento  |   |
| Accessori                           | –  | –  | 2x perni di platino<br>1x Brennwatte<br>1x supporto di cottura<br>1x pinza<br>1x piano di raffreddamento |   |
| Pompa per vuoto (opzionale)         | –  | –  | 1x pompa per vuoto<br>1x tubo per vuoto  | <b>DVPU220</b>  |
| Gestione forni multipli (opzionale) | –  | –  | 1x Multipump<br>1x Switchbox   | <b>D61000</b><br><b>D65000</b>  |

Per ulteriori informazioni su VITA SMART.FIRE  
consultare: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

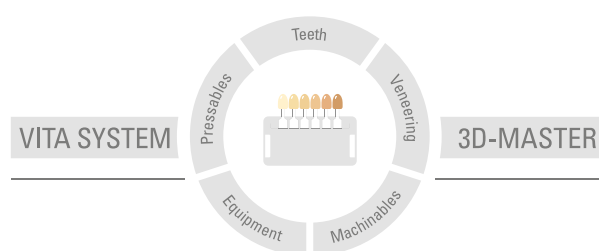

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2022-06

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE** è marcato CE in conformità alla Direttiva CE 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)