

VITA

**Facile.  
En plein dans le mille.**



**VITA MFT®**

Une efficacité étonnante et  
une qualité convaincante.  
La dent artificielle VITA  
avec Easy Centric (centrée facile).





## Les avantages

### Économise du temps

Montage simple et efficace grâce au principe VITA Easy Centric – centrée facile. Convient à tous les concepts de montage courants.

### Économise de l'argent

Dent artificielle multifonctionnelle et économique dans une grande variété de couleurs et de formes. Disponible en 16 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et 16 couleurs VITA classical A1-D4.

### Économise des nerfs

Des résultats fiables et rapides d'une qualité convaincante enthousiasment non seulement vous en tant qu'utilisateur, mais aussi vos patients.

Dent artificielle

# VITA MFT®

Économise du temps. Économise de l'argent.  
Économise des nerfs.

## Aller simplement à l'essentiel grâce à des contacts occlusaux prédéfinis.

VITA MFT (Multi Functional Tooth – dent multifonctionnelle) est polyvalente – pour les prothèses amovibles partielles et complètes, ainsi que pour les prothèses hybrides et implantaires.

Comme la surface de mastication est conçue de manière multifonctionnelle, la gamme de dents convient à tous les concepts de montage courants. Grâce au principe VITA Easy Centric, la VITA MFT se monte presque automatiquement et permet d'économiser non seulement du temps et de l'argent mais aussi des nerfs.



## Montage simple. Esthétique très satisfaisante.

Floidi Endrio, prothésiste dentaire, Italie :  
« En tant que dent de cette catégorie de prix, elle convainc non seulement par sa qualité et son esthétique, mais surtout par sa facilité d'utilisation. »

## Rentabilité et esthétique

Susana García, prothésiste dentaire, Espagne :  
« La facilité de montage rend cette dent unique dans ce segment. Rentabilité et esthétique – VITA MFT offre les deux. »



# Simple. En plein dans le mille.

## Le principe VITA Easy Centric pour un flux de travail rapide

**La dent artificielle VITA MFT avec le principe Easy Centric offre un montage efficace selon tous les concepts courants.**

- **Montage facile avec une grande sécurité**


grâce à des points de contact prédéfinis et à la détection automatique de la centrée

- **Réduction de l'effort de meulage**

grâce à une conception basale optimisée

- **Utilisable pour tous les concepts prothétiques**

grâce à la conception multifonctionnelle des surfaces de mastication. Utilisable par exemple selon le Pr Dr A. Gerber, APF/TiF, Gysi et ABC.

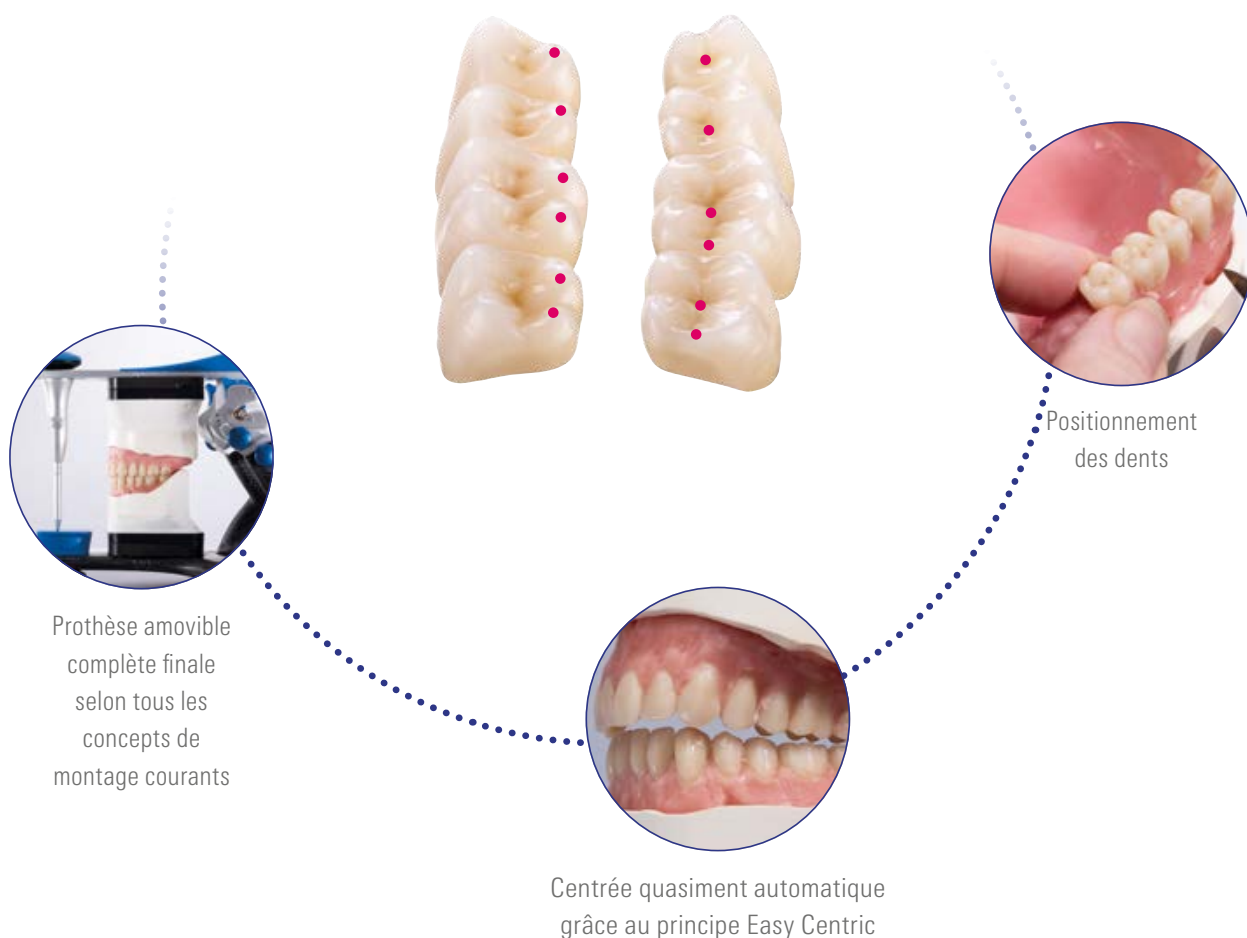





# Simplement esthétique. Simplement polyvalente.

## Reproduction fiable des couleurs

Sécurité dans la détermination de couleur des dents grâce au PERFECT MATCH par rapport aux teintiers originaux VITA.

- 16 couleurs VITA classical A1-D4 et
- 16 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER avec 3 couleurs d'éclaircissement



Jeu de lumière naturel



## Diverses formes

- 12 formes de dents antérieures maxillaires
- 5 formes de dents antérieures mandibulaires
- 3 formes de dents postérieures maxillaires
- 3 formes de dents postérieures mandibulaires

Mise en forme naturelle



Contour incisal élégant



La VITA MFT s'avère être une dent de grande qualité et économique qui satisfait non seulement mon équipe de prothésistes mais aussi et surtout nos patients. »

**Boris Jovanović,**  
prothésiste dentaire, Belgrad, Serbie




# Qualité convaincante.

Une qualité de matériau fiable pour une durabilité testée.  
Développée par des ingénieurs allemands.

## Matériau éprouvé

Le polymère VITA HC éprouvé (Highly Cross-Linked Polymer – polymère HR hautement réticulé) dispose d'une matrice à haute réticulation en MMA et de monomères de réticulation. Résultat : une bonne stabilité mécanique et une bonne résistance de la surface.

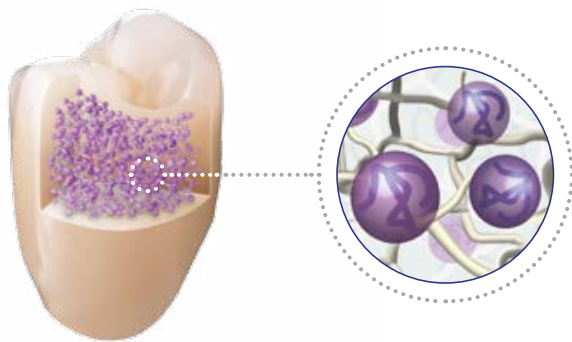

## Selon les standards de qualité allemands

Développé par des ingénieurs allemands en collaboration avec des prothésistes dentaires du monde entier.

Procédés de fabrication contrôlés (selon les normes de qualité allemandes en matière de production et de conception) pour une qualité élevée constante (contrôlée et certifiée EN ISO 13485).








# Diversité des formes.

## Dents antérieures mandibulaires

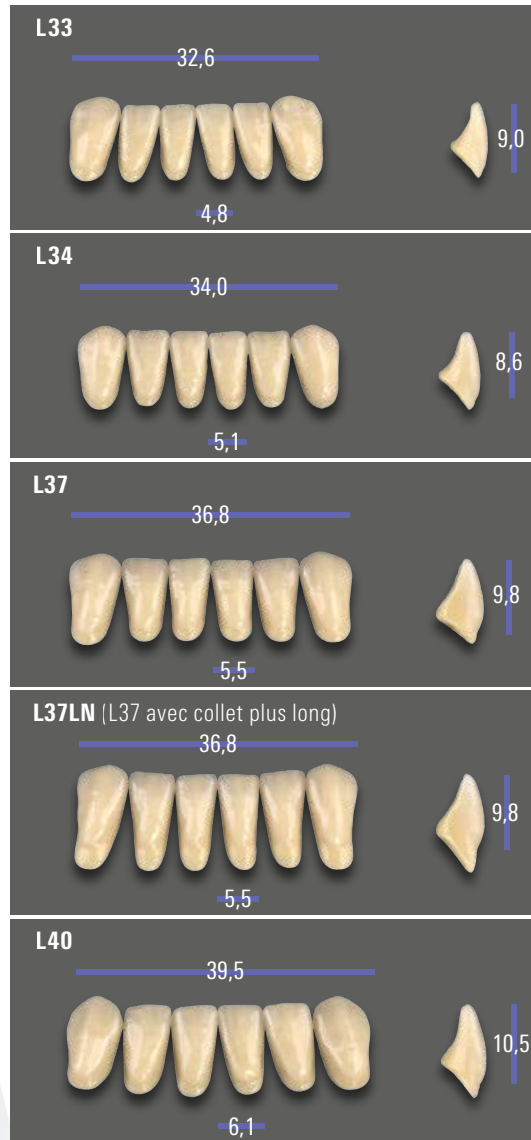


**16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

**16 x VITA classical A1-D4®**


## Dents antérieures maxillaires




Ovale

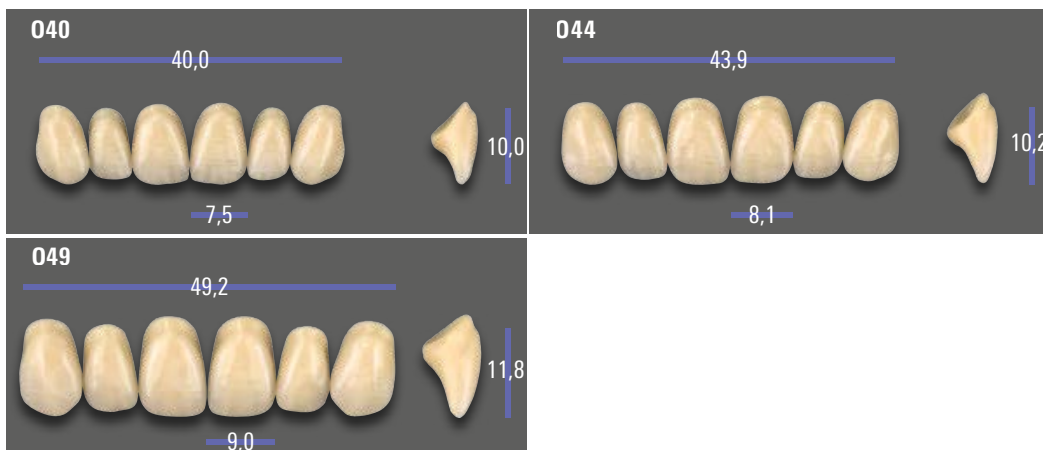

Triangulaire

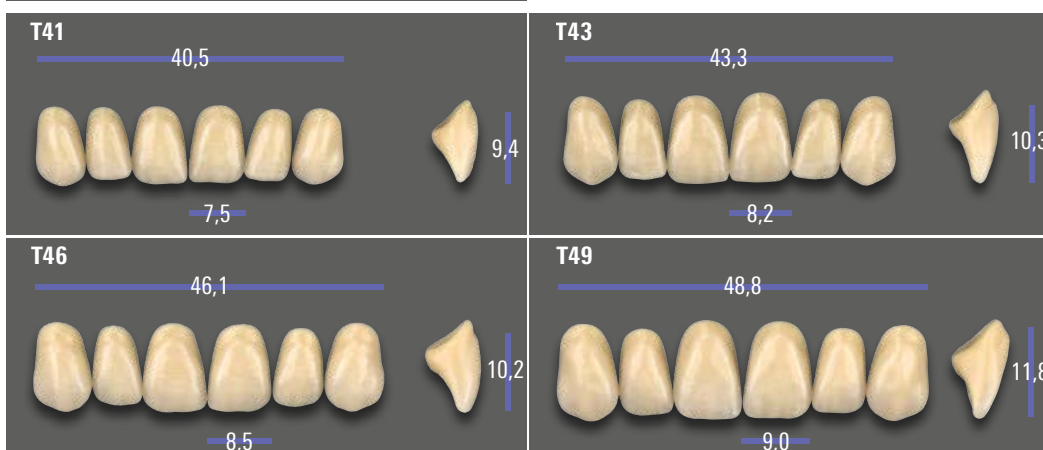

Rectangulaire

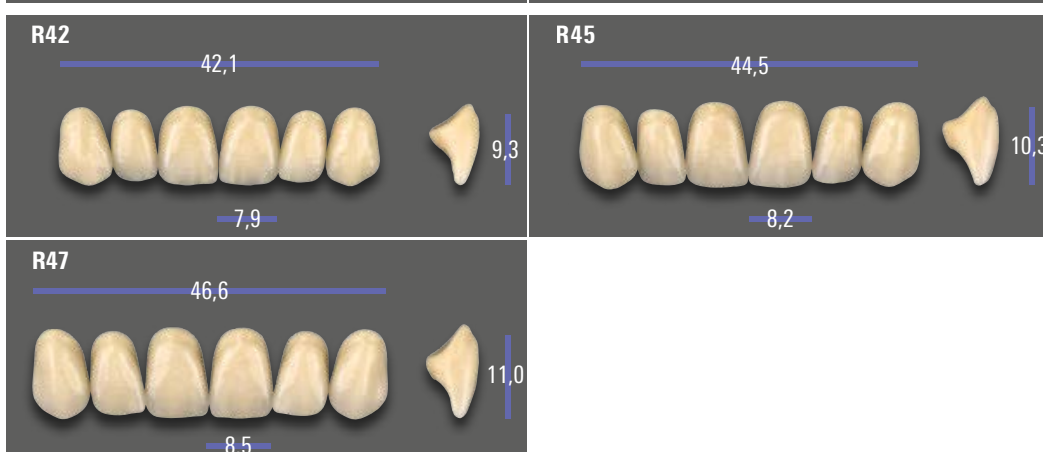


Carrée





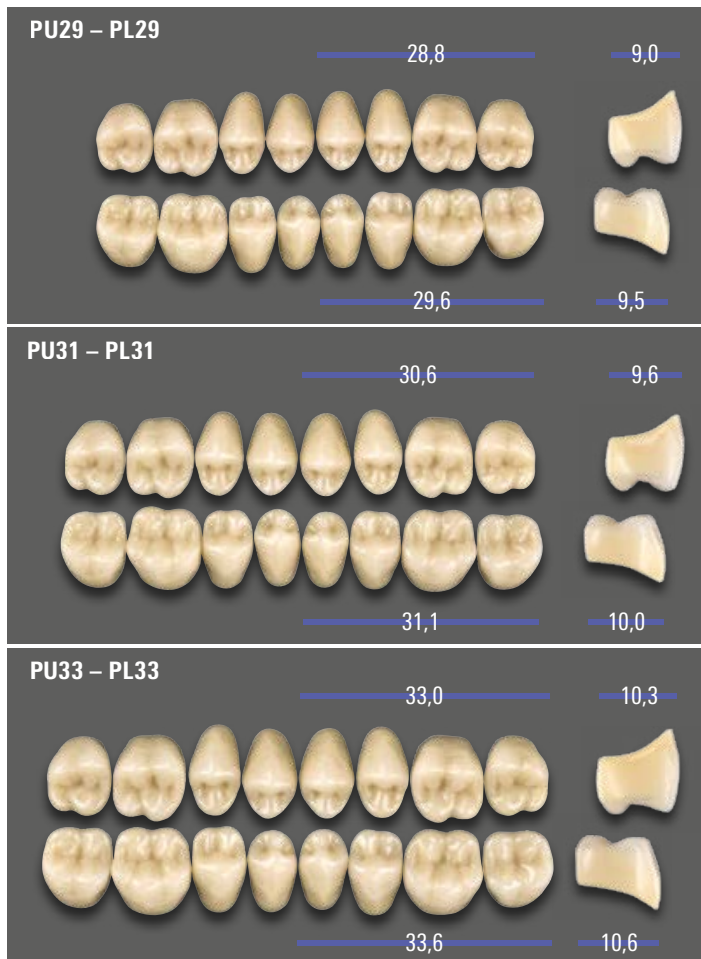

# Diversité des formes.

## Dents postérieures



## Combinaisons recommandées

<b>VITA MFT</b> Dents antérieures	Max. / N°  mm	<b>O40</b> 40,0	<b>O44</b> 43,9	<b>O49</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	Man. / N°  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
<b>VITA MFT</b> Dents postérieures	Max. / N°  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	Man. / N°  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Veuillez considérer ce tableau uniquement comme une recommandation. La combinaison appropriée dépend fortement de la situation individuelle du patient.



# Des solutions adaptées en cours de processus.



## Détermination de la couleur

Détermination de la couleur avec le VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE ou les teintiers VITA.



## Détermination de la forme

Choisissez la forme de dent appropriée à partir de votre stock de dents. La détermination de la forme se fait également à partir de la carte de formes vivantes.



## Votre dent artificielle VITA MFT

Simple. En plein dans le mille.  
Désormais disponible dans 16 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et 16 couleurs VITA classical A1-D4.



## Adhérence

Utilisez VITACOLL comme agent adhésif sûr entre les dents artificielles VITA MFT et la base prothétique. VITAFOL est le matériau d'isolation en silicone approprié à cet effet.



## Caractérisation

Caractériser votre prothèse avec la résine composite photopolymérisable à base de microparticules VITA VM LC. Vous pouvez également utiliser les colorants photopolymérisables VITA AKZENT LC.



# Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.



## Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884  
Fax +49 7761 562-299  
8 h - 17 h (HEC)  
info@vita-zahnfabrik.com

## Assistance téléphonique technique

Téléphone +49 7761 562-222  
Fax +49 7761 562-446  
8 h - 17 h (HEC)  
info@vita-zahnfabrik.com

## N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 01/24

Cette nouvelle édition de la notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage **CE 0124** : VITA MFT®

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.



## Références

### Recherches internes, VITA R&D


VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Département recherche et développement  
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Allemagne  
Dr Berit Gödiker, directrice de projet R&D  
VITA, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

### Données de test détaillées

Voir documentation technique scientifique

VITA MFT®

Téléchargement via [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

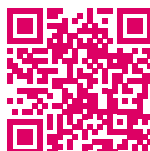

Informations supplémentaires sur  
VITA MFT  
[www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT](http://www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT)



## VITA MFT®

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on  
Social Media!

