

VITA

Easy.  
Right on point.



VITA MFT®

Eficiência impressionante e  
qualidade convincente:  
Dentes pré-fabricados VITA  
com Easy Centric.





## As vantagens

### **Economiza tempo**

Configuração fácil e eficiente graças ao princípio Easy Centric. Adequado para todos os conceitos de configuração dentária convencionais.

### **Economiza dinheiro**

Dentes pré-fabricados multifuncionais e econômicos e uma grande variedade de cores e formatos. Disponíveis em 16 cores VITA SYSTEM 3D-MASTER e em 16 cores VITA classical A1-D4.

### **Economiza paciência**

Resultados confiáveis e rápidos, com qualidade convincente, que encantarão não apenas você, técnico dentário, mas também seus pacientes.

Dente protético

# VITA MFT®

Economiza tempo. Economiza dinheiro. Economiza paciência.

## Vá direto ao ponto graças aos pontos de contato predefinidos.

O VITA MFT (Multi Functional Tooth) pode ser empregado das mais diferentes maneiras, tanto para próteses parciais e totais quanto para próteses híbridas e de implante.

Com sua superfície de mastigação multifuncional, essa linha de produtos dentários se adequa a todos os conceitos de configuração dentária convencionais.

Graças ao VITA Easy Centric, o VITA MFT é fixado de forma quase automática, economizando, assim, seu tempo e sua paciência.



## Montagem fácil. Estética excelente.

Floidi Endrio, técnico dentário, Itália:

"Por ser um dente dessa faixa de preços, ele convence não apenas por sua qualidade e estética, mas especialmente por seu manuseio fácil."

## Economia e Estética

Susana García, técnica dentária, Espanha:

"Sua montagem fácil faz deste dente um produto único neste segmento. Economia e estética: o VITA MFT oferece ambos."



# Simplesmente. Direto ao ponto.

## O princípio VITA Easy Centric para um fluxo de trabalho rápido

**O dente protético VITA MFT conta com o princípio Easy Centric e oferece uma montagem eficiente para todos os conceitos convencionais.**

- **Configuração fácil com alta segurança de montagem**


graças aos pontos de contato predefinidos e centralização automática

- **Esforço de desgaste reduzido**

através do design basal otimizado

- **Aplicação confiável em todos os conceitos protéticos**

graças ao design multifuncional da superfície oclusal. Aplicável, por exemplo, de acordo com os conceitos do Prof. Dr. A. Gerber, APF/TiF, Gysi e ABC.

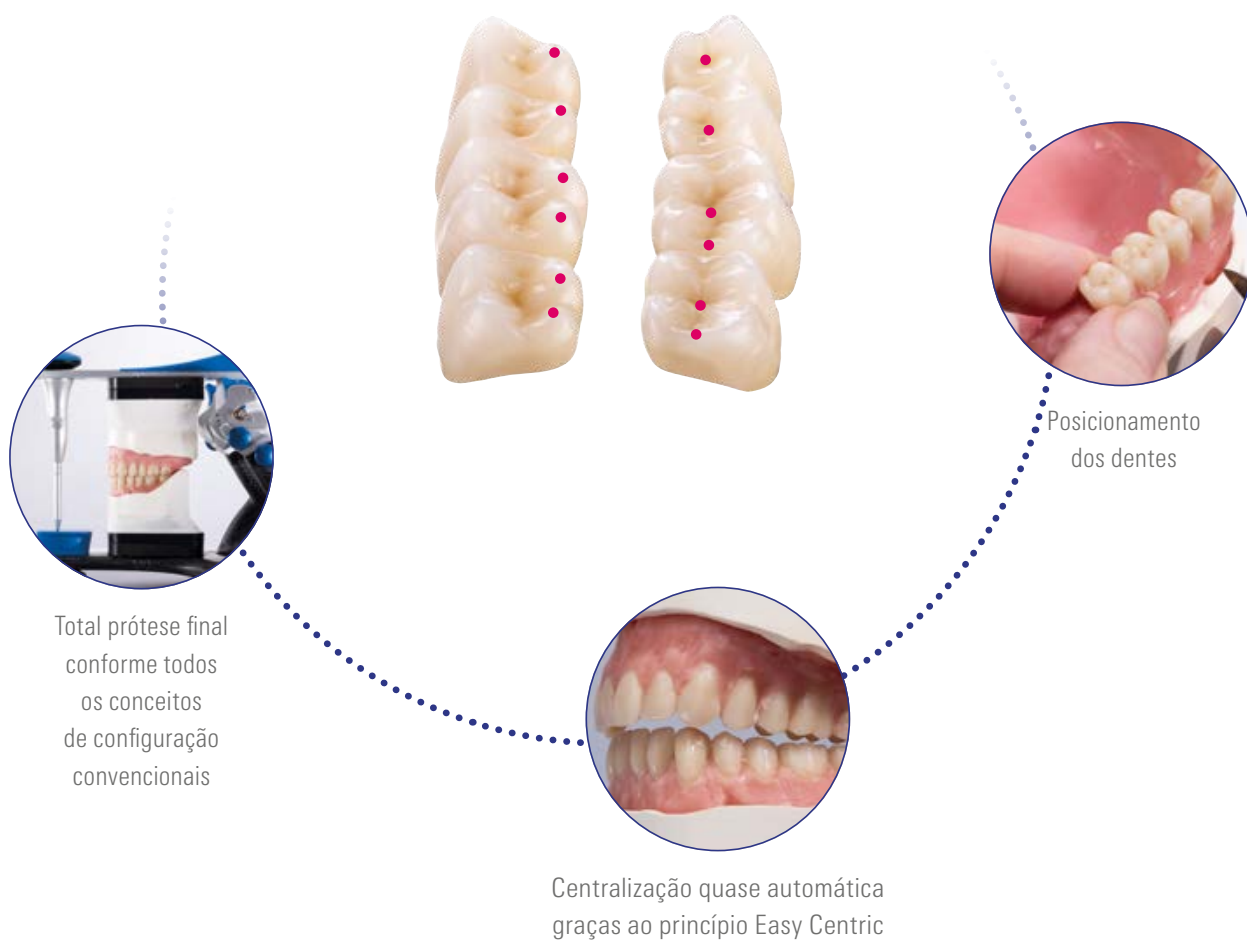





# Simplemente belo. Simplemente versátil.

## Reprodução confiável da cor

Segurança na escolha da cor do dente graças ao PERFECT MATCH com as escalas de cores originais VITA.

- 16 x cores VITA classical A1-D4 e
- 16 x cores VITA SYSTEM 3D-MASTER, inclusive 3 cores de branqueamento



jogo de luz próximo ao natural



## Formatos variados

- 12 x Formatos de dentes anteriores superiores
- 5 x Formatos de dentes anteriores inferiores
- 3 x Formatos de dentes posteriores superiores
- 3 x Formatos de dentes posteriores inferiores

Design natural



design incisal bem projetado



O VITA MFT se mostra um dente de elevada qualidade e econômico, com o qual não só minha equipe técnico-dentária, mas, sobretudo, nossos pacientes estão absolutamente satisfeitos."

**Boris Jovanović**  
Técnico dentário, Belgrado, Sérvia




# Qualidade convincente

Qualidade de material confiável para uma durabilidade comprovada.  
Desenvolvido por engenheiros alemães.

## Material testado e comprovado

O comprovado material polimérico VITA HC (Highly Cross-Linked Polymer) possui uma matriz altamente reticulada de monômeros de MMA e reticulantes. O resultado: uma boa estabilidade mecânica e resistência superficial.

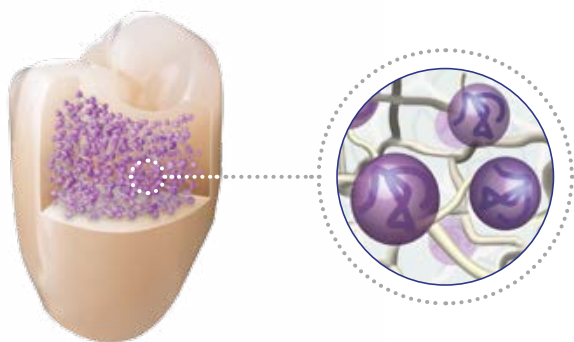

## Conforme padrões de qualidade alemães

Desenvolvido por engenheiros alemães em colaboração com técnicos de prótese dentária de todo o mundo.

Processos de fabricação comprovados (conforme os padrões de qualidade alemães em produção e design) para uma qualidade consistentemente alta (testada e certificada EN ISO 13485).







# Variedade de formas.

## Dentes anteriores inferiores




**16 x cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

**16 x cores VITA classical A1-D4®**




## Dentes anteriores superiores





oval

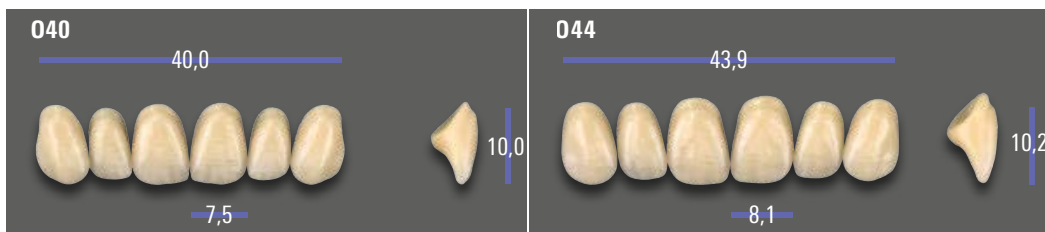



triangular

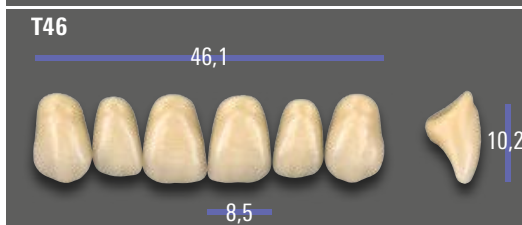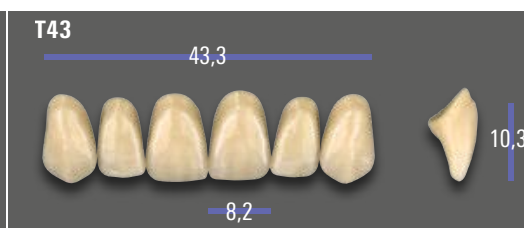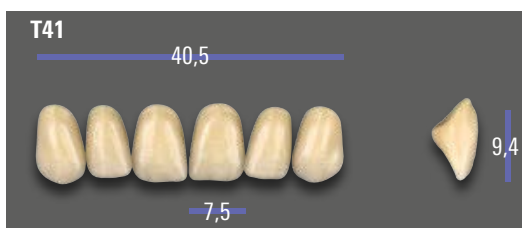

retangular

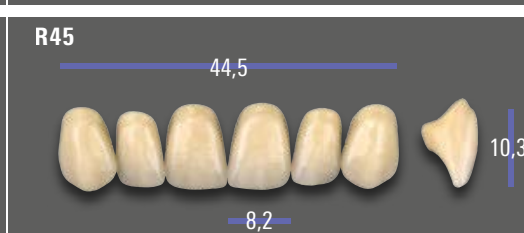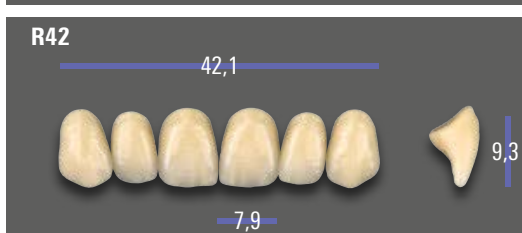


quadrado

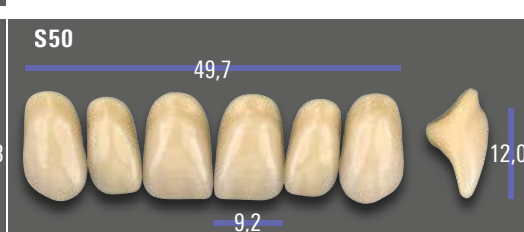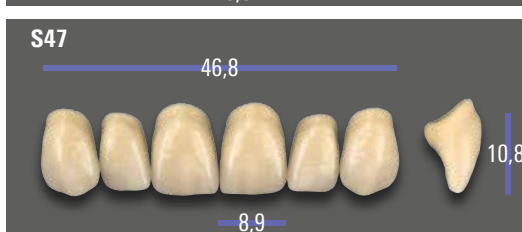



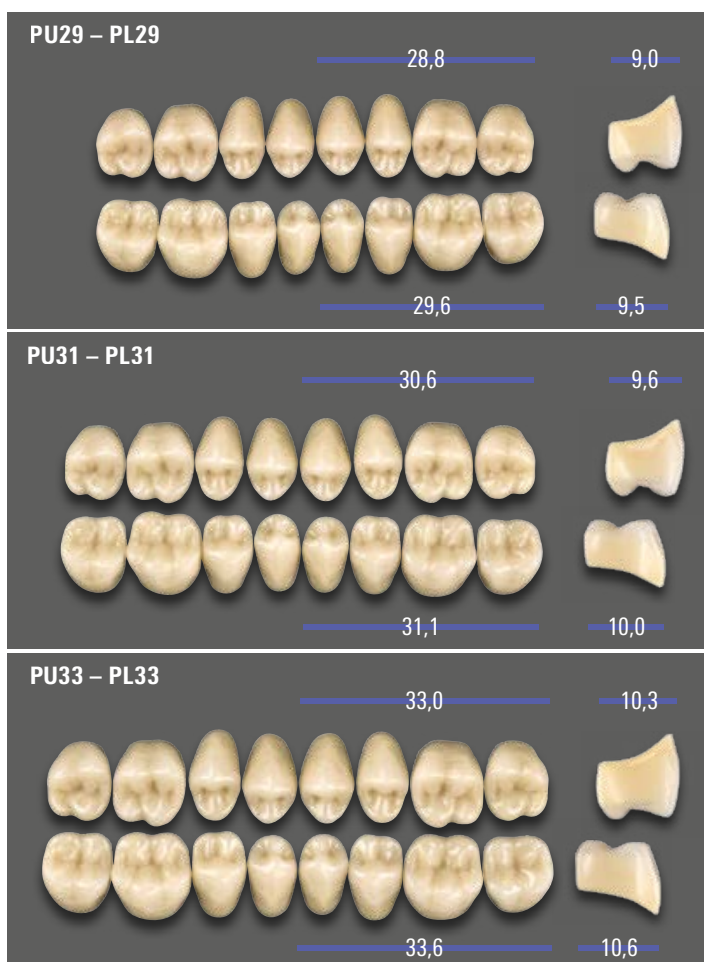

# Variedade de formas.

## Dentes posteriores



## Combinações recomendadas

<b>VITA MFT</b> Dentes anteriores	<b>MS/N.º</b>  mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	<b>MI/N.º</b>  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
<b>VITA MFT</b> Dentes posteriores	<b>MS/N.º</b>  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	<b>MI/N.º</b>  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Os valores nesta tabela são apenas recomendações. A combinação apropriada depende, em grande parte, da situação individual do paciente.



# As soluções ideais no processo.



## Determinação da cor

Determinação de cores com VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE ou escalas de cores VITA.



## Determinação do formato

Escolha o formato adequado do dente diretamente de seu estoque dentário. A determinação do formato também é possível com o carta de formas.



## Seu dente protético VITA MFT

Simplesmente. Direto ao ponto.  
Agora disponível em 16 x cores VITA SYSTEM 3D-MASTER e 16 x cores VITA classical A1-D4.



## União adesiva

Use VITACOLL como promotor de adesão seguro entre os dentes protéticos VITA MFT e a base da prótese. VITAFOL é o material isolante de silicone adequado para esse efeito.



## Caracterização

Caracterize sua prótese com o compósito fotopolimerizável de micropartículas VITA VM LC. Alternativamente, estão disponíveis os pigmentos fotopolimerizáveis VITA AKZENT LC.



# Estamos aqui para ajudar você

## Hotline do Suporte de Vendas

Tel: +49 7761 562-884  
Fax: +49 7761 562-299  
das 8h às 17h CET  
info@vita-zahnfabrik.com

## Hotline técnica

Tel: +49 7761 562-222  
Fax: +49 7761 562-446  
das 8h às 17h CET  
info@vita-zahnfabrik.com



## Nota

Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de manuseamento ou utilização incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Publicação deste folheto de produto: 02.24

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste folheto informativo. A versão mais recente você encontra em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos possuem a marca **CE 0124 VITA MFT\***

Os produtos/sistemas de outros fabricantes mencionados neste documento são marcas registradas dos respectivos fabricantes.



## Referências

### Ensaio interno, VITA P&D:


VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento  
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Alemanha  
Dra. Berit Gödiker, Diretora de Projeto da Divisão VITA P&D,  
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

### Dados detalhados do ensaio

Consulte a documentação técnico-científica

VITA MFT\*

Download através de [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

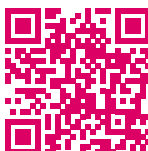

Para obter mais informações sobre  
VITA MFT,  
[www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT](http://www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT)



**VITA MFT®**

**VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Alemanha

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

**Siga-nos nas  
redes sociais!**

