

VITA SMART.FIRE®

El aparato de cocción eficiente para restauraciones directamente en la clínica



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 2022-06



VITA – perfect match.

VITA

SISTEMA VITA SMART.FIRE®: RESUMEN DE TODAS LAS SOLUCIONES



Aparato de cocción para la clínica

Unidad de mando

Juego de accesorios integrado

¿Qué?

- VITA SMART.FIRE es un aparato de cocción especialmente desarrollado para la clínica odontológica, que permite realizar cocciones de cristalización, de glaseado, de maillajes y de corrección de todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica.

¿Para qué?

- VITA SMART.FIRE ayuda a optimizar el proceso de trabajo. Sus programas preinstalados están específica y perfectamente adaptados a cada material, a fin de facilitar un proceso de cocción intuitivo. Es posible configurar perfiles de usuario personalizables para maximizar la flexibilidad.

¿Con qué?

- El VITA SMART.FIRE SYSTEM incluye el aparato de cocción con juego de accesorios integrado y la unidad de mando táctil separada, capaz de controlar hasta cuatro aparatos de cocción.

VENTAJAS

TOUCH & FIRE!

Seleccione un programa preinstalado e inicie directamente el proceso de cocción: ¡listo!



1. Manejo intuitivo

2. Comodidad de uso

3. Funcionamiento fiable

TOUCH & FIRE

Intuitivo

- Menús claramente estructurados con símbolos de programa autoexplicativos
- Manejo intuitivo gracias a la selección del material y al inicio del programa en un solo paso

Cómodo

- Programas preinstalados para todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica
- Pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución con extraordinaria resistencia al rayado y a la rotura

Fiable

- Funcionamiento fiable gracias a la larga vida útil de la tecnología de cocción
- Carcasa resistente con superficies selladas

LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE®

El aparato de cocción



Para todas las cocciones y los materiales de uso habitual

Aparato de cocción VITA SMART.FIRE®

¿Qué?

- Aparato de cocción compacto y cómodo para el uso directamente en la clínica
- Tecnología de cocción longeva y robusta para garantizar un funcionamiento fiable
- Carcasa resistente con superficies selladas para facilitar la limpieza
- Cajón de servicio integrado para tener siempre a mano los accesorios, como p. ej., soportes de cocción
- Calibración de la temperatura totalmente automática para garantizar resultados fiables

¿Para qué?

- Para cocciones de cristalización, de glaseado, de maquillaje y de corrección

LOS COMPONENTES DE VITA SMART.FIRE®:

La unidad de mando



VITA vPad excellence


¿Qué?

- Unidad de mando con programas preinstalados para todos los materiales habituales para confeccionar restauraciones directamente en la clínica
- Manejo perfecto y calidad de imagen óptima gracias a la pantalla táctil de alta resolución de 10 pulgadas
- Concepto de manejo intuitivo que permite la selección del material y el inicio del programa en un solo paso
- Menú claramente estructurado con símbolos autoexplicativos para la selección rápida del programa y 11 perfiles personalizables
- Función de asistencia basada en software que proporciona una guía paso a paso por el proceso de cocción
- Control de hasta cuatro aparatos de cocción con un solo elemento de mando.
- Función multimedia

¿Para qué?

- Permite un proceso de cocción sencillo e intuitivo

LOS COMPONENTES DE **VITA SMART.FIRE®**: Los accesorios

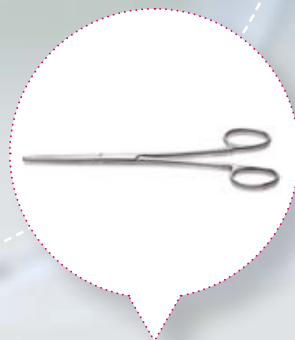

Accesorios de **VITA SMART.FIRE®**

¿Qué?

- Juego de accesorios integrado en el aparato de cocción para facilitar el proceso de cocción
- Componentes: soporte de cocción, guata refractaria, pernos de platino, pinza para piezas de cocción y mesa de enfriamiento

¿Para qué?

- De este modo, el equipo de la clínica tiene siempre a mano todo lo importante directamente junto al aparato de cocción


SINOPSIS DE LOS PRODUCTOS Y DEL SISTEMA



VITA SMART.FIRE®

Denominación	Dimensiones	Datos técnicos	Volumen de suministro	Ref.
Aparato de cocción para la clínica	Carcasa Ø 230 mm P: 300 mm Al: 340 mm Cámara de cocción Ø 80 mm Al: 43 mm	Conexión eléctrica: 230 voltios CA, 50 Hz o bien 100/110 voltios CA, 50/60 Hz Consumo de potencia: 950 W Temperatura de la cámara de cocción: 1050 °C	1 aparato de cocción 1 juego de accesorios 1 instrucciones de uso	DSF220 (versión de 230 V) DSF100 (versión de 100 V) DSF110 (versión de 110 V)
Unidad de mando	An: 260 mm P: 150 mm Al: 200 mm	Pantalla táctil TFT 10 pulgadas, 1280 x 800 Puertos USB/SD	1 cable de conexión	
Accesorios	—	—	2 pernos de platino 1 guata refractaria 1 soporte de cocción 1 pinza para piezas de cocción 1 mesa de enfriamiento	
Bomba de vacío (opcional)	—	—	1 bomba de vacío 1 tubo de vacío	DVPU220
Control multihorno (opcional)	—	—	1 Multipump 1 caja de distribución	D61000 D65000

Encontrará más información acerca de VITA SMART.FIRE
en nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

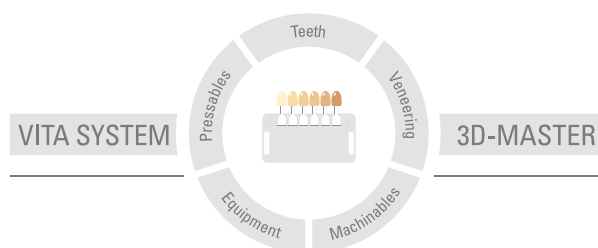

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-06

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE® lleva el marcado CE conforme a las Directivas CE 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2011/65/CE.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik