

VITA

Piccole pennellate.
Grande effetto.



VITA AKZENT® LC

Supercolori per compositi
fotopolimerizzabili per la
caratterizzazione estetica
di restauri dentali.



Caratterizzazione

VITA AKZENT® LC

Sistema di supercolori/glasura fotopolimerizzante.



VITA AKZENT LC sono supercolori fotopolimerizzabili in composto per la riproduzione di effetti cromatici individuali e correzioni cromatiche. I supercolori convincono per la loro poliedricità, per l'applicazione efficiente e precisa e per la buona stabilità cromatica e di lucentezza.

I supercolori VITA AKZENT LC sono universali e ideali per la caratterizzazione extraorale di protesi dentali in

- Ceramica ibrida
- Composito CAD/CAM
- Composito di rivestimento estetico
- Basi protesiche
- Polimeri acrilici per la stampa 3D
- Denti artificiali

Inoltre, possono essere utilizzati in modo ottimale per la caratterizzazione interna nella tecnica di rivestimento con compositi.

Affidabilità

Riproduzione affidabile, fedele al modello naturale, delle sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti e alla lavorazione intuitiva.

Semplice

Modifiche cromatiche estremamente semplici grazie alle masse Chroma per la gestione sistematica della cromaticità e la riproduzione estetica ottimale della gengiva.

Efficiente

Lavorazione efficiente grazie a effetti cromatici puntuali o all'applicazione di colori su intere superfici, caratterizzata da viscosità ottimali.



Effetti fedeli nel dettaglio.

Estetica naturale di colore rosso-bianco

Per l'individualizzazione cromatica di basi protesiche è possibile usare VITA AKZENT LC EFFECT STAINS. Gli EFFECT STAINS sono ideali per consentire una riproduzione fedele della gengiva.


Le masse sono particolarmente scorrevoli e quindi ideali per un'applicazione precisa. [L'applicazione è semplice: per i dettagli, consultare le istruzioni di impiego nr. 10748.](#)



Individualizzazione ricca di sfaccettature

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS sono colori versatili che consentono una riproduzione degli effetti fedele al modello naturale,

come ad esempio decolorazioni del colletto/delle fessure, zone dello smalto traslucide, calcificazioni e molto altro ancora.

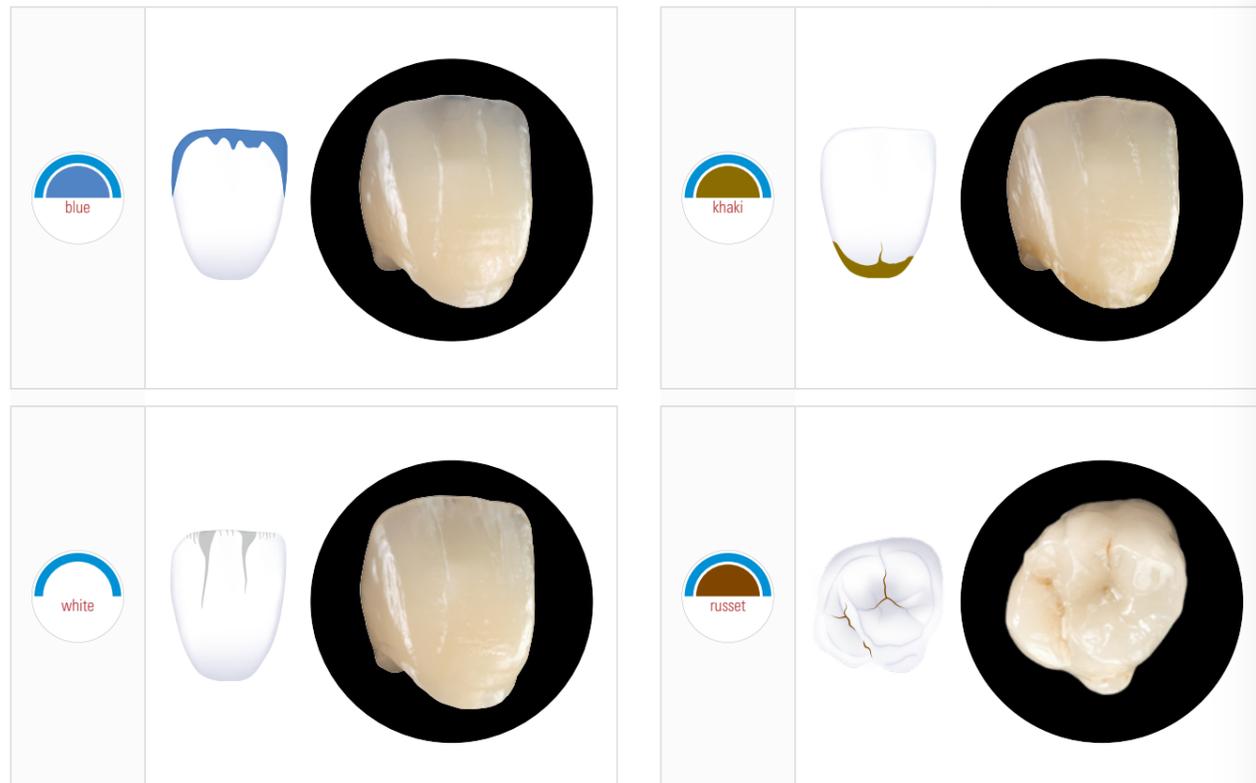

Correzioni cromatiche sicure per una corrispondenza di colore eccellente.

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

VITA AKZENT LC CHROMA STAINS servono all'intensificazione sistematica del croma all'interno di un gruppo di colori.

VITA classical A1–D4

Colori	Colori	Colori	Colori
 A red-brown	A1 A2 A3 A3.5 A4	 B red-sun	B1 B2 B3 B4
 C grey-brown	C1 C2 C3 C4	 D grey-red	D2 D3

PERFECT MATCH



Insufficiente corrispondenza cromatica



Correzioni cromatiche con
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS



Perfetta corrispondenza cromatica



Altre informazioni nei video tutorial:
[www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/
akzentlc/all/ifu/correctionc](http://www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc)

Fatti e documentazioni.

Resistenza di legame

Test sul legame adesivo

VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Campioni originali: denti protesici VITAPAN pitturati prima dell'invecchiamento simulato

Invecchiamento simulato
con test a cicli termici
(5000 cicli, 5 °C/55 °C)



Risultato:
denti protesici VITAPAN pitturati dopo l'invecchiamento simulato

Fonte: Studio interno, VITA R&S, relazione 0628/19, 03/20, Dr. M. Gmehling ([1] v. retro prospetto)

Applicazione del colore molto precisa

VITA AKZENT LC offre stabili supercolori effetto con una viscosità convincente per un'applicazione precisa e mirata al fine di una riproduzione fedele nel dettaglio di tutte le caratteristiche cromatiche individuali.

Test di stabilità

VITA AKZENT LC (white)



1. Applicazione del supercolore sulla piastra di vetro



2. Controllo della stabilità mediante inclinazione della piastra


Fonte: Studio interno, VITA PM, relazione 0478/21, 10/21, H. Kimmich ([2] v. retro prospetto)

Elevata stabilità.


VITA AKZENT LC è caratterizzato da una superficie omogenea che garantisce un'eccellente stabilità alla decolorazione. Nei test, il materiale ha mostrato un'eccellente stabilità del colore dopo 12 settimane di immersione in acqua, tè e caffè. VITA AKZENT LC consente una riproduzione cromatica estremamente brillante e

un'elevata lucentezza stabile grazie alla matrice polimerica rinforzata con particelle di carica in biossido di silicio. Inoltre, dopo 20 ore di simulazione dell'usura (equivalente a 200 giorni di pulizia dei denti 2 volte al giorno x 3 min.), ha mostrato un'eccellente grado di lucentezza alla prova di abrasione da spazzolino.

Eccellente stabilità alla decolorazione

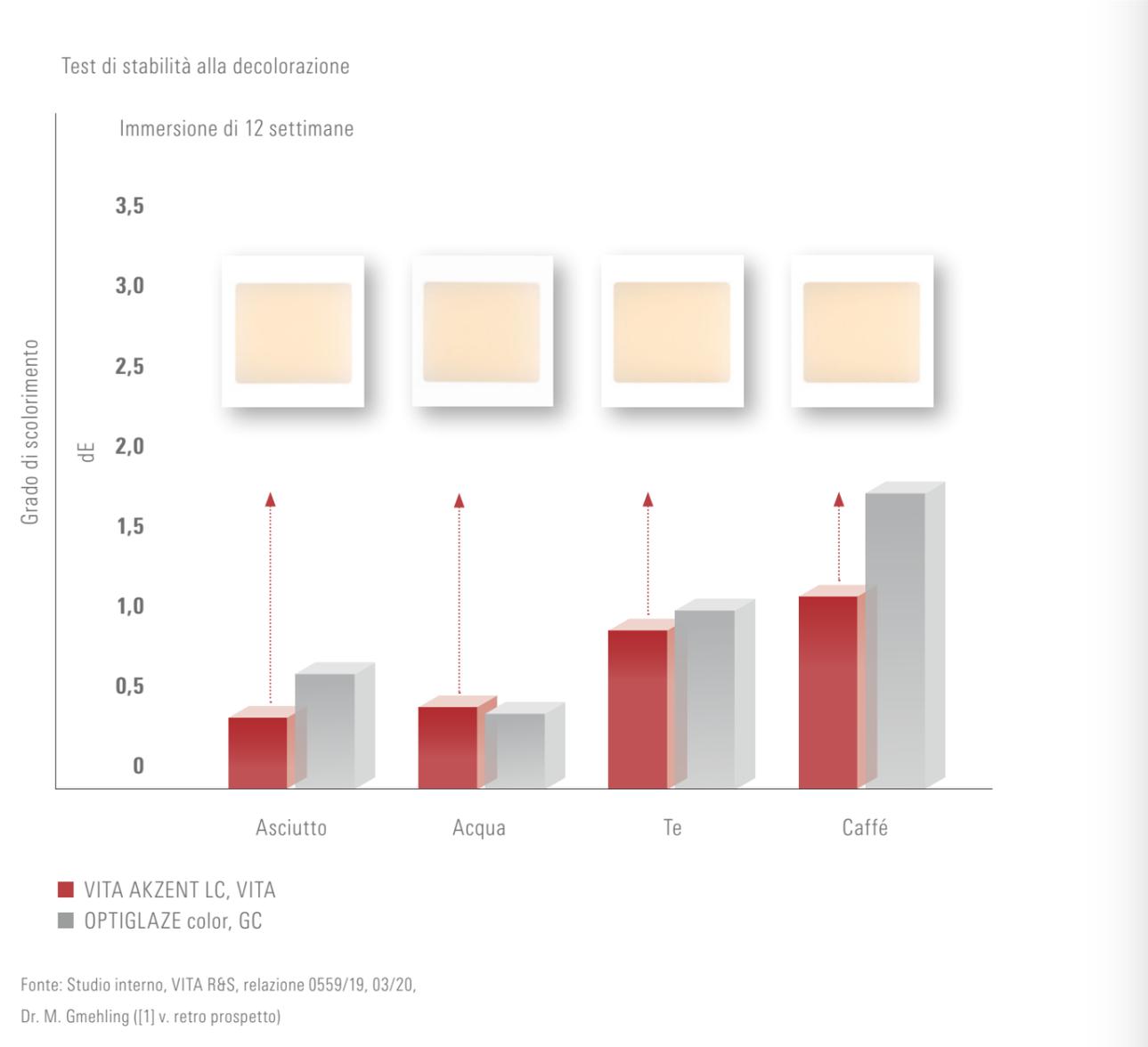

Elevata resistenza all'usura/della lucentezza

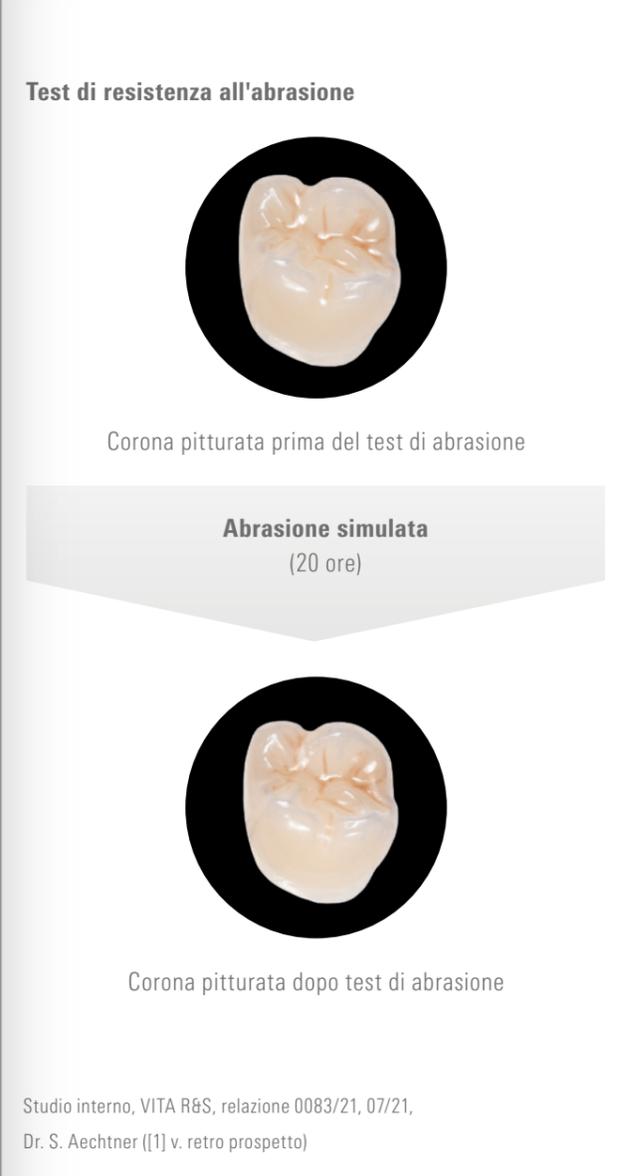

Colori e varianti.

VITA AKZENT® LC Portfolio

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS



Per la riproduzione fedele nel dettaglio di caratteristiche ed effetti individuali

white	orange	dark-red	grey
cream	russet	purple	black
lemon	khaki	blue	
sun	pink	grey-blue	

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS



Per l'incremento sistematico della cromaticità

VITA Classical A1-D4

A red-brown	B red-sun	C grey-brown	D grey-red
-------------	-----------	--------------	------------

VITA SYSTEM 3D-MASTER

L corn-yellow	M2 red-yellow	M3 dark-yellow	R light-red
---------------	---------------	----------------	-------------

VITA AKZENT® LC GLAZE



Per una sigillatura superficiale duratura e brillante

glaze

VITA AKZENT® LC ACCESSORI

Componenti di sistema perfettamente correlati assicurano efficienza di lavorazione

- Cleaner
- Pennello, microbrush
- Piastra di miscelazione

Assortimenti VITA AKZENT® LC

Assortimento base VITA AKZENT® LC

STANDARD KIT

Per la riproduzione di effetti



Contenuto:

- 6 x EFFECT STAINS (white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
- 1 x GLAZE
- Accessori: cleaner, pennello, microbrush, piastra di miscelazione

Assortimenti aggiuntivi VITA AKZENT® LC

EXPERT KIT CLASSICAL

Per la riproduzione di effetti & correzioni cromatiche



Contenuto:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS classical
- 1 x GLAZE
- Accessori: cleaner, pennello, microbrush, piastra di miscelazione

EXPERT KIT 3D-MASTER

Per la riproduzione di effetti & correzioni cromatiche



Contenuto:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS 3D-MASTER
- 1 x GLAZE
- Accessori: cleaner, pennello, microbrush, piastra di miscelazione

GINGIVA KIT

Per l'individualizzazione della base protesica



Contenuto:

- 4 x EFFECT STAINS (cream, pink, dark red, purple)
- 1 x GLAZE
- Accessori: cleaner, 1 pennello, microbrush, piastra di miscelazione

Soluzioni adatte al workflow.



Determinazione del colore dei denti

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide



Produzione di riabilitazioni dentali

VITA ENAMIC, composito CAD/CAM, composito di rivestimento estetico, basi protesiche, VITA VIONIC SOLUTIONS, denti artificiali VITA



Caratterizzazione Glasura

VITA AKZENT LC



Lucidatura

VITA Polish Hybrid



Fissaggio

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839
Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 2025-03

Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE 0124**: VITA AKZENT® LC

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only

Riferimenti

Studi interni, VITA R&S:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dr. Stefan Aechtner, Capoprogetto VITA R&S,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati:

Vedere la documentazione tecnico scientifica
VITA AKZENT® LC
Download dal sito www.vita-zahnfabrik.com



Per ulteriori informazioni su VITA AKZENT LC
scansionare il QR-Code.
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germania

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Seguici sui
Social Media!

