

VITA

Precisa determinazione del colore.
Massima sicurezza.



VITA Easyshade® V

Determinazione del colore affidabile
su denti naturali, restauri ceramici
e per trattamenti di sbiancamento.





Determinazione digitale del colore dei denti

VITA Easyshade® V

Determinazione del colore di alta precisione –
Riproduzione del colore sicura

Una caratteristica essenziale di qualità delle protesi estetiche è la corrispondenza del colore dei denti naturali e del restauro. Ciò presuppone la determinazione del colore dei denti e la sua esatta riproduzione.

VITA Easyshade V supporta odontoiatri e odontotecnici nella determinazione e nella riproduzione del colore del dente, offrendo, grazie a molteplici caratteristiche, numerosi vantaggi che contribuiscono alla sicurezza di processo:

- Indipendenza dalle condizioni di luce grazie alla misurazione spettrofotometrica del colore
- Determinazione efficiente del colore tramite una sola misurazione anziché un approccio ripetitivo al colore giusto
- Grazie a metodi metrici oggettivi, attuabile anche da parte di personale odontoiatrico inesperto o con ridotte competenze in ambito cromatico
- Visualizzazione dei risultati di misurazione su quattro diversi sistemi di colore: VITA classical A1–D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA Bleachedguide 3D-MASTER® – per colori Bleached, nel trattamento sbiancante, coordinate cromatiche (valori LCh o Lab)
- Diversi metodi di misurazione, come la misurazione del colore medio e la determinazione del colore dei denti come misurazione a tre punti (cervicale, centrale e incisale) per l'assegnazione locale del colore dei denti
- In combinazione con VITA Assist e VITA mobileAssist + comunicazione e documentazione del colore dei denti semplificate

Preciso

Determinazione del colore semplice e precisa in pochi secondi. Processo sicuro e comunicazione semplice tra studio e laboratorio.

Versatile

Utilizzabile con denti naturali e restauri ceramici. Efficace per la consulenza e il monitoraggio dei trattamenti di sbiancamento.

Economico

La determinazione del colore dei denti con VITA PERFECT MATCH consente di risparmiare tempo e denaro, riducendo i reclami e la necessità di finitura.



// VITA Easyshade V permette a noi e ai nostri pazienti la sicurezza necessaria nella determinazione del colore dei denti, anche come monitoraggio del decorso. Otteniamo risultati chiari, ad esempio anche prima e dopo i trattamenti sbiancanti. Tutto questo ci garantisce un vero valore aggiunto nella pratica quotidiana.”

Dr. med. dent. Iris Kraljevic
Centro di Profilassi Zurigo, Svizzera

Versatile.

Quale Easyshade è adatto alle vostre esigenze?

Mentre Easyshade V offre possibilità di misurazione versatili che supportano anche la comunicazione con il laboratorio, Easyshade LITE si concentra su un'applicazione semplice esclusivamente sul dente naturale.



Vorrei ...	VITA Easyshade® V	VITA Easyshade® LITE
... determinare precisamente il colore naturale dei denti nella scala cromatica VITA classical A1 – D4 o VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... ottenere indicazioni sulle deviazioni del colore del dente misurato rispetto al valore di colore più vicino.	✓	✓
... uno strumento affidabile per poter monitorare e valutare nel corso di trattamenti di sbiancamento, con una trasmissione semplice dei dati delle immagini e dei pazienti.	✓	-
... raccomandazioni concrete su come si possa ottenere un adattamento ancora più preciso al colore del dente misurato, ad esempio miscelando i colori (in VITA SYSTEM 3D-MASTER).	✓	-
... determinare precisamente restauri nella scala cromatica VITA classical A1 – D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	-
... utilizzare il software VITA Assist e l'app VITA mobileAssist + per la comunicazione e la documentazione professionale del colore dei denti.	✓	-
... un'indicazione dei valori Lab e LCh.	✓	-
Uso	Tasto di misura, display touch	Tasto di misurazione
Funzionamento	Funzionamento a batteria (connettore)	2 batterie AA



VITA Assist e VITA mobileAssist +

Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio


Con il software per PC basato su Windows VITA Assist si possono documentare e gestire in modo professionale referti odontoiatrici e informazioni sul colore dei denti. VITA Assist consente di integrare i risultati di misura del VITA Easyshade V in fotografie digitali dei pazienti, inoltre offre strumenti di elaborazione delle immagini e molteplici funzioni di commento. Con la banca dati è possibile gestire casi clinici e scambiare efficientemente informazioni tra studio e laboratorio.



Con la pratica app VITA mobileAssist + è possibile trasferire con modalità wireless i dati del VITA Easyshade V nell'app, dove possono essere combinati con una fotografia del paziente e quindi inviati via e-mail. Tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità mobile con uno smartphone o un tablet.



Soluzioni adatte al workflow.

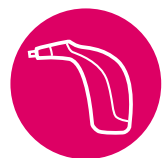

Determinazione del colore dei denti

Scala cromatica VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4 con VITA Bleachedshades, VITA Bleachedguide 3D-MASTER, VITA Toothguide 3D-MASTER con Bleached Shades



CAD/CAM

VITABLOCS, VITA YZ, VITA ENAMIC, VITA SUPRINITY PC



Caratterizzazione

Supercolori e masse glasura VITA AKZENT Plus, VITA AKZENT LC



Cottura

VITA VACUMAT 6100 M, VITA SMART.FIRE ADVANCED



Lucidatura

VITA CERAMICS Polishing Set / VITA Polish Cera Paste



Fissaggio

VITA ADIVA Solutions



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839
Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alla brochure di prodotto. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 2025-04. Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marchiati: VITA Easyshade® V è marcato CE in conformità alle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU. **VITA Easyshade®** LITE è marcato CE in conformità alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU. I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.


Riferimenti

Studi interni, VITA R&S:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dott. Berit Gödiker, Capoprogetto VITA R&S,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati:

Consultare la documentazione tecnico-scientifica
VITA Easyshade® V e **VITA Easyshade® LITE**
Download dal sito www.vita-zahnfabrik.com

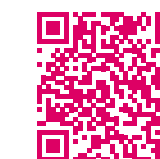

Per ulteriori informazioni su **VITA Easyshade® V**
scansionare il QR-Code.
www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHADE_V



VITA Easyshade® V

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

**Follow us on
Social Media!**

