

# VITA SMART.FIRE®

Die effiziente Brenneinheit für Chairside-Versorgungen



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 2022-06



VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA SMART.FIRE® SYSTEM – ALLE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK



integriertes  
Zubehör-Set

Chairside-Brenneinheit

Bedienelement

### Was?

- VITA SMART.FIRE ist eine speziell für die Zahnarztpraxis entwickelte Brenneinheit für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände aller gängigen Chairside-Materialien.

### Wofür?

- Der VITA SMART.FIRE unterstützt einen optimalen Arbeitsablauf. Für die intuitiv einfache Brandführung sind materialspezifisch ideal abgestimmte Programme bereits vorinstalliert. Für eine größtmögliche Flexibilität können individualisierbare Anwenderprofile eingerichtet werden.

### Womit?

- Das VITA SMART.FIRE SYSTEM umfasst die Brenneinheit mit integriertem Zubehör-Set und das separate Touch-Bedienelement, das bis zu vier Brenneinheiten steuern kann.

## VORTEILE

### TOUCH & FIRE!

Vorinstalliertes Programm auswählen,  
Brandführung direkt starten – fertig!



1. intuitive Bedienung

2. komfortabler Einsatz

3. verlässliche Funktion

# TOUCH & FIRE

#### Intuitiv

- Übersichtliche Menüführung mit selbsterklärenden Programmsymbolen
- Intuitive Bedienung dank Materialwahl und Programmstart in einem Schritt

#### Komfortabel

- Vorinstallierte Programme für alle gängigen Chairside-Materialien
- Hochauflösender 10-Zoll Touch-Bildschirm mit herausragender Kratzresistenz und Bruchfestigkeit

#### Verlässlich

- Zuverlässige Funktion durch langlebige Brenntechnik
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen

## DIE VITA SMART.FIRE® KOMponentEN – Die Brenneinheit



### VITA SMART.FIRE® Brenneinheit

#### Was?

- Platzsparende Chairside-Brenneinheit für komfortablen Einsatz
- Langlebige, robuste Brenntechnik für zuverlässige Funktion
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen für einfache Reinigung
- Integrierte Service-Schublade für stets griffbereites Zubehör wie z.B. Brennträger
- Vollautomatische Temperaturkalibrierung für verlässliche Ergebnisse

#### Wofür?

- Für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände



## DIE VITA SMART.FIRE® KOMponentEN – Das Bedienelement



### VITA vPad excellence


#### Was?

- Bedienelement mit vorinstallierten Programmen für alle gängigen Chairside-Materialien
- Hochauflösendes 10-Zoll-Touch-Display für perfekte Bedienung und beste Bildqualität
- Intuitives Bedienkonzept für Materialwahl und Programmstart in einem Schritt
- Übersichtliches Menü mit selbsterklärenden Symbolen für schnelle Programmwahl und 11 individualisierbaren Profilen
- Softwarebasierte Assistenzfunktion für gestützte Schritt-für-Schritt-Brandführung
- Steuerung von bis zu vier Brenneinheiten mit nur einem Bedienelement
- Multifunktionsfunktion

#### Wofür?

- Für die intuitiv-einfache Brandführung

## DIE VITA SMART.FIRE® KOMponentEN – Das Zubehör

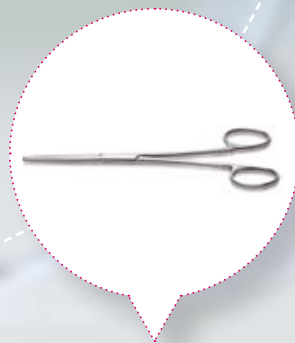

### VITA SMART.FIRE® Zubehör

#### Was?

- In Brenneinheit integriertes Zubehör-Set zur komfortablen Brandführung
- Bestandteile: Brenngutträger, Brennwatte, Platinstifte, Brenngutzange und Abkühltisch

#### Wofür?

- So hat das Praxisteam direkt an der Brenneinheit alles Wichtige stets griffbereit


## PRODUKT- UND SYSTEMÜBERSICHT



### VITA SMART.FIRE®

Bezeichnung	Maße	Technische Daten	Lieferumfang	Art.-Nr.
Chairside-Brenneinheit	<b>Gehäuse</b> ø 230 mm T: 300 mm H: 340 mm <b>Brennkammer</b> ø 80 mm H: 43 mm	<b>Elektrischer Anschluss:</b> 230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz <b>Leistungsaufnahme:</b> 950 W <b>Brennkammertemperatur:</b> 1050 °C	1x Brenneinheit 1x Zubehör-Set 1x Gebrauchsanweisung	<b>DSF220</b> (230V-Version)  <b>DSF100</b> (100V-Version)  <b>DSF110</b> (110V-Version)
Bedienelement	B: 260 mm T: 150 mm H: 200 mm	TFT-Touch-Display 10 Zoll, 1280 x 800 USB-/SD-Schnittstellen	1x Anschlusskabel	
Zubehör	–	–	2x Platinstifte 1x Brennwatte 1x Brenngutträger 1x Brenngutzange 1x Abkühltisch	
Vakuumpumpe (optional)	–	–	1x Vakuumpumpe 1x Vakuumschlauch	<b>DVPU220</b>
Multiofensteuerung (optional)	–	–	1x Multipump 1x Switchbox	<b>D61000</b> <b>D65000</b>

Weitere Informationen zu VITA SMART.FIRE  
finden Sie unter: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

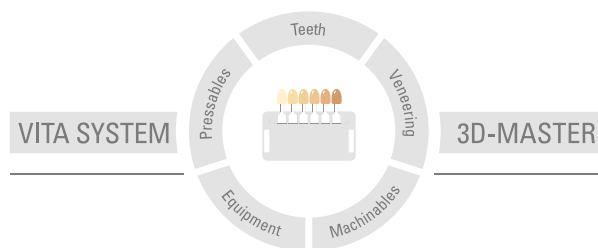

**Zur Beachtung:** Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-06

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE®** ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)