

VITA SMART.FIRE®

Эффективная печь для работы в клинике



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 2022-06



VITA – perfect match.

VITA

VITA SMART.FIRE® – ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ



Интегрированный набор принадлежностей

Chairside-печь

Пульт управления

Что?

- Специально для работы в клинике была разработана печь VITA SMART.FIRE. С ее помощью можно проводить кристаллизационный, глянцеобразующий и корректировочный обжиг, а также обжиг красителей для всех стандартных Chairside-материалов.

Для чего?

- VITA SMART.FIRE поддерживает оптимальный рабочий процесс. А предустановленные программы, идеально согласованные с материалами, интуитивно упростят проведение обжига. Для максимальной гибкости можно настроить индивидуальные профили пользователей.

С помощью чего?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM включает печь, пульт управления, а также интегрированный набор инструментов и отдельный сенсорный пульт управления, который может управлять до четырех печей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TOUCH & FIRE!

Выбрать и сразу запустить программу обжига - готово!



1. Интуитивное управление

2. Удобное использование

3. Надежная функциональность

TOUCH & FIRE

Интуитивность

- Меню с самообъясняющими символами для быстрого выбора программы
- Интуитивное управление благодаря выбору материала и пуску программы в один шаг

Удобство

- Предварительно установленные программы для всех стандартных врачебных материалов
- Ударопрочный и устойчивый к царапинам 10-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением

Надежность

- Надежная работа благодаря долговечности конструкции
- Прочный герметичный корпус

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®

Печь



Печь VITA SMART.FIRE®

Что?


- Компактная печь для простого применения в клинике
- Долговечная, прочная конструкция печи для надежной работы
- Устойчивый корпус с герметичными поверхностями для простого ухода
- Интегрированный выдвижной ящик для инструментов.
- Полностью автоматическая настройка температуры для надежных результатов

Для чего?

- Для кристаллизационного, глянцеобразующего и корректировочного обжига, а также обжига красителей

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE®

Пульт управления

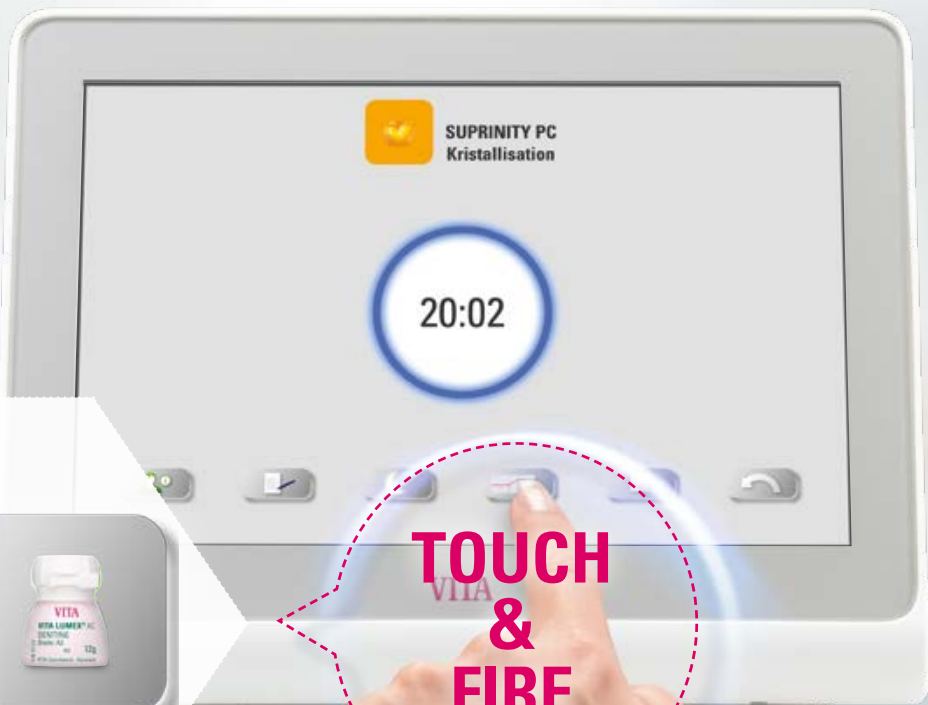

Обжиг



Красители



Коррекция

VITA vPad excellence


Что?

- Пульт управления с предустановленными программами для всех стандартных Chairside-материалов
- 10-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением для наилучшего качества изображения
- Интуитивная концепция управления для выбора материала и пуска программы в один шаг
- Меню с самообъясняющимися символами для быстрого выбора программы и 11 индивидуально настраиваемых профилей
- Функция ассистента для поэтапного обжига
- Управление до четырех печей только одним пультом управления
- Мультимедийная функция

Для чего?

- Для интуитивно понятного, простого обжига

КОМПОНЕНТЫ VITA SMART.FIRE® Принадлежности

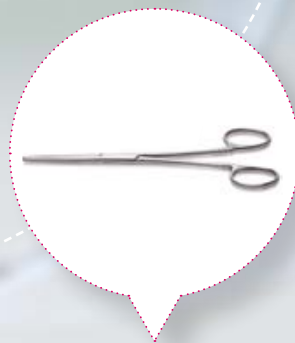

VITA Smart.FIRE® Принадлежности

Что?

- Интегрированный набор инструментов для комфортного обжига
- В набор входят: обжигový трегер, вата для обжига, платиновые штифты, печные щипцы и столик для охлаждения

Для чего?

- Таким образом все необходимое находится всегда под рукой


Обзор продуктов и систем



VITA SMART.FIRE®

Наименование	Размеры	Технические характеристики	Объем поставки	Кат. №
Chairside-печь	Корпус ø 230 мм Т: 300 мм Н: 340 мм Камеры обжига ø 80 мм Н: 43 мм	Электрическое подключение: 230 Вольт AC, 50 Гц или 100/110 Вольт AC, 50/60Гц Мощность: 950 Вт Температура камеры обжига: 1050 C	1х печь 1х набор принадлежностей 1х инструкция	DSF220 (230V-Version) DSF100 (100V-Version) DSF110 (110V-Version)
Пульт управления	Ш: 260 мм Г: 150 мм В: 200 мм	TFT-Touch-дисплей 10 дюймов, 1280 x 800 два USB/SD-порта	1 х электрический сетевой кабель	
Принадлежности	—	—	2 х платиновые штифты 1 х обжиговая вата 1х обжиговый трегер 1х печные щипцы 1 х столик для охлаждения	
Вакуумный насос (опционально)	—	—	1х вакуумный насос 1х вакуумный шланг	DVPU220
Управление несколькими печами	—	—	1 х MultiPump 1 х Распредкоробка	D61000 D65000

Более подробную информацию о VITA SMART.FIRE Вы можете найти на сайте: www.vita-zahnfabrik.com

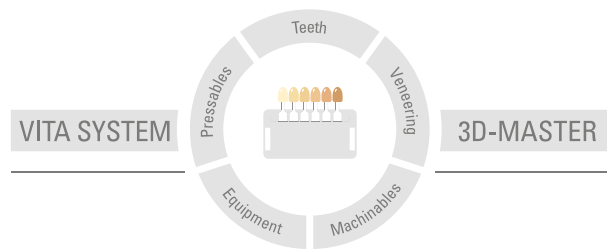

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2022-06

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE® отмечен знаком CE в соответствии с директивой EG 2006/95/EG, 2004/108/EG и 2011/65/EG.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik