

# Multiple indications for **composite success**

NEM-  
Legierungen

Titan-  
Legierungen

EM-  
Legierungen

Hochleistungs-  
polymere

Zirkondioxid

PMMA



## VITAVM®LC PRIMER

### 1 Bonding System – 6 Indikationen

- Wirtschaftlicher Vorteil durch Indikationsvielfalt
- Zuverlässigkeit dank hohem Haftverbund
- Prozesssicherheit aufgrund gewohnter Handhabung



Mehr erfahren

# VITAVM®LC PRIMER

## Haftvermittler zur Oberflächenkonditionierung

Der VITA VM LC PRIMER ist ein Haftvermittler zur Oberflächenkonditionierung. Als zweistufiges Haftvermittlersystem sorgt der VITA VM LC PRIMER für einen zuverlässigen Verbund zwischen Verblendkompositen und dentalen Gerüstwerkstoffen. Anwender haben durch das breit gefächerte Anwendungsspektrum einen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil, da sie künftig nur noch einen Primer benötigen, wo bislang mehrere nötig waren.

### Indikationsempfehlung

Gerüstmaterial	VITA VM LC PRIMER I	1. VITA VM LC PRIMER I + 2. VITA VM LC PRIMER II	VITA VM LC PRIMER II
Nichtedelmetalllegierungen	+	++	-
Edelmetalllegierungen	-	++	-
Titanlegierungen	+	++	-
Zirkondioxid	+	++	-
PMMA	-	++	+
Hochleistungspolymere (z.B. PEEK, PEKK)	-	++	+


++ sehr empfohlen    + empfohlen    - nicht empfohlen, nicht indiziert

Die VITA VM LC PRIMER I + II können materialspezifisch auch einzeln verwendet werden. In Kombination ermöglichen sie jedoch einen noch besseren Haftverbund. Beachten Sie hierzu unsere Indikationsempfehlung.

VITAVM®LC PRIMER I + II	Inhalt 2 x 5 ml	Art.-Nr. CVMLPSET
VITAVM®LC PRIMER I	Inhalt 5 ml	Art.-Nr. CVMLP014
VITAVM®LC PRIMER II	Inhalt 5 ml	Art.-Nr. CVMLP024



### Technische Daten

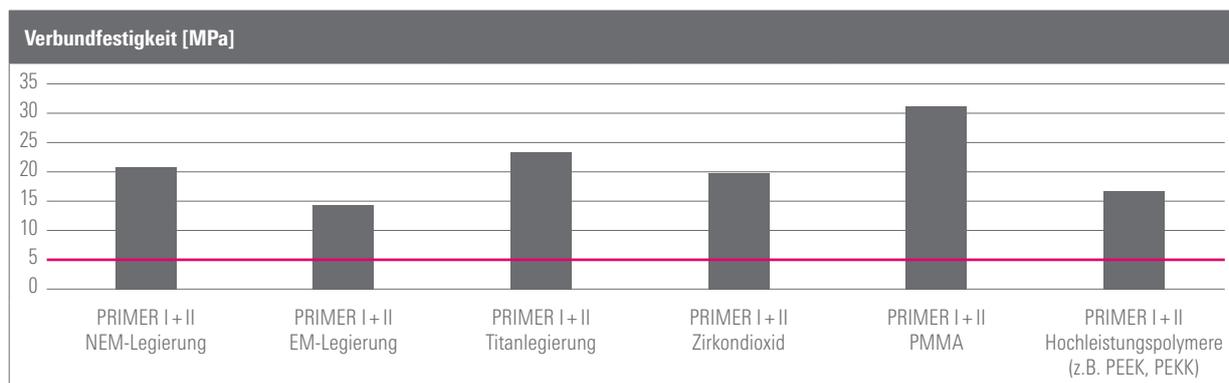

- Normanforderung an den Haftverbund    Abb.: Ermittlung der Verbundfestigkeit nach DIN EN ISO 10477    Quelle: Interner Entwicklungsbericht, VITA F&E

### Systemkomponenten

Der VITA VM LC PRIMER ergänzt das lichthärtende Mikropartikel-Komposit VITA VM LC zur extraoralen Erstellung von Restaurationen.



### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

E-Mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
Telefon: +497761 562-0  
Hotline: +497761 562-222

Besuchen Sie uns auch auf:  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



MD  
CE 0124