

La diversité des indications pour la réussite avec les résines composites

Alliages non-précieux

Alliages titane

Alliages précieux

Polymères hautes performances

Dioxyde de zirconium

PMMA



VITAVM®LC PRIMER

1 système de liaison - 6 indications

- Avantage économique grâce à la diversité des indications
- Fiabilité grâce à une adhérence élevée
- Sécurité du processus grâce à une manipulation habituelle



En savoir plus

VITAVM®LC PRIMER

Apprêt pour le conditionnement de surface

Le VITA VM LC PRIMER est un apprêt pour le conditionnement de surface. En tant que système d'apprêt en deux étapes, le VITA VM LC PRIMER assure une liaison fiable entre les résines composites cosmétiques et les matériaux d'infrastructure dentaire. Le large éventail d'applications procure aux utilisateurs un avantage économique important, car ils n'ont alors besoin que d'un seul apprêt plutôt que plusieurs comme c'était souvent le cas jusqu'à présent.

Indications conseillées

Matériau d'infrastructure	VITA VM LC PRIMER I	1. VITA VM LC PRIMER I + 2. VITA VM LC PRIMER II	VITA VM LC PRIMER II
Alliages non-précieux	+	++	-
Alliages précieux	-	++	-
Alliages de titane	+	++	-
Dioxyde de zirconium	+	++	-
PMMA	-	++	+
Polymères haute performance (par ex. PEEK, PEKK)	-	++	+


++ hautement recommandé + recommandé - non recommandé, non indiqué

Les VITA VM LC PRIMER I + II peuvent également être utilisés séparément en fonction du matériau. Cependant, lorsqu'ils sont combinés, ils permettent une adhérence encore meilleure. Veuillez consulter les indications conseillées à ce sujet.

VITAVM®LC PRIMER I + II	Contenu 2 x 5 ml	Réf. CVMLPSET
VITAVM®LC PRIMER I	Contenu 5 ml	Réf. CVMLP014
VITAVM®LC PRIMER II	Contenu 5 ml	Réf. CVMLP024



Données techniques

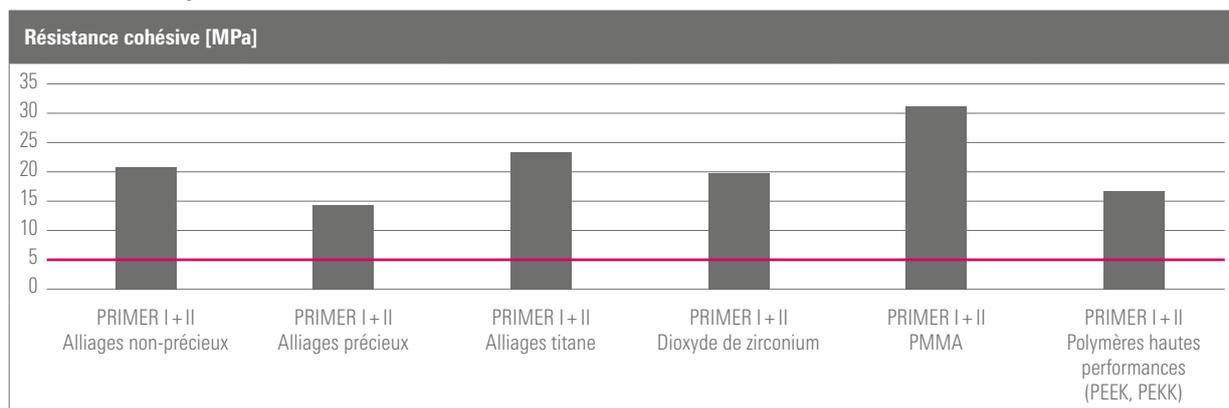

- Exigences normatives en matière d'adhérence

III. : détermination de la résistance de la liaison d'après DIN EN ISO 10477

Source : rapport de développement interne, VITA R&D

Composants du système

Le VITA VM LC PRIMER complète la résine composite photopolymérisable à base de microparticules VITA VM LC pour la réalisation extra-orale de restaurations.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Courriel : info@vita-zahnfabrik.com
Téléphone : +49 7761 562-0
Assistance téléphonique : +49 7761 562-222

Venez également nous rendre visite sous :
www.vita-zahnfabrik.com



MD
CE 0124