

VITA AKZENT® Plus

Termékismertető



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

VITA – perfect match.

VITA

Optimális. Egyszerű. Komplet.
Lazúrozás, markírozás és fényezés – függetlenül
a hőtágulási együtthatótól (WAK)

VITA AKZENT® Plus Optimális. Egyszerű. Komplet.



Több játéktér praxisban és laborban

Egyszerűen és hatékonyan szeretne lazúrozni, színezni és fényezni? Akkor VITA AKZENT Plus az Ön szortimentje.

A lazúrozó, markírozó és fényező festékekből álló rendszer a lehető legnagyobb játéktérrel biztosítja a praxisokban és laborokban.

Alkalmas valamennyi fogászati kerámia anyaghoz és minden WAK értékhez.

Új színek, új alkalmazási formák, új indikációk – VITA AKZENT Plus mindig szabad kezet biztosít Önnek.

Lehet por, paszta vagy spray, Ön döntheti el, hogyan használná a legszívesebben és leggazdaságosabban VITA AKZENT Plus anyagot.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Gombnyomásra egyenletes



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Tartozék		



Különösen jól használhatók olyan laborokban és praxisokban, ahol pl. monolit fogpótlásokat akarnak színben összehangolni. A szórható glazúr és lazúr festékek felhasználásra készek és könnyen felhordhatók.

A FLUOGLAZE LT egy erősen fluoreszcens glazúr-spray, amellyel természetes fluoreszcencia érhető el.

Előnyök:

- egyszerű és egyenletes felületkezelést biztosító egyenletes felhordás
- szórási veszteség nélküli célzott felhordás új, speciális szórófej segítségével





AKZENT Plus POWDER KIT Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Tartozék		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4 Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



A VITA AKZENT Plus POWDER masszákat jól alkalmazhatják azok a fogtechnikusok, akik ezzel szeretnék a klasszikus leplező kerámiákat és a finomszerkezetűt.

Előnyök:

- nagy rugalmassága és gazdaságossága
- egymással tetszés szerint keverhetők további egyedi színhatások elérése céljából
- színhatás, színtelítettség és színintenzitás gyors és egyszerű beállítása



VITA AKZENT® Plus PASTE Gyorsan egyedít



AKZENT Plus PASTE KIT Szortiment tartalma		
Termék	Szín	Tartalom
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Tartozék		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4 Szortiment tartalma		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



A VITA AKZENT Plus PASTE színező festékek optimálisan alkalmazhatók pl. VITABLOCS-ból készült fogpótlások gyors és egyszerű karakterizálására.

Előnyök:



- Felhasználásra kész paszta, melynek konzisztenciája állandó, és homogén a pigmentációja a gyors felhasználás érdekében
- egymással keverhetők az egyedi színhatások elérése céljából
- hígítható ill. újra összekeverhető
- színhatás, színtelítettség és színintenzitás gyors és egyszerű beállítása



A VITA AKZENT Plus PASTE FLUID gondoskodik az optimális konzisztenciáról, ha a paszták be- ill. kiszáradnak.



AKZENT Plus színválaszték Szortiment						
Termék	Szín- minta	Szín	Kód- szám	Készítményforma		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – transzlucens, lazúrozó színezők – bázisanyag színhatásának módosításához		Sárga	BS01			
		Sárgásbarna	BS02		✓	✓
		Narancs	BS03			
		Olívszürke	BS04			
		Szürkésbarna	BS05			
CHROMA STAINS classical A1–D4 – lazúrozó színezők a bázisanyag kromacitásának módosításához egy színcsoporton belül		vöröses-barnás	CSA			
		vöröses-sárgás	CSB			
		szürkés	CSC		✓	✓
		szürkés-vöröses	CSD			
CHROMA STAINS 3D-MASTER – lazúrozó színezők a bázisanyag kromacitásának módosításához egy világossági csoporton belül		sárgás	CSL			
		sárgás-vöröses	CSM2		✓	✓
		sárga-vörös	CSM3			
		vöröses	CSR			
		narancs	CSIO			
EFFECT STAINS – nagyon jó fedő, markírozó festékanyagok – természetes felületi effektekhez – rétegezés közbeni színezéshez		Fehér	ES01			
		Krémszín	ES02			
		Citromsárga	ES03			
		Napsárga	ES04			
		Narancs	ES05			
		Rozsdavörös	ES06			
		Khaki	ES07		✓	✓
		Rózsaszín	ES08			
		Sötétvörös	ES09			
		Lila	ES10			
		Kék	ES11			
		Szürkéskék	ES12			
		Szürke	ES13			
		Fekete	ES14			
GLAZE – homogén, csillogó felületekhez				✓	✓	✓
GLAZE LT – alacsony olvadáspontú glazúrmassza kerámiákhoz, 800°C alatti kiégetéssel				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – selymes matt felületekhez					✓	✓

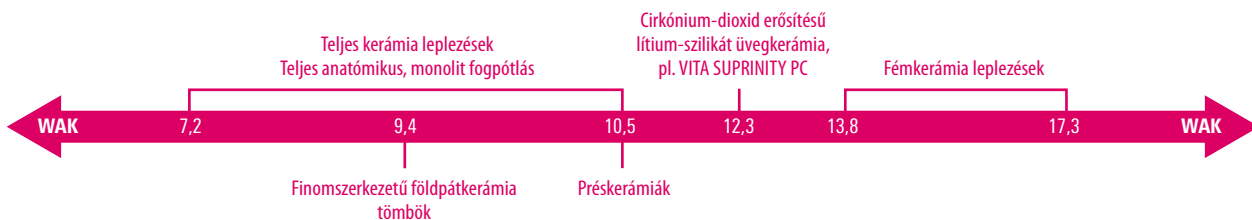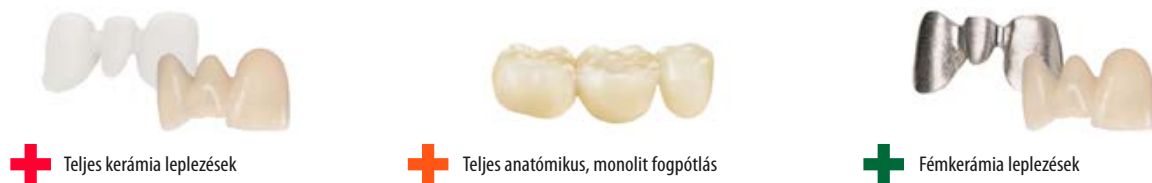

+ Sokoldalú felhasználás

Lazúrozás

Új a rendszerben: lazúrozó színezők (Body Stains).

A transzlucens színező festékek vékony színszűrőként hatnak.

Ezáltal kiválóan alkalmasak:

- Felület bevonására
- Bázisanyag színhatásának módosításához

Markírozás

Rendkívül finoman szemcsézett: markírozó színezők (Effect Stains).

Ezeknek a színezőknek főbb jellemzői elsősorban:

- az intenzív színhatás és
- a magas fedőerő

Ezért különösen jól alkalmazhatók természetes felületi effektek kialakítására és belső színezésre.

Fényezés

A fényes végeredményhez:


- VITA AKZENT Plus GLAZE – glazúrmassza a fényesen csillogó, homogén és üvegszerű felület eléréséhez
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – alacsony olvadáspontú glazúrmassza kerámiákhoz, 800°C alatti kiégetéssel
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – lazúrmassza selymes matt leplező felületekhez
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – erősen fluoreszcens glazúr-spray a természetes fluoreszcencia kialakításához

+ Feldolgozás még kényelmesebben

Valamennyi színező festék fluoreszcens, rendkívül finoman szemcsézett és színtabil.

A porok és paszták tixotróp konzisztenciája kedvezően befolyásolja az adott massa felhordását.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében reprodukálható.

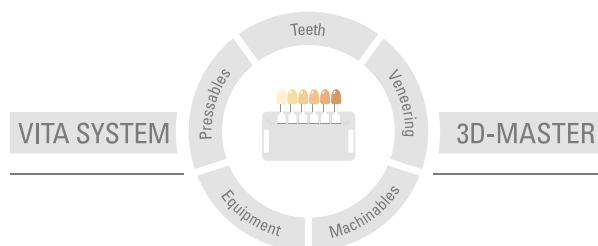

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2023-06

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a

CE 0124 jelzést:
VITA AKZENT® Plus



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik