

Forni VITA

Sistemi produttivi ad altissima funzionalità.



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore



VITA – perfect match.

VITA

VITA VACUMAT® 6000 M/MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS e VITA V60 i-Line® PLUS

Per soluzioni altamente individualizzate

Quattro forni dentali, una risposta:

Sistema modulare per la massima flessibilità ed economia

Il cliente è soddisfatto quando può contare sull'affidabilità di strumenti e sistemi. Con i forni dentali VITA il cliente è l'artefice del proprio sistema di cottura e VITA soddisfa la domanda di apparecchiature a costi contenuti abbinati a processi operativi ottimizzati. Grazie alla sua modularità il concetto innovativo consente all'utilizzatore di realizzare un sistema di cottura personalizzato.



Il portfolio di forni VITA comprende l'unità di cottura Premium VITA VACUMAT 6000 M, l'unità combinata di pressatura e cottura VITA VACUMAT 6000 MP, il forno di sinterizzazione HighSpeed VITA ZYRCOMAT 6100 MS e il forno per ceramica VITA V60 i-Line PLUS. L'offerta è completata da due unità di comando selezionabili a scelta e da diversi accessori. Tutti gli apparecchi sono progettati e realizzati in Germania.

L'utilizzatore inizia con i moduli necessari e in qualsiasi momento può decidere di completare il suo sistema. I forni dentali VITA assicurano lavoro piacevole, individualità, flessibilità e grazie a VITA Energy Efficiency sistemi di forni ad alta economia.



VITA VACUMAT® 6000 M Qualità Premium come standard



Accessori standard VITA VACUMAT 6000 M



Indicatore di stato a LED

L'utilizzatore al centro

L'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori è adatta per la cottura di tutte le ceramiche dentali. Il forno conquista per qualità ed estetica ad altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e confort al massimo grado.

Superiore fin nel minimo dettaglio

La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. L'indicatore di stato visibile da lontano ed i segnali acustici liberamente selezionabili informano anche a distanza sullo stato operativo in corso. Il design moderno con laccatura di alta qualità in sei moderni colori (antracite, rosso, blu, nero, turchese e bianco), attira lo sguardo sul posto di lavoro.



Nuovi materiali della camera di cottura

Tecnica di cottura di ultima generazione

Tutti i materiali e particolari tecnici sono basati sulle esigenze merceologiche specifiche e degli utilizzatori, e ottimizzati in funzione dei seguenti obiettivi:

- funzionamento perfetto
- massima durata e altissima affidabilità
- supporto all'utilizzatore in tutte le funzioni

VITA VACUMAT 6000 M offre:

- tecnica di cottura innovativa e materiali di alta tecnologia nella camera di cottura per una trasmissione ancora più omogenea del calore
- muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico e moderno design
- numerosi programmi Service e di controllo per un massimo di confort operativo, sicurezza e risparmio di tempo, come ad es.:
 - protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel materiale isolante (VITA AntiCon)
 - taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma con una precisione della temperatura garantita di $\pm 1^\circ\text{C}$ (VITA AutoAdjust)
 - funzione automatica di decontaminazione (VITA SpecialClean)
 - raffreddamento rapido controllato e programma notturno (VITA Energy Efficiency)
 - Protezione contro le interruzioni di corrente



VITA VACUMAT® 6000 MP Nel nome dell'efficienza



Inserto di pressatura

Cottura e pressatura in combinazione ottimale

L'unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i pregi di un moderno forno di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte dettano un nuovo standard. VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del VITA VACUMAT 6000 M. Inoltre esegue la pressatura di tutti i tipi di ceramica pressabile con tutti i sistemi di cilindri. Il riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti impedisce pressature errate (VITA PressControl).



Accessori standard VITA VACUMAT 6000 MP

Massima affidabilità.

La tecnica di pressatura ceramica VITA (VITA CPress) assicura una lunga durata dell'apparecchiatura e un funzionamento privo di inconvenienti. Contrariamente ai forni di pressatura con azionamento meccanico o elettrico, VITA punta sul funzionamento pneumatico. Questo sistema fronteggia meglio le elevate forze di pressatura in gioco e praticamente non è soggetto ad usura.

VITA VACUMAT 6000 MP offre:

- tutte le funzioni del VITA VACUMAT 6000 M
- Tecnica di pressatura ceramica sicura, sviluppata da VITA (VITA CPress)
- qualità Premium e innovativa tecnica di cottura e pressatura
- costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico e moderno design
- controllo automatico della corsa di pressatura con riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti (VITA PressControl)



VITA ZYRCOMAT® 6100 MS Prestazioni migliori



VITA ZYRCOMAT 6100 MS dispone di tre modalità di sinterizzazione a scelta: HighSpeed, convenzionale e definito dall'utilizzatore. Massima flessibilità!



Accessori standard VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Prestazioni ottimali a temperature elevate con VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Progettato e realizzato integralmente in Germania, VITA ZYRCOMAT 6100 MS garantisce:

- distribuzione termica omogenea nella camera di sinterizzazione
- taratura completamente automatica e precisione garantita della temperatura (VITA AutoAdjust)
- lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto (VITA Energy Efficiency)
- sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di zirconio bianco e ad elevata traslucenza, cromatizzato all'origine o manualmente in tutte le modalità per risultati di cottura costanti e convincenti



Indicatore di stato a LED

Acustico. Ottico. Raffinato.

Un indicatore a LED e segnali acustici liberamente selezionabili informano anche a distanza sulla fine cottura.

Anche il sistema di aerazione detta nuovi parametri. Grazie alla costruzione intelligente dell'apparecchio la colonna ascendente di calore non investe l'elettronica.

In tal modo l'elettronica è sempre protetta da sovraccarichi termici.

Migliore grazie a

- sinterizzazione HighSpeed in 60 minuti (VITA HighSpeed)
- sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 14 elementi
- sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO_2 e Al_2O_3
- sinterizzazione rispettosa dei materiali in tutte le modalità grazie al raffreddamento controllato fino a 200 °C
- VITA PreDry, preessiccazione a bassa temperatura integrata con passaggio fluido al processo di sinterizzazione
- VITA SpecialClean – cottura di detersione che rigenera la camera di cottura e consente la creazione ottimale dello strato vetroso di protezione sui termoelementi
- possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore flessibilità e produttività
- la soluzione più compatta, silenziosa e veloce della sua classe.

Sinterizzazione HighSpeed per tutti

Veloce. Più veloce. ZYRCOMAT.
Accelerate la vostra produttività
con VITA ZYRCOMAT 6100 MS.



VITA vPad Due modelli per tutte le esigenze.

VITA vPad comfort



VITA vPad excellence



La flessibilità esige opzioni

VITA vPad comfort e vPad excellence – entrambe le unità di comando sono caratterizzate da un'interfaccia utente semplice e intuitiva e da un software intelligente che provvede alla correzione automatica di impostazioni errate. Ciò significa maggior confort, sicurezza e piacere sul lavoro. Da chi desidera razionalmente „un risultato di cottura perfetto in modo semplice e sicuro” fino all'individualista che vuole una soluzione „esclusiva e confortevole” le VITA vPads offrono la soluzione giusta per tutte le esigenze.

Massima economicità

Le VITA vPad assicurano la massima economia ed efficienza.
Con VITA vPad excellence si possono gestire fino a quattro forni.
Ciò significa che se si acquista un altro forno di cottura, un forno
combinato o un forno di sinterizzazione non occorre un'ulteriore unità
di comando.

VITA vPad comfort Semplice. Affermato. Affidabile.



VITA vPad comfort

Comfort significa produttività. Sfruttato correttamente permette di guadagnare in efficienza e tempo. VITA vPad comfort lo dimostra. L'unità di comando colpisce per il suo stile e design innovativo, aprendo nuovi orizzonti per quando riguarda confort operativo. Un display TFT da 10" di ultima generazione con simboli autoesplicativi e Fotoviewer integrato agevola l'uso.

Dotazione e funzioni

Programmi

- **500** programmi individualizzabili di cottura, pressatura e sinterizzazione
- programmi di cottura preinstallati per iniziare immediatamente le cotture
- possibilità di modifiche in corso di programma
- istruzioni d'uso incluse per tutti i materiali VITA

USB



- porta USB per collegare mouse o tastiera del PC
- semplice trasferimento dei programmi di cottura tramite chiavetta USB su altre vPad comfort per l'ottimizzazione dei processi operativi
- aggiornamento via chiavetta USB

Fotoviewer

- con diverse funzioni per visualizzare e memorizzare fotografie dei pazienti
- memoria da **2 GB**

Funzioni di controllo e Service

- memorizzazione di tutti i dati di cottura per sistemi di qualità (FDS – Firing Data System)
- programma notturno a basso consumo energetico (VITA Energy Efficiency)
- contatore di esercizio per forno e muffola
- VITA AntiCon - funzione automatica di eliminazione dell'acqua di condensa
- funzione PDP* (*Personal Data Protection) per la protezione delle impostazioni individuali
- avvisi acustici dello stato di programma liberamente selezionabili
- garanzia **due** anni

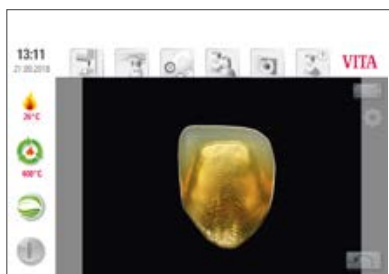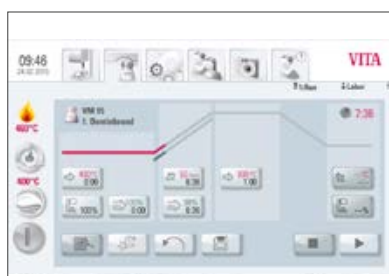

VITA vPad excellence Proiettato nel futuro



VITA vPad excellence

Per VITA la regola è soddisfare le esigenze più avanzate. vPad excellence lo conferma. Integra funzionalità, confort e semplicità d'uso ottimali.

Il display TFT da 10" con simboli autoesplicativi, Fotoviewer integrato e numerose opzioni aggiuntive consente un controllo „One-Touch“ ancora più comodo, esclusivo e intuitivo per la gestione di fino a quattro unità di cottura.

Dotazione e funzioni

VITA vPad excellence ha tutte le funzioni Service e di controllo di vPad comfort, e inoltre programmi speciali:

- gestione di fino a **quattro** unità di cottura VITA tramite Swichbox con un'unica unità di comando
- alimentazione del vuoto fino a quattro forni VITA da un'unica pompa grazie a VITA MultiPump
- display TFT da **10"**
- **1000** programmi individualizzabili di cottura, pressatura e sinterizzazione
- tutti i materiali VITA e molti programmi per materiali di altri produttori già installati per iniziare immediatamente con le cotture
- installazione di fino a **undici** profili utente individuali con protezione dei programmi preferiti e delle impostazioni individuali
- 1 slot SD
- **due** porte USB per collegare mouse e tastiera PC, chiavetta USB per aggiornamenti software, upload/download di fotografie, profili e programmi di cottura
- Fotoviewer da **due** GB e con funzioni ampliate
- istruzioni d'uso incluse per tutti i materiali VITA
- controllo intelligente del ciclo Service
- funzione di assistenza digitale incl. funzione video
- web-Browser via WLAN
- salvataggio dei dati di cottura per sistemi di qualità
- desktop configurabile liberamente
- prima messa in funzione guidata
- funzionalità di aggiornamento automatico tramite WLAN



Programmato per il futuro

Esigenze e obiettivi. Anche le VITA vPad crescono. Perciò è possibile impostare fino a 1000 programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione per tutti i materiali ceramici dentali, inserirli o aggiornarli per mezzo di una chiavetta USB. Con VITA vPad excellence, gli aggiornamenti più recenti vengono ricevuti via WLAN, mentre nel caso del modello VITA vPad comfort possono essere eseguiti tramite chiavetta USB.

VITA FURNACE App Per una visione di insieme ottimale.

La VITA FURNACE App, attraverso la VITA vPad excellence, consente di comunicare con i forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP, VITA ZYRCOMAT 6000/6100 MS e VITA V60 i-Line PLUS tramite WLAN.

L'app può essere scaricata gratuitamente da Google Playstore. Sono supportati i dispositivi Android (smartphone & tablet) a partire da Android 5.0.

La app offre i seguenti vantaggi:



Indicatore di stato

- indica il progredire del programma di cottura in corso
- miglioramento e ottimizzazione dei processi e della gestione dei tempi



Funzione Messenger

- informa sulla fine del programma
- si evitano tempi morti




Dati forno

- i dati dell'apparecchio possono essere visualizzati e trasmessi direttamente all'Assistenza Tecnica VITA



Funzione Standby

- attiva o disattiva la funzione Standby
- si evitano perdite di tempo

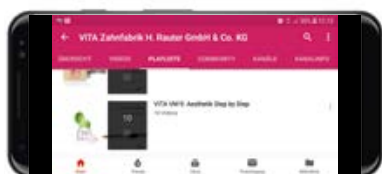

Video applicativi per materiali VITA

- tool con indicazioni per una migliore lavorazione dei materiali VITA

VITA V60 i-Line® PLUS Senza compromessi. Elevata potenza.



Facilità d'uso in primo piano

Il forno VITA V60 i-Line PLUS è focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e uso semplice e intuitivo. Il design senza tempo di questo nuovo forno coniuga la consueta qualità e una moderna tecnologia a un prezzo interessante.

All'altezza delle aspettative

La gamma di funzioni ridotte all'essenziale e l'imbattibile rapporto prezzo-prestazioni sono indice di efficienza e funzionalità. Il forno VITA V60 i-Line PLUS convince per il display touch da 7", un'interfaccia utente autoesplicativa e l'affermata muffola in quarzo VITA di lunga durata per risultati di cottura perfetti. Il robusto telaio e i piani di appoggio lavori applicabili sono estremamente resistenti.



VITA V60 i-Line® PLUS Vantaggi



Risultati di cottura eccellenti



Programmi base, Service e di controllo particolarmente semplici

- **Semplicità d'uso:** il display touch di grandi dimensioni e a elevata risoluzione e la guida a menu autoesplicativo facilitano notevolmente il lavoro con il VITA V60 i-Line PLUS. Il design minimalista e la tecnica robusta focalizzano la funzione principale: cotture affidabili.
- **Plug & play:** nessun dispendioso procedimento di montaggio — è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro!
- **Made in Germany:** ingegneria avanzata e qualità ottimali.
- **Qualità VITA:** utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi!
- **Semplicità di manutenzione:** costruzione modulare e agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi.
- **Forno ad elevate prestazioni:** instancabile. Estremamente robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.
- **Ridotto all'essenziale:** un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia espressamente a costose funzioni aggiuntive. Questo forno si concentra su funzioni base e affidabilità assoluta.

A breve sarà disponibile un nuovo dongle Wi-Fi:

Il dongle Wi-Fi consente di ottenere aggiornamenti online periodici, in modo da mantenere il forno sempre in perfetto stato.

Il dongle Wi-Fi consente la connessione alla VITA FURNACE App, che permette di tenere sotto controllo comodamente dallo smartphone il processo e il tempo di cottura, nonché di accendere e spegnere il dispositivo da remoto.

"Il VITA V60 i-Line PLUS è
esemplare per tutto quanto desidero da
un forno VITA: qualità e
risultati di cottura perfetti."

Daniel Sperlich (odontotecnico Master)

VITA

V60 i-Line® PLUS



VITA VACUMAT® 6000 M/MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS e VITA V60 i-Line® PLUS

Vantaggi



- **Alta produttività.** La modalità "One-Touch" riduce significativamente i tempi di processo. La gestione di fino a quattro forni con una sola unità di comando costituisce un notevole risparmio di costi.
- **Sicurezza per il futuro e flessibilità.** All'occorrenza il sistema di cottura può essere ampliato con un altro forno di sinterizzazione, cottura o combinato di cottura/pressatura, ampliando anche la gamma di prestazioni del laboratorio o studio.
- **Qualità Premium come standard.** Affermata tecnologia di cottura VITA "Made in Germany". La correlazione ottimale tra termoelementi e materiale della camera di sinterizzazione assicura una distribuzione omogenea del calore e risultati di cottura perfetti e costanti.
- **Massima individualità.** Le unità di cottura sono disponibili in un massimo di sei varianti, personalizzabili anche con pannelli laterali colorati. Anche la superficie menu delle VITA vPad può essere adattata alle proprie necessità.
- **Eccellenti prestazioni per Service e garanzia.** Due anni di garanzia su tutti i componenti, comprese le parti soggette ad usura e la muffola. Fornitura di un apparecchio sostitutivo entro 24 ore (in Europa).

Puntate sui forni VITA e risparmiare con ogni ciclo di cottura.



VITA Energy Efficiency offre i seguenti vantaggi con l'ultima generazione di forni dentali VITA:

- riduzione dei costi energetici fino al 70% rispetto ai precedenti modelli VITA.
- materiali dei forni dentali VITA di lunga durata ed energicamente efficienti.
- ulteriori misure di ottimizzazione, elaborate nel quadro della ricerca continua nel settore VITA Energy Efficiency.



VITA V60 i-Line PLUS



VITA ZYRCOMAT 6100 MS




VITA VACUMAT 6000 M



VITA VACUMAT 6000 MP

Profitto e uso consapevole delle risorse non si escludono ma influenzano a vicenda.

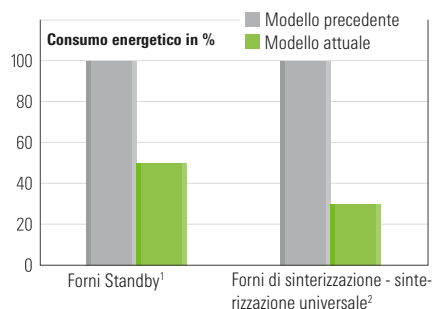

¹ Confronto tra VITA VACUMAT 4000 PREMIUM T e VITA VACUMAT 6000 M, risultati di misura per un'ora di funzionamento.

² Confronto tra VITA Zyrcomat e VITA ZYRCOMAT 6100 MS, risultati di misura per lo svolgimento di un programma.

Tutti i risultati di misura sono stati elaborati dalla Ricerca & Sviluppo VITA.

L'uso parsimonioso e consapevole di energia è un criterio decisionale di importanza crescente quando si tratta di acquistare apparecchiature.

Spesso sono le innovazioni tecniche a rendere possibile un risparmio di energia. Grazie a materiali di alta qualità ed efficienti sotto l'aspetto energetico la tecnologia adottata dai forni dentali VITA combina qualità di prodotto e performance di altissimo livello qualitativo con la strategia certificata VITA Energy Efficiency.

Deposito:	Cliente:	Nr. ordine:
		Data:

Immagine	Denominazione		Cod.	Quantità
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata antracite (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000M220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000M110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000M100	
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata rosso (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MKR220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MKR110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MKR100	
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata blu (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MHB220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MHB110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MHB100	
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata nero (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MTS220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MTS110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MTS100	
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata turchese (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MTB220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MTB110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MTB100	
	VITA VACUMAT 6000 M Unità di cottura laccata bianco (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MRW220	
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MRW110	
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MRW100	

Deposito:	Cliente:	Nr. ordine:
		Data:

Immagine	Denominazione		Cod.	Quantità
	VITA VACUMAT 6000 MP Unità combinata di cottura e pressatura laccata antracite (230x630x370 mm)	VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V	DV6000MP220	
		VITA VACUMAT 6000 MP, 110 V	DV6000MP110	
		VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V	DV6000MP100	
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS Unità di cottura laccata antracite (315x470x500 mm)	VITA ZYRCOMAT 6100 MS, 230 V	DZY6100MS220	
	VITA V60 i-Line PLUS Unità di cottura lamiera d'acciaio, laccata (260x420x570 mm)	VITA V60 i-Line PLUS, 230 V	DV60IP220	
		VITA V60 i-Line PLUS, 110 V	DV60IP110	
		VITA V60 i-Line PLUS, 100 V	DV60IP100	

Forni VITA Configuratore

	VITA vPad Unità di comando	VITA vPad comfort (per VITA VACUMAT 6000 M/ VACUMAT 6000 MP/ZYRCOMAT 6100 MS)	DVPADCV1	
		VITA vPad excellence (per max. quattro VITA VACUMAT 6000 M/ VACUMAT 6000 MP/ZYRCOMAT 6100 MS)	DVPADEV1	

	VITA VACUMAT 6000 M / MP Pannelli laterali 1 set da 2 pz.	Set pannelli laterali blu	D47002	
		Set pannelli laterali verde menta	D47003	
		Set pannelli laterali rosa	D47004	
		Set pannelli laterali albicocca	D47005	
		Set pannelli laterali bianco	D47006	
		Set pannelli laterali grigio scuro	D47007	
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS Pannelli laterali 1 set da 2 pz.	Set pannelli laterali blu	D53000	
		Set pannelli laterali verde menta	D53001	
		Set pannelli laterali bianco	D53002	
	Set cifre (magnetiche Nr. 1 – 4)		D47008	
	VITA SWITCHBOX II per modalità multiforno (max. 4 VACUMAT 6000 M / MP / ZYRCOMAT 6100 MS): necessario a partire dal 2. forno.		D47009	
	320 x 210 x 110 mm 6,4 kg	Pompa per vuoto VITA 230 V	DVPU220	
		Pompa per vuoto VITA 110 V	DVPU110	
		Pompa per vuoto VITA 100 V	DVPU100	
	1 CD	FDS-Software per PC	D34230NG	
	VITA MultiPump (solo per VITA VACUMAT 6000 M/MP) per l'alimentazione di fino a quattro forni con un'unica pompa per vuoto. Da ordinare come accessorio per la pompa per vuoto VITA a partire dal secondo forno. Da utilizzare solo in combinazione con VITA vPad excellence. Contenuto set base: 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per due unità di cottura. Dimensioni: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm		D61000	
	VITA MultiPump set aggiuntivo 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per 3. e 4. unità di cottura		D61004	

[illegible]


Sistemi VITA.

Soluzioni ottimali per il processo di lavorazione



* Avvertenza „Fasi procedurali/cottura opzionali”: i materiali ceramica feldspatica e ceramica ibrida possono essere inseriti direttamente dopo il fresaggio e la lucidatura. Per la ceramica feldspatica le seguenti fasi procedurali sono pertanto opzionali. In linea di principio per la ceramica ibrida valgono le stesse indicazioni, ma non si devono eseguire cotture. Per il biossido di zirconio prima della caratterizzazione/individualizzazione occorre eseguire una cottura di sinterizzazione.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

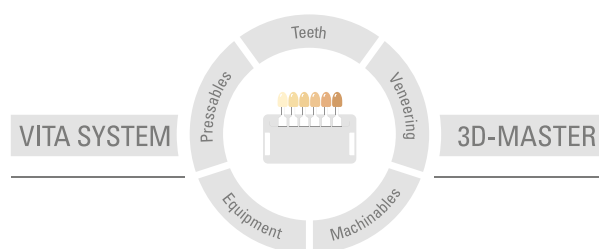

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2023-07

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

I seguenti prodotti sono marcati:



VITA VACUMAT® 6000 M, VITA VACUMAT® 6000 MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS e VITA V60 i-Line® PLUS sono marcati CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik