

VITA

One for All Ceramics and more



VITA LUMEX® AC

Modern és megbízható leplezőkerámia
minden ismert vázkerámiához és titánhoz





Előnyök

Sokoldalú

Egyszerűsíti a mindennapi munkát a széles indikációs spektrumnak köszönhetően.

Megbízható

A fogszín megbízható helyreállítása a VITA Farbmach formulának köszönhetően.

Hatékony

A magas égési stabilitás és a bizonyított tartósság biztonságos és hatékony folyamatokat tesz lehetővé.

Leplezőkerámia

VITA LUMEX® AC

Sokoldalú. Megbízható. Hatékony.

VITA LUMEX AC egy leplezőkerámia, amely a VITA anyagformula révén színhű, életteli és megbízható eredményeket biztosít.

- Az összes ismert fémentes vázanyag (cirkónium-dioxid, lítium-diszilikát és földpátkerámia) leplezéséhez
- Titán leplezéséhez
- Vázmentes rekonstrukciók (pl. veneer) előállításához



Színhű. Természetes.

Minden részletében lenyűgöző fénydinamika



ENAMEL-masszák, amelyek természetes transzlucenciával rendelkeznek.




OPAL TRANSLUCENT masszák, amelyek ragyogó, opalizáló fényjátékot tesznek lehetővé.



POWERWASH és FLUO INTENSE masszák, amelyek hozzájárulnak a természetes fluoreszcencia helyreállításához.

Finom fokozatosság a természetes esztétikáért

Finoman árnyalt ENAMEL masszák fehéres-opaktól az átlátszóig: így minden kívánt transzlucencia fokozathoz rendelkezésre áll a megfelelő kerámia.

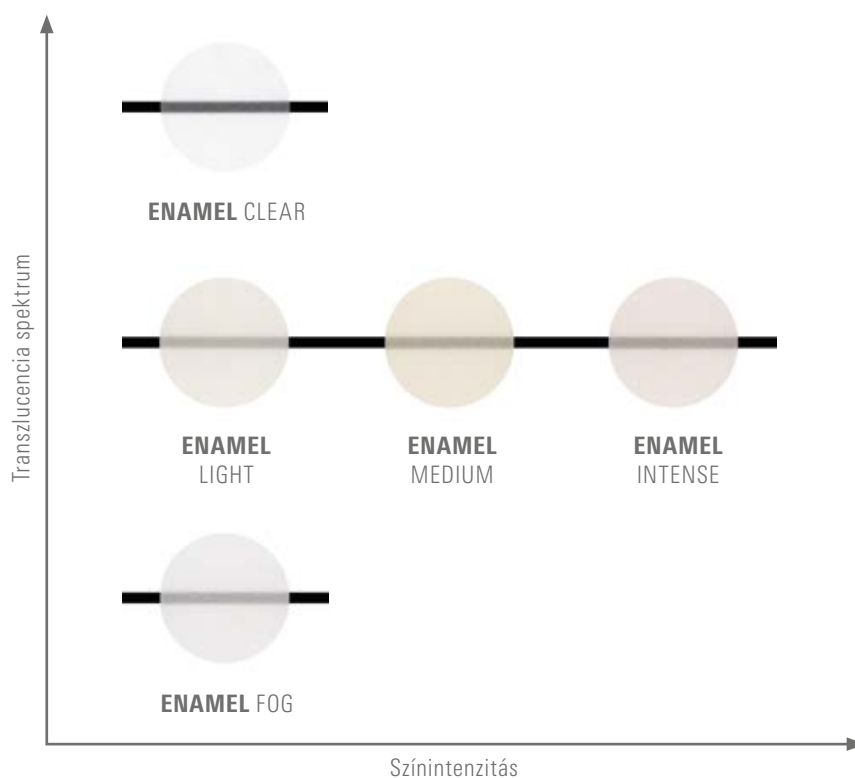





Rétegezés és kiégetés egysége.

Lenyűgöző égési stabilitás

VITA LUMEX AC-val a fogpótlások a várakozásoknak megfelelően kerülnek ki a kályhából: a lenyűgöző égési stabilitás révén a kiégetés összhangban van a rétegezéssel.



Megbízható égési eredmények

VITA LUMEX AC megbízható, mérettartó égési eredményeket garantál, hála a nagysűrűségű, homogén anyagszerkezet miatti minimális anyagzsugorodásnak.

HeraCeram Zirkonia 750

VITA LUMEX AC

1. kiégetés 750 °C

760 °C



2. kiégetés -10 °C


-10 °C

3. kiégetés -10 °C

-10 °C

4. kiégetés 720 °C

730 °C

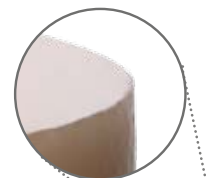

Nagyon pontos mintázás

Nagyon precíz mintázás, figyelemre méltó stabilitással – ezt teszi lehetővé VITA LUMEX AC, ami a kerámiarészecskék megfelelő szemcseméret-eloszlásának és mikrofogazottságának tudható be.

A szemcseméret-eloszlás és a finom fogazottság példaértékű, egyszerűsített megjelenítése



Forma. Szín. Fény.


Milyen előnyökkel jár a **VITA LUMEX**[®] AC leplezőkerámia?
Válaszok egyenesen a laborból!



VITA LUMEX AC leplezőkerámia abszolút színtabil, és pontosan illeszkedik a VITA színtulcsához. Ha a színtulcsból az A2 színt határozom meg, akkor **VITA LUMEX** AC-vel is pontosan ezt az eredeti VITA A2 eredményt kapom!”

Dr. Jorge Carro Juárez
fogorvos és fogtechnikus, Panotla, Tlaxcala, Mexico

Kiemelkedően esztétikus fogpótlások egyszerű rétegezéssel.

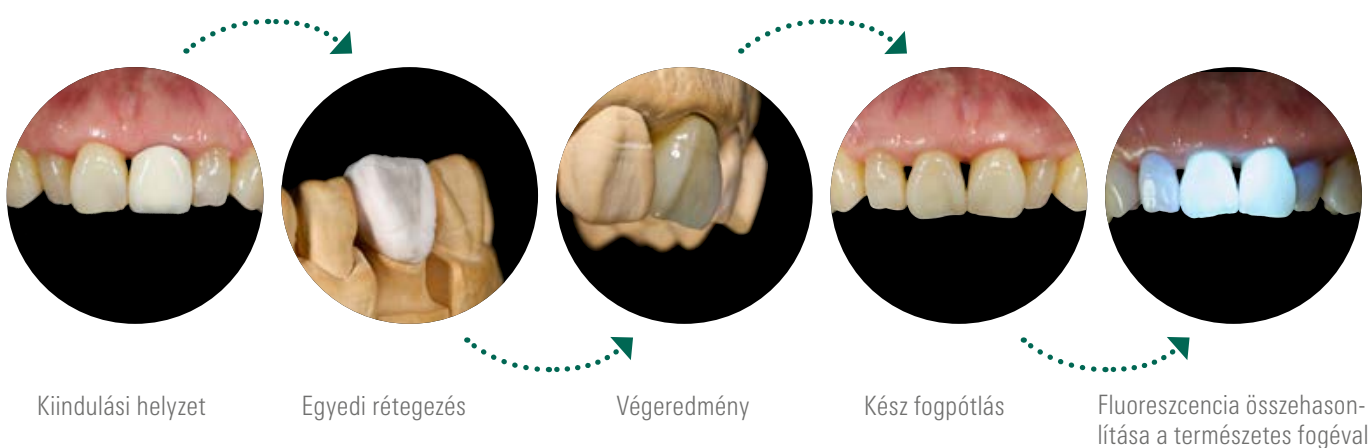

Esetleírás






Bizonyított stabilitás.

Magas szakítószilárdság

Kiváló szakítószilárdságának köszönhetően VITA LUMEX AC jó klinikai stabilitást és szilárdsági értékeket ér el a tesztek során, amelyek egyértelműen meghaladják a szabvány szerinti követelményeket.

Hajlítósilárdság

— — ISO szabvány

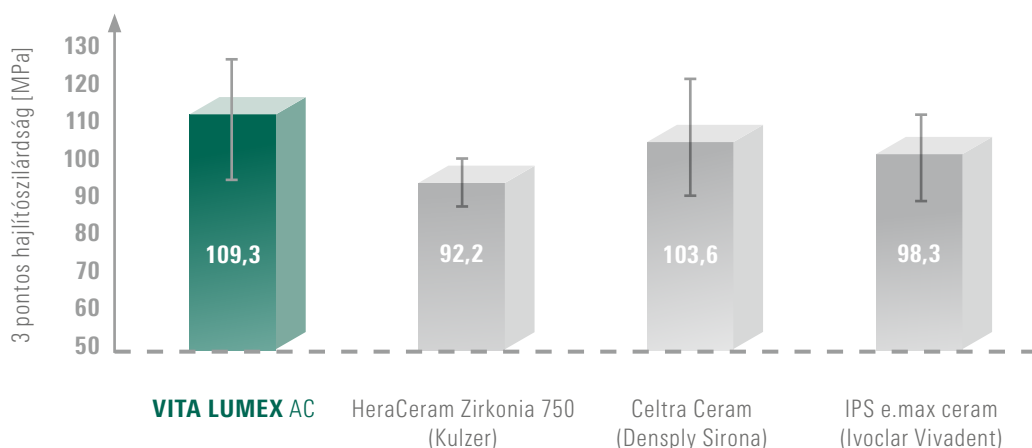


Forrás: Belső vizsgálat, VITA K+F, 3 pontos hajlítósilárdság-vizsgálat fenti anyagokkal, ISO 6872 szabvány szerint, Jelentés 08/19, Dr. B. Gödiker, ([1] lásd a prospektus hátoldalán!)

Nagyon jó kötésminőség

Az összehangolt hőtágulási együtthatónak (HTE) köszönhetően garantált a vázkerámiával való megbízható kötés. VITA LUMEX AC a tesztek során olyan kötőszilárdságot ér el, amelyek jóval meghaladják a szabvány előírásait.

Kötési szilárdság a cirkónium-dioxiddal (VITA YZ HT)

— — ISO szabvány

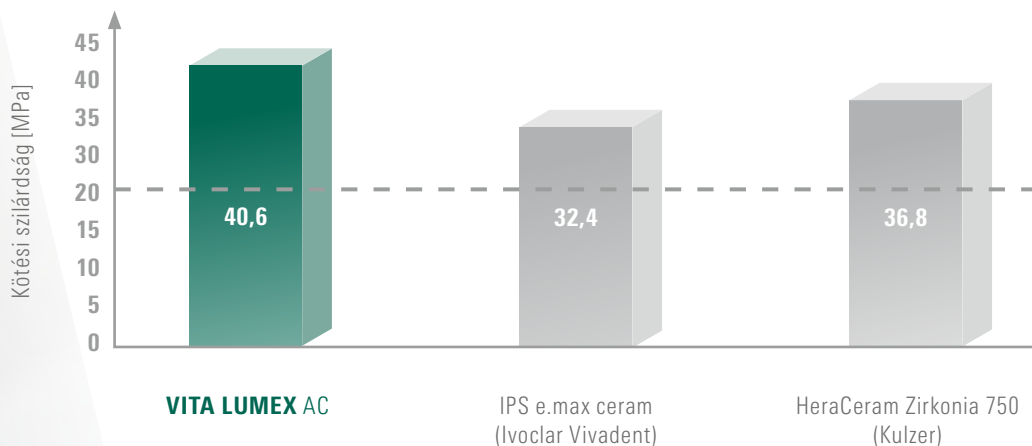

Forrás: Belső vizsgálat, VITA K+F, Kötőszilárdság mérése fenti anyagokkal ISO 9693 szerint („Schickerath-teszt”), Jelentés 08/19, Dr. B. Gödiker, ([1] lásd a prospektus hátoldalán!)







Masszák és színek.

Alpmasszák

OPAQUE

Szubstruktúrák maszkolásához

Színek

 opaque-0	 opaque-1
 opaque-2	 opaque-3
 opaque-4	 opaque-5

OPAQUE DENTINE

Alapszín helyreállításához csekély falvastagságnál






Színek

VITA classical A1–D4 és VITA SYSTEM 3D-MASTER

ENAMEL

Fogzománc szín-/fényjátékának helyreállításához

Színek

 light	 medium
 intense	 clear
 fog	

POWER WASH

A fogszín intenzitásának fokozására, ill. a fluoreszcencia vagy a világosság szintjének ellenőrzése céljából

Színek

VITA classical A1–D4 és VITA SYSTEM 3D-MASTER világossági értékek LL0–LL5

DENTINE

Alapszín helyreállításához fognyak/fogtest régióban









Színek

VITA classical A1–D4 és VITA SYSTEM 3D-MASTER

GINGIVA

Gingiva részeinek helyreállításához

Színek





 pale-papilla	 light-rose
 nectarine	 grapefruit
 rosewood	 purple
 deep-red	 dark-red

Effekt-/adalékmasszák Dentine

DENTINE MODIFIER

Gyöngyház effektek nyak-/dentinrégióban






Színek

 cloudwhite	 caramel
 honey	 copper

FLUO INTENSE

Mélységi fluoreszcencia szabályozásához



Színek

 arctic-white	 cream
 cappuccino	 sand
 sesame	

MAMELON

Mamelonok leutánzására incizális régióban

Színek

 saffron	 honey-melon
---	---

CHROMA INTENSE

Kromacitás fokozására a nyaki régióban, főleg csekély rétegvastagságok esetén



Színek

 ivory	 almond
 hazelnut	





MARGIN

Kerámiavállakhoz és javításokhoz a széli tartományban

Színek

 straw-yellow	 corn-yellow
--	---

Effekt-/adalékmasszák Enamel

 <p>Színek</p>	<p>Univerzálisan alkalmazható translucens masszák színbeli effektek helyreállításához incizális régióban</p> <p>○ smoky-white ● light-blonde ○ misty-rose ● sunlight ● sun-intense ● waterdrop ● deep-blue ● foggy-grey</p>
 <p>Színek</p>	<p>Gyöngyház effektek helyreállításához</p> <p>● opal-neutral ● opal-sky ● opal-azure</p>
 <p>Színek</p>	<p>Gyöngyház effektek helyreállításához</p> <p>○ shell</p>
 <p>Színek</p>	<p>Javításokhoz fényre égetés után, csökkentett égési hőmérsékleten</p> <p>○ neutral ● desert</p>

Szortiment áttekintése

STANDARD KIT

Standard leplezéshez



EXPERT KIT

Egyedi leplezéshez



CUT-BACK KIT

Cut-back- és mikro-leplezéshez



GINGIVA KIT

Gingiva részeinek helyreállításához



STARTER KIT

Kezdőknek



POWERWASH KIT

Színintenzitás és fluoreszcencia céljára



Megfelelő megoldások az eljárás során.



Színmeghatározás

VITA Easyshade V / VITA Easyshade LITE
vagy VITA színculcsok



Vázkészítés

VITA YZ ZIRCONIA, VITABLOCS földpát-kerámia
vagy VITA AMBRIA lítium-diszilikát kerámia




Leplezés

VITA LUMEX AC



Karakterizálás

VITA AKZENT Plus festékek / glazúrmasszák

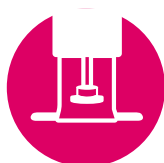

Kiégetés

VITA VACUMAT 6000 M



Polírozás

VITA CERAMICS Polishing Set



Rögztítés

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Örömmel nyújtunk további segítséget.

Hotline segítségnyújtás

Tel.: +49 7761 / 562-884
Fax: +49 7761 / 562-299
8.00-tól 17.00 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com

Műszaki segítségnyújtás

Tel.: +49 7761 / 562-222
Fax: +49 7761 / 562-446
8.00-tól 17.00 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com



Kérjük, vegye figyelembe

Termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen termékismertető kiadásának dátuma: 2023.11.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a www.vita-zahnfabrik.com oldalon

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és a következő termékek viselik a **CE 0124** jelzést: **VITA LUMEX® AC**

Más gyártók ebben a dokumentumban megnevezett termékei/rendszerei az adott gyártók bejegyzett védjegyei.

MD

Referenciák

Belső vizsgálatok, VITA K+F

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Kutatás és Fejlesztés részleg
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Németország
Dr. Berit Gödiker projektvezető, VITA K+F,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Részletes tesztadatok

Lásd Műszaki-tudományos dokumentáció
VITA LUMEX AC
Letöltés innen: www.vita-zahnfabrik.com



További információ
VITA LUMEX AC-ről
www.vita-zahnfabrik.com/lumex



VITA LUMEX® AC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Németország

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

