

VITA

Jedan za sve keramike i više



VITA LUMEX® AC

Moderna i pouzdana keramika za fasetiranje
za sve uobičajene skelete od keramike i titana.





Prednosti

Raznoliko

Pojednostavljuje vaš svakodnevni rad zahvaljujući velikom broju indikacija.

Pouzdana

Pouzdana reprodukcija boja zuba zahvaljujući VITA Farbmach formuli.

Efikasno

Bezbedni i efikasni procesi su omogućeni visokom stabilnošću pečenja i dokazanom izdržljivošću.

Keramika za fasetiranje

VITA LUMEX® AC

Raznoliko. Pouzdano. Efikasan.

VITA LUMEX AC je keramika za fasetiranje sa VITA formulom materijala za prave boje, žive i pouzdane rezultate.

- Za fasetiranje svih uobičajenih skeleta od pune keramike (cirkonijum-dioksid, litijum-disilikat i feldspat keramika)
- Za fasetiranje titanijuma
- Za izradu rekonstrukcija bez skeleta, (npr. faseta)



Vernost boja. Prirodna vernost.

Impresivna dinamika svetlosti u svim fasetama



ENAMEL mase imaju prirodnu providnost.




OPAL TRANSLUCENT mase omogućavaju briljantnu, opalescentnu igru boja.



POWERWASH i FLUO INTENSE mase potpomažu reprodukciju prirodne fluorescentnosti.

Fina gradacija za prirodnu estetiku

Fino klasifikovana ENAMEL masa, od beličasto neprozirne do transparentne: Prava keramika je dostupna za svaki željeni nivo transparentnosti.

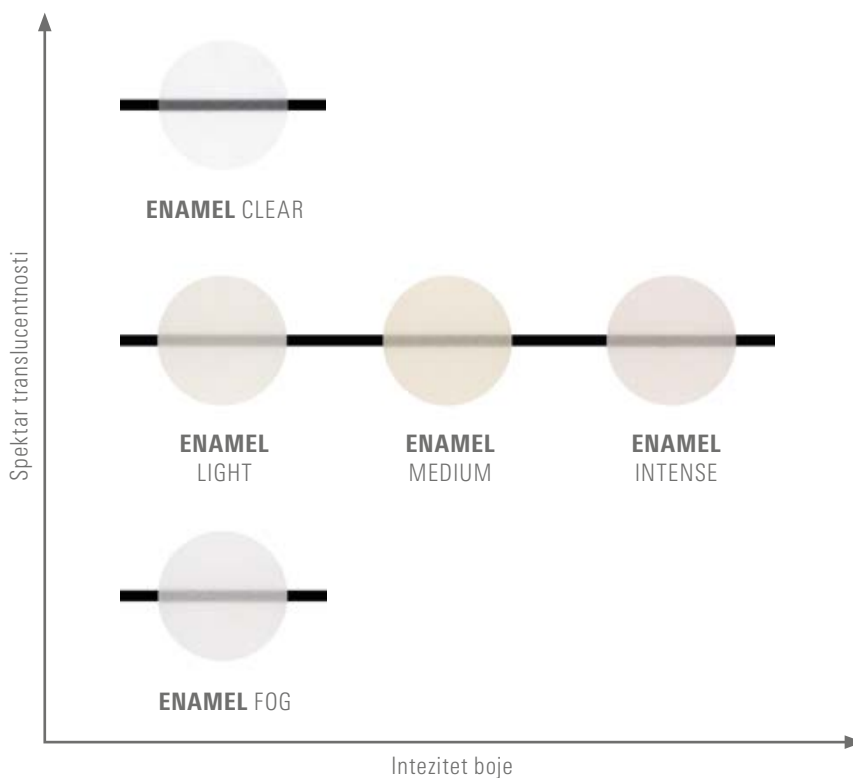





Pečeno kao slojevito.

Impresivna stabilnost pri pečenju

Sa VITA LUMEX AC, restauracije izlaze iz peći po želji: pečene kao slojevito zahvaljujući impresivnoj stabilnosti pri pečenju.



Pouzdana rezultati pečenja

VITA LUMEX AC omogućava pouzdane rezultate pečenja stabilnog oblika zahvaljujući smanjenom skupljanju materijala i homogenoj strukturi materijala sa velikom gustoćom.

	HeraCeram Zirkonia 750	VITA LUMEX AC
1. pečenje	750 °C	760 °C
2. pečenje	-10 °C	-10 °C
3. pečenje	-10 °C	-10 °C
4. pečenje	720 °C	730 °C

Visoko precizno modeliranje

Visoko precizno modeliranje sa izuzetnom stabilnošću – to VITA LUMEX AC omogućava zahvaljujući posebno pogodnoj raspodeli veličine zrna i mikroozubljenju čestica keramike.

Primer, pojednostavljeni prikaz raspodele veličina zrna/mikroozubljenja



Oblik. Boja. Svetlo.


Koje prednosti nudi keramika za fasetiranje **VITA LUMEX® AC**?
Odgovori direktno iz svakodnevnog laboratorijskog života!



VITA LUMEX AC keramika za fasetiranje je apsolutno stabilne boje i precizno usklađena sa VITA skalom boja. Ako odredim A2 pomoću skale boja, dobijam upravo onaj originalni VITA A2 pomoću **VITA LUMEX AC!**

Dr. Jorge Carro Juárez
Zubar i zubni tehničar, Panotla, Tlaxcala, Meksico

Visokoestetske restauracije sa nekomplikovanim nanošenjem slojeva.

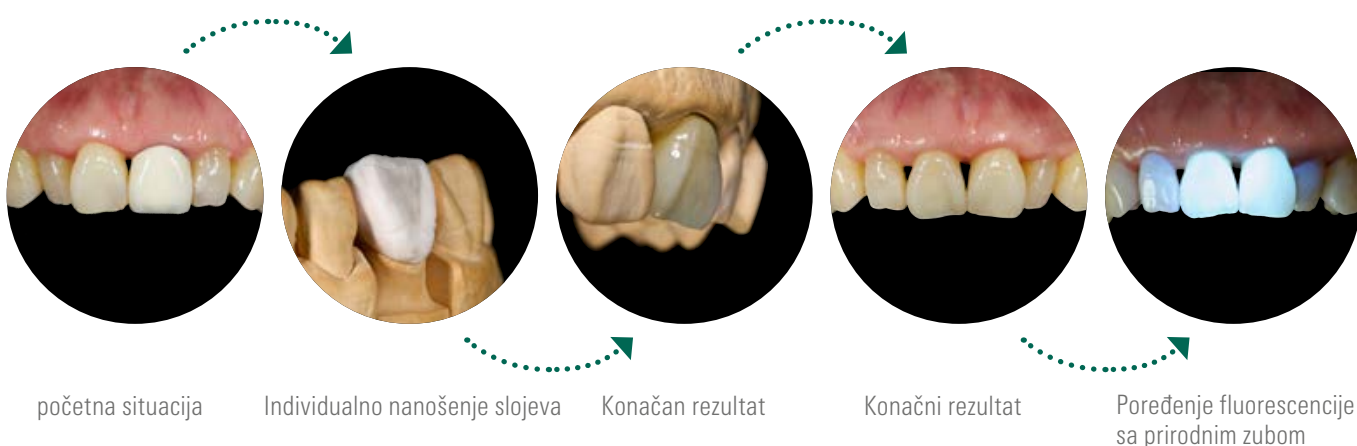






Dokazana otpornost.

Visoka otpornosti na lom

Zahvaljujući odličnoj otpornosti na lom, VITA LUMEX AC postiže dobru kliničku otpornost i vrednosti čvrstoće u testovima koji su znatno iznad standardnih zahteva.

Otpornost na savijanje

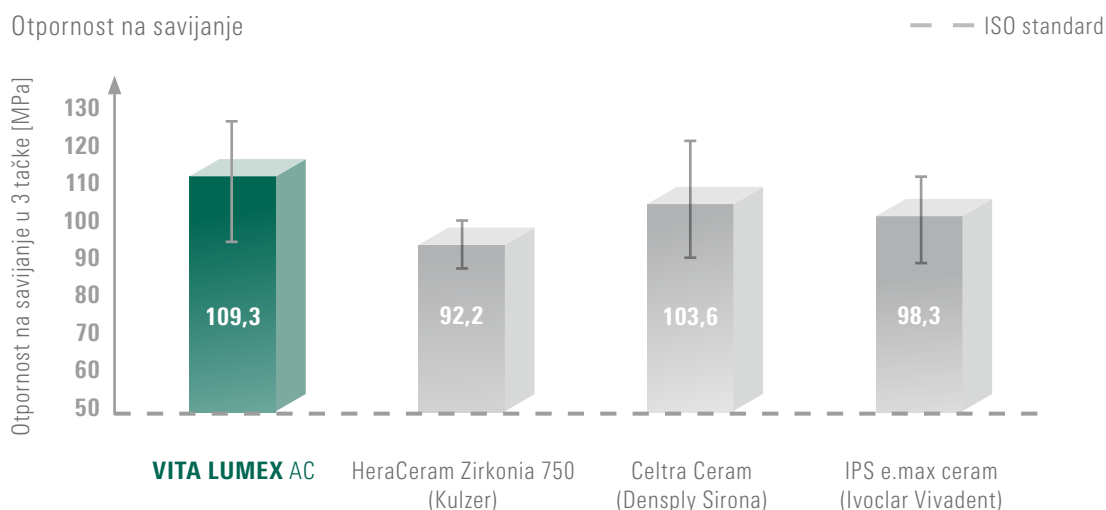


Izvor: Interno istraživanje VITA F&E, merenje otpornosti na savijanje u 3 tačke u skladu sa ISO 6872 sa gore navedenim materijalima, izveštaj 08/19, Dr. B. Gödiker, ([1], vidi zadnju stranu prospekta)

Veoma dobar kvalitet veze

Pouzdana veza sa skeletom od keramike je zagarantovana zahvaljujući koordinisanim koeficijentima termičke ekspanzije (WAK). VITA LUMEX AC u testovima dostiže vrednosti čvrstoće vezivanja koje znatno prevazilaze zahteve standarda.

Čvrstoća vezivanja za cirkonijum-dioksid (VITA YZ HT)

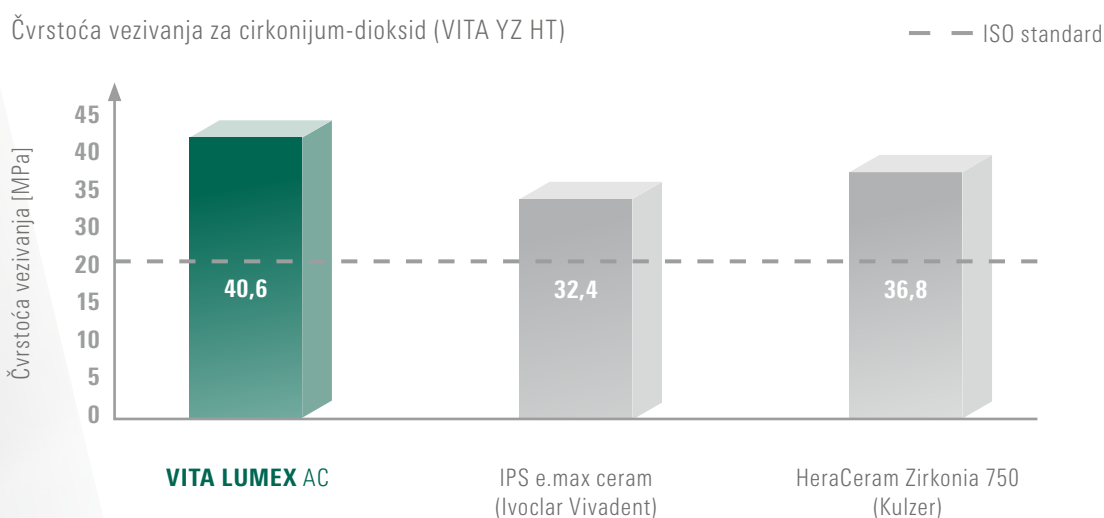

Izvor: Interno istraživanje VITA F&E, merenje čvrstoće vezivanja u skladu sa ISO 9693 („Schickerath testiranje“) sa gore navedenim materijalima, izveštaj 08/19, Dr. B. Gödiker, ([1], vidi zadnju stranu prospekta)

Mase i boje.

Osnovne mase

OPAQUE

Za maskiranje podstruktura

Boje

- opaque-0
- opaque-1
- opaque-2
- opaque-3
- opaque-4
- opaque-5

OPAQUE DENTINE

Za reprodukciju osnovne boje kod minimalne Debljina zidova

Boje

VITA classical A1–D4 i VITA SYSTEM 3D-MASTER

ENAMEL

Za reprodukciju igre boja/prelamanja svetlosti gleđi

Boje

- light
- intense
- fog
- medium
- clear

POWER WASH

Podržava intenzitet boje zuba i kontrolu stepena fluorescencije ili osvetljenosti

Boje

VITA classical A1–D4 i VITA SYSTEM 3D-MASTER
Vrednosti osvetljenosti LLO-LL5

DENTINE

Za reprodukciju osnovne boje u području vrata/tela

Boje

VITA classical A1–D4 i VITA SYSTEM 3D-MASTER

GINGIVA

Za rekonstrukciju delova desni

Boje

- pale-papilla
- nectarine
- rosewood
- deep-red
- light-rose
- grapefruit
- purple
- dark-red

Mase za efekte/dodatne mase Dentine

DENTINE MODIFIER

Za reprodukciju efekata u području vrata/dentina

Boje

- cloudwhite
- honey
- caramel
- copper

FLUO INTENSE

Za kontrolu fluorescencije iz dubine

Boje

- arctic-white
- cappuccino
- sesame
- cream
- sand

MAMELON

Za reprodukciju mamezona u incizalnom području

Boje

- saffron
- honey-melon

CHROMA INTENSE

Za povećanje hromatičnosti u predelu vrata, posebno kod malih debljina slojeva

Boje

- ivory
- hazelnut
- almond

MARGIN

Za keramičke oslonce i korekture na ivicama

Boje

- straw-yellow
- corn-yellow

Mase za efekte/dodatne mase Enamel

TRANS-LUCENT

Univezalno primenljive transparentne mase za reprodukciju efekata boje u incizalnom području

Boje

- smoky-white
- light-blonde
- misty-rose
- sunlight
- sun-intense
- waterdrop
- deep-blue
- foggy-grey

OPAL TRANS-LUCENT

Za reprodukciju Efekti opala

Boje

- opal-neutral
- opal-azure
- opal-sky

PEARL

Za reprodukciju Sedefasti efekti

Boje

- shell

CORRECTIVE

Za korekcije nakon pečenja radi postizanja sjaja sa sniženom temperaturom pečenja

Boje

- neutral
- desert

Pregled asortimana

STANDARDNI KIT

Za standardno fasetiranje



SPECIJALNI KIT

Za individualno fasetiranje



CUT-BACK KIT

Za Cut-back- i mikro fasetiranje



GINGIVA KIT

Za rekonstrukciju delova desni



POČETNI KIT

Za prve korake



POWERWASH KIT

Za intezitet boje i fluorescentnost



Odgovarajuća rešenja u procesu.



Određivanje boja

VITA Easyshade V / VITA Easyshade LITE
ili VITA skale boja



Izrada skeleta

VITA YZ ZIRCONIA, VITABLOCS feldspat keramika
ili VITA AMBRIA litijum-disilikatna keramika



Fasetiranje

VITA LUMEX AC



Karakterizacija

VITA AKZENT Plus boje za akcentiranje/ mase za glaziranje



Postupak pečenja

VITA VACUMAT 6000 M



Poliranje

VITA CERAMICS Polishing Set



Pričvrščivanje

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Rado ćemo vam pomoći.

Dežurni telefon podrške za distribuciju

Telefon +49 7761 / 562-884

Faks +49 7761 / 562-299

8.00 do 17.00 h CET

info@vita-zahnfabrik.com

Dežurni telefon tehničke službe

Telefon +49 7761 / 562-222

Faks +49 7761 / 562-446

8.00 do 17.00 h CET

info@vita-zahnfabrik.com



Obratite pažnju

Naše proizvode koristiti prema uputstvima za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje su nastale zbog nepravilnog rukovanja ili obrade. Korisnik je u obavezi da pre upotrebe provjeri da li je proizvod prikladan za predviđenu područje primene. Odgovornost se ne prihvata i kada se proizvod obrađuje u nepovoljnoj, odnosno neodobroj kombinaciji sa materijalima i uređajima drugih proizvođača, kao ni za tako nastale štete. VITA Modulbox nije obavezan sastavni dio proizvoda. Izdanje ove brošure proizvoda: 11.23

Sa izdavanjem ovih informacija o upotrebi sva prethodna izdanja prestaju da važe. Najaktuelniju verziju ćete naći na www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik je sertifikovana i sledeći proizvodi nose znak registrovane marke **CE 0124 VITA LUMEX® AC**

Proizvodi i sistemi drugih proizvođača, koji su navedeni u ovom dokumentu, su registrovane marke njihovih proizvođača.




Reference

Interna istraživanja, VITA F&E

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Odeljenje za istraživanje i razvoj
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Nemačka
Dr. Berit Gödiker, Projektleiterin VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Detaljni podaci o testiranju

Vidi naučno tehničku dokumentaciju
VITA LUMEX AC
Preuzimanje na www.vita-zahnfabrik.com

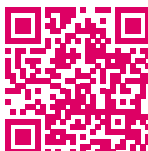

Više informacija o
VITA LUMEX AC
www.vita-zahnfabrik.com/lumex



VITA LUMEX® AC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Nemačka

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

