

VITA

Easy.
Right on point.



VITA MFT®

Lenyűgöző hatékonyság és
meggyőző minőség:
VITA konfekciófog
Easy Centric tervezéssel.





Előnyök

Időtakarékos

Egyszerű és hatékony felállítás a VITA Easy Centric elvnek köszönhetően. Alkalmazható minden fogfelállítási koncepcióhoz.

Költséghatékony

Multifunkcionális, gazdaságos konfekciófog nagy szín- és formaválasztékban. Elérhető 16 VITA SYSTEM 3D-MASTER és 16 VITA classical A1–D4 színben.

Stresszmentes

Megbízható és gyors eredmények meggyőző minőségben, ami nem csak Önre, mint felhasználóra, de pácienseire is inspirálóan hat.

Protézis fog

VITA MFT®

Időtakarékos. Költséghatékony. Stresszmentes.

Egyszerű és gyors megoldás, az előre definiált kontaktpontok révén.

VITA MFT (Multi Functional Tooth) sokoldalúan alkalmazható – teljes és részleges protetikához, valamint hibrid és implantációs fogpótlásokhoz. Mivel a rágófelszín multifunkcionális kialakítású, a fogsor az összes ismert felállítási koncepcióhoz felhasználható.

A VITA Easy Centric-nek köszönhetően VITA MFT szinte automatikusan épül fel, így időt spórol és csökkenti a stresszt.



Egyszerű fogfelállítás. Remek esztétika.

Floidi Endrio, fogtechnikus, Olaszország:
„Ez a fog a maga árkategóriájában nemcsak minőségével és esztétikájával, de főként egyszerű kezelhetőségével nyűgöz le.”

Gazdaságosság és esztétika

Susana García, fogtechnikus, Spanyolország:
„Az egyszerű felállítás miatt ez a fog egyedülálló ebben a szegmensben. Gazdaságosság és esztétika – VITA MFT mindkettőt biztosítja.”




Egyszerű. Gyors.

A VITA Easy Centric elv elősegíti a gyors munkafolyamatot

Az Easy Centric elv alapján a VITA MFT protézis fog biztosítja a hatékony, összes ismert koncepció szerinti fogállítást

- **nagy biztonságot jelentő, egyszerű felállítás**
az előre definiált érintkezési pontok és a centrális reláció automatikus meghatározásával
- **kevesebb csiszolási munka**
az optimális bazális kialakítás miatt
- **megbízhatóan alkalmazható minden protetikai koncepcióhoz**
a rágófelszín multifunkcionális kialakításának köszönhetően.
Felhasználható például a Prof. Dr. A. Gerber, APF/TiF, Gysi és ABC rendszerekhez.

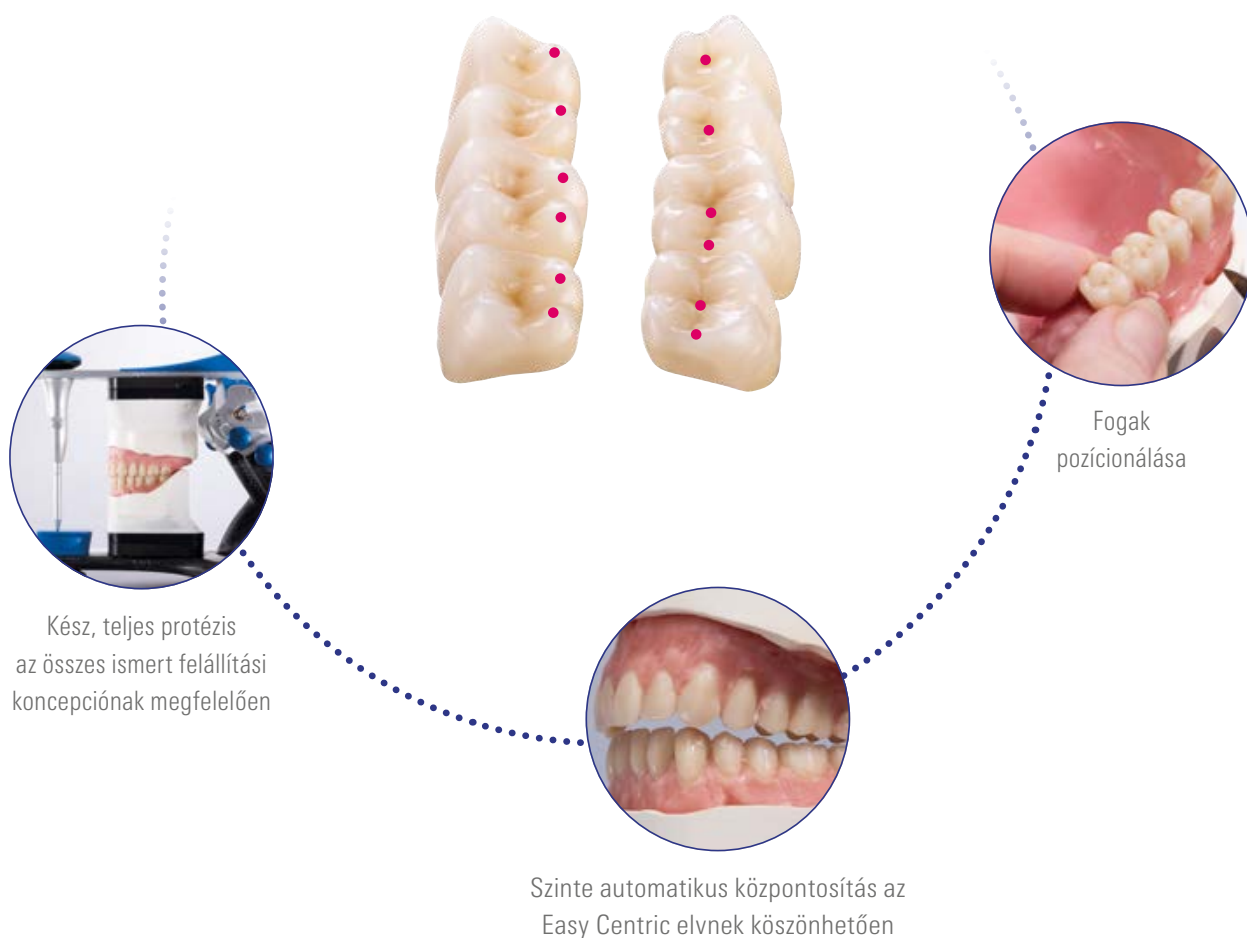





Egyszerűen szép. Egyszerűen sokoldalú.

Megbízható színhelyreállítás

A fog színének biztonságos kiválasztása a VITA fogszínkulccsal való tökéletes egyezés révén.

- 16 x VITA classical A1-D4 és
- 16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER szín, beleértve 3 fehéritett színt



természetes fényjáték



Változatos formák

- 12 x Felső anterior fogformák
- 5 x Alsó anterior fogformák
- 3 x Felső posterior fogformák
- 3 x Alsó posterior fogformák

természetes megformálás



esztétikus incizális kialakítás



VITA MFT egy olyan bizonyítottan magas minőségű, gazdaságos fog, amellyel nem csak fogorvos és fogtechnikus alkotta csapatunk, de mindenek előtt pácienseink is teljesen elégedettek."

Boris Jovanović
fogtechnikus, Belgrád, Szerbia




Meggyőző minőség

Megbízható anyagminőség garantálja az igazolt tartósságot.
Német mérnökök által kifejlesztve.

Bevált anyag

A bevált VITA HC polimeranyag (Highly Cross-Linked Polymer) erősen térhálós MMA mátrixból és térhálósított monomerekből áll. Az eredmény: jó mechanikai stabilitás és felületi ellenállás.

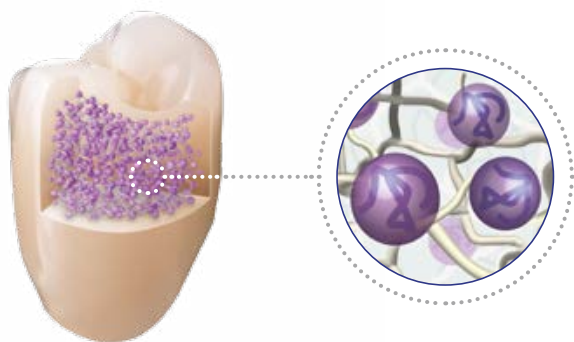

Megfelel a német minőségi szabványoknak

Német mérnökök által kifejlesztve, világszerte működő fogtechnikusokkal együttműködve.

Bevizsgált gyártási folyamatok (német minőségi szabványok szerint a gyártás és tervezés során) a folyamatosan magas minőség érdekében (EN ISO 13485 szerint tesztelt és tanúsított).





Formagazdagság.

Alsó frontfogak



16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER®
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

16 x VITA classical A1-D4®


Felső frontfogak



lapát alakú

O40

40,0

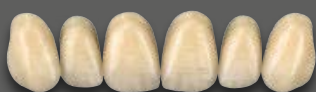

7,5



10,0

O44

43,9



8,1



10,2

O49

49,2



9,0



11,8



háromszög alakú

T41

40,5



7,5



9,4

T43

43,3



8,2



10,3

T46

46,1



8,5



10,2

T49

48,8



9,0




11,8



négyszög alakú

R42

42,1

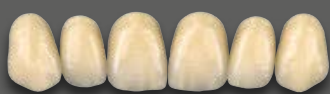

7,9



9,3

R45

44,5



8,2



10,3

R47

46,6



8,5




11,0



négyzet alakú

S47

46,8

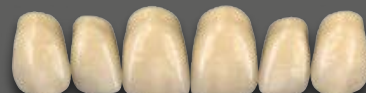

8,9



10,8

S50

49,7




9,2



12,0

Formagazdagság.

Posterior fogak

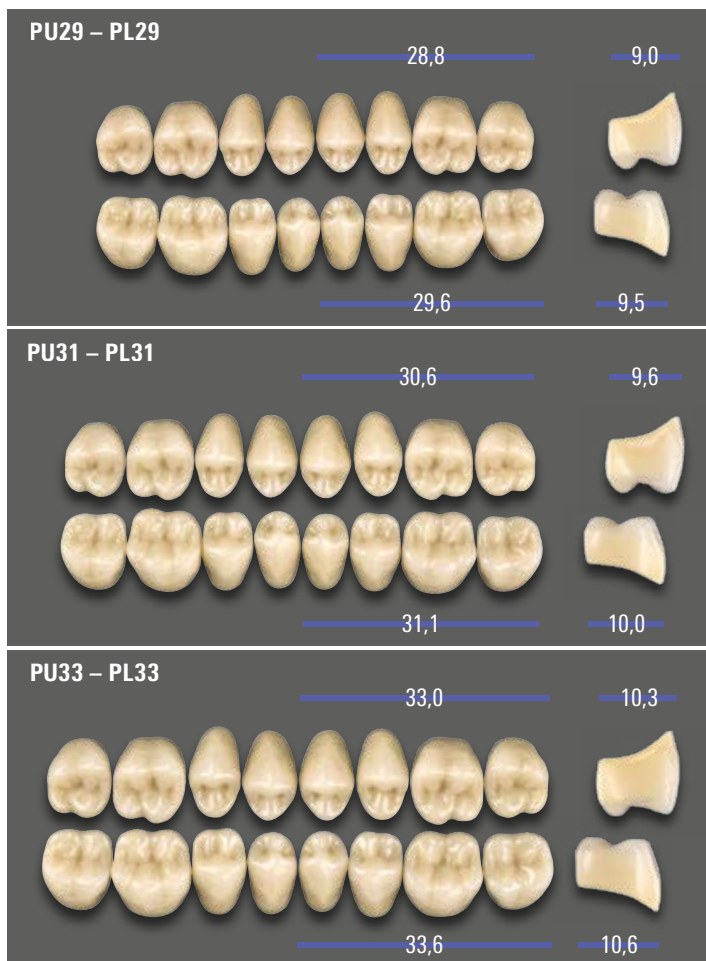

Javasolt kombinációk

VITA MFT Frontfogak	FF / Nr. mm	O40 40,0	O44 43,9	O49 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	AF / Nr. mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Posterior fogak	FF / Nr. mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	AF / Nr. mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Kérjük, hogy a táblázatot csupán javaslatnak tekintsék! A megfelelő kombináció nagymértékben függ a páciens egyéni sajátosságaitól.



Megfelelő megoldások az eljárás során.



Színmeghatározás

Színmeghatározás VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE vagy VITA színkulcsok segítségével.



Fogforma meghatározása

Válassza ki fogkészletéből a megfelelő fogformát. A fogforma meghatározása a rendelkezésre álló formakártyával is elvégezhető.



VITA MFT protézisfog az Ön számára

Egyszerű. Gyors megoldás.
Most 16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER és
16 x VITA classical A1-D4 színben érhető el.



Tapadásközvetítő

A VITA MFT protézisfogak és a protézis alap közti kötéshez használja a megbízható VITACOLL tapadásközvetítőt. A megfelelő szilikon izoláló anyag erre a célra a VITAFol.



Karakterizálás

Karakterizálja a fogpótlást a fényre keményedő, mikrorészecskéből álló VITA VM LC kompozittal. Alternatívaként a fényre keményedő VITA AKZENT LC festékek állnak rendelkezésére.



Örömmel nyújtunk további segítséget.

Hotline segítségnyújtás

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
8.00-tól 17.00 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com

Műszaki segítségnyújtás

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
8.00-tól 17.00 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com



Kérjük, vegye figyelembe

Termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen termékismertető kiadásának dátuma: 2024.03.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a www.vita-zahnfabrik.com oldalon

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és a következő termékek viselik a **CE 0124** jelzést: **VITA MFT®**

Más gyártók ebben a dokumentumban megnevezett termékei/rendszerei az adott gyártók bejegyzett védjegyei.



Referenciák

Belső vizsgálatok, VITA K+F

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Kutatás és Fejlesztés részleg
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Németország
Dr. Berit Gödiker projektvezető, VITA K+F,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Részletes tesztadatok

Lásd Műszaki-tudományos dokumentáció

VITA MFT®

Letölthető innen: www.vita-zahnfabrik.com



További információ
VITA MFT termékről
www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT



VITA MFT®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

