

VITA

Łatwe ustawianie.  
Gwarancja najlepszych efektów.



VITA MFT®

Niesamowita wydajność i  
przekonująca jakość:  
Zęby konfekcyjne VITA z  
Easy Centric.





## Korzyści

### Oszczędność czasu

Proste i wydajne ustawianie zębów dzięki zasadzie VITA Easy Centric. Nadaje się do wszystkich popularnych koncepcji ustawiania zębów.

### Oszczędność kosztów

Wielofunkcyjny, ekonomiczny żąb konfekcyjny w szerokiej gamie kolorów i kształtów.

Dostępne w 16 kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER i 16 kolorach VITA classical A1–D4.

### Niezawodne efekty

Niezawodne i szybkie wyniki o przekonującej jakości zachwycą nie tylko Ciebie jako użytkownika, ale także twoich pacjentów.

Ząb konfekcyjny

# VITA MFT®

Oszczędza czas. Oszczędza koszty.  
Gwarantuje najlepsze efekty.

## Znakomite kształty dzięki predefiniowanym punktom kontaktowym.

VITA MFT (Multi Functional Tooth) mają szerokie zastosowanie - do protez częściowych, protez całkowitych, hybrydowych i osadzonych na implantach.

Ponieważ powierzchnia żująca jest multifunkcyjna, ten typ zębów znakomicie nadaje się do wszystkich popularnych koncepcji ustawiania zębów.

Dzięki VITA Easy Centric zęby VITA MFT w zasadzie ustawiają się automatycznie oszczędzając czas i koszty użytkownika.



## Łatwe ustawianie. Bardzo dobra estetyka.

Floidi Endrio, technik dentystyczny, Włochy:  
„Jako ząb w tym przedziale cenowym zachwyca nie tylko jakością i estetyką, ale przede wszystkim łatwością obróbki manualnej.”

## Wydajność i estetyka

Susana García, technik dentystyczny, Hiszpania:  
„Proste ustawianie sprawia, że ten ząb jest wyjątkowy w tym segmencie. Wydajność i estetyka – VITA MFT oferuje jedno i drugie.”




# Łatwe. Natychmiastowe przechodzenie do sedna sprawy

## VITA Easy Centric

**Ząb konfekcyjny VITA MFT z zasadą Easy Centric proponuje wydajne ustawianie zębów wg. wszystkich popularnych koncepcji.**

- **łatwe ustawianie zapewnia duże bezpieczeństwo**  
poprzez predefiniowane punkty kontaktowe i automatyczne wyszukiwanie zwarcia centralnego.
- **dużo prostsza obróbka**  
dzięki zoptymalizowanej konstrukcji zęba
- **można go niezawodnie stosować we wszystkich koncepcjach protetycznych**  
dzięki wielofunkcyjnej konstrukcji powierzchni żującej. Można stosować np. w metodach ustawiania wg prof. dr. A. Gerber, APF/TiF, Gysi i ABC.

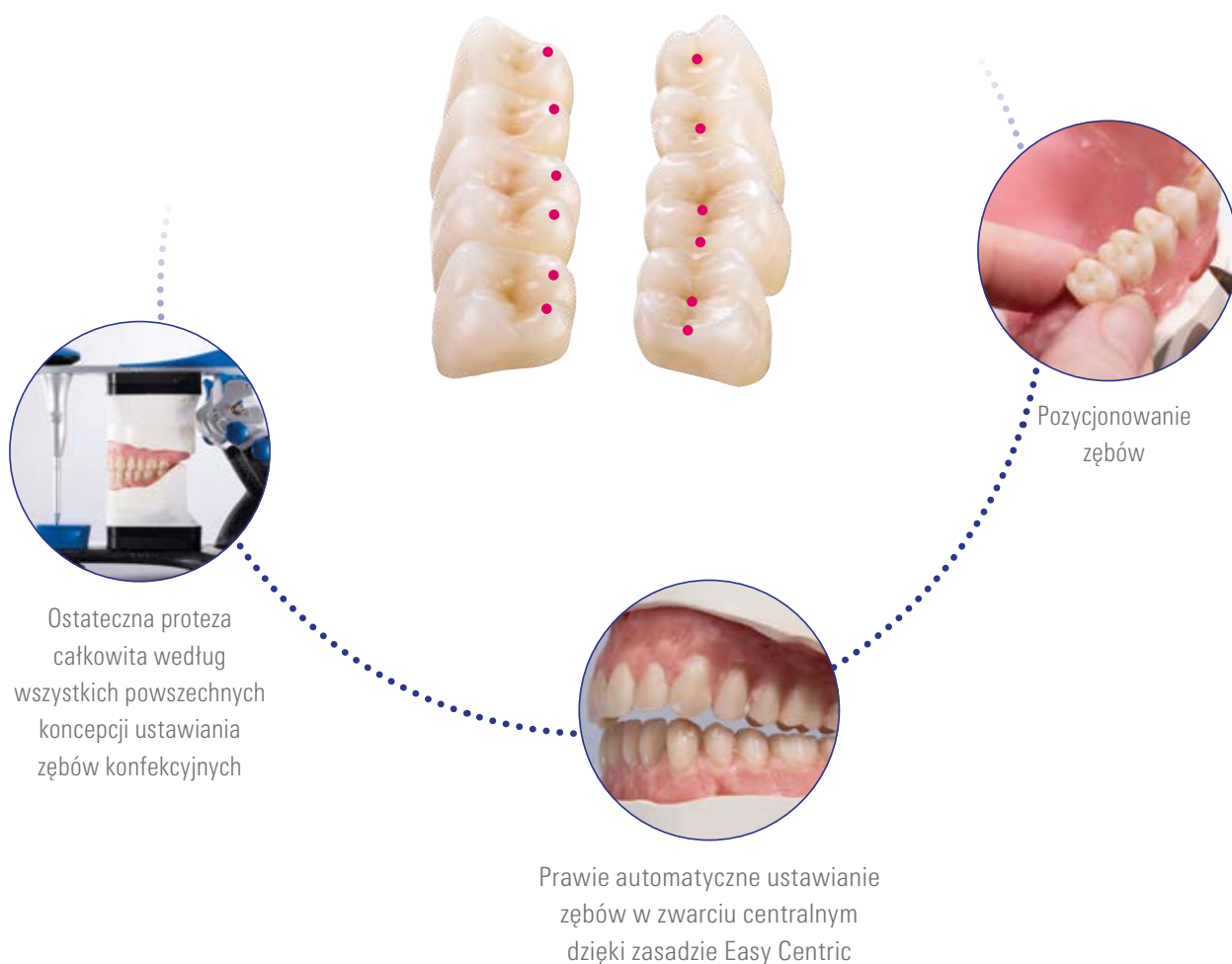





# Estetyczne. Różnorodne.

## niezawodna reprodukcja koloru

Bezpieczeństwo przy wyborze koloru zęba dzięki PERFECT MATCH wg oryginalnego kolornika VITA.

- 16 x VITA classical A1-D4 i
- 16 kolorów x VITA SYSTEM 3D-MASTER włącznie z 3 kolorami wybielonymi.



naturalna gra światła



## Wielorakie kształty

- 12 x kształty zębów przednich szczęki
- 5 x kształty zębów przednich żuchwy
- 3 x kształty zębów bocznych szczęki
- 3 x kształty zębów bocznych żuchwy

naturalny kształt



doskonały kształt powierzchni siecznych



VITA MFT wykazują się wysoką jakością i są bardzo ekonomiczne. Zarówno mój zespół dentystryczno-techniczny, jak i pacjenci są bardzo zadowoleni.

**Boris Jovanović**  
technik dentysta, Belgrad, Serbia




# Przekonująca jakość

Niezawodna jakość materiału zapewniająca sprawdzoną trwałość.  
Opracowany przez niemieckich inżynierów.

## Sprawdzony materiał

Sprawdzony materiał polimerowy VITA HC (Highly Cross-Linked Polymer) posiada silnie usieciowaną matrycę z MMA oraz monomerów sieciujących. Wynik: dobra stabilność mechaniczna oraz odporność powierzchniowa.

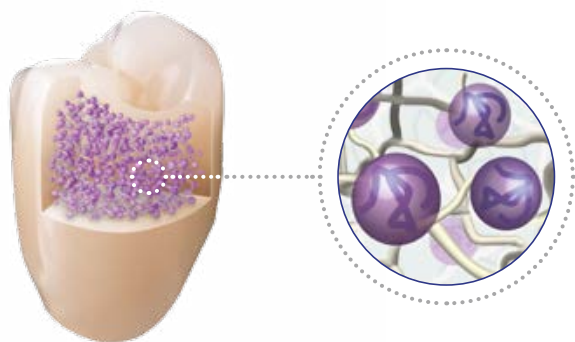

## Według niemieckich standardów jakości

Zęby zostały opracowane przez niemieckich inżynierów we współpracy z technikami dentystycznymi na całym świecie.

Przetestowane procesy produkcyjne (zgodnie z niemieckimi standardami jakości w zakresie produkcji i projektowania) zapewniające stałą wydajność i wysoką jakość (testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 13485).







# Różnorodność kształtów.

## Zęby przednie zuchwy



### 16 x VITA SYSTEM 3D-MASTER®




(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)

### 16 x VITA classical A1-D4®




## Zęby przednie szczęki




kształt  
owalny

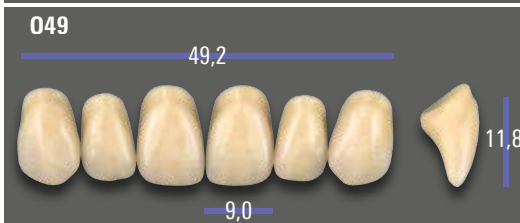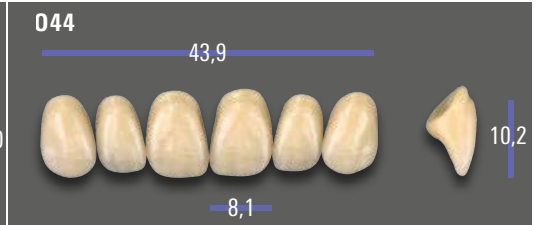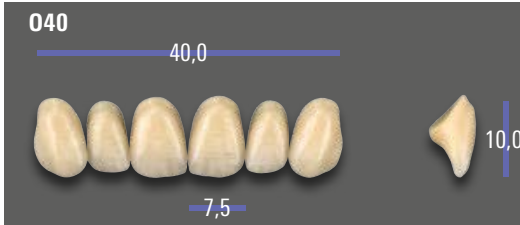



kształt  
trójkątny

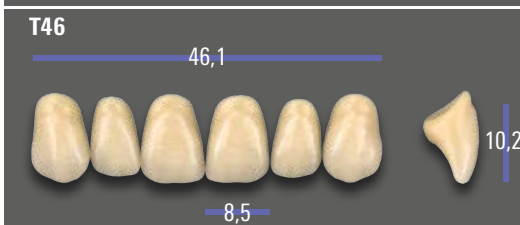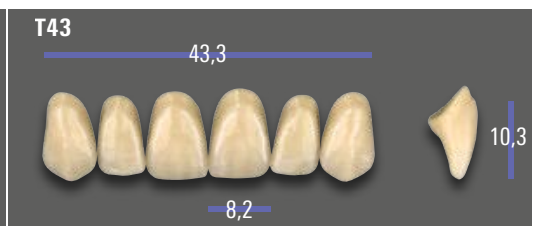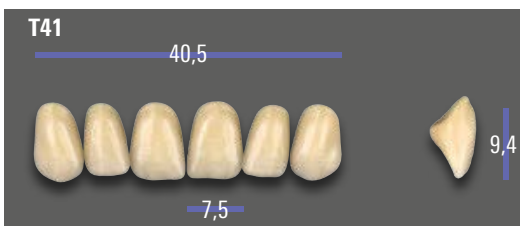

kształt  
prostokątny

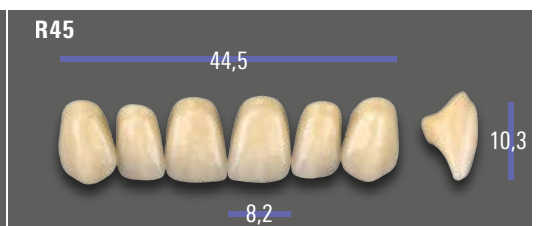


kształt  
kwadratowy

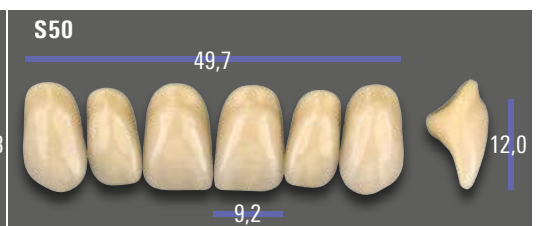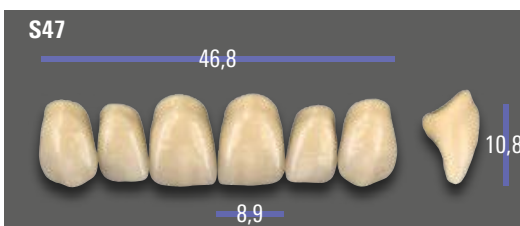

# Różnorodność kształtów.

## Zęby boczne

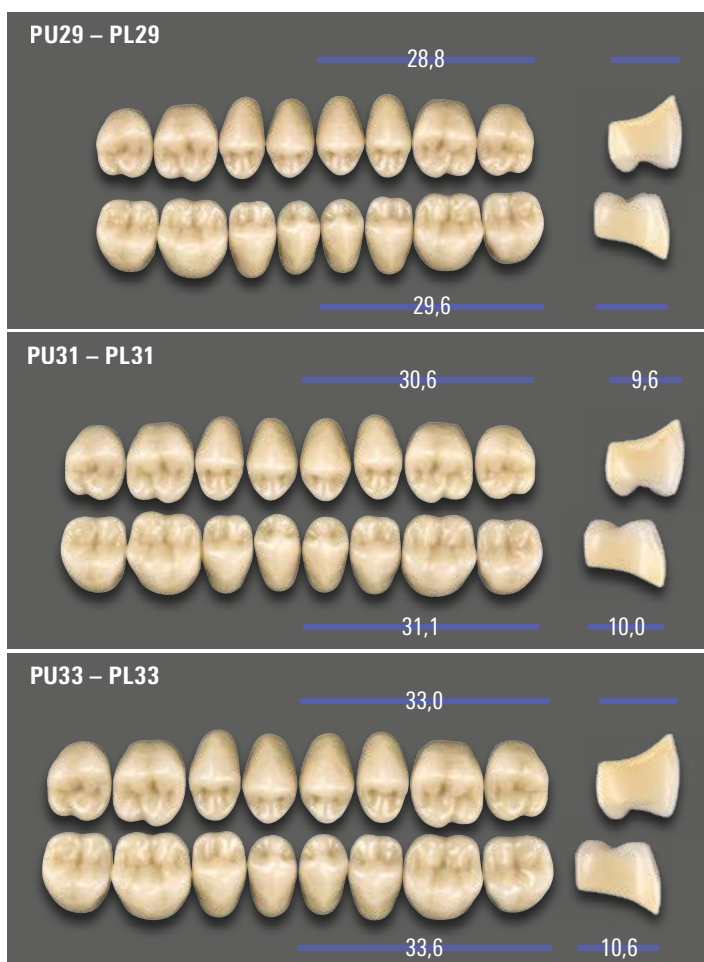

## Zalecane kombinacje

<b>VITA MFT</b> Zęby przednie	szczeka/nr mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	żuchwa/nr mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
<b>VITA MFT</b> Zęby boczne	szczeka/nr mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	żuchwa/nr mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Proszę potraktować tę tabelę jedynie jako zalecenie. Odpowiednia ustawka i kombinacja zębów w niej użytych zależy w dużej mierze od indywidualnej sytuacji pacjenta.



# Dopasowane rozwiązania do procesu technologicznego



## Ustalanie koloru

Ustalanie koloru za pomocą VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE lub kolorniki VITA.



## Wyznaczenie kształtu

Wybierz odpowiedni kształt zęba ze swojego magazynu zębów. Możesz także określić kształt za pomocą karty realnych kształtów.



## Ząb konfekcyjny VITA MFT

Łatwe.  
NZ gwarancją najlepszych wyników.  
Teraz w 16 kolorach x VITA SYSTEM 3D-MASTER i  
16 kolorach x VITA classical A1-D4.



## Środek łączący

Dla stworzenia pewnego spojenia zębów konfekcyjnych VITA MFT z materiałem płyty protezy należy używać pośrednika przyczepności VITACOLL. Odpowiednim do tego celu silikonowym materiałem izolacyjnym jest VITAFOL.



## Charakteryzacja

Charakteryzuj protezę mikrocząsteczkowym kompozytem światłoutwardzalnym VITA VM LC. Alternatywnie możesz wybrać światłoutwardzalne farbki VITA AKZENT LC.



# Chętnie udzielamy dalszej pomocy.

## Pomoc Hotline Sprzedaż-Obsługa

Telfon +49 7761 562-884  
Faks +49 7761 562-299  
od 8.00 do 17.00 CET  
info@vita-zahnfabrik.com

## Pomoc techniczna Hotline

Telfon +49 7761 562-222  
Faks +49 7761 562-446  
od 8.00 do 17.00 CET  
info@vita-zahnfabrik.com



## Należy przestrzegać wskazówek

Nasze produkty należy stosować wg instrukcji obróbki materiału. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Przed użyciem produktu, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy dany produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania. Odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona, gdy produkt przetwarzany jest w połączeniu z niekompatybilnymi lub nieautoryzowanymi materiałami i urządzeniami innych producentów, które mogą spowodować szkody. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww. zestawu. Publikacja niniejszej broszury produktu: 04.24

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję znajdują Państwo na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia **CE 0124 VITA MFT®**

W tym dokumencie wszystkie wymienione produkty/systemy innych producentów posiadają zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich producentów.



## Referencje

### Badania przeprowadzone w firmie VITA R&D


VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Resort badań i rozwoju  
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Niemcy  
dr. Berit Gödiker, kierowniczka projektów VITA F&E,  
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

### Szczegółowe dane testów

Patrz dokumentacja naukowo-techniczna

VITA MFT®

Download via [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

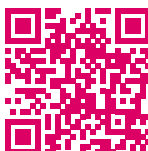

Dalsze informacje dotyczące  
VITA MFT

[www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT](http://www.vita-zahnfabrik.com/VITAMFT)



**VITA MFT®**

**VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on  
Social Media!

