

VITA VMK Master®



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy



VITA – perfect match.

VITA

Mistrovský svými nejlepšími výsledky



Přesnost, kterou budete milovat. S jistotou!

Je dobré vědět, že firma VITA Vám s VITA VMK Master nabízí přesnou a přirozenou živcovou fazetovací keramiku, která pro všechny klasické slitiny zaručuje mistrovské výsledky - jedno, jestli s litím, frézováním nebo sintrováním.

Ve výsledku vám VITA VMK Master umožní absolutně a kvalitativně kontrolovanou barevnou jistotu, na kterou se můžete spolehnout. Protože u firmy VITA klademe důraz výhradně na nejvyšší standardy výroby - hmoty VITA se vyrábí ve stejném závodě jako celosvětově známé barevné stupnice VITA classical A1 – D4 a barevné stupnice VITA SYSTEM 3D MASTER

Přesvědčte se nejlépe sami: VITA VMK Master vám umožňuje kdykoli přesné a estetické výsledky - spolehlivé, barevně brilantní a pro všechny případy!



Zirkonzahn® chrom-kobaltový disk

Přehled vašich výhod

- Přesnost a spolehlivost ve zpracování -, proto rychle naučitelné
- Materiál, který není žádným kompromisem mezi bezpečností a estetikou
- Osvědčené vlastnosti zpracování jako např. zlepšená schopnost modelování, jednoduchá manipulace a minimální smršťování (které umožňuje vyrábět korunky už při jednom vypálení)
- Individualizovatelné s VITA AKZENT Plus.
- K dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A1–D4.



Nejlepší výkon – přesvědčte se sami



VITA VMK Master®


Nejlepší výkon

Naše vědomosti pro vaši estetiku

VITA patří mezi průkopníky v dentální branži. Součet našich výkonů a zkušeností je základem pro nejlepší technické a materiálové řešení a klinické úspěchy - na celém světě a bez kompromisů.

VITA Zahnfabrik uvedla před více než půl stoletím na trh metalokeramický fazetovací systém - tehdy jako první v celé Evropě.

Přitom Vám VITA VMK Master umožňuje šířku použití, pomocí které lze splnit všechny požadavky na keramiku - individuálně, s vysokou brilantností barev a samozřejmě vždy bez kompromisů.

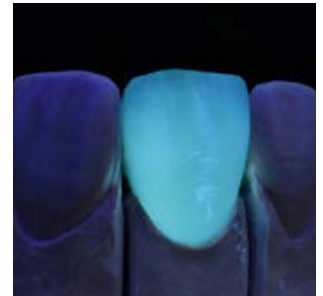

Přirozená fluorescence

Přehled vašich výhod

- Barevně brilantní výsledky díky přesvědčivé barevné sytosti a přirozené fluorescenci.
- Široké možnosti použití od snadného vytýčení cílů po komplexní případ pacienta s individuální charakteristikou
- Vysoká procesní bezpečnost díky dlouholetým zkušenostem



Nejlepší výkon



Obrázek 1a*

staré korunky se nehodí ohledně jejich barvy, stupně neprůsvitnosti nebo jejich tvaru ani jejich povrchové struktury ke zbylým zubům a působí nepřírozně.



Obrázek 1b*

nové korunky působí pomocí jejich hry světla podobně sklovině mnohem přirozeněji.



Obrázek 2a*

napodobení silně obroušených zubů vyžaduje rekonstrukci všech znaků typických pro bruxismus.



Obrázek 2b*

Korunka na zubu 11 se orientuje podle přirozeného vzoru (zub 21): ostré řezací hrany, praskliny, trhlinky, opotřebované hrany a barevné znaky typické pro daný věk.

Nejlepší výkon



Obrázek 3a*

Korunka na zubu 22 působí ve srovnání se sousedním zubem 21 a jeho pendantem 12 jako cizí těleso.



Obrázek 3b*

nová korunka 22 se svou intenzivní základní barvou a efekty skloviny harmonicky přizpůsobí sousedním zubům.



Obrázek 4a*

díky barvě, tvaru a povrchu lze okamžitě u zubu 22 poznat, že je to zubní náhrada.



Obrázek 4b*

iluze hloubky a živá hra barev propůjčují nové korunce 22 stejně věrné vyzářování jako její sousední zub 21.

Nejlepší výkon



Obrázek 5a*

sousední zuby určují vyhraněnou opacitu v závislosti na věku pro rekonstrukci.



Obrázek 5b*

díky perfektnímu napodobení opacitu a fluorescence typických pro mladý zub se korunka 12 nenápadně zařadí do řady zubů.



Obrázek 6a*

při současném hlubokém působení a výrazně mladistvou opalescencí představuje světlá základní barva sousedního zubu 21 zvláštní výzvu tohoto případu.



Obrázek 6b*

nová korunka 22 přesvědčuje přirozeným hlubokým působením, živou hrou barev a opalescencí typickou pro příslušný věk.

Nejlepší výkon



Obrázek 7a*

zub 21 se svými důležitými znaky, jako jsou barva, povrch a stupeň lesku, nehodí ke svému sousednímu zubu 11.



Obrázek 7b*

metalokeramickou korunku 21 nelze rozpoznat jako zubní náhradu, protože odráží všechny znaky svého pravého souseda.



Obrázek 8a*

jako vzor pro ulomený zub 21 slouží zub 11 se svými zvláštními znaky: světlá základní barva, výrazně translucenční, neporušená řezací hrana a perletové efekty skloviny.



Obrázek 8b*

jak barevně, tak i ohledně efektů skloviny přesvědčuje korunka 21 jako kopie svého sousedního zubu se všemi znaky - včetně perletového efektu.

Přesný – jako jeho požadavek



Přesný


Vždy o vrstvu lepší!

Naši vývojáři pracují neustále na materiálech, které Vám s vynaložením minimálního úsilí umožňují maximální výsledky. Z dobrého základu zakrývá např. náš opaker materiál konstrukce už po prvním vypálení - jedno jestli jako prášek, pasta nebo pomocí techniky Spray-on.

Čím intuitivnější aplikace, tím více se můžete s minimálním úsilím koncentrovat na rozhodující detaily. Proto klademe důraz na klasické standardní vrstvení. Protože s ním zažijete od prvního okamžiku všechny výhody přesného, rychlého a přesvědčujícího zpracování.

Přehled vašich výhod

- Klasické vrstvení s intuitivní manipulací
- Přesvědčivé materiálové vlastnosti - např. omezené smršťování, významná úspora času a trvalá barevná stabilita
- Vysoká hospodárnost a esteticky přesvědčivé výsledky

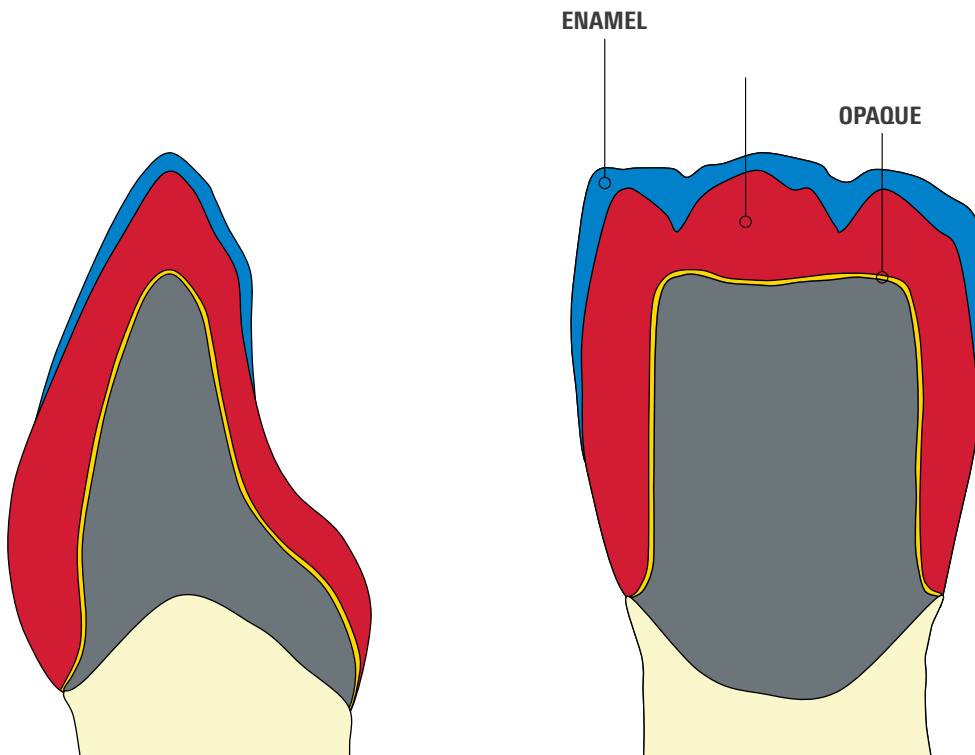

Klasické schéma vrstev

Přesný

Pro výhodu vlhkosti VITA MODELLING FLUID RS

" Pomocí této vláčné konzistence keramiky udržíte vždy dostatečné množství vlhkosti na objektu. To pomáhá vrstvení mokré do mokrého a nechává barvy během vrstvení vzájemně se prolínat. Tento způsob práce podporuje difuzní světelné efekty, které svoje plné působení ukážou teprve po konečné úpravě.

Přehled vašich výhod

- Excelentní pevnost
- Delší čas pro zpracování



Přesný

Pro výhodu bezpečnosti: VITA NP BOND

Skutečností je: VITA VMK Master Vám nabízí prakticky pro všechny slitiny bez obsahu drahých kovů nejvyšší toleranci zpracování a z tohoto dobrého důvodu se úspěšně používá po celém světě.

Pokud by ale kvůli kovům ve fázi ochlazování přesto docházelo k nerovnoměrnostem STR, poskytuje Vám pasta VITA NP BOND i zde potřebnou spolehlivost, kterou očekáváte.

Jako tlumič vyrovnává inovativní Bonder napětí související s STR a zajišťuje spolehlivé spojení mezi konstrukcí a keramikou - kdykoli. Skutečností je: VITA VMK Master je vhodný prakticky pro všechny slitiny bez obsahu drahých kovů.

Přehled vašich výhod

- Skoro neomezená spolehlivost - i u doby zpracování se specifickými slitinami
- Jednoduché zpracování, spolehlivá soudržnost a pasta k okamžitému použití
- Teplý zlatý odstín pro estetické výsledky


Otestovali jsem pro vás následující slitiny:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



Pasta VITA NP BOND pro okamžité použití



Teplý barevný odstín pro kovy

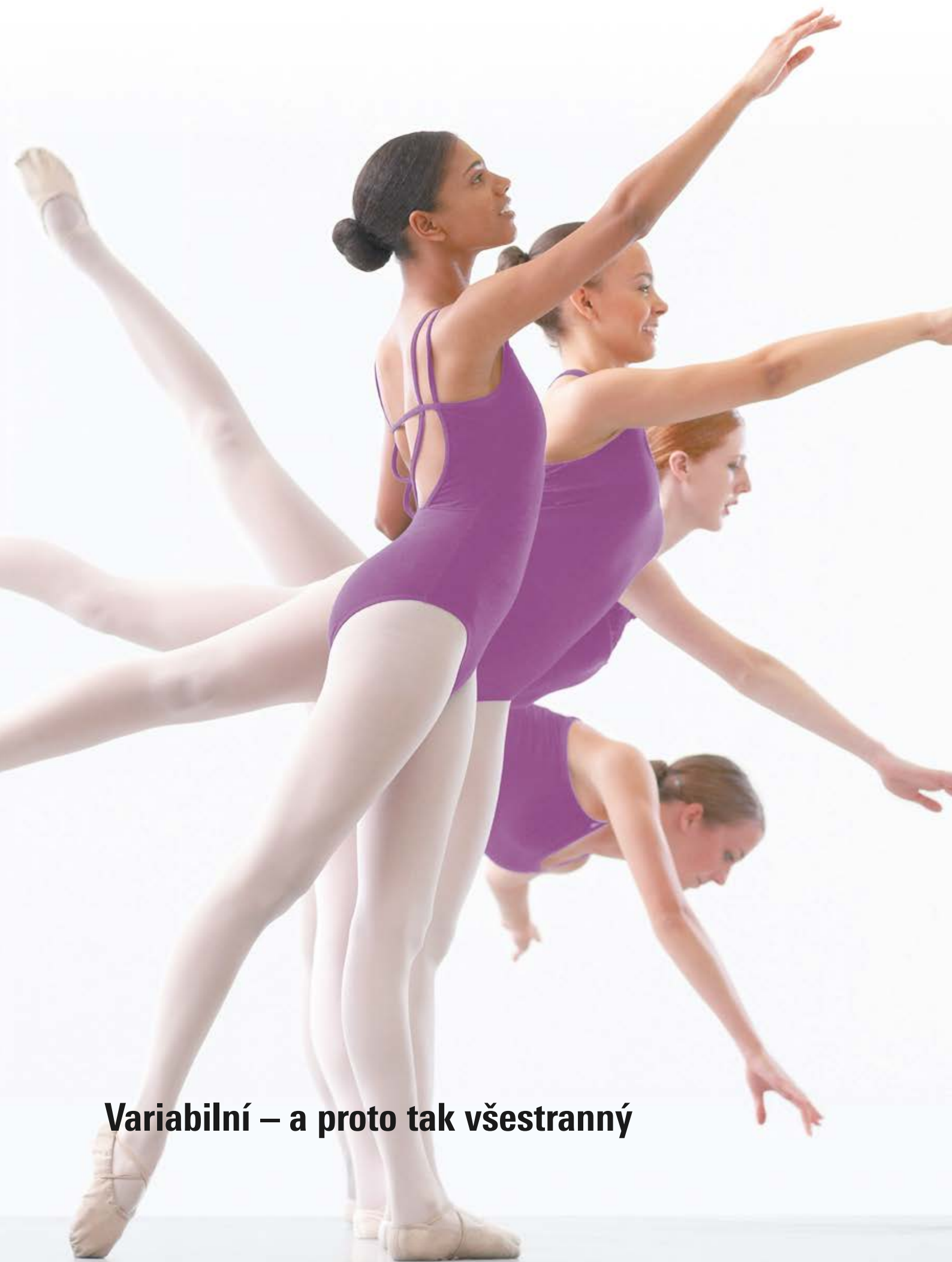


Variabilní – a proto tak všestranný

Variabilní

VITA VMK MASTER® nabídka sortimentu

VITA VMK nabízí různorodý sortiment, který poskytuje komplexní nabídku sortimentu prakticky pro každé řešení. Protože čím lepší systém, tím širší možnosti použití.

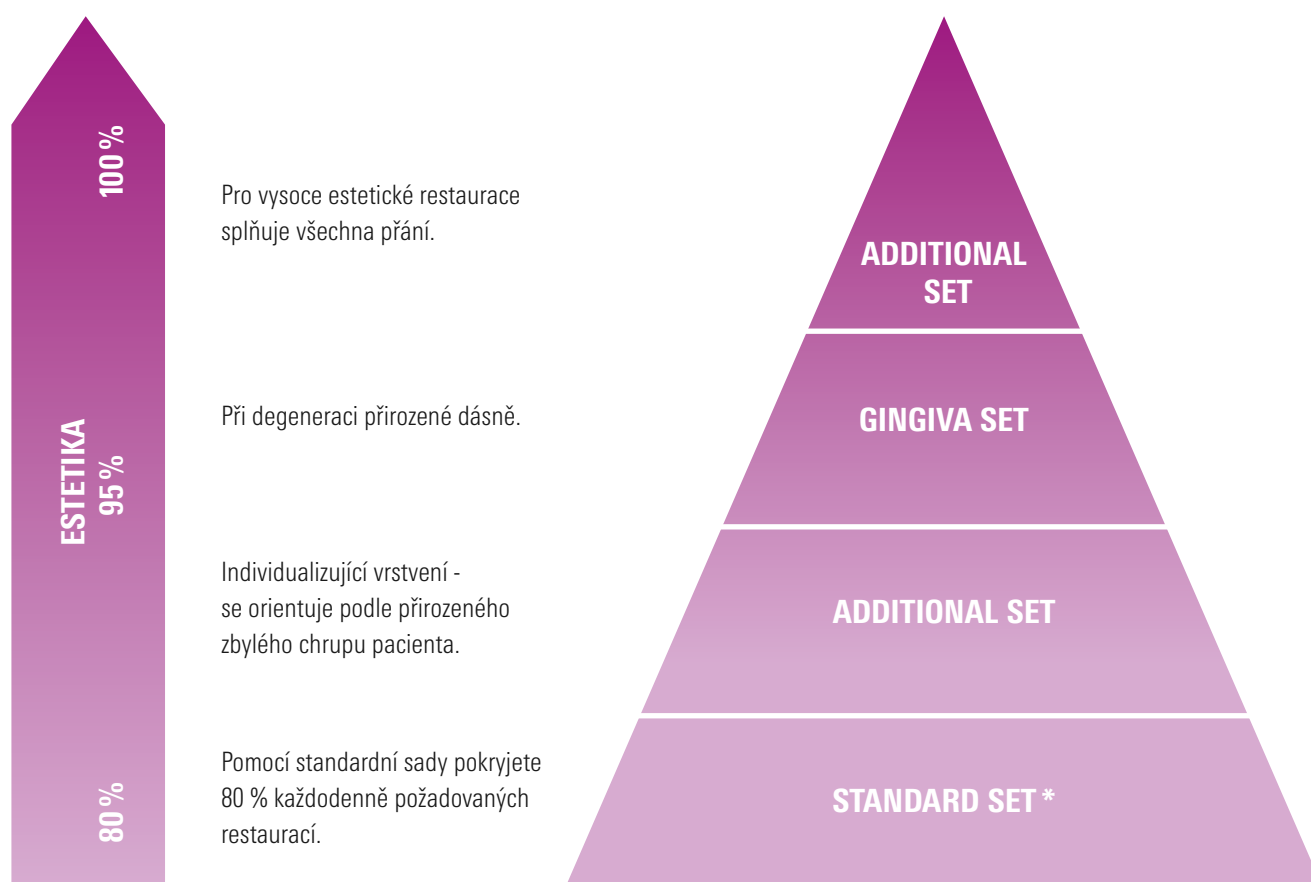

* STANDARD SET lze zakoupit v následujících provedeních:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
- VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA classical A1–D4®

Variabilní

VITA VMK Master® MARGIN



Díky patentovanému postupu při výrobě hmot VITA pro gingivální okraje korunky lze s fazetovacími keramikami pracovat tak, jak jsou zubní technici zvyklí při práci s umělými hmotami.



VITA VMK Master® LUMINARY



Silně fluoreskující hmoty, k nasměrování fluorescence z hloubky rekonstrukce.



VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Pro vnitřní zbarvení a hloubkové efekty



VITA VMK Master® CERVICAL



Pro zesílení hloubkového působení



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 průsvitných barevných nuancí pro reprodukci
nejrůznějších stupňů transparentnosti přirozené
zubní skloviny



VITA VMK Master®

Variabilní

VITA VMK Master® NECK




S hmotami NECK lze navíc lépe optimálně podpořit barvy v cervikální oblasti.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Perleťový lesk /
pro vytvoření opálového efektu u rekonstrukcí
mladistvých zubů a u velmi průsvitných zubů.

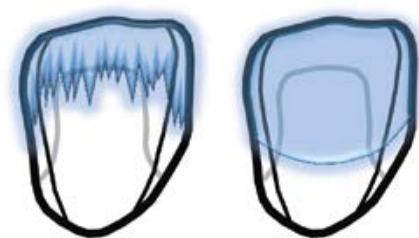

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



Pro barevně přesnou reprodukci ztráty měkké tkáně.



VITA VMK Master® WINDOW




Čirá hmota WINDOW



Fazetovací keramika VITA VMK je k dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A1–D4. Je zaručena barevná kompatibilita se všemi materiály VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITA classical A1–D4.

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

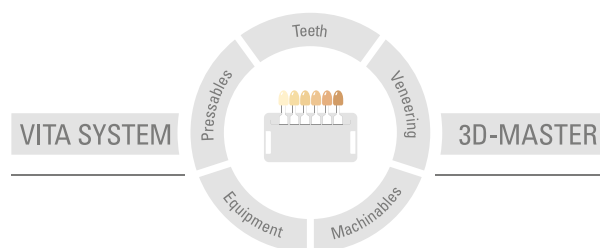


Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití. Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřipustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce a z toho vzniklé škody. VITA Modulbox není nutnou součástí výrobku. Datum vydání tohoto informačního materiálu: 2024-08

Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

Společnost VITA Zahnfabrik a následující produkty nesou značku

CE 0124

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus

 **MD** Rx Only

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik