

VITAVM[®]11

Informace o výrobcích



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

VITA – perfect match.

VITA

Keramika s jemnou strukturou pro individualizaci restaurací z
lithium silikátové sklokeramiky zesílené oxidem zirkoničitým (ZLS)
speciálně pro VITA SUPRINITY PC.



Obr 1: VITA VM 11 efektní hmoty

Keramika s jemnou strukturou pro individualizaci VITA SUPRINITY PC.

VITA VM 11 je nízkotavitelná živcová keramika s jemnou strukturou a byla vyvinuta pro individualizaci restaurací z lithium silikátové sklokeramiky zesílené oxidem zirkoničitým.*

Přes optimalizované hodnoty KTR konstrukce a fazetovacího materiálu zajišťují vynikající spojení a spolehlivé výsledky při tvarově stálém a beznapětovém fazetování.

Přednosti výrobku

Vysoce estetické restaurace:

Vysoká průsvitnost a teplé podání barev VITA VM 11 spolu s opaleskujícím účinkem VITA SUPRINITY PC zajišťují vysoce estetický výsledek s živou hrou barev.

Spolehlivé spojení:

Optimální sladění obou rozsahů STR zajišťuje beznapětové a tím spolehlivé spojení.



Obr. 2

Dobrá brousitelnost a leštitelnost:

Pomocí osvědčené jemné struktury VITA VM 11 se dosáhne hladkého těsně uzavřeného povrchu, který lze snadno brousit a rychle leštit.

Snadné opracování:

Velmi dobrá stabilita, minimální smršťování a vysoká odolnost hran charakterizují VITA VM 11. V kombinaci s VITA SUPRINITY PC lze, na základě velmi dobré povrchové smáčivosti nové sklokeramiky, přímo nanášet bez lineru nebo washbrandu.



Obr. 3

Přesvědčivá stabilita při vypalování:

VITA VM 11 má velmi dobré vypalovací vlastnosti a zůstává tvarově stálá i po několika vypáleních.



Obr. 4

Obrázky 2 - 4 byly vytvořeny s přátelskou podporou mistra zubní techniky Heike Assmann.

* Lze použít také pro CELTRA[®] Duo a CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA je registrovaná známka DeguDent GmbH.


Sortiment
VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Počet	Obsah	Materiál
6	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Návod k použití

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK


Počet	Obsah	Materiál
8	12 g	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Návod k použití

Jednotlivé hmoty
VITAVM®11

Barva	Materiál	Obsah	Č. výr.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRÁLNÍ	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Barva	Materiál	Obsah	Č. výr.
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC3	EFFECT CHROMA	12 g	B4912312
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312

Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

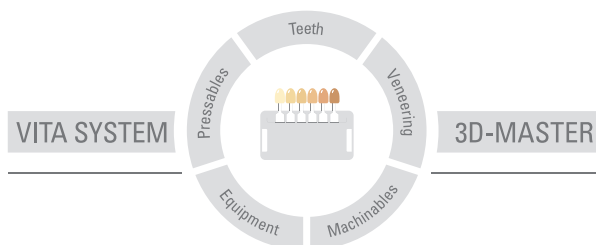

Mějte na paměti: naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití. Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřipustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce a kvůli tomu dojde k poškození. VITA Modulbox není nutnou součástí výrobku. Datum vydání tohoto informačního materiálu: 2025-11

Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

Společnost VITA Zahnfabrik je certifikována a následující produkty nesou značku

CE 0124

VITA VM®11 · VITA SUPRINITY® PC



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik