

VITAVM.11

Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

VITA – perfect match.

VITA

Ceramika drobnocząsteczkowa przeznaczona do indywidualizacji uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej na bazie krzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu, czyli specjalnie dla VITA SUPRINITY PC.



Zdj. 1: VITA VM 11 masy efektów

Ceramika drobnocząsteczkowa przeznaczona do indywidualizacji uzupełnień z materiału VITA SUPRINITY PC.

VITA VM 11 jest niskotopliwą i drobnocząsteczkową ceramiką skaleniową specjalnie stworzoną do indywidualizacji uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej na bazie krzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu.*

Precyzyjnie dobrane wartości WRC podbudowy i materiału licującego, gwarantują znakomite połączenie i pewne wyniki napalania wolne od zniekształceń i naprężeń.

Zalety produktu



Ilustracja 2:

Uzupełnienia o znakomitej estetyce:

Wysoki stopień przezierności i ciepłe kolory ceramiki VITA VM 11 oraz opalizujące oddziaływanie materiału VITA SUPRINITY PC, gwarantują bardzo estetyczne wyniki i żywą grę kolorów.

Pewne połączenie:

Optymalny dobór obu zakresów WRC zapewnia pewne spojenie połączenie od naprężeń.



Ilustracja 3:

Dobre możliwości szlifowania i polerowania:

Sprawdzona, delikatna struktura ceramiki VITA VM 11, zapewnia zwartą i gładką powierzchnię, którą można łatwo szlifować i szybko polerować.

Prosta obróbka

Bardzo dobra wytrzymałość, minimalny skurcz i wysoka stabilność brzegów uzupełnienia to cechy charakterystyczne materiału VITA VM 11. Dzięki znakomitemu usieciowaniu powierzchniowemu nowej ceramiki szklanej w kombinacji z VITA SUPRINITY PC, nakładamy warstwy z pominięciem napalania Linera i warstwy Wash.



Ilustracja 4:

Wysoka stabilność materiału po napalaniu

VITA VM 11 cechują bardzo dobre właściwości napalania, nawet po wielu cyklach napalania nałożony kształt jest bardzo stabilny.

Zdjęcia 2 - 4 zostały udostępnione i opublikowane za zgodą mtd Heike Assmann.

* możliwość zastosowania z materiałem CELTRA[®] Duo i CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA to opatentowana marka firmy DeguDent GmbH.



Asortyment

VITAVM[®]11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Ilość	Zawartość	Materiał
6	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Instrukcja obsługi urządzenia

VITAVM[®]11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Ilość	Zawartość	Materiał
8	12 g	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Instrukcja obsługi urządzenia


Masy pojedyncze

VITAVM[®]11

Kolor	Materiał	Zawartość	Nr. art.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRAL	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Kolor	Materiał	Zawartość	Nr. art.
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC3	EFFECT CHROMA	12 g	B4912312
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312

Za pomocą jedyne w swoim rodzaju kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i reprodukcować wszystkie naturalne kolory zębów..

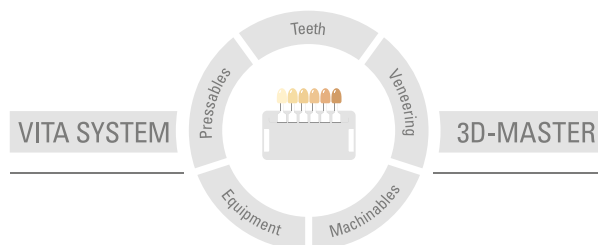

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia przed użyciem czy produkt jest właściwym do zastosowania w danym polu aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. Data wydania informacji: 2024-04

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikacje a następujące produkty noszą znak

CE0124

VITAVM®11 · VITA SUPRINITY® PC



VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik