

VITA

Pour une qualité  
et une efficacité  
optimales



## VITA VACUMAT® 6100 M

Le four entièrement automatique  
et commandé par microprocesseur  
pour une cuisson fiable de toutes  
les céramiques courantes.



En savoir plus !

Four de cuisson

# VITA VACUMAT® 6100 M

Cuisson fiable de toutes les céramiques courantes.

Le **VITA VACUMAT 6100 M** est votre partenaire pour les processus de cuisson entièrement automatique commandés par microprocesseur. Il offre une qualité de cuisson, une sécurité d'utilisation et un confort maximum pour toutes les céramiques dentaires. Il séduit par sa très grande qualité et son esthétique.

Avec une structure ergonomique optimisée, le four occupe un espace minimal d'encombrement malgré sa grande enceinte de combustion. La fonction de refroidissement linéaire assure plus de sécurité dans le processus de cuisson. La technique de cuisson innovante et les matériaux de haute technicité garantissent une répartition plus homogène de la chaleur. Un moufle de cuisson durable – made in Germany – et une électronique fiable garantissent de bons résultats de cuisson constants. Deux tablettes de refroidissement intégrées sécurisent enfin la dépose des pièces cuites.

Pour utiliser le four, vous avez besoin de l'unité de commande VITA vPad confort ou VITA vPad excellence.

## Domaines d'utilisation

Grâce à ses programmes de cuisson préprogrammés, le VITA VACUMAT 6100 M convient à des températures de cuisson jusqu'à 1 200 °C pour

- les cuissons de céramiques, des colorants et de correction
- les cuissons de glaçage
- les cuissons de cristallisation avec ou sans vide

## Les avantages.

### Technique moderne

Technique de cuisson innovante et composants de haute qualité pour une répartition homogène de la chaleur.


### Longévité

Moufle de cuisson durable – made in Germany – et électronique fiable pour de bons résultats de cuisson constants.

### Efficacité

Nombreux programmes de surveillance et utilitaires pour un confort de travail, une sécurité et un gain de temps maximum.

VITA Update Messenger  
Mise à jour du logiciel incluse en tant que service.  
S'abonner directement dès à présent !

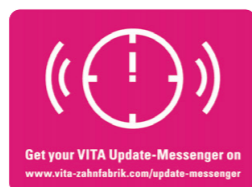



VITA

VACUMAT 6100 M

## VITA VACUMAT® 6100 M

### N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Publication de cette brochure produit : 2025/01 Cette nouvelle édition la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA VACUMAT® 6100 M porte le marquage CE conformément aux directives CE 2006/42/CE, 2014/30/CE et 2011/65/CE

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Follow us on  
Social Media!

