

Malé tahy štětcem.
Velký účinek.



VITA AKZENT® LC

Kompozitní barvy vytvrzované
světlem pro estetickou charakterizaci
dentálních rekonstrukcí.



Charakterizace

VITA AKZENT® LC

Světlem vytvrzovaný systém barev/glazur.



VITA AKZENT LC jsou kompozitní barvy vytvrzované světlem pro reprodukci individuálních barevných efektů a realizaci barevných korekcí. Barvy kromě své mnohostrannosti přesvědčují také účinnou, zcela přesnou aplikací a spolehlivou odolností barvy i lesku.

Barvy VITA AKZENT LC jsou univerzálně použitelné a ideálně vhodné pro extraorální charakterizaci zubní náhrady

- Hybridní keramika
- CAD/CAM kompozit
- Fazetovací kompozit
- Protetické báze
- Akrylové polymery pro 3D tisk
- Konfekční zuby

Kromě toho je lze optimálně využít k interní charakterizaci při fazetování umělou hmotou.

spolehlivé

Spolehlivá realistická rekonstrukce barevných faset přirozeného chrupu díky rozmanitým brilantním efektním barvám a intuitivnímu zpracování.

jednoduchá

Zcela snadná modifikace barev pouhým tahem štětce díky chromatickým barevným lazurám pro systematické řízení chromacity a optimální estetiky dásně.

efektivní

Efektivní zpracování díky zcela přesným barevným efektům nebo plošně nanášeným barvám s ideálně přizpůsobenou viskozitou.



Konfekční zuby



CAD/CAM kompozit



Hybridní keramika



Materiál pro 3D tisk



Protetická báze digitálně/analogově



Fazetovací kompozit

Efekty s realistickými detaily.

Přirozená červeno-bílá estetika

Pro barevnou individualizaci protetických bází lze použít VITA AKZENT LC EFFECT STAINS. EFFECT STAINS jsou ideálním prostředkem umožňujícím věrnou reprodukci dásně.


Hmoty jsou zvlášť tekuté, a díky tomu optimálně vhodné pro přesnou aplikaci. Aplikace je zcela snadná: podrobnosti najdete v návodu k použití, č. tisku 10748.



Mnohostranná individualizace

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS jsou všestranné barvy, které umožňují přirozenou, efektní reprodukci, například zbarvení

zubních krčků a fisur, průsvitných oblastí skloviny, kalcifikací a mnohem víc.

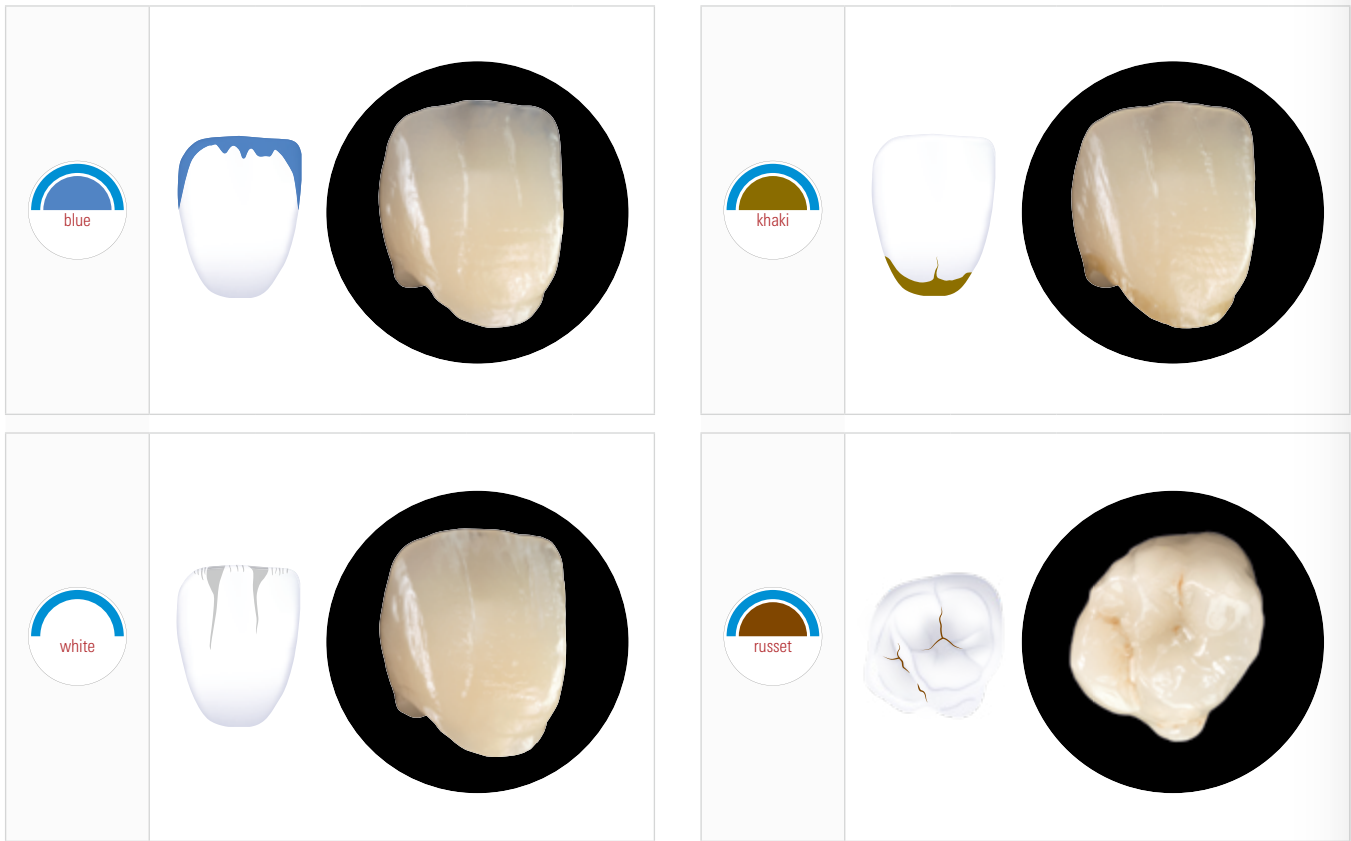

Spolehlivá korekce barev pro nejlepší barevnou shodu.

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

VITA AKZENT LC CHROMA STAINS slouží k systematickému zintenzivnění sytosti v rámci jedné skupiny barev.

VITA classical A1–D4

	Barvy
	    
	Barvy
	   
	Barvy
	   
	Barvy
	 

DOKONALÁ SHODA



Nedostatečná barevná shoda



Barevná korekce pomocí
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS



Dokonalá barevná shoda



Zjistěte více ve výukových videích:
[www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/
akzentlc/all/ifu/correctionc](http://www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc)

Fakta a důkazy.

Soudržnost



Soudržné


VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Prototyp:
Nabarvené zubní protézy VITAPAN před simulovaným stárnutím

**Simulované stárnutí
pomocí termocyklace
(5000 cyklů, 5 °C / 55 °C)**

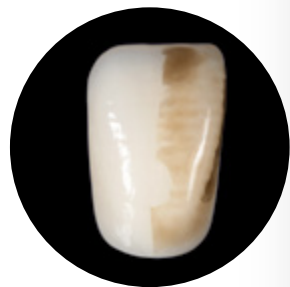

Výsledek:
Nabarvené zubní protézy VITAPAN po simulovaném stárnutí

Zdroj: interní průzkum, VITA F&E, zpráva 0628/19, 03/20, Dr. M. Gmehling ([1] viz zadní strana prospektu)

Přesná aplikace barev

VITA AKZENT LC nabízí stabilní efektní barvy s přesvědčivou viskozitou pro precizní, bodově přesné nanášení za účelem přirozené reprodukce jakékoliv individuální barevné charakteristiky s věrnými detaily.

Test stability

VITA AKZENT LC (white)




1. Aplikace barvy na skleněnou desku



2. Kontrola stability pomocí sklonu desky

Zdroj: interní průzkum, VITA PM, zpráva 0478/21, 10/21, H. Kimmich ([2] viz zadní strana prospektu)

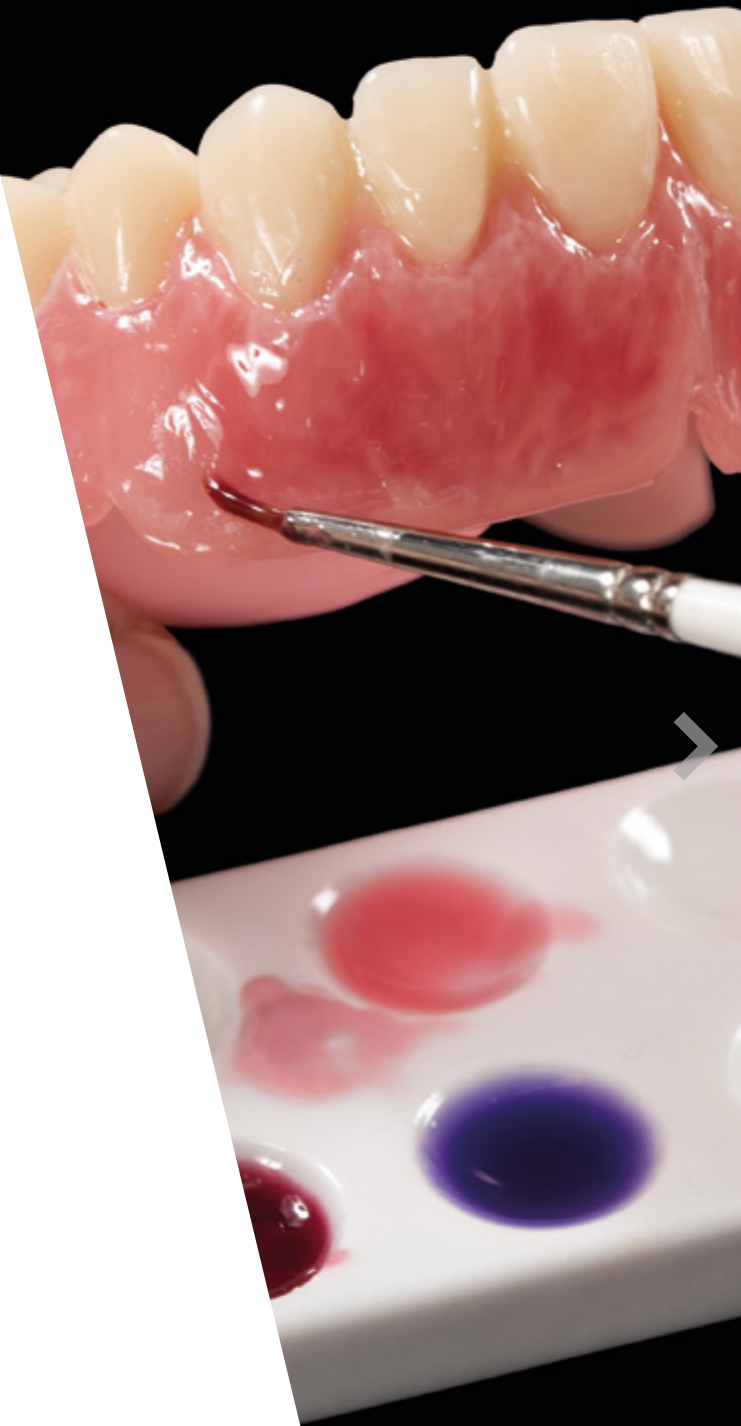


Vysoká odolnost.

Systém VITA AKZENT LC se vyznačuje homogenním povrchem, který poskytuje vynikající odolnost proti změnám barvy. Po 12týdenním testovacím uskladnění ve vodě, čaji a kávě prokázal materiál vynikající barevnou stabilitu. VITA AKZENT LC umožňuje nanejvýš brilantní reprodukci barev a vysokou odolnost lesku díky

polymerové matici zesílené plnivem z oxidu křemičitého. Excelentní stupeň lesku navíc prokázal i v testu oděru zubním kartáčkem po 20 hodinách simulovaného opotřebení (odpovídá 200 dnům čištění zubů 2x denně 3 minuty).

Vynikající odolnost proti zabarvení

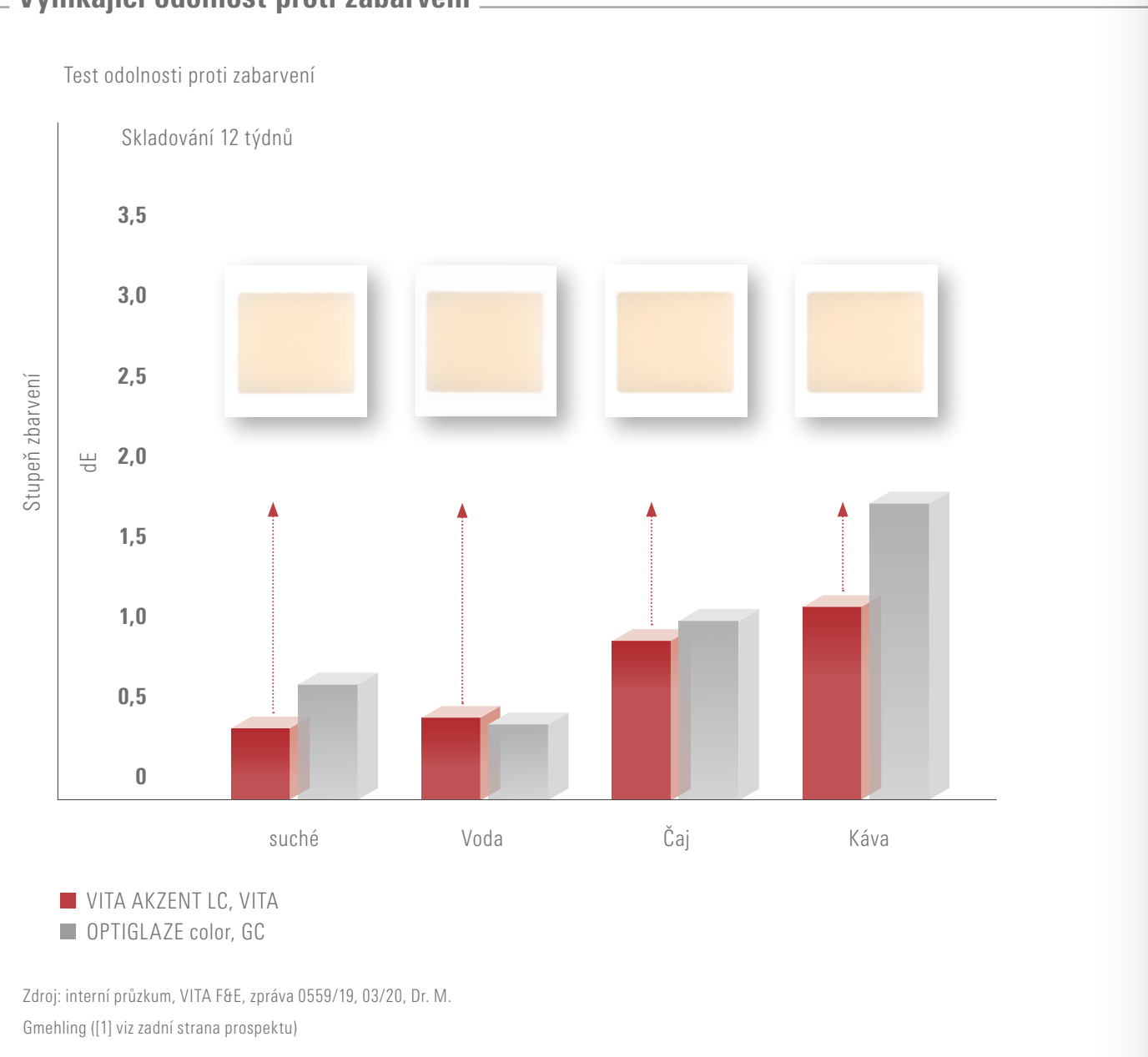

Vysoká odolnost proti opotřebení / odolnost lesku

Test odolnosti proti opotřebení



Namalová korunka před test opotřebení

Simulované opotřebení (20 hodin)




Namalová korunka po testu opotřebení

Interní průzkum, VITA F&E, zpráva 0083/21, 07/21,
Dr. S. Aechtner ([1] viz zadní strana prospektu)

Přehled barevné nabídky a variant.

VITA AKZENT® LC přehled porftfólia		
VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS		
	Pro reprodukci individuální charakteristiky a efektů s věrnými detaily	 white  cream  lemon  sun  orange  russet  khaki  pink  dark-red  purple  blue  grey-blue  grey  black
VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS		
	Pro systematické zvýšení chromacity	VITA Classical A1–D4  A red-brown  B red-sun  C grey-brown  D grey-red VITA SYSTEM 3D-MASTER  L corn-yellow  M2 red-yellow  M3 dark-yellow  R light-red
VITA AKZENT® LC GLAZE		
	Pro trvalé vynikající uzavření povrchu	 glaze
VITA AKZENT® LC COMPONENTS		
	Ideálně sladěné systémové komponenty pro procesně spolehlivé zpracování	- Cleaner - Štětce k nanášení, kartáčky Microbrush - Míchací destička

Přehled sortimentu VITA AKZENT® LC

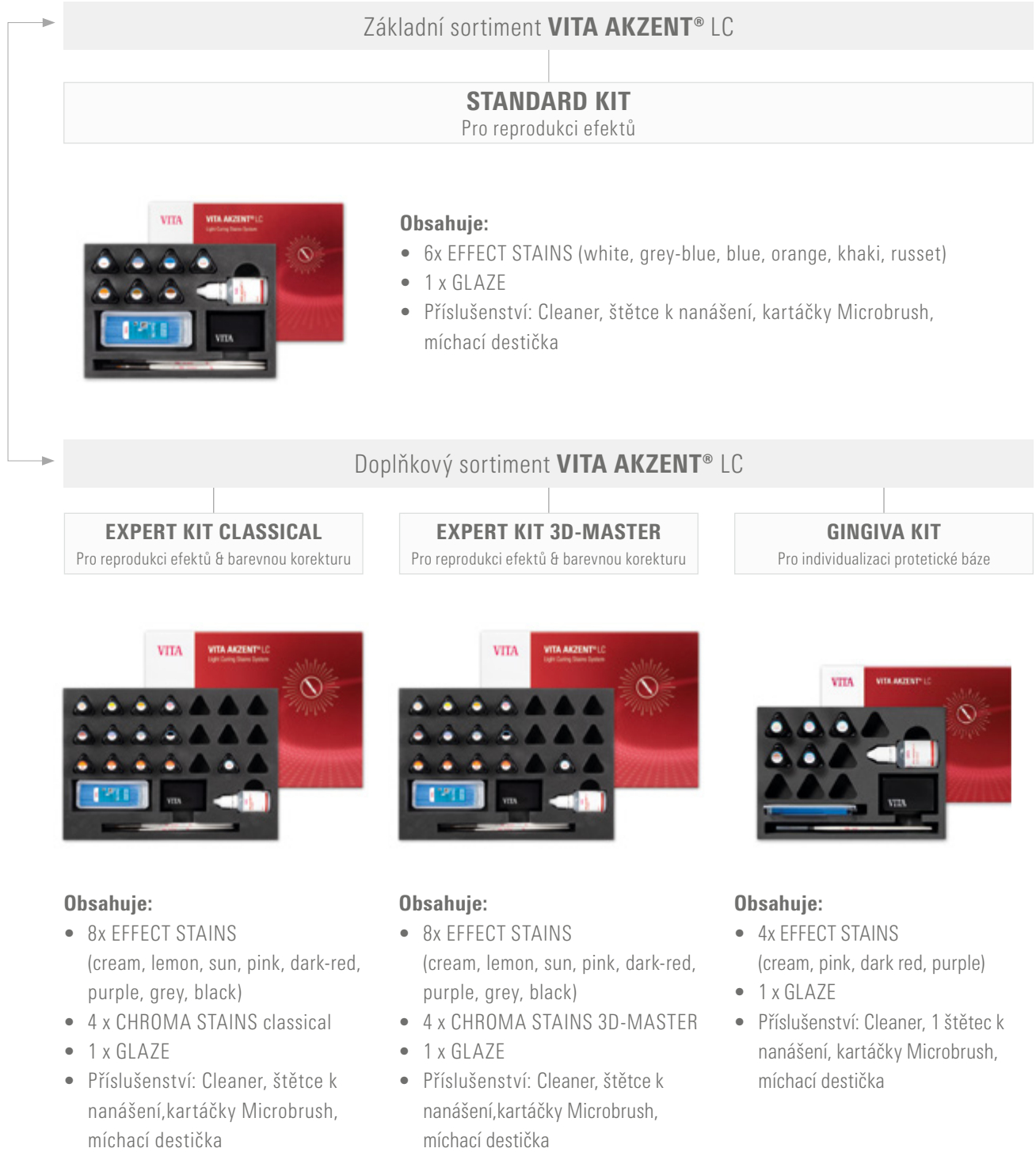

Vhodná řešení v procesu.



Určení barvy zubu

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1–D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide



Výroba zubní náhrady

VITA ENAMIC, CAD/CAM kompozit, fazetovací kompozit, protetické báze, VITA VIONIC SOLUTIONS, konfekční zuby VITA



Charakterizace glazury

VITA AKZENT LC



Leštění

VITA Polish Hybrid



Upevnění

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Rádi vám pomůžeme.

Horká linka prodeje a technické podpory

Telefon: +49 7761 562-890
Fax +49 7761 562-233
8-17 hod
info@vita-zahnfabrik.com

Technická horká linka

Telefon: +49 (0) 7761 562-222
Fax +49 (0) 7761 / 562-446
8-17 hod
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Mějte na paměti

Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Odpovědnost z naší strany je vyloučena, pokud se produkt použije v neslučitelné resp. nepřipustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce a kvůli tomu dojde k poškození. VITA Modulbox není nutnou součástí výrobku. Vydání této produktové brožury: 2025-11

Vydáním této produktové brožury pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik je certifikovanou společností a následující produkty nesou označení **CE 0124**.

VITA AKZENT® LC

Produkty/systémy ostatních výrobců uvedené v tomto dokumentu jsou registrovanými známkami příslušných výrobců.

Rx only MD

CH REP VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen (Germany). Pobočka Basel c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basel

Reference

Interní testování, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Oblast výzkumu a vývoje
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Německo
Dr. Berit Gödiker, vedoucí projektu VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Podrobná testovací data:

Viz odborná technická dokumentace
VITA AKZENT® LC
Ke stažení na www.vita-zahnfabrik.com



Pro bližší informace o VITA AKZENT LC
jednoduše naskenujte QR kód.
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

