

VITA

Kleine Pinselstriche.
Große Wirkung.



VITA AKZENT® LC

Lichthärtende Kompositmaldfarben
für die ästhetische Charakterisierung
dentaler Restaurationen.



Charakterisierung

VITA AKZENT® LC

Lichthärtendes Malfarben-/Glasurensystem.



VITA AKZENT LC sind lichthärtende Kompositmaldfarben zur Reproduktion individueller Farbeffekte sowie zur Umsetzung von Farbkorrekturen. Die Malfarben überzeugen neben ihrem Facettenreichtum durch effiziente, präzise Farbapplikation und zuverlässige Farb- bzw. Glanzbeständigkeit.

Die VITA AKZENT LC Malfarben sind universell einsetzbar und eignen sich ideal für die extraorale Charakterisierung von Zahnersatz aus

- Hybridkeramik
- CAD/CAM-Komposit
- Verblendkomposit
- Prothesenbasen
- 3D-Druck Acrylpolymeren
- Konfektionszähnen

Zudem sind sie optimal einsetzbar zur internen Charakterisierung bei der Kunststoffverblendtechnik.

Verlässlich

Verlässliche, naturgetreue Reproduktion farblicher Facetten der natürlichen Zahnbeziehung dank mannigfaltiger, brillanter Effektfarben und intuitiver Verarbeitung.

Einfach

Spielend einfache Farbmodifikation per Pinselstrich durch Chromafarben zur systematischen Steuerung der Chromazität und optimale Gingiva-Ästhetik.

Effizient

Effiziente Verarbeitung durch punktgenaue Farbeffekte oder flächig aufgetragene Farben mit ideal abgestimmten Viskositäten.




Detailgetreue Effekte.

Natürliche Rot-Weiß-Ästhetik

Zur farblichen Individualisierung von Prothesenbasen können die VITA AKZENT LC EFFECT STAINS verwendet werden. Die EFFECT STAINS sind ideal, um eine naturgetreue Reproduktion der Gingiva zu ermöglichen.


Die Massen sind besonders fließfähig und eignen sich daher hervorragend für die präzise Applikation. Die Anwendung ist ganz einfach: [Details sind in der Gebrauchsanweisung Druck-Nr. 10748.](#)

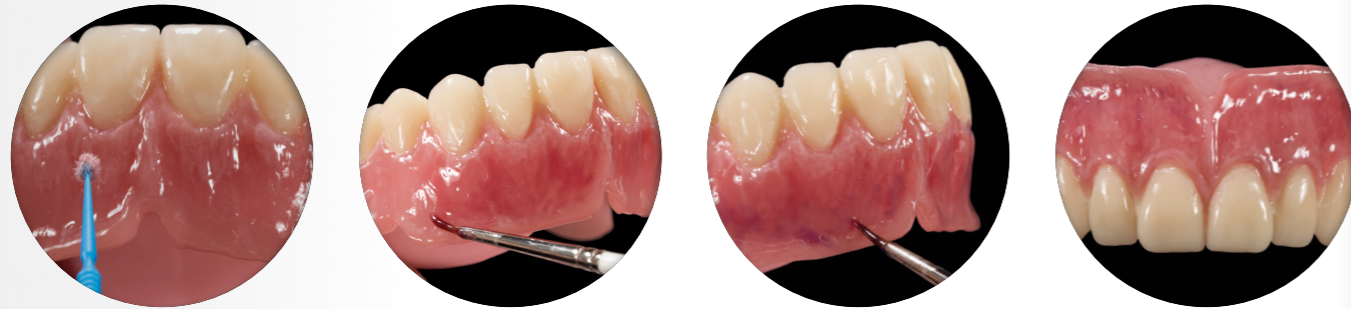

Facettenreiche Individualisierung

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS sind vielseitige Farben, die eine naturgetreue Effektreproduktion ermöglichen, wie z.B.

Zahn-/Fissurenverfärbungen, transluzente Schmelzareale, Kalzifikationen und vieles mehr.

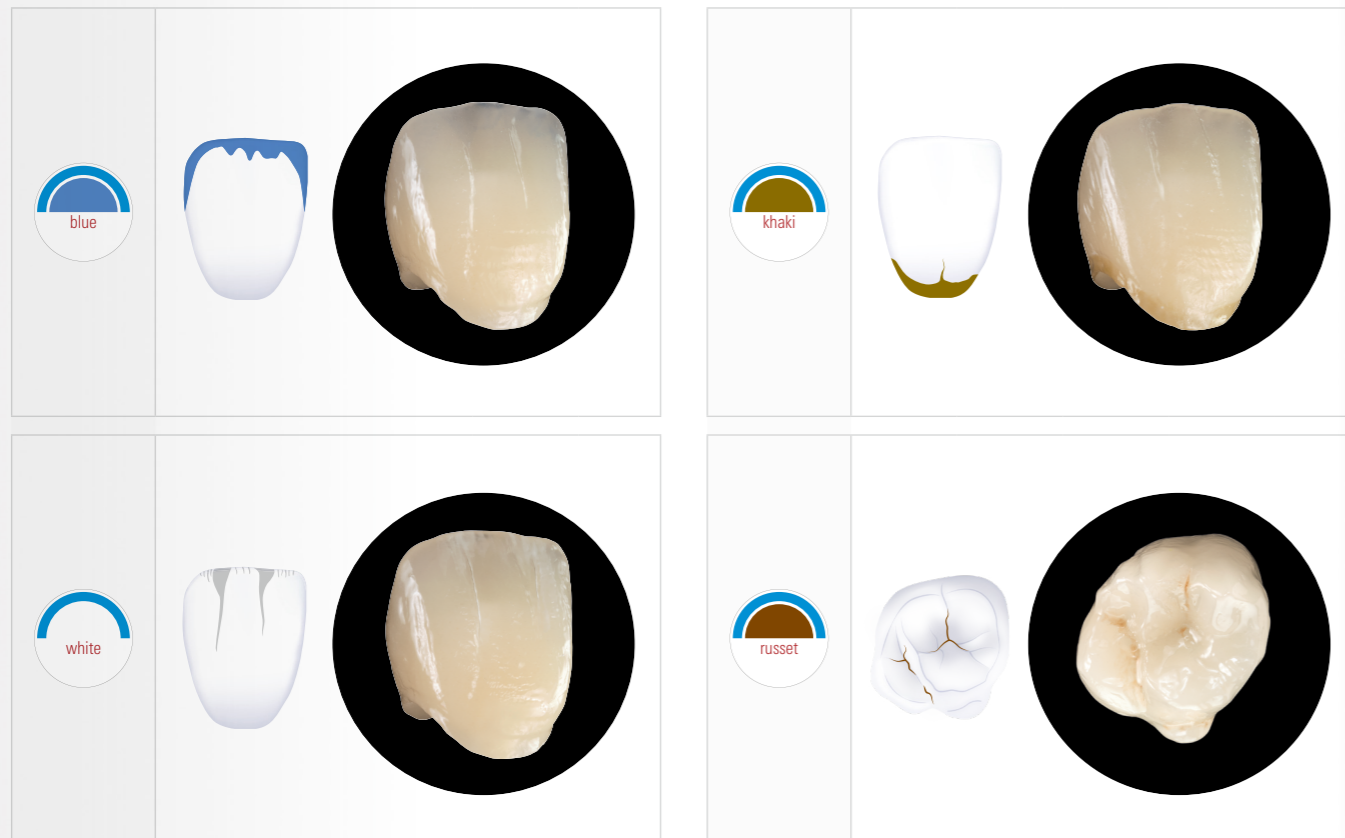


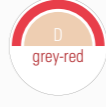


Verlässliche Farbkorrektur für den besten Farbmatch.

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

VITA AKZENT LC CHROMA STAINS dienen der systematischen Intensivierung des Chromas innerhalb einer Farbgruppe.

VITA classical A1–D4

Farben	Farben	Farben	Farben
 A red-brown	A1 A2 A3 A3.5 A4	 B red-sun	B1 B2 B3 B4
 C grey-brown	C1 C2 C3 C4	 D grey-red	D2 D3

PERFECT MATCH



Mangelhafte Farbübereinstimmung



Farbkorrektur mit
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS



Perfekter Farbmach



Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren:
www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc

Fakten und Belege.

Haftverbund

Haftverbundtest

VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Urmuster:
Bemalte VITAPAN Prothesenzähne vor simulierter Alterung

Simulierte Alterung
mittels Thermocycling
(5000 Zyklen, 5 °C / 55 °C)



Ergebnis:
Bemalte VITAPAN Prothesenzähne nach simulierter Alterung

Quelle: Interne Untersuchung, VITA F&E, Bericht 0628/19, 03/20,
Dr. M. Gmehling ([1] siehe Prospektrückseite)

Punktgenaue Farbapplikation

VITA AKZENT LC bietet standfeste Effektmal Farben mit überzeugender Viskosität für einen präzisen, punktgenauen Farbauftrag zur detailgetreuen Reproduktion aller individuellen farblichen Charakteristika.

Standfestigkeitstest

VITA AKZENT LC (white)




1. Applikation der Malfarbe auf Glasplatte



2. Prüfung der Standfestigkeit durch Neigung der Platte

Quelle: Interne Untersuchung, VITA PM, Bericht 0478/21, 10/21,
H. Kimmich ([2] siehe Prospektrückseite)

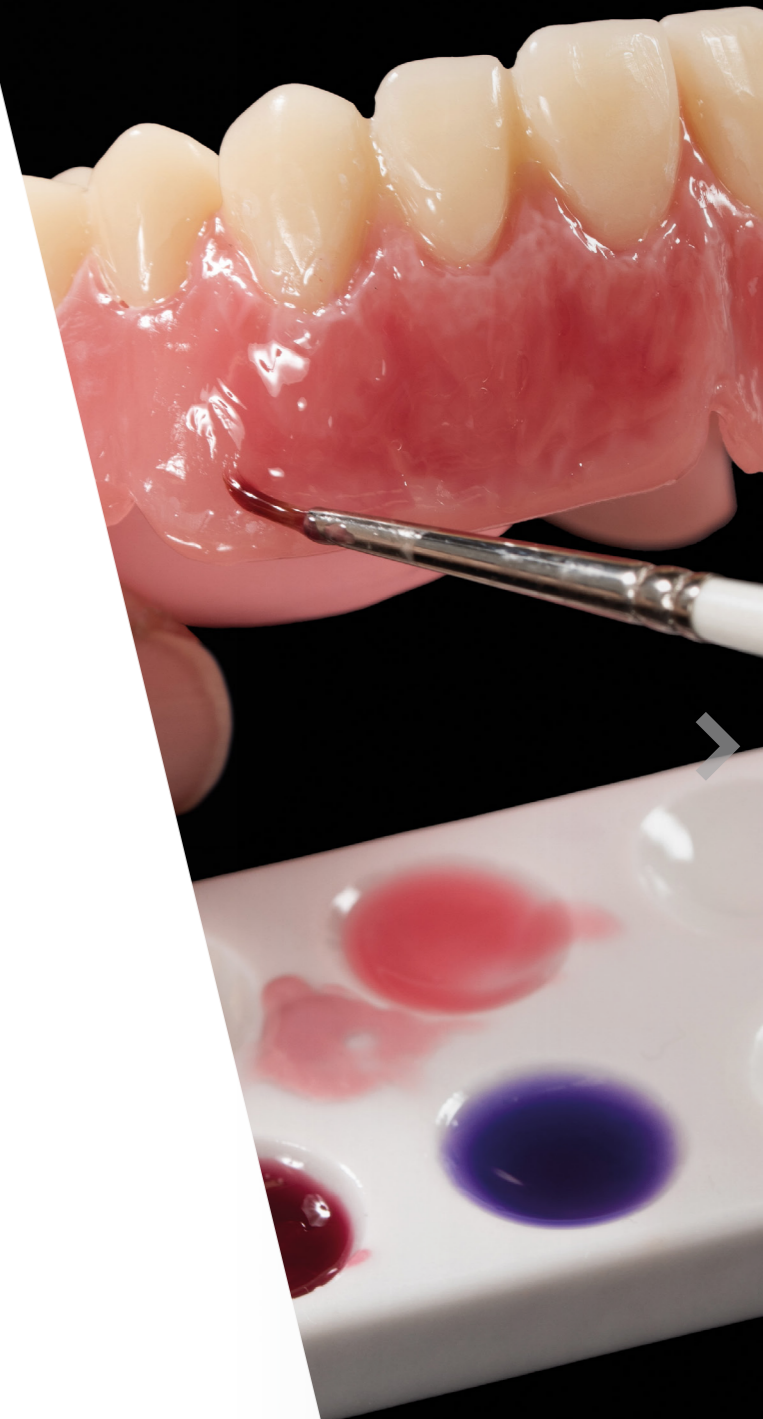


Hohe Beständigkeit.


VITA AKZENT LC zeichnet sich durch eine homogene Oberfläche aus, die eine hervorragende Verfärbungsbeständigkeit gewährleistet. In Tests zeigte das Material nach 12-wöchiger Einlagerung in Wasser, Tee und Kaffee eine exzellente Farbstabilität. VITA AKZENT LC ermöglicht eine äußerst brillante Farbwiedergabe und hohe Glanz-

beständigkeit dank einer mit Siliziumdioxidfüllern verstärkten Polymermatrix. Zudem zeigte es im Zahnbürstenabriebtest nach 20 Stunden simuliertem Verschleiß (entspricht 200 Tagen Zähneputzen bei täglich 2 x 3 Minuten) einen ausgezeichneten Glanzgrad.

Hervorragende Verfärbungsbeständigkeit

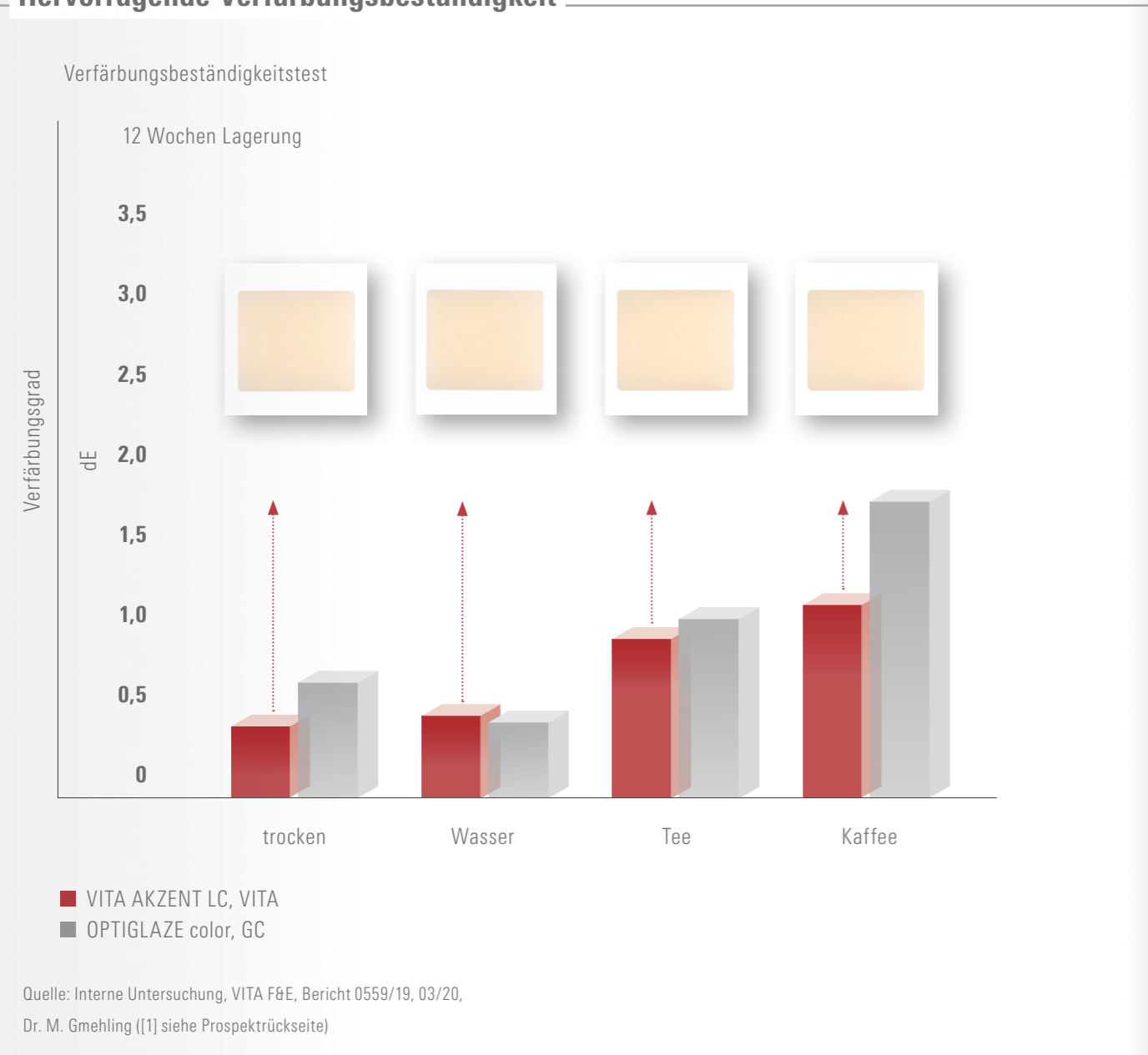

Hohe Verschleiß-/Glanzbeständigkeit

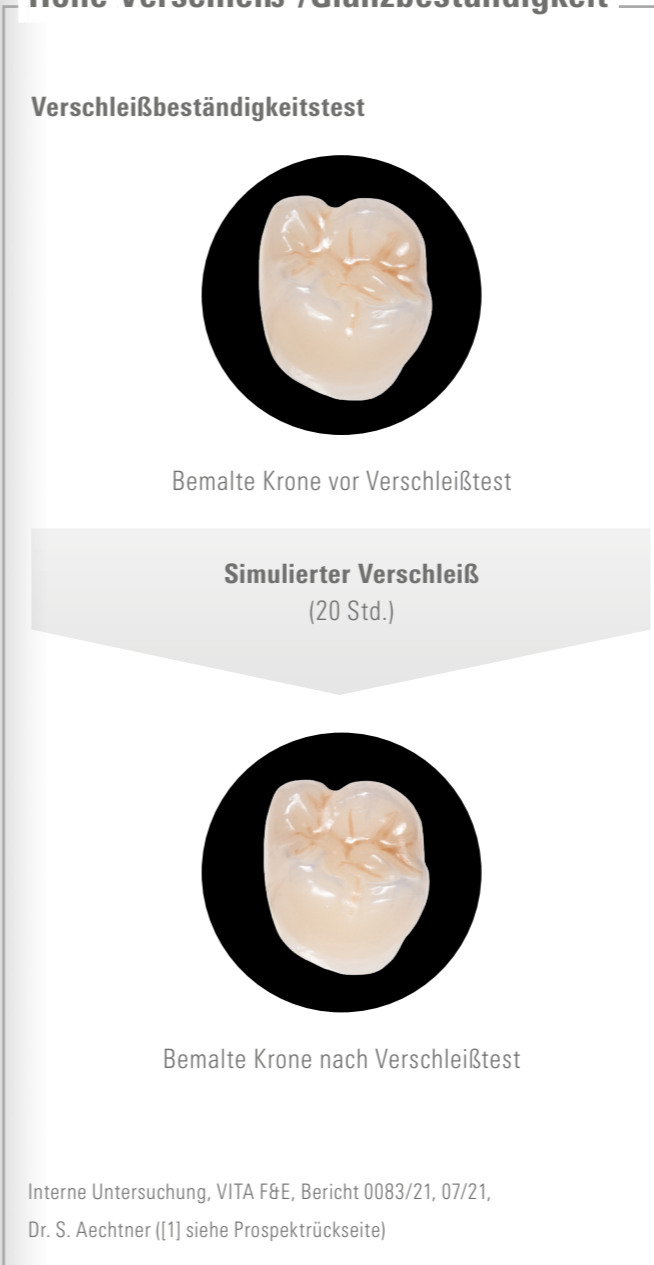

Übersicht Farbangebot und Varianten.

VITA AKZENT® LC Portfolioübersicht

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS



Für die detailgetreue Reproduktion individueller Charakteristika und Effekte



VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS



Für die systematische Erhöhung der Chromazität

VITA Classical A1–D4



VITA SYSTEM 3D-MASTER



VITA AKZENT® LC GLAZE



Für eine dauerhaft brillante Oberflächenversiegelung



VITA AKZENT® LC COMPONENTS

Ideal abgestimmte Systemkomponenten zur prozesssicheren Verarbeitung

- Cleaner
- Malpinsel, Microbrushes
- Anmischplatte

VITA AKZENT® LC Sortimentsübersicht

VITA AKZENT® LC Basissortiment

STANDARD KIT Für Effektreproduktion



Inhalt:

- 6 x EFFECT STAINS (white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
- 1 x GLAZE
- Zubehör: Cleaner, Malpinsel, Microbrushes, Anmischplatte

VITA AKZENT® LC Zusatzsortimente

EXPERT KIT CLASSICAL Für Effektreproduktion & Farbkorrektur



Inhalt:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS classical
- 1 x GLAZE
- Zubehör: Cleaner, Malpinsel, Microbrushes, Anmischplatte

EXPERT KIT 3D-MASTER Für Effektreproduktion & Farbkorrektur



Inhalt:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS 3D-MASTER
- 1 x GLAZE
- Zubehör: Cleaner, Malpinsel, Microbrushes, Anmischplatte

GINGIVA KIT Für die Individualisierung der Prothesenbasis



Inhalt:

- 4 x EFFECT STAINS (cream, pink, dark red, purple)
- 1 x GLAZE
- Zubehör: Cleaner, 1 Malpinsel, Microbrushes, Anmischpalette

Passende Lösungen im Prozess.



Zahnfarbbestimmung

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide



Herstellung Zahnersatz

VITA ENAMIC, CAD/CAM-Komposit, Verblendkomposit, Prothesenbasen, VITA VIONIC SOLUTIONS, VITA Konfektionszähne



Charakterisierung Glasur

VITA AKZENT LC



Politur

VITA Polish Hybrid



Befestigung

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Hotline Vertriebs-Support

Phone +49 7761 562-890
Fax +49 7761 562-233
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Technische Hotline

Phone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2025-03

Mit der Herausgabe dieser Produktbroschüre verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung **CE 0124**:

VITA AKZENT® LC

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

Rx only

Referenzen

Interne Untersuchungen, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung und Entwicklung
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Dr. Stefan Aechtner, Projektleiter VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Detaillierte Testdaten:

Siehe Technisch-Wissenschaftliche Dokumentation

VITA AKZENT® LC

Download via www.vita-zahnfabrik.com



Für weitere Informationen zu VITA AKZENT LC
einfach den QR-Code scannen.
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

