

VITA

Pinceladas pequeñas. Gran efecto.



VITA AKZENT® LC

Maquillajes para composite
fotopolimerizables para la
caracterización estética de
restauraciones dentales.



Caracterización

VITA AKZENT® LC

Sistema de maquillajes y glaseado fotopolimerizable.



VITA AKZENT LC son maquillajes para composite fotopolimerizables para la reproducción de efectos cromáticos personalizados y la realización de correcciones del color. Los maquillajes destacan no solo por su riqueza de matices, sino también por la aplicación eficiente y precisa del color y la fiable estabilidad cromática y de brillo.

Los maquillajes VITA AKZENT LC son de uso universal y resultan idóneos para la caracterización extraoral de restauraciones dentales de:

- Cerámica híbrida
- Composite CAD/CAM
- Composite de recubrimiento
- Bases de prótesis
- Polímeros acrílicos para impresión 3D
- Dientes preconfeccionados

Además, están perfectamente indicados para la caracterización interna en la técnica de recubrimiento con resina.

Fiable

Reproducción natural y fiable de los matices cromáticos de la dentadura natural gracias a los variados y brillantes colores de efectos y a la manipulación intuitiva.

Fácil

Modificación del color sumamente sencilla mediante pinceladas gracias a los colores de cromas, que permiten regular la cromaticidad de forma sistemática y lograr una estética gingival óptima.

Eficiente

Elaboración eficiente mediante efectos cromáticos muy precisos o maquillajes aplicados en superficies extensas, con viscosidades perfectamente armonizadas.



Dientes preconfeccionados

Composite CAD/CAM

Cerámica híbrida

Material de impresión 3D

Base de prótesis digital/analógica


Composite de recubrimiento

Efectos fieles al detalle.

Estética roja y blanca natural

Para la personalización cromática de bases de prótesis se pueden utilizar los VITA AKZENT LC EFFECT STAINS. Los EFFECT STAINS son ideales para conseguir una reproducción natural de la encía.


Los materiales son especialmente fluidos, de modo que posibilitan una aplicación precisa. [Su utilización es sumamente sencilla: consulte los detalles en las Instrucciones de uso \(documento n.º 10748\).](#)

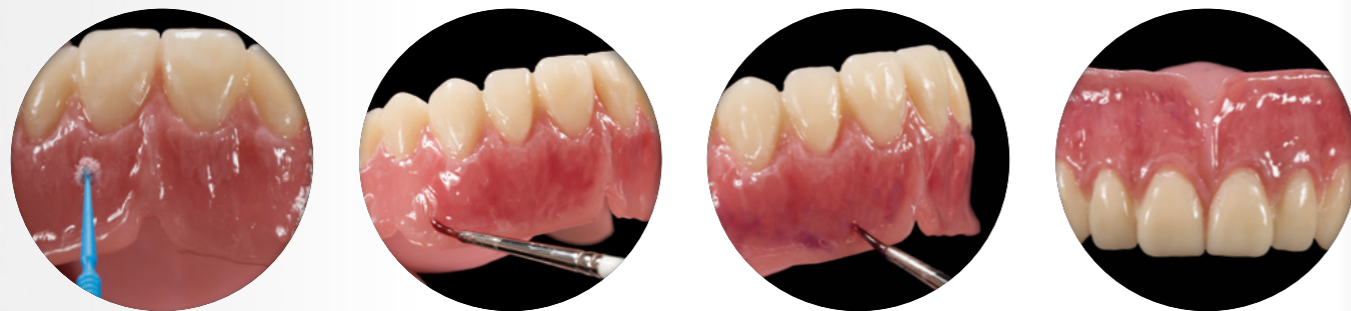

Personalización rica en matices

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS son maquillajes versátiles que posibilitan la reproducción natural de efectos, tales como

tinciones del cuello dental y de las fisuras, áreas del esmalte translúcidas o calcificaciones, entre muchos otros.

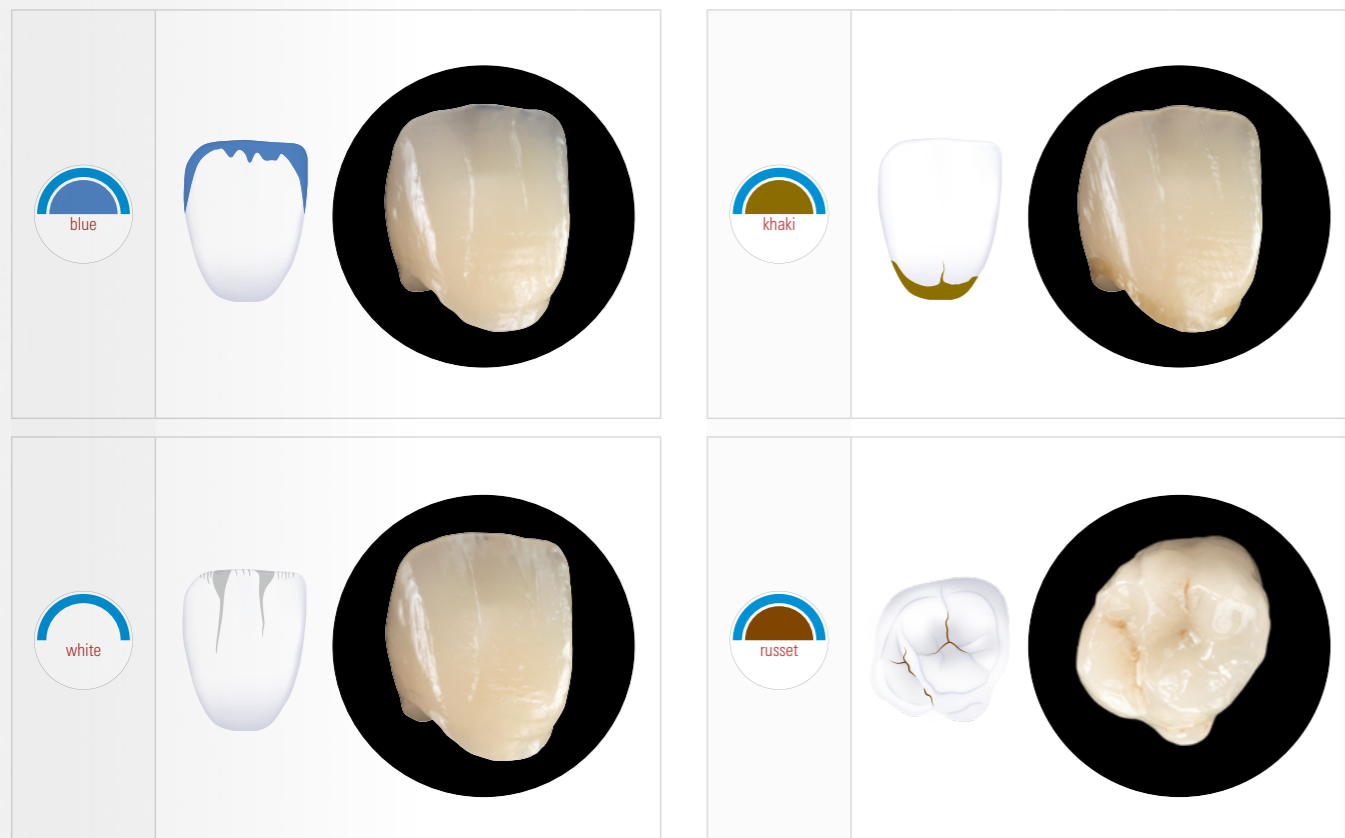


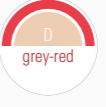


Corrección fiable del color para lograr una coincidencia cromática óptima.

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

VITA AKZENT LC CHROMA STAINS se utilizan para la intensificación sistemática del croma dentro de un grupo de colores.

VITA classical A1–D4

Colores	Colores
 A red-brown	A1 A2 A3 A3.5 A4
 B red-sun	B1 B2 B3 B4
 C grey-brown	C1 C2 C3 C4
 D grey-red	D2 D3


PERFECT MATCH



Coincidencia cromática deficiente



Corrección del color con
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS

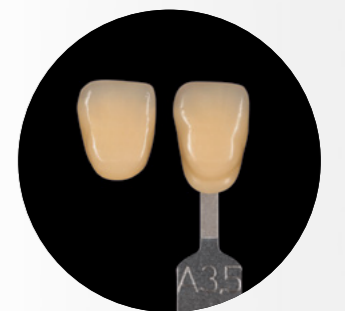


Coincidencia cromática perfecta



Más información en videotutoriales:
[www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/
akzentlc/all/ifu/correctionc](http://www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc)

Datos y pruebas.

Unión adhesiva

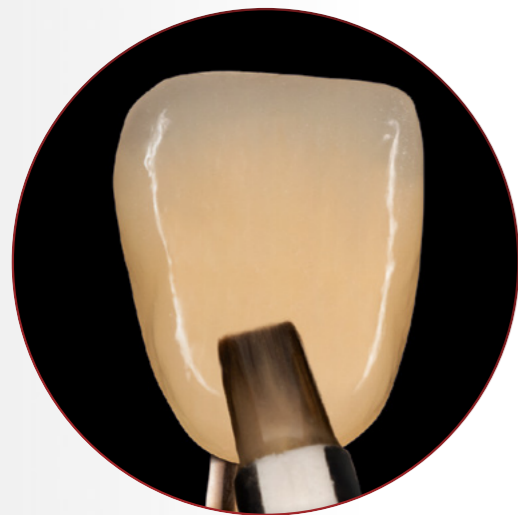

Ensayo de unión adhesiva

VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Muestra original: Dientes protésicos VITAPAN maquillados, antes del envejecimiento simulado

Envejecimiento simulado
mediante ciclado térmico
(5000 ciclos, 5 °C/55 °C)



Resultado:
Dientes protésicos VITAPAN maquillados, tras el envejecimiento simulado

Fuente: análisis interno, Dpto. de I+D de VITA, informe 0628/19, 03/20,
Dr. M. Gmehling ([1] véase el dorso del prospecto).

Aplicación del color altamente precisa

VITA AKZENT LC ofrece maquillajes de efectos estables con una viscosidad convincente, que posibilita la aplicación altamente precisa del color para la reproducción de todas las características cromáticas individuales con fidelidad al detalle.

Ensayo de estabilidad

VITA AKZENT LC (white)




1. Aplicación del maquillaje sobre la placa de vidrio



2. Comprobación de la estabilidad mediante la inclinación de la placa

Fuente: análisis interno, VITA PM, informe 0478/21, 10/21,
H. Kimmich ([2], véase el dorso del prospecto).

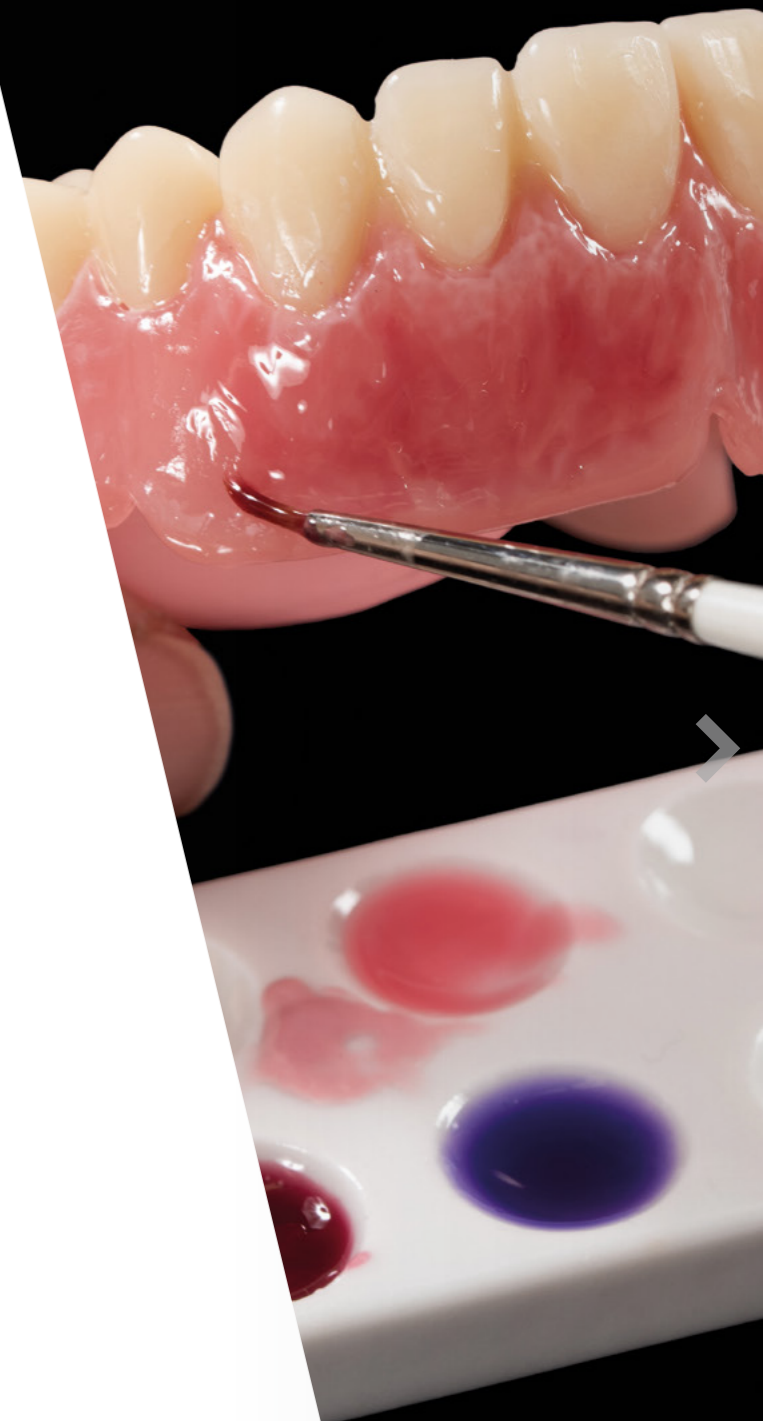


Gran estabilidad.

VITA AKZENT LC se caracteriza por su superficie homogénea, que garantiza una excepcional resistencia a la tinción. El material acredita una excelente estabilidad cromática tras el ensayo de inmersión en agua, té y café durante 12 semanas. VITA AKZENT LC posibilita una reproducción cromática sumamente

brillante, así como una gran estabilidad del brillo, gracias a su matriz polimérica reforzada con partículas de relleno de dióxido de silicio. Además, acreditó un grado de brillo sobresaliente tras 20 horas de desgaste simulado mediante ensayo de abrasión con cepillo dental (equivalente a 200 días de cepillado a razón de 2 x 3 min al día).

Excelente resistencia a la tinción

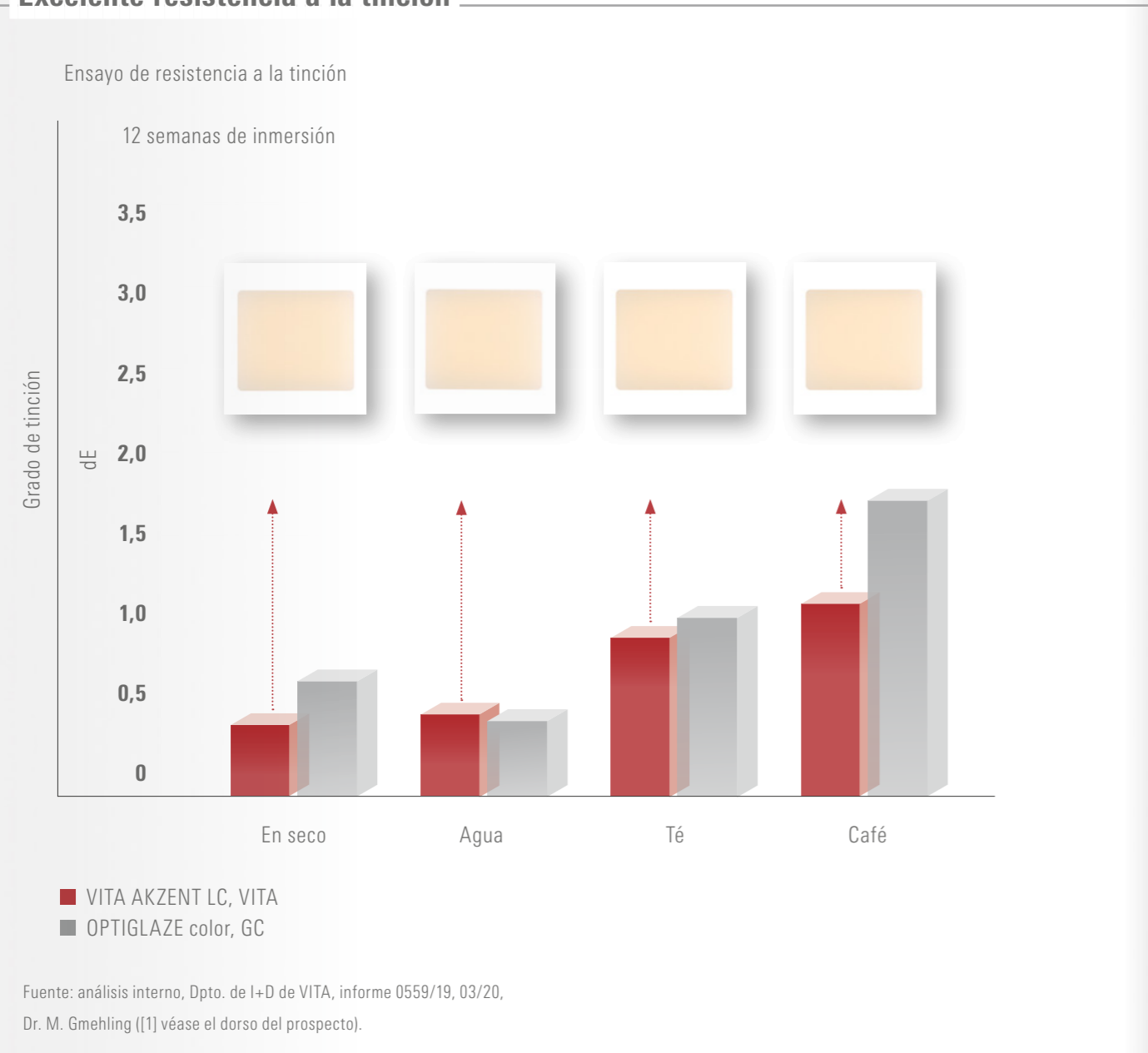

Gran resistencia al desgaste y estabilidad del brillo



Sinopsis de colores y variantes.

Sinopsis de la gama VITA AKZENT® LC

VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS



Para la reproducción fiel al detalle de características y efectos personalizados



VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS



Para el incremento sistemático de la cromaticidad

VITA Classical A1-D4



VITA SYSTEM 3D-MASTER



VITA AKZENT® LC GLAZE



Para un sellado de superficies excelente y duradero



VITA AKZENT® LC COMPONENTS

Componentes del sistema perfectamente coordinados entre sí para obtener un proceso de elaboración seguro

- Cleaner
- Pinceles de maquillaje, microbrushes
- Paleta de mezclado

Sinopsis de surtidos VITA AKZENT® LC

Surtido básico VITA AKZENT® LC

STANDARD KIT

Para la reproducción de efectos



Contenido:

- 6 x EFFECT STAINS (white, grey-blue, blue, orange, khaki, russet)
- 1 x GLAZE
- Accesorios: Cleaner, pinceles de maquillaje, microbrushes, paleta de mezclado

Surtidos complementarios VITA AKZENT® LC

EXPERT KIT CLASSICAL

Para la reproducción de efectos y la corrección del color



Contenido:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS classical
- 1 x GLAZE
- Accesorios: Cleaner, pinceles de maquillaje, microbrushes, paleta de mezclado

EXPERT KIT 3D-MASTER

Para la reproducción de efectos y la corrección del color



Contenido:

- 8 x EFFECT STAINS (cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black)
- 4 x CHROMA STAINS 3D-MASTER
- 1 x GLAZE
- Accesorios: Cleaner, pinceles de maquillaje, microbrushes, paleta de mezclado

GINGIVA KIT

Para la personalización de la base de la prótesis



Contenido:


- 4 x EFFECT STAINS (cream, pink, dark red, purple)
- 1 x GLAZE
- Accesorios: Cleaner, 1 pincel de maquillaje, microbrushes, paleta de mezclado

Soluciones óptimas en el proceso.



Determinación del color dental

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide

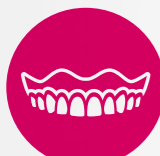

Confección de prótesis dentales

VITA ENAMIC, composite CAD/CAM, composite de recubrimiento, bases de prótesis, VITA VIONIC SOLUTIONS, dientes preconfeccionados VITA



Caracterización y glaseado

VITA AKZENT LC



Pulido

VITA Polish Hybrid



Fijación

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Estaremos encantados de ayudarle.

Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839
Asistencia técnica EE. UU.: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778
Asistencia técnica Canadá: +1 800-324-6224



Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 2025-3

Con la publicación de este folleto de producto pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos

llevan el marcado **CE 0124**: VITA AKZENT® LC

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Rx only

Referencias

Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Investigación y Desarrollo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)
Dr. Stefan Aechtner, director de proyectos de I+D de VITA,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen (Alemania)

Datos de ensayo detallados:

Véase la documentación científico-técnica de
VITA AKZENT® LC
Descarga desde www.vita-zahnfabrik.com



Para más información sobre VITA AKZENT LC,
simplemente escanee el código QR.
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

